

ALLUXTM

ご使用の手引き

義足装着者用

型式:NE-Z41, NE-Z41SH

説明書番号:81-SS00126 (Ver4)

発行日:2021年11月1日

義肢装具士取説:81-SS00125 (Ver4)



注意

■ご使用前に必ず、ご使用の手引きをよくお読みください。

■ご使用の手引きは必要なときにお読みいただけるよう大切に保管してください。

Nabtesco

ナブテスコ 株式会社

はじめに

このたびはナブテスコのALLUX™(アルクス)をお求めいただきありがとうございます。

ALLUX™は、油圧制御と電子制御の融合により、安心で快適な歩行を提供する四節リンクの電子制御義足膝継手です。

このご使用の手引き(以下、本書と称します)はナブテスコ株式会社のALLUX™を装着する方の、安全・快適なご使用のために編集したものです。本書は、保証書と一緒に保管してください。

本書には、脱着や歩行などの通常使用時や、保守時の取り扱い方、注意事項、およびトラブルシューティングについて記載しています。

重要なお知らせ

ALLUX™の使用目的

ALLUX™は大腿切断、膝離断、股離断など下肢を切断した方を対象に義足膝継手として使用するように、設計・製造されています。他の目的で、ALLUX™を使用しないでください。股義足の場合、ALLUX™に大きなねじり力がかかるないようにトーションアダプタを使用することをお勧めします。ALLUX™の仕様については、「2 仕様」を参照してください。



- ALLUX™の仕様範囲を逸脱した使用、および本体部品の改造はしないでください。
人身事故の発生やALLUX™の破損につながります。

ALLUX™を安全に取り扱うための注意事項

ナブテスコ株式会社（以下、当社と称します）は、ALLUX™に残存する潜在的な危険、ヒューマンエラーに起因する危険、および使用環境に起因する危険などを全て予見することはできません。

また、ALLUX™の取扱い（義足組立、調整、保守）にあたり、遵守事項や禁止事項が多数ありますが、これら全ての事項を本書やALLUX™本体に警告ラベルで伝えることはできません。

そのため、ALLUX™を取り扱う場合は、本書に記載されている注意事項だけでなく、義足膝継手に必要な安全対策を行いながらご使用ください。

ALLUX™の安全な取扱いについて、特に重要な事項を下記に説明しております。
ALLUX™に関して重大な出来事があった場合は、義肢装具士に報告してください。

本書を必ず読むこと

ALLUX™を取扱う前に、必ず本書をよく読み、内容を十分に理解してください。また、本書に記載の安全に関する注意事項は、必ず守ってください。

組立・調整作業者の条件について

安全のため組立・調整作業については、当社が主催するALLUX™ライセンスセミナーを受講し、認定を受けた方に限定しております。組立や調整が必要な場合には、担当する義肢装具士などのセミナー認定者に作業を依頼してください。

本書について

本ご使用の手引きの対象者

本書は、ALLUX™を使用される義足装着者を対象に作成しています。

版権について

本書は、当社が版権を有しています。本書を含む図面や技術文書などの図書は、いかなる箇所も当社の事前の同意書なしに、どのような方式(複写、電子媒体への記録など)であっても複写してはいけません。本書の引用、複写などで版権に関するご質問がある場合は、当社までお問い合わせください。

本書の紛失、または本書が破損した場合について

本書や関連図書を紛失したり、破れるなどして損傷した場合は、速やかにご担当の義肢装具士を通じて当社に再発行を依頼してください。本書や関連図書がない状態でALLUX™を取り扱うと、誤調整による事故発生の原因になります。

内容について

本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商標について

- Androidは、Google inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- IOSは、Ciscoの米国及びその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Bluetoothワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG,Incが所有する商標であり、ナブテスコ株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

章のタイトル	記載内容
はじめに	本書の概要、および本書の目的
重要なお知らせ	使用目的、ALLUX™を安全に取扱うための情報、および本書に関する注意
本書について	全般的な説明
本書の構成	本書に記載されている各章の内容
1. 安全	安全に関する注意
2. 仕様	ALLUX™の仕様
3. ご使用になる前に	ALLUX™および、アクセサリ部品の名称と型式
4. 安全姿勢	安全姿勢の取りかたの説明
5. リモコンアプリによるモード切替	リモコンアプリの導入方法 ALLUX™の各モード説明
6. ALLUX™ の状態	ALLUX™の各種状態の説明
7. 充電方法	ALLUX™ の充電方法と補助バッテリーの充電方法
8. 保守部品について	保守部品説明
9. トラブルシューティング	状況に対応する確認方法
10. 廃棄について	ALLUX™の廃棄方法の説明
11. 定期点検について	定期点検、保証期間の説明
12. 保証について	保証に関する説明
13. ラベル表示について	ラベルに使用しているマークの説明

目次

はじめに	i
重要なお知らせ	ii
本書について	iii
本書の構成	iv
目次	v
1 安全	
1.1 シンボルマークの定義	1
1.2 警告	1
1.3 注意	2
1.4 注記	2
2 仕様	
2.1 ALLUX™ の概要	3
2.2 基本構成	3
2.3 規格認証について	4
2.4 仕様	5
3 ご使用になる前に	
3.1 部品リスト	6
4 安全姿勢	
4.1 安全姿勢と通信可能な状態とは	7
5 リモコンアプリによるモード切替	
5.1 ALLUX™ のモードについて	8
5.2 リモコンアプリについて	8
5.3 リモコンアプリ操作について	9
5.4 ノーマルモードについて	10
5.4.1 概要	10
5.4.2 イールディング機能	10
5.4.3 歩行速度追従機能	10
5.4.4 着座時	10
5.4.5 セーフティロック	10
5.4.6 自転車	11
5.5 角度制限モードについて	11
5.6 選択角度制限モードについて	11
5.7 完全伸展ロックモードについて	11
5.8 フリースイングモードについて	11

目次

6 ALLUX™ の状態

6.1 ALLUX™ の状態について	12
6.2 通常使用状態について	13
6.2.1 充電器または電源OFFキヤップを抜いたとき	13
6.2.2 充電時、電源 OFF 時	13
6.2.3 補助バッテリーの使用	14
6.2.4 電池消耗状態（電池残量ゼロ時）	16
6.2.5 高温状態時	17
6.3 故障した場合	18
6.4 バイブレーション通知パターン早見表	19

7 充電方法

7.1 ALLUX™ の充電について	21
7.1.1 充電器と AC アダプタの仕様	21
7.1.2 充電方法	22
7.1.3 補助バッテリーの充電方法	23
7.1.4 充電器 LED 表示	24
7.1.5 延長ケーブルの使用について	24

8 保守部品について

8.1 保守部品リスト	25
-------------------	----

9 トラブルシューティング

9.1 トラブルシューティングリスト	26
--------------------------	----

10 廃棄について

28

11 定期点検について

11.1 定期点検	29
11.2 お手入れ方法	29

12 保証について

12.1 保証について	30
12.2 指定機器の保証期間	31
12.3 修理について	32

13 ラベル表示について

13.1 UDI ラベル（梱包箱）	33
13.2 銘板シール（膝継手本体 充電ポート部）	33
13.3 認証マークラベル（膝継手本体 充電ポート部）	33
13.4 充電器ラベル（充電器）	33
13.5 AC アダプタラベル（AC アダプタ）	34
13.6 補助バッテリーラベル（補助バッテリー）	35
13.7 補助バッテリーケースラベル（補助バッテリーケース）	35

1 安全

1.1 シンボルマークの定義

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記表示で区分し、説明しています。

	保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容
	保護方策を実施しなかった場合に、人が軽傷を負う可能性がある内容
	保護方策を実施しなかった場合に、物的損害のみが発生する可能性がある内容

上記の保護方策として、お守りいただく内容の種類を下記の記号で区分し、説明しています。

	製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する説明を示しています
	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為の内容を示しています

1.2 警告

安全に使用するため、必ず守ってください。



- 使用上の注意事項を必ず確認してください。
誤った使い方をすると、部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。
- 異音、ガタ、油圧抵抗の低下に気付いたときは使用を停止し、ご担当の義肢装具士までご連絡ください。
異常を感じたまま使用されると、部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。



- 装着者体重が125kgを超える場合には使用しない。
体重制限を超えた人の使用により、部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。
- 重いものを常時持ち運ばない。
- 重量物を持ってはげしい動作をしない。
- 装着者が義足膝継手を使用できる状態でないときは使用しない。
装着により、症状が悪化するおそれがあります。
- 競技用として使用しない。
- 義足膝継手以外の用途で使用しない。
部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。



- 義足膝継手を曲げるときに、後ろに手を入れない。
- 義足膝継手を伸ばすとき、膝に触れない。
膝関節に手を挟んで、ケガをするおそれがあります。
- 4節リンク部などにフォームカバーやストッキングが挟み込まれないようにする。
動作異常を起こすおそれがあります。

1 安全

1.3 注意

安全に使用するため、必ず守ってください。



注意



- ALLUX™の調整はALLUX™取扱認定者のもと実施すること。
誤った調整をされると、安全で快適な歩行ができなくなります。
- 使用する前にALLUX™本体の充電を行うこと。
使用中に電池がなくなると、通常の歩行ができなくなります。
- 長時間通信状態で調整した場合は充電を行うこと。
通信中は電力消費量が多く、通常より早く電池がになります。
- 調整時の温度環境は0~40°Cで行うこと(推奨:20°C)。
温度により、屈曲・伸展抵抗が変わることがあります。



- 分解、改造は絶対にしない。
部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。



- 磁石を近づけたり、MRI検査など磁場、電磁波の強い環境下で使用しない。
故障の原因となることがあります。
- 高い山など低気圧下で使用しない。
- 放射線が強い環境下で使用しない。
- 膝継手を高所から落下など、強い衝撃を与えない。
部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。
- -10°C以下、40°C以上の環境下で使用しない。
屈曲伸展抵抗が変化し、転倒するおそれがあります。
- 専用の充電器以外のもので充電しない。
異常な電圧がかかり、故障の原因となることがあります。



- 分解、短絡、加熱、火中への投入は、絶対にしない。
プラスチックなどの部品が変形し、故障の原因となることがあります。



- 粒子や異物が製品の中に入り込まないようにする。
製品の故障により予期せぬ誤動作を起こし、転倒するおそれがあります。
- 水など、液体に浸けたりしない。
ALLUX™には、激しい水流や蒸気、水没などに対する防水機能はありません。
- 水に濡れた場合は、糸くずでのない布で膝継手およびパーツを拭いて日の当たらないところでしっかりと自然乾燥させる。
- 塩水や塩素を含んだ水、石けん水やジェルソープ、体液や滲出液などの液体にふれさせない。
- 上記液体に触れた場合は、糸くずでのない布を真水で湿らせて拭く。
部品に錆び等が発生し、故障の原因となることがあります。
- 洗剤や溶剤(シンナー)などをつけて洗浄しない。
変色したり、グリスが枯渇して、異音の原因となることがあります。

1.4 注記

必ず守ってください。

注記



- -20°C以下、60°C以上の環境下で保管・放置しない。
- 屋外で充電しない。
- 長時間動かさずに放置しない。
完全放電状態によるバッテリの劣化やオイルの劣化、グリスの枯渇、可動部の固着などにより性能低下や故障の原因になることがあります。

2 仕様

2.1 ALLUX™の概要

ALLUX™は立脚・遊脚電子制御の四節リンク構造の膝継手です。歩く速度に合わせたスムースな歩行が可能です。坂道の下り、階段降りの動作で必要なイルディング歩行が可能です。膝屈曲を途中で停止させるセーフティロックという機能、不意なつま先の引っかかりでの膝折れを抑制するスタンブリングリカバリーという機能が使用できます。内部電源で義足側1日5000歩の歩行を4日間使用可能です(使用条件によって異なりますので、あくまでも目安です)。

2.2 基本構成

ALLUX™は上側がピラミッドかスクリューヘッドタイプを選択でき、下側がピラミッドアダプタ構造です。フレーム本体はカーボン製でリンク部材はアルミ合金です。
立脚・遊脚相制御はマイコン制御により油圧シリンダの油圧抵抗にて行っています。



2 仕様

2.3 規格認証について

●構造強度について

ALLUX™は体重125kgの装着者が3年分に相当する歩行サイクル300万回における強度を有しています。長期使用における経年劣化や破損については保証対象外となります。
※延長保証オプションの場合は、定期点検時に構造部品の無償交換にて保証します。

ISO10328-P6-125kg^{*)}



^{*)} 体重は制限値を超えないこと。

使用上の特定の条件や制限については取扱説明書を確認すること。

●Kレベル(MOB)について

K2レベル(MOB2)：屋内や家の周りにて、縁石や階段、不整地など簡単な環境障壁(バリア)への対応が可能。

K3レベル(MOB3)：大抵の環境障壁(バリア)への対応が可能。速度を変えて歩くことができ、単純な歩行のみならず、仕事や軽い運動が可能。

K4レベル(MOB4)：基礎的な歩行を上回る運動能力がある。子供やアスリートなど。

●EMCについて

ALLUX™はIEC/EN60601-1-2に準拠したGroup 1, Class A 機器に属します。

ALLUX™はEMC(電磁両立性)に関する注意が必要です。



- 製造者である当社が提供するもの以外のケーブルを使用しない。
- 当社によって販売される充電器、アクセサリ部品、周辺機器以外のものを使用しない。
電磁波の放射を増大させ、ALLUX™の電磁波耐性を低下させる可能性があります。
- 他の電子機器の近くでALLUX™を使用しない。
携帯電話やスマートフォンなどのモバイルRF通信機器はALLUX™に影響を与える可能性があります。どうしても近くで使用する必要がある場合、安全を確保できる姿勢で使用してください。
- 発火や電気ショックのリスクを下げるため、この取扱説明書をよく読んでください。

●適合宣言

本機器は欧州医療機器規則(REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC)に適合しています。

2 仕様

2.4 仕様

- 型式：NE-Z41（ピラミッド）
NE-Z41SH（スクリュー・ヘッド）
- 適用範囲と体重制限： $\sim K3$ (MOB3) : 125kg
 $K4$ (MOB4) : 100kg
- 重量：1510g (NE-Z41) / 1520g (NE-Z41SH)
- 最大屈曲角度：180°
- 耐水性：IP44
- 内部電源：リチウムイオン電池
- 通信距離：5m以内
- 使用環境温度：-10°C ~ 40°C



注意


■ 上記使用環境温度範囲内でも高温下では油圧抵抗が弱くなり、低温下では油圧抵抗が強くなることがあります。
通常の歩行ができなくなり、転倒するおそれがあります。

注記

- フロントカバーをぶつけるなど強い衝撃を与えないこと。
防水性が損なわれることがあります。
- 浸水させないこと。
- 高温洗浄または高圧洗浄しないこと。
水が中に入って、故障する可能性があります。
- 濡れた場合はふき取ること。
- 海水など塩水につけないこと。
- 水以外のものが付着した場合、洗剤を用いずに洗浄すること。
錆びたり腐食したりする可能性があります。
- 最大屈曲角は、ソケットの形状や樹脂ストッパーの有無により、180°より小さくなることがあります。

寸法：

	NE-Z41	NE-Z41SH
A	295mm	287mm
B	30mm	22mm
C	268mm	266mm
D	15mm	15mm
E	21mm	21mm
F	76mm	68mm
G	16.5mm	14mm

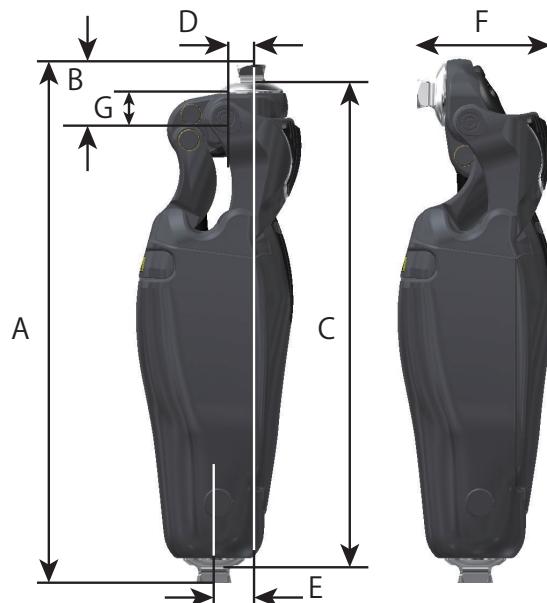

※上記の仕様は改良などにより予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

3 ご使用になる前に

3.1 部品リスト

ALLUX™梱包箱に、以下の部品が入っています。全て揃っているかご確認ください。

【本体機器と付属品】

ALLUX™ NE-Z41		補助バッテリーケース NE-SC01	
取扱説明書 81-SS00125		ご使用の手引き 81-SS00126	本書
保証書 81-SS00132		バイブレーション通知早見表 81-SS00131	
Bluetooth パスワードと号機番号 81-SS00133		装着記録 81-SS00129	

※スクリューヘッドの場合は、81-SS00062膝離断用アダプタ取扱説明書が追加されます。

【指定機器】

充電ポートキャップ NE-CC01		電源OFFキャップ NE-CC02	
補助バッテリー NE-SB01		延長ケーブル NE-CL02	
充電器 NE-BC01		ACアダプタ NE-AD01	
プラグアダプタ (UL) NE-PA01		補助バッテリー充電ケーブル NE-CL01	

注記


- 指定機器以外を使用しないこと。
ALLUX™が破損する可能性があります。

4 安全姿勢


4.1 安全姿勢と通信可能な状態とは

ALLUX™のモード変更でリモコンアプリを用いて操作をする場合、またはリモコンアプリで通信を行う際に必要となる姿勢を安全姿勢といいます。必ず安全姿勢について理解した上で使用してください。

【安全姿勢】

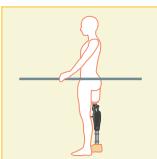

: ALLUX™を真っ直ぐ伸ばした直立姿勢で、体重負荷があってもよい状態

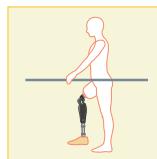

: ALLUX™に体重をかけていない状態で、膝の屈曲があってもよい状態





注意

■ ALLUX™に体重をかけないで安全姿勢をとる場合は手摺りにつかまるか着座するなど安定な状態にしてください。
バランスを崩して転倒するおそれがあります。

ALLUX™は消費電力低減のため、常に通信できる状態ではありません。

ALLUX™を軽度屈曲させてから伸展、またはALLUX™から体重をぬいた状態から体重をかけた後、またはALLUX™から充電器、または電源OFFキャップを抜いた後の120秒間が通信可能な状態となります。一度ALLUX™と接続すると、切断するまでは常に通信可能となります。

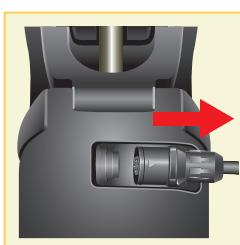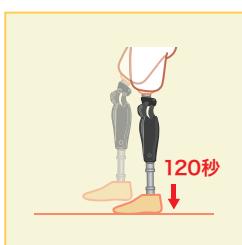

飛行機などに乗る際に、ALLUX™の無線機能をOFFにする必要のある場合には、リモコンアプリを用いて、無線を切ることができます。その状態から再度無線を起こすときは、以下の動作をする必要があります。


- ① ALLUX™から充電器、または電源OFFキャップを抜く。
- ② 爪先または踵に間欠的に4回負荷を加えた場合(スマートフォン上で切り替えられます。)
- ③ ②の動作を行うと無線復帰のバイブレーションになります。



2秒間

: 無線を復帰します

なお、このバイブレーションは無線がONのときでも②の動作をするとなります。

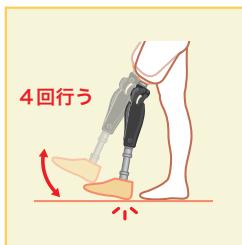

5 リモコンアプリによるモード切替

5.1 ALLUX™のモードについて

ALLUX™には、以下の5つのモードがあります。

- 1.ノーマルモード 2.角度制限モード 3.選択角度制限モード
- 4.完全伸展ロックモード 5.フリースイングモード

これらのモードはリモコンアプリを用いて切り替えることができます。リモコンアプリのどのボタンがどのモードに対応するかは、自由に変更できるようになっていますので、ご担当の義肢装具士にご確認ください。

5.2 リモコンアプリについて

スマートフォンにリモコンアプリをインストールします。

- 対応しているOSは以下になります。

Android: 7以降(全てのAndroid端末での動作を保証するものではありません。)

iOS : 13以降

- インストール方法および調整方法は、OSによって異なります。

以下のサイトからご使用のOSのマニュアルをダウンロードして、それに従って作業してください。

リモコンアプリマニュアル ダウンロードサイト

https://allux.info/ne-z41/manual_u.html



Bluetooth®

Bluetoothに関する注意事項

- Bluetooth機器が発生する電波は、電子機器などの動作に影響を与える可能性があります。事故を発生させる原因になるおそれがありますので、電車内の優先席付近、航空機内などの引火性ガスの発生する場所や自動ドアや火災報知器の近くではBluetoothの電源をお切りください。
- Bluetooth技術を使用することにより情報が漏洩しても、当社は一切の責任は負いません。
- 本製品は全てのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、最低限認証を取得している必要があります。また、接続する機器がBluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては接続できないことや表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- 本製品の無線機能は、技術基準適合証明を受けているため、分解や改造をしないでください。

5 リモコンアプリによるモード切替

5.3 リモコンアプリ操作について

スマートフォン等のリモコンアプリを使用することで、調整時に設定したモードに切り替えることができます。「膝の曲げ伸ばしをするか、体重を抜いてから体重をかけた後の120秒以内」で「安全姿勢」をとっているときにリモコンアプリのボタンをタップするとバイブレーションが鳴り、各設定条件のモードに移行します。ノーマルモードに戻したいときは、リモコンアプリの「1」のボタンを押します。



- スマートフォンはボタンなどを誤操作しないように身につけること。
意図しないときにモードが切り替わり転倒するおそれがあります。
- ※モード切替えと同時にバイブレーションでお知らせします。意図しないときにバイブレーションが鳴ったら必ずリモコンアプリの誤操作ではないか確認します。

注記

- 航空機などで電波を発する状態にあるものが使用禁止になっている時には、リモコンアプリを使用しないでください。
- 充電器や電源OFFキャップを接続して抜くことで、ALLUX™はリモコンアプリの「1」のボタンに設定してあるノーマルモードに戻ります。
充電の前後で状態が変わることがありますので、注意してください。

- 安全姿勢をとります。(4 安全姿勢を参照)
- リモコンアプリのボタン(1~5)をタップします。
- ポップアップがでますので、OKを選択します。

(2秒間振動します。

- 設定したモードに切り替わります。



リモコンアプリの設定モード説明

- ①ノーマルモード：通常の歩行…設定ボタン「1」、追加で「任意」でも可
- ②角度制限モード：指定した膝角度で膝がロック…設定ボタン「任意」
- ③選択角度制限モード：リモコンアプリ操作時の膝角度で膝がロック…設定ボタン「任意」
- ④完全伸展ロックモード：完全伸展した状態で膝がロック…設定ボタン「任意」
- ⑤フリースイングモード：常に屈曲伸展抵抗が最も軽い状態…設定ボタン「任意」



- モードを変更した後は、実際に膝を動かして挙動を確かめること。
誤ったボタン操作により思っているモードに変わっていなかった場合、転倒などのおそれがあります。

5 リモコンアプリによるモード切替


5.4 ノーマルモードについて

5.4.1 概要

通常の歩行に適したモードです。歩行の局面や日常動作をセンサにより判断し、ALLUX™が最適な状態になるように自動的に屈曲抵抗、伸展抵抗を変化させます。

5.4.2 イールディング機能

ALLUX™は以下のような状況ではイールディング状態となります。屈曲抵抗が大きくなり、膝がゆっくりと曲がる状態となります。

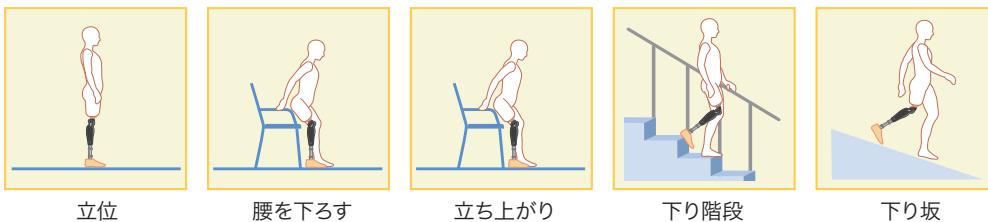


警告

- 階段を下りるときは手すりを持つこと。
意図しない動作をしたときに、転落するおそれがあります。

5.4.3 歩行速度追従機能

ALLUX™は歩行速度に応じて自動的にスイング時の屈曲抵抗と伸展抵抗を変化させます。

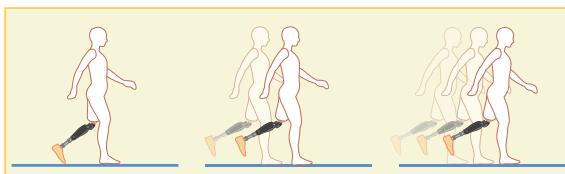

- 平行棒の中など安全な場所で確認すること。
調整が不十分だと、タイミングがあわないことがあります。

5.4.4 着座時


ALLUX™は着座時には屈曲抵抗、伸展抵抗とともにフリーの状態となります。



- 着座から立ち上がるときは、義足側に体重をかけること。
フリーの状態が継続し、膝折れすることがあります。

5.4.5 セーフティロック

ALLUX™は荷重をかけながら膝が曲がっている状態が数秒間続くと、任意の角度で屈曲抵抗をロッカさせます(この機能は調整により無効にしたり感度を調整したりすることができます)。

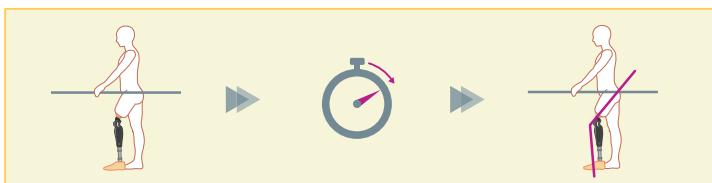

- セーフティロック中は、膝継手に体重をかけ続けること。
ロックが抜けて、膝折れすることがあります。

5 リモコンアプリによるモード切替

5.4.6 自転車

ALLUX™で自転車に乗る場合は、膝を曲げられる程度のイールディング抵抗の設定にしてください。




- 自転車に乗るときは、フリーモードを使用すると軽快に走行できます。ただし、イールディング抵抗がない状態なので、停止時は必ず健側の足で着地してください。

5.5 角度制限モードについて

予め設定した角度で膝の屈曲が制限されるようになります。設定した角度までは、屈曲抵抗、伸展抵抗とともにフリーの状態です。

0° ~
60°

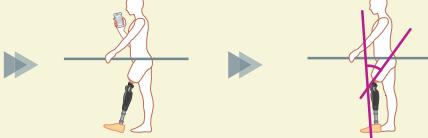

注記

- ロック角度まで勢いよく膝を曲げて止めないこと。
ALLUX™が故障するおそれがあります。

5.6 選択角度制限モードについて

ALLUX™はリモコンアプリでこのモードに入ったときの角度を記憶し、その角度で膝の屈曲が制限されるようになります。その角度までは屈曲抵抗、伸展抵抗とともにフリーの状態です。

0° ~
60°




注記

- ロック角度まで勢いよく膝を曲げて止めないこと。
ALLUX™が故障するおそれがあります。


5.7 完全伸展ロックモードについて

完全伸展の状態で膝がロックされます。ロック後、リモコンアプリでモード変更する場合、ALLUX™に体重をかけた後、体重を抜いてください。

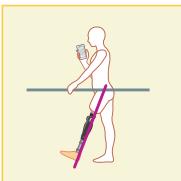

5.8 フリースイングモードについて

膝がフリーの状態になります。

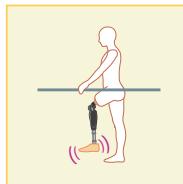

6 ALLUX™ の状態

6.1 ALLUX™ の状態について

ALLUX™には充電中や補助バッテリー接続状態、リモコンアプリによるモード変更、高温状態、電池切れ状態といった状態パターンがあります。それぞれの状態へ移行するときにバイブレーションで通知します。バイブレーションのパターンについては調整中に体験することができます。

ALLUX™は義足側1日5000歩の歩行において内部電源でおよそ4日間歩行できるように設計されています。また、電池残量が残り3時間未満であるときにバイブレーションにてお知らせがあります。このときに補助バッテリーを接続することで、約1日継続して使用することができます。補助バッテリーは内部電源を補うもので内部電源を充電するものではありません。

義足装着者の活動量にもよりますが、毎日充電することをお勧めします。(充電方法は7充電方法を参照) 内部電源は電池残量が3時間以上歩行できる通常の状態と、電池残量が残り3時間未満の場合、および充電しないと使用できない場合の3つの状態があります。充電しないと使用できない状態まで内部電源を消耗すると補助バッテリーを接続しても歩行することはできません。電池消耗時のモードは強いイールディングの屈曲抵抗または屈曲抵抗がフリーの状態になります。ご担当の義肢装具士にご確認ください。



- 通常使用時に安全姿勢要求のバイブレーションが鳴つたら必ず安全姿勢をとること。
急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。
- 充電器を外したときなどバイブレーションが鳴らないときは使用をやめて、ご担当の義肢装具士に連絡すること。
バイブレーション機能が故障している可能性があるので、注意や警告のお知らせができない状態です。急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。

- ALLUX™の使用状態にかかわらず、毎日充電すること。
歩行していくなくてもセンサは作動しておりますので、電池は減っていきます。
使用中に電池がなくなると、通常の歩行ができなくなります。
- 電池消耗状態で日常使用を続けないこと。
バイブレーション通知ができなくなり、急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。
- 高温状態になった場合、膝継手本体の金属部分を触らないこと。
火傷をするおそれがあります。
- 電池消耗警告のバイブレーション通知があった場合、使用を控えて必ず充電すること。
使用中に電池がなくなると、通常の歩行ができなくなります。
- 低温環境で使用する場合、屈曲・伸展抵抗が強くなる場合があるので確認してから使用すること。
通常の歩行ができなくなり、転倒するおそれがあります。
- ALLUX™が高温状態の時は屈曲・伸展抵抗が弱くなるため階段や坂道での歩行は注意ながら使用すること。

- 補助バッテリーは常用しないこと。
バッテリーの劣化が早くなります。
- ※補助バッテリー使用後は必ず本体充電と補助バッテリーを充電すること。
※歩行できる時間は、温度条件や劣化具合、歩行条件などにより短くなる可能性があります。

6 ALLUX™ の状態

6.2 通常使用状態について

6.2.1 充電器または電源OFFキャップを抜いたとき

充電器(NE-BC01)または、電源OFFキャップ(NE-CC02)を抜いたときに通常使用状態となります。このときALLUX™の内部電源の電池残量についてバイブレーションで通知されます。充電器と電源OFFコネクタを取り外した後は、充電ポートキャップ(NE-CC01)を接続します。

- 充電器または、電源OFFキャップを抜きます。以下のバイブレーションが鳴らない場合は再度充電器または電源OFFキャップを抜き差しします。



0.25秒間×8回

:電池残量が3時間以上



0.5秒間×8回

:電池残量が3時間未満



0.75秒間8回+4秒間

:歩行できない電池残量

- 充電ポートキャップを接続します。



- 使用時は必ず充電ポートキャップ(NE-CC01)を接続すること。

充電ポートキャップを使用せずにコネクタ端子部に水がかかった場合、誤動作で充電モードに移行すると歩行できない状態になり転倒のおそれがあります。

6.2.2 充電時、電源OFF時

充電器や電源OFFキャップを接続したときに電源OFFとなります。

- 充電器を接続します。



2秒間



- 電源OFFキャップ(NE-CC02)を接続したまま歩行しないこと。

歩行制御が停止しているため、接続したまま使用すると通常の歩行ができないので転倒するおそれがあります。

充電ポートキャップ NE-CC01	
電源 OFF キャップ NE-CC02	

6 ALLUX™ の状態

6.2.3 補助バッテリーの使用

電池残量がなくなると、ALLUX™の制御が停止します。内部電源が切れる前に、補助バッテリー(NE-SB01)を接続することで、ALLUX™を1日継続して使用することができます。

- 内部電源の容量があと3時間未満の歩行しかできない状態になると、バイブレーションで通知します。



0.5秒間×8回

- ALLUX™本体裏側にある充電ポートキャップを取り外します。
- 補助バッテリーが入った補助バッテリーケース(NE-SC01)をALLUX™本体、またはフォームカバーなどの外装の下腿側に巻きつけてマジックテープで固定します。
- 補助バッテリーをALLUX™にコネクタ接続します。

※6.2.1の通常モード移行時となり、補助バッテリー容量の確認のバイブレーションが鳴ります。



0.25秒間×8回

:電池残量が3時間以上



0.5秒間×8回

:電池残量が3時間未満




0.75秒間8回+4秒間 :歩行できない電池残量



※補助バッテリーの充電が必要です。

- 補助バッテリーを接続するときは、安全な姿勢が確保できる状態でおこなうこと。
急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。
- 補助バッテリーケースの固定は大腿側(膝関節より上)ではしないこと。
屈曲動作中にケーブルが膝関節部品に挟まったり、ケーブルが引っ張られてコネクタに過度な負担がかかり断線する可能性があります。
- 補助バッテリーケースの固定位置はALLUX™の側面側にすること。
最大屈曲時にソケットと補助バッテリーが接触して補助バッテリーが破損する場合があります。
- 歩行中など不安定な状態で補助バッテリーを抜き差ししない。
膝折れなどで転倒する危険があります。

※歩行中に断線、破損が起きると正常な歩行ができなくなり転倒するおそれがあります。

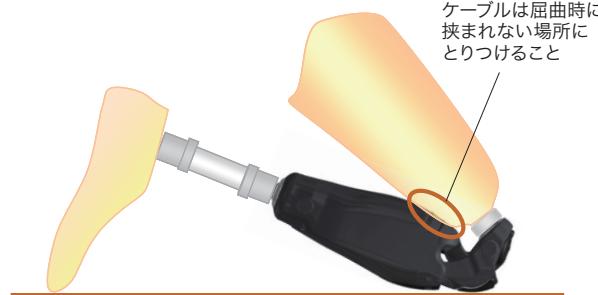

6 ALLUX™ の状態



- ALLUX™以外の用途で使用しない。
他の電子機器に使用すると補助バッテリー又は、電子機器が破損する場合があります。
- 通常使用で常用しない。
補助バッテリーを使用しても、ALLUX™の内部電源の電池が充電されることはありません。
ALLUX™の内部電源の電池容量が一定量を下回ると補助バッテリーの電池容量が残っていても歩行できなくなります。
- 専用の充電器以外で充電しない。
破裂・発火のおそれがあります。
- 水中・火中にいれない。
錆や変形により、補助バッテリーが使えなくなることがあります。
- 炎天下や火気の近くなど40°Cを越える環境下で使用しない。
- -20°C以下、60°C以上の温度で保管・放置しない。
バッテリーの劣化が早くなります。
- 外傷・形状変化が著しい場合は使用しない。
接触不良などにより電力供給が途絶えて、部品が破損や損傷し、転倒するおそれがあります。
- 高所からの落下、強い衝撃を与えない。
故障の原因となることがあります。
- 漏液したり異臭がするときは使用しない。
ALLUX™本体の故障につながることがあります。
- 乳幼児や動物・ペットが触らない、舐めない、口に入れない。
補助バッテリーが発火・爆発する場合があります。



- 分解・改造をしない。
- 銳利なもので突き刺したり、踏みつけたり故意に破壊しない。
破裂・発火のおそれがあります。



- 補助バッテリーの端子がむき出しになった状態で水などの液体をかけない。
- 濡れた手で触らない。
バッテリーがショートし、感電するおそれがあります。

注記

- 補助バッテリー(NE-SB01)は常用しないこと。
- 補助バッテリー使用後は必ず本体充電と補助バッテリーを充電すること。
バッテリーの劣化が早くなります。

6 ALLUX™ の状態

【補助バッテリーの仕様】

- 使用温度: 0°C ~ 40°C
- 耐環境温度: -20°C ~ 60°C
- 耐環境湿度: 10 ~ 90% RH
- 充電器: NE-BC01
- 使用機器: ALLUX™(NE-Z41, NE-Z41SH)
- 耐用年数: 1年




6.2.4 電池消耗状態(電池残量ゼロ時)

内部電源が消耗して使用できない状態となった場合に電池消耗警告がバイブレーションで通知されます。次に安全姿勢を要求するお知らせがバイブレーションでされます。このとき、安全姿勢をとりまくと歩行制御停止の状態となりロック(屈曲抵抗が強いイルディング抵抗)またはフリーになります。このとき、補助バッテリー(NE-SB01)を接続することで、ALLUX™を1日継続して使用することができます。(補助バッテリーの仕様は6.2.3参照)
また、充電することで、この状態から復帰します。




- 電池消耗状態および、安全姿勢を要求するバイブレーションが鳴ったら必ず安全姿勢をとること。
1分間のバイブレーション警告が経過して安全姿勢でない場合でも、強制的に膝継手がロックまたはフリーの状態になります。歩行中でも状態が変わりますので遊脚中にひっかかりが起こり、転倒するおそれがあります。

6 ALLUX™ の状態

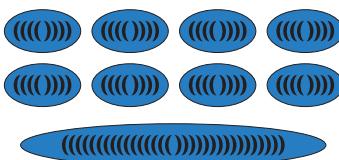

0.75秒間8回+4秒間:歩行できない電池残量

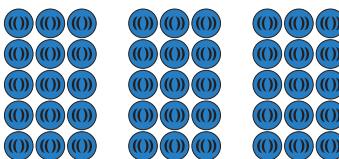

0.5秒間3回×15回:安全姿勢要求

⇒1分間の振動後に安全姿勢ではなくても膝がロックします。

- 安全姿勢をとります。
- 膝の屈曲がロック(強いイールディング抵抗)されます。ローバッテリー設定で「フリー」を選択している場合、膝の屈曲はフリーとなります。どちらを選択しているかは、ご担当の義肢装具士に確認してください。
- 補助バッテリーをALLUX™に接続します。(補助バッテリー使用上の注意は6.2.3参照)
 - ※6.2.1の通常モード移行時となり、補助バッテリー容量の確認のバイブレーションが鳴ります。
 - ※補助バッテリーの充電が必要です。
- 【補助バッテリーがないとき、自宅へ戻ったとき】
- ALLUX™を充電します。(7充電方法を参照)

6.2.5 高温状態時

イールディング歩行を連続で数十分継続するとALLUX™が高温になることがあります。ALLUX™の温度が上昇すると最初に高温異常になりつつあることがバイブレーションで通知されます。この状態では、まだ歩行することが可能です。そのまま使用を継続すると高温による使用停止の警告がバイブレーションで通知されます。安全姿勢をとることで膝がロック(屈曲抵抗が強いイールディング抵抗)します。ALLUX™の温度が下がるとまた使用できます。ALLUX™を充電することによって通常の状態に戻すこともできます。



- 高温警告のバイブレーションに従い、イールディングを使用した歩行をやめるか休憩するなど膝継手の温度が下がるまで動作を控えること。
 - 高温使用停止の警告のバイブレーションに従い、1分以内に安全に歩行が停止できるところに移動して安全姿勢をとること。
急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。
- ※ALLUX™の温度が下がるまでロック(強いイールディング抵抗)は解除されません。



- 義足膝継手の金属部分を触らない。
火傷をするおそれがあります。

6 ALLUX™ の状態

【高温になりつつある状態】



※イールディングを使用した歩行をやめるか休憩するなど膝継手の温度が下がるまで動作を控えてください。

【高温異常になった状態】



- 安全姿勢をします。
- 膝の屈曲がロック(強いイールディング抵抗)されます。

【膝継手の温度が低下すると】



⇒1分間の振動後に安全姿勢ではなくても膝が通常状態に復帰します。

- バッテリー残量確認のバイブレーションが鳴ります。




※高温状態が解除される温度ではまだ完全に温度が下がっていないため、同様のイールディング歩行を続けるとすぐに高温でのロック状態に移行します。十分に冷えるまで10分～20分の休憩を推奨します。

6.3 故障した場合

膝継手内部にあるセンサなどに異常が発生して膝継手としての機能が果たせない場合に故障の警告がバイブレーションにより通知されて、膝がロック(屈曲抵抗が強いイールディング抵抗)します。故障箇所によっては、バイブレーションが鳴らない場合や膝のロックがされない場合があります。





- 膝継手が故障状態になりますと、正常な歩行ができない状態になります。
- 故障の警告のバイブレーションが鳴りましたら、ただちに使用を中止し、ご担当の義肢装具士までご連絡ください。
通常の歩行ができなくなり、転倒するおそれがあります。

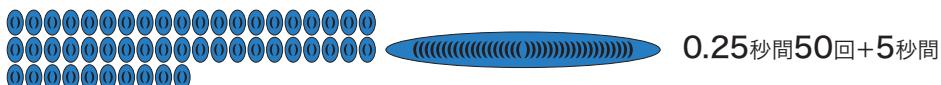

- 膝がロック(強いイールディング抵抗)します。

6 ALLUX™ の状態

6.4 バイブレーション通知パターン早見表

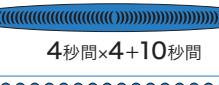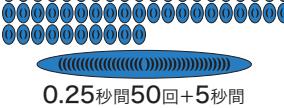	バイブレーション通知	通知条件	意味
①	 2秒間	充電器接続時または電源OFFキャップ接続時	ALLUX™の制御を停止している状態です。
②	 0.25秒間×8回	充電器、または電源OFFキャップを抜いた時	電池残量*1が3時間以上の状態です。
③	 0.5秒間×8回	電池残量*1が3時間未満になった時 充電器、または電源OFFキャップを抜いた時	電池残量*1が3時間未満の状態です。
④	 0.75秒間8回+4秒間	電池残量*1が消耗状態なった時 (充電中以外)	電池残量*1が不足して通常歩行できない状態です。 補助バッテリーを接続するか、充電してください。
⑤	 2秒間	リモコンアプリ操作でモード変更時 (5.3参照)	リモコンアプリでALLUX™のモード変更が完了された状態です。
⑥	 0.5秒間3回×15回	電池残量*1が不足した時 高温状態になった時 高温異常から復帰する時 油圧シリンダの制御が一時的に不安定になった時	安全姿勢を要求している状態です。 安全姿勢をとっても継続する場合は、故障している可能性がありますので、ご担当の義肢装具士に連絡ください。
⑦	 30秒おきに4秒間×2	ALLUX™本体が高温異常になりつつある時	ALLUX™本体が高温異常になりつつある状態です。 通常歩行は可能です。
⑧	 4秒間×4+10秒間	ALLUX™本体が高温異常になった時	ALLUX™で通常歩行できなくなる状態です。 温度が下がるまで復帰しません。 ⑥のバイブレーションがなって、通常の状態になるまで休憩してください。
⑨	 0.25秒間50回+5秒間	ALLUX™本体が故障入りした時	ALLUX™で通常歩行できなくなる状態で使用できません。 *2充電器または電源OFFキャップを抜き差しすると故障状態から復帰することができます。それでも復帰しない場合は、ご担当の義肢装具士にご連絡ください。
⑩	 2秒間	爪先または踵に断続的に4回荷重をかけた時	ALLUX™の無線を復帰します。
⑪	 0.5秒間×1回	セーフティロック時	セーフティロックが有効になった状態です。
⑫	 0.25秒間×8回	調整アプリまたはリモコンアプリの再起動ボタンを押した時	ALLUX™を再起動します。


*1:電池残量とはALLUX™本体電源か補助バッテリーの電池残量をいいます。使用条件によって異なりますので、あくまでも目安です。

*2:充電器、電源OFFキャップを抜いたときにバイブレーションの通知がない場合も故障入りしてする可能性があります。

*3:バイブレーション通知中に別の通知条件を満たすと、バイブレーションが切り替わる場合があります。

6 ALLUX™ の状態

下図にALLUX™の状態と、状態遷移の際に通知するバイブレーションパターンを示します。

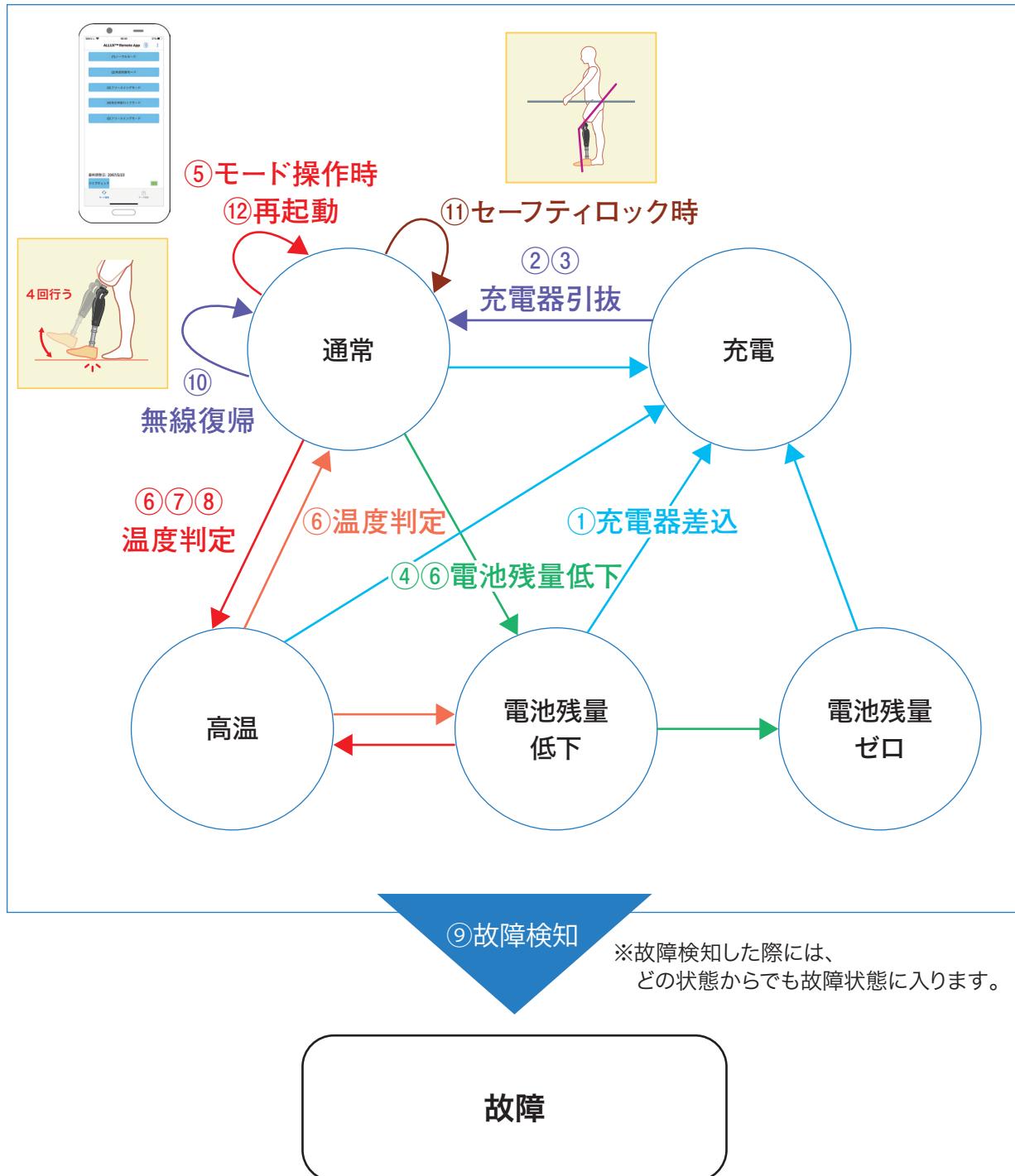

※①～⑫は6.4 バイブレーション通知パターン早見表と対応しています。

7 充電方法

7.1 ALLUX™の充電について

ALLUX™本体の内部電源と補助バッテリーは専用の充電器(NE-BC01)で充電します。

ALLUX™を使用する場合は、基本毎日充電することをお勧めします。



- 通常使用時に安全姿勢要求バイブレーションが鳴ったら必ず安全姿勢をとること。
急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。
- 充電器を外したときなどバイブレーションが鳴らないときは使用をやめて、
ご担当の義肢装具士に連絡してください。
バイブレーションが故障している可能性があるので、注意や警告のお知らせが
できない状態です。急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する恐れがあります。



- ALLUX™を充電する以外の用途で使用しない。
 - 充電器に付属のACアダプタ以外のアダプタを接続しない。
 - ACアダプタを他の電子機器に使用しない。
 - 屋外で充電しない。
 - 高所からの落下、強い衝撃を与えない。
 - 10°C以下、60°C以上の温度で保管・放置しない。
 - 室内で0°C~40°Cの温度範囲で充電すること。
 - コネクタケーブルは30N(3kgf)以上の力で引っ張らない。
 - 車(シガープラグコード)で充電しない。
 - 充電後は充電ポートキャップ(NE-CC01)を外した状態で使用しない。
 - ALLUX™コネクタ端子に金属などの導電体をあてない。
- 上記を守らないと充電器が故障または、発火する場合があります。



- 分解・改造をしない。
故障の原因となることがあります。



- 水などの液体をかけない。
 - 濡れた手で触らない。
- バッテリーがショートし、感電するおそれがあります。

7.1.1 充電器とACアダプタの仕様

- 使用温度:0°C~40°C ■耐環境温度:-10°C~60°C
- 耐環境湿度:10~90% RH(結露なきこと)
- 入力電圧:12V ■入力電流:最大1A
- ACアダプタ:NE-AD01(入力電圧:100V~240V)

7 充電方法


7.1.2 充電方法

屋内で充電器(NE-BC01)とACアダプタ(NE-AD01)を接続してご家庭のコンセントから充電します。充電時間は電池残量にもよりますが、約3時間で満充電となります。ACアダプタのプラグアダプタは4つのタイプがあり、日本国内においてはAタイプ(NE-PA01)を使用します。必要に応じて、Cタイプ(NE-PA02)、BFタイプ(NE-PA03)、Oタイプ(NE-PA04)はご購入いただけます。

- ACアダプタにプラグアダプタ(Aタイプ)を図のように位置を合わせて取り付けます。

※正常に取り付くと「パチン」と音がします。

※取り外すときは、中央にある爪を押しながらスライドさせて抜き取ります。

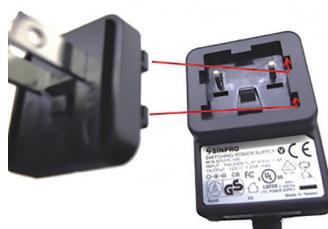

- 充電器とACアダプタを接続します。

- ACアダプタのプラグアダプタを商用電源に差し込みます。

※商用電源に接続するために、使用する国に応じた適切な変換プラグを使用します。

注記

- プラグアダプタは商用電源にあったプラグにすること。
- 付属のACアダプタ以外のACアダプタを使用しないこと。
故障の原因となることがあります。



- ALLUX™のコネクタカバー(NE-CC01)を取り外します。

※コネクタカバーのレバーを矢印の方向にスライドさせて抜きます。

- 充電器コネクタをALLUX™のコネクタ端子に接続します。

- 2秒間振動します。



コネクタカバー



コネクタ端子



充電器コネクタ

7 充電方法

- 充電器のLEDが橙色に点灯します。
※ALLUX™使用直後で温度が40°Cを超えてると緑色LEDが点滅します。
充電待機状態となり、温度が下がると自動的に充電されます。
- 一定時間充電し、完了するとLEDが緑色に変化します。
※充電が完了して長期間放置して、電池容量が一定容量を下回ると再充電します。
- 充電器コネクタを外します。
6.2.1に記載のバイブレーションが鳴ることを確認します。
※十分に充電したにもかかわらず、電池残量が少ないバイブレーションが鳴った場合は
リチウムイオン電池が劣化している可能性があります。ご担当の義肢装具士へ連絡してください。
- 充電ポートキャップを取り付けます。



ACアダプタを商用電源から抜きます。


注記

- 充電コネクタを外したときに、バイブレーションが鳴ることを確認すること。
- バイブレーションが鳴らなかつた場合は、ご担当の義肢装具士へ連絡すること。
バイブレーション通知ができなくなり、急に屈曲・伸展抵抗が変わり、転倒する
恐れがあります。

7.1.3 補助バッテリーの充電方法

ALLUX™本体と同様に補助バッテリーを充電します。専用の補助バッテリー充電ケーブル(NE-CL01)を充電器コネクタに接続して補助バッテリーと接続します。

- 7.1.2の充電器、ACアダプタに補助バッテリー充電ケーブルを接続します。
- ACアダプタのプラグアダプタを商用電源に差し込みます。
- 補助バッテリーを補助バッテリー充電ケーブルに接続します。
- 充電器のLEDが橙色に点灯します。
※ALLUX™使用直後で温度が40°Cを超えてると充電待機状態となります。
温度が下がると自動的に充電されます。
- 一定時間充電し、完了するとLEDが緑色に変化します。
※充電が完了して長期間放置して、電池容量が一定容量を下回ると再充電します。
- 補助バッテリー充電ケーブルから補助バッテリーを取り外します。

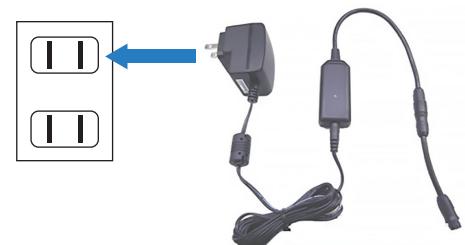

ACアダプタを商用電源から抜きます。

注記

- 充電しない状態で商用電源にACアダプタを差し込んだまま放置しない。
ACアダプタが発熱・発火するおそれがあります。
- ACアダプタを商用電源に接続した状態で乳幼児を近づけない。
感電するおそれがあります。

7 充電方法

7.1.4 充電器LED表示

充電器のLEDは4つの表示があります。何も点灯しない場合は、接続は7.1.2を参照して再確認します。それでもLEDが点灯しない場合は充電器自体の故障かACアダプタの故障の可能性があります。ご担当の義肢装具士へ連絡してください。

- 点灯:充電中 ————— 正常に充電している状態
- 点滅:充電エラー ————— 故障などで充電できない状態
- 点灯:充電完了 ————— 充電が完了し満充電状態
- 点滅:充電待機中 ————— 電池が40°C以上の高温状態で冷えるまで待機中




7.1.5 延長ケーブルの使用について

ALLUX™の充電コネクタがフォームカバーなどで覆われる場合、延長ケーブルを使用して、充電器との接続口を足首側に引き出します。

注記

- 延長ケーブルは足首側に引き出すこと。
ソケット側に引き出すと膝屈曲時にケーブルが挟み込まれることがあります。
- 最大屈曲時にソケットに挟まれないようにすること。
- 未使用時には、コネクタ部にフタをすること。
端子間が接触したり、水濡れした場合、ALLUX™が故障状態になることがあります。

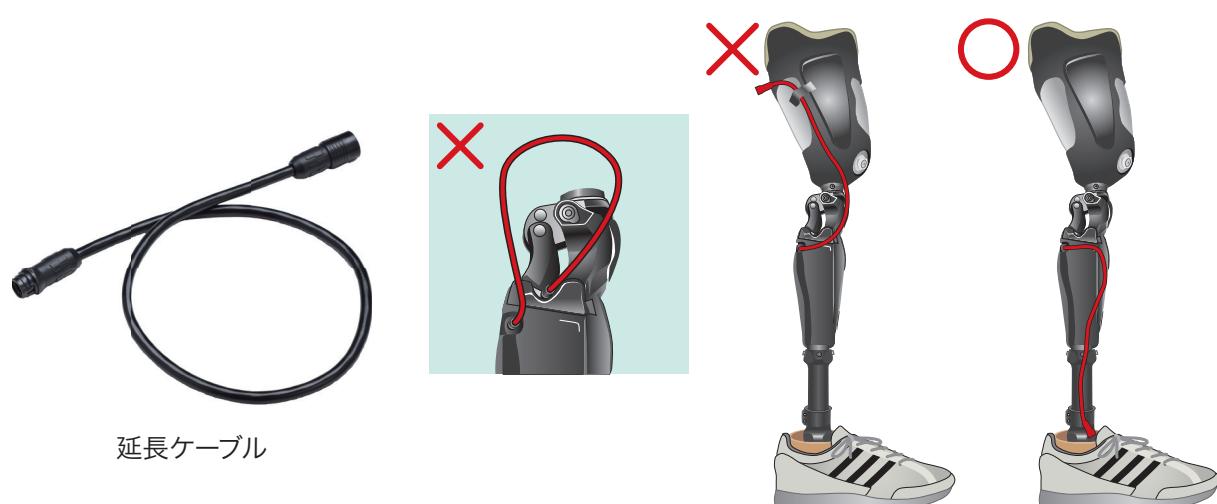

8 保守部品について

この製品の耐用年数は、使用者の活動量にも依存しますが、6年です。

実際の耐用年数は、使用者の能力に合わせて義肢装具士が判断することになっています。

ALLUX™は2年に1回の頻度で定期点検を受ける必要があります。

8.1 保守部品リスト

ALLUX™に使用する部品の保守部品を下表に示します。

保守交換が必要な場合の交換用の部品を購入する場合、または保守についてのご質問・疑問点がある場合は、ご担当の義肢装具士までお問い合わせください。

注記

- 一般の潤滑剤を塗布しないこと。
膝が曲がりにくくなることがあります。

【電池の交換】

ALLUX™ NE-Z41		ALLUX™の内部電源は、ユーザーおよび義肢装具士では交換できません。電池寿命が短くなったらご担当の義肢装具士を通じて、当社まで返却ください。電池交換サイクルの目安は2年です。(定期点検期間)
補助バッテリー NE-SB01		補助バッテリーの電池寿命が短くなったら、ご担当の義肢装具士を通じて当社から新品を購入して交換してください。

注記

- 補助バッテリー(NE-SB01)はリチウムイオン電池です。
一般ゴミといっしょに廃棄しないでください。
捨てられた補助バッテリーがゴミ収集車内などでショートし、発火・発煙の原因となる恐れがあります。



【カバー・パッド・ストッパーの交換】

交換するときはご担当の義肢装具士に相談してください。

以下の部品は当社から購入できます。ご担当の義肢装具士に交換を依頼してください。

伸展ストッパーゴム N-G012	
---------------------	---

以下の部品は当社にて交換対応します。ご担当の義肢装具士から当社に返送してください。

フロントリンクパッド NE-FC01		フロントカバーパッド NE-FC02	
フロントリンクSTパッド NE-FC03			

9 トラブルシューティング

9.1 トラブルシューティングリスト

ALLUX™の使用中に何か問題があった場合、下記リストを参照してください。該当項目がなければご担当の義肢装具士までご連絡ください。

状況	調べること	処置
充電できない	充電器コネクタおよびACアダプタが確実に接続されていますか？	接続を確認します (7.1.2参照)
	充電器コネクタを接続した時にバイブレーションがなっていますか？	バイブレーション通知がない場合は故障の可能性があり、使用を控えてご担当の義肢装具士に連絡してください
	膝継手が高温になつていませんか？	温度が下がるまで放置してから、再度充電してください(7.1参照)
	上記に該当しない場合	ご担当の義肢装具士にご連絡ください
リモコンアプリでモードが変わらない	膝を曲げ伸ばしをするか、体重を抜いてから体重をかけた後、120秒以内にボタンを押していますか？	膝を曲げ伸ばしをするか、体重を抜いてから体重をかけた後に、安全姿勢をとってリモコンアプリを操作します (4.1参照)
	リモコン操作時に安全姿勢をとっていますか？	
膝がロック状態になった、またはフリーの状態になった	直前にバイブレーションはなりませんでしたか？	高温になっている場合は、温度が下がるまで待機します (6.2.5 参照)
	電池残量は十分ありますか？	補助バッテリーを接続するか、または充電します (6.2.4 参照)
	上記に該当しない場合	ご担当の義肢装具士にご連絡ください

9 トラブルシューティング

状況	調べること	処置
異音・ガタがでてきた	異物が挟まっていますか? 膝関節リンク部品にねじなどが挟まっていますか?	異物を取り除き、正常な動きができるかを確認してください
	膝継手、足部などの連結部分が緩んでいませんか?	ご担当の義肢装具士にご連絡ください
	上記に該当しない場合	ご担当の義肢装具士にご連絡ください
セーフティロックがかからない	軽度屈曲状態で静止し、かつ十分に体重をのせていますか? (体重がかかっていない場合、また、ゆっくりでも屈曲伸展している場合は機能しません。)	十分な荷重状態で静止してください
	上記に該当しない場合	ご担当の義肢装具士にご連絡ください
着座時に膝がロックして座りにくい	途中で膝の屈曲を止めていますか?	セーフティロックがきいているため静止せず着座します
	遊脚相に移行してからつま先に荷重をかけて屈曲させていますか?	スタンブリングロックがきいているため無負荷で着座するか、イールディングのまま着座します
	上記に該当しない場合	ご担当の義肢装具士にご連絡ください

10 廃棄について


以下にALLUX™の主要部品に用いている材料の分類を示します。

廃棄する時は、自治体などのルールにしたがってください。

また、ご担当の義肢装具士から当社へご連絡の上、返送していただければ廃却を代行いたします。



	部品名	材料分類	注記
1.	フレーム	プラスチック	炭素繊維複合材 (アルミニウム合金材インサート)
2.	膝リンク	金属	アルミニウム合金
3.	膝パッド	ゴム	
4.	伸展ストッパーゴム	ゴム	
5.	油圧シリンダ	金属	本体:アルミニウム合金 ピストンロッド:チタン合金 Oリング:ゴム
6.	電子基板	電子部品	基板、電子部品:RoHS指令適合
7.	リード線	電線	
8.	電池	リチウムイオン電池	7.1参照
9.	接合部	金属	チタン合金
10.	カバーなど	プラスチック・ゴム	各々に材質明記

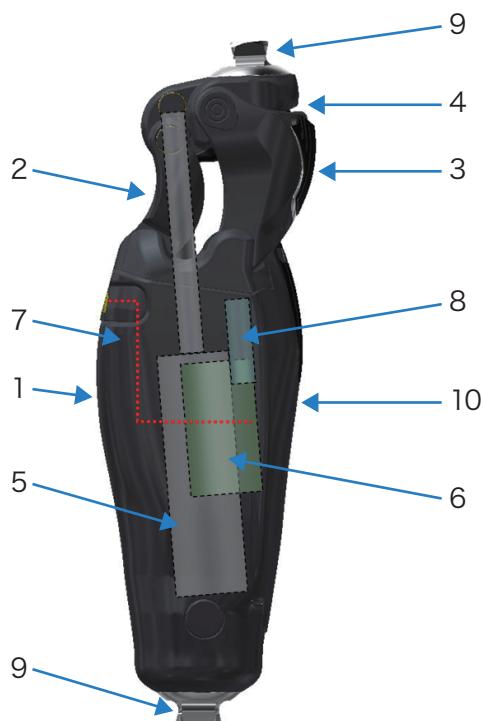

11 定期点検について

11.1 定期点検

安全にご使用していただくために、ALLUX™のご使用を開始してから、2年毎に定期点検を受けてください。ALLUX™に付帯している消耗品（伸展ストッパーゴム、ゴム製のパッドなど）は、定期点検時に劣化がみられた場合、無償で交換いたします。定期点検を依頼する場合は、ご担当の義肢装具士までお問い合わせください。

注記

- 定期点検を2年後（基本契約）に受けること。

定期点検を受けずに使用した場合、磨耗などの劣化が促進される場合があります。

定期点検を受けずに使用して故障、破損した場合は保証できない場合があります。

11.2 お手入れ方法

表面の汚れなどは、必要に応じて、真水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。



- 拭き取り後に水気や布からなる糸くずなどが残らないようにしてください。錆や糸くずの巻き込みにより、回転部の異常で膝の曲げ伸ばしに影響することがあります。

12 保証について

12.1 保証について

- 1) ALLUX™本体の保証期間は、ご購入日より3年間（基本契約）、12.2に記載の指定機器は1年間です。保証期間中、正常なご使用にもかかわらず、当社が納入した機器の設計、製造の不備が原因で故障、破損が発生した場合に限り、その部分について修理、または交換をいたします。
- 2) ALLUX™に付帯している消耗品（伸展ストップゴム、ゴム製のパッドなど）は、保証の対象とはなりません。
- 3) 保証範囲は、不具合製品の保証までとし、その故障に起因する種々の出費、およびその他の損害についての補償はいたしません。
- 4) 次に示す場合には保証期間内であっても、有償修理となります。
 - ALLUX™保証書のご提示がない場合
 - ALLUX™保証書にご購入日、お名前および取扱義肢製作所の記載がない場合または記載を書き換えた場合
 - 本書に記載の注意事項に反するお取扱い、あるいはご使用中における落下、通常使用を逸脱する状態での衝撃に起因する故障、破損
 - ご使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障、破損
 - 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異に起因する故障、破損
 - 当社指定機器以外の機器による原因で発生した故障、破損
 - 保証期間経過後の故障、破損
 - 当社または販売代理店が認定した方以外が調整して使用された場合の故障、破損
 - 定期点検を受けずに使用された場合の故障、破損
- 5) 製造物責任について
取説に従った使用をした時のみ、製造者は当製品に対し責任があり、改造や不適切な使用など、取説を無視した（従わなかった）事により発生した損害または利用者の体調変化など利用者側の事情により発生した事故には一切責任を負いません。
- 6) ALLUX™の転売、または譲渡について
当社のアフターサービスや定期点検を継続し、安全なご使用を続けていただくため、ALLUX™、アクセサリ部品の譲渡や転売は原則禁止します。

12 保証について

12.2 指定機器の保証期間

ALLUX™に使用する充電器などの指定機器の保証期間を下表に示します。
保証期間を過ぎて、故障や破損した場合は有償交換となります。

充電ポートキャップ NE-CC01	1年	
電源OFFキャップ NE-CC02	1年	
補助バッテリー NE-SB01	1年	
延長ケーブル NE-CL02	1年	
充電器 NE-BC01	1年	
ACアダプタ NE-AD01	1年	
プラグアダプター(UL) NE-PA01	1年	
補助バッテリー 充電ケーブル NE-CL01	1年	
補助バッテリーホルダー NE-SC01	1年	


12 保証について

12.3 修理について

- 1) 不具合の原因が不明確な場合は、お客様と当社で協議の上、処置を決定することとします。
- 2) 外装の塗装などの補修は有償修理となります。事前に見積りいたしますのでご担当の義肢装具士にご相談してください。
- 3) 保証期間を経過した後、有償で修理した箇所に限り1年間の延長保証をいたします。
- 4) ご購入後8年を経過したALLUX™は修理不可能となる場合があります。

13 ラベル表示について

13.1 UDIラベル(梱包箱)

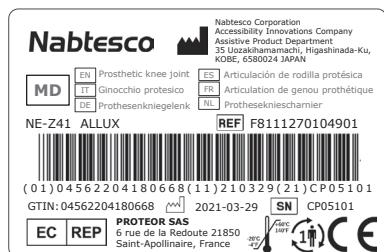

欧州の規格に適合していることを記しています。

製造元

製年月日

医療機器

品番

シリアル番号

GTIN GS1事業者コード

欧州代理人の所在地




製品を保存、輸送、使用する場合の最高温度と最低温度を記します。



一人の使用者が継続して使用してください。

13.2 銘板シール(膝継手本体 充電ポート部)

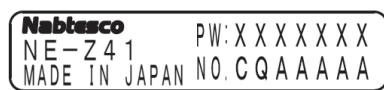

PW: スマートフォンで接続するときに用いるパスワードです。

NO. シリアル番号を記載しています。

13.3 認証マークラベル(膝継手本体 充電ポート部)



欧州の規格に適合していることを記しています。




EUでは、埋め立てずにリサイクルすることを要求しています。廃棄するときは、自治体のルールにしたがってください。

MAX WEIGHT
~K3(MOB3) 125kg
K4(MOB4) 100kg

体重制限について記載しています。Kレベル(MOB)については、4ページを参照してください。

13.4 充電器ラベル(充電器)

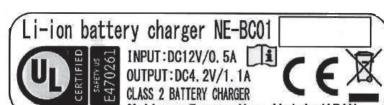

欧州の規格に適合していることを記しています。



EUでは、埋め立てずにリサイクルすることを要求しています。廃棄するときは、自治体のルールにしたがってください。



この製品がULの安全規格に適合していることを証明するものです。

この製品を使用するときは、取扱説明書を参考してください。

13 ラベル表示について

13.5 ACアダプタラベル(ACアダプタ)



この製品がULの安全規格に適合していることを証明するものです。

FCC アメリカのFCCに準拠しています。

屋内 屋内使用のみです。

V エネルギー効率レベルが5です。

CB CBマークを取得済みです。IEC規格に基づき安全性試験しています。

RCM RCMマーク(オセアニア市場対象の安全規格マーク)

CE 電気用品安全法に基づき、安全性に関する技術基準に適合しています。

二重絶縁 二重絶縁されています。

LPS LPS規格に準拠しています。(制限電源)

DC DCセンタープラスを示しています。

GS チュフライインランドがGSマーク認証しています。

RoHS RoHS指令に基づき、特定の有害物質が基準値以下です。

CE 欧州の規格に適合していることを記しています。

リサイクル EUでは、埋め立てずにリサイクルすることを要求しています。廃棄するときは、自治体のルールにしたがってください。

INPUT:100~240V~47~63Hz 0.4A
OUTPUT:12V---1.25A max.

入力は0.4Aまでの100~240Vで47~63Hzの交流電源です。出力は12Vで最大1.25Aの直流電源です。

13 ラベル表示について

13.6 補助バッテリーラベル(補助バッテリー)



この製品がULの安全規格に適合していることを証明するものです。


欧州の規格に適合していることを記しています。

EUでは、埋め立てずにリサイクルすることを要求しています。廃棄するときは、自治体のルールにしたがってください。

この製品を使用するときは、取扱説明書を参照してください。

リチウムイオン電池です。

13.7 補助バッテリーケースラベル(補助バッテリーケース)

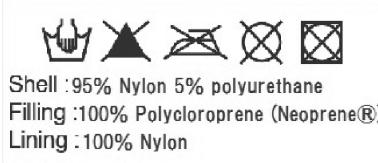

洗濯は手洗いでお願いします。

塩素系及び酸素系漂白剤の使用は禁止です。

アイロン仕上げは禁止です。

ドライクリーニングは禁止です。

タンブル乾燥禁止です。

MEMO



お問い合わせ先

ナブテスコ 株式会社

住環境カンパニー 福祉事業推進部

〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町35

TEL:078-413-2724

FAX:078-413-2725

<https://welfare.nabtesco.com/>

CE

落丁・乱丁はお取り替えします。

Nabtesco

ナブテスコ 株式会社

8111-4701215-01