



Afstandsbediening App Instructiehandleiding (Android versie) Voor Gebruikers

Product Type: NE-Z41, NE-Z41SH
Document nummer: 81-SS00124 (Ver.4)
Applicatie Ver. 0.4.7 of later
Uitgifte datum: 2023-10-01

Taal: Nederlands.



VOORZICHTIG

- Lees deze handleiding voor gebruik goed door.
- Bewaar deze instructiehandleiding als naslagwerk.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Introductie

Dank u voor de aankoop van de Nabtesco ALLUX™.

Zaken betreffende het gebruik zoals lopen, onderhoud, trouble shooting en waarschuwingen worden in de gebruikershandleiding (hierna genoemd gebruikersgids), die met de ALLUX™ geleverd wordt, omschreven.

Deze instructiehandleiding (hierna genoemd deze handleiding) voor de afstandsbediening App beschrijft het installeren en gebruik van de afstandsbediening App (hierna genoemd deze App) in de Android systeem omgeving.

Lees de gebruikersgids en deze handleiding goed door, voor een veilig en comfortabel gebruik, neem kennis van de inhoud en veiligheidsvoorschriften genoemd in deze documenten.

- Nabtesco is eigenaar van het copyright van dit document.
- Android is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. in de USA en andere landen.
- Google is een handelsmerk van Google Inc.
- Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.
- Het Bluetooth woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG. Inc. Het gebruik van deze merken door Nabtesco is onder licentie.
- QR-code is een geregistreerd handelsmerk van Denso Wave Incorporated.
- Alle andere bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

Inhoudsopgave

Introductie	1
Inhoudsopgave	2
1. Ondersteunde modellen en werkomgeving	3
2. Installatieprocedure en eerste instellingen	4
2.1 Installatieprocedure	4
2.2 Bluetooth pairing	5
3. Veilige houding	6
4. Communicatiemodus en het verbinden met Bluetooth	7
5. ALLUX™ operationele modi	8
6. Eerste instellingen	10
7. “Mode change” scherm	12
8. “Connection to ALLUX™” scherm	13
9. Verzamel data scherm	14
10. Algemeen scherm	15
11. Andere instellingen scherm	16
12. “over de ALLUX™” scherm	17
13. “Modusnaam wijzigen” scherm	18
14. Fout melding pop-up	19
14.1 Opslag fout	19
14.2 Locatie informatie fout A	19
14.3 Locatie informatie fout B	19
14.4 Bluetooth instelling fout	19
14.5 “Connection to Allux™” fout	19
14.6 “Password” fout	20
14.7 “Wireless connection” fout	20
14.8 “Wireless communication” fout	20
14.9 “Safe posture” fout	20
14.10 “Hydraulic control” fout	20
14.11 Verbindingsfout van het apparaat in de omgeving	21
14.12 Fout bij knop Opnieuw verbinden	21
15. Problemen oplossen	22

1 Ondersteunde modellen en werkomgeving

- ALLUX™ (type: NE-Z41)

*ALLUX™ (type: NE-Z4) wordt niet ondersteund.

Het model kan worden herkend aan het design op het voorste scharnierende deel.

Het kan ook worden geïdentificeerd aan de indicatie naast de laadpoort.



NE-Z41
(Ondersteund type)



NE-Z4
(Niet-ondersteund type)



NE-Z41
(Ondersteund type)



NE-Z4
(Niet-ondersteund type)

- Compatible OS: Android 7 of later

Deze App is compatible met Android 7 of later, dit garandeert niet dat de app Android 7 of later werkt op alle Android apparaten.

- Vrije geheugenruimte: 500 MB of meer wordt aanbevolen.


Bluetooth®



Waarschuwingen bij Bluetooth

- Radiogolven uitgezonden door Bluetooth apparaten kunnen effect hebben op elektronische apparaten en andere apparaten. Zet Bluetooth apparaten uit nabij priority plaatsen in de trein, in ruimtes waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn zoals vliegtuigen, nabij automatische deuren en brandalarm apparatuur. Het kan een ongeval veroorzaken.
- Wij nemen geen verantwoording voor het lekken van informatie bij gebruik van Bluetooth technologie.
- Dit product garandeert geen draadloze verbinding met alle Bluetooth apparatuur. Het Bluetooth apparaat dat gekoppeld moet worden moet beschikken over de Bluetooth standaard gespecificeerd door Bluetooth SIG en moet tenminste over een certificaat beschikken. Ter aanvulling, zelfs al beschikt het te koppelen apparaat over de Bluetooth standaard, dan kunnen fenomenen als niet kunnen verbinden of verschil in display/ werking zich voordoen, afhankelijk van de karakteristieken en specificaties van het apparaat.
- Demonteer of modificeer niet aan dit product want de draadloze functionaliteit voldoet aan de technische standaarden.

2 Installatieprocedure en eerste instellingen

2.1 Installatieprocedure

1. Log in met uw Google ID.
Type de naam "ALLUXRemoteController" in het zoekveld.
Tik op  knop op het keyboard.

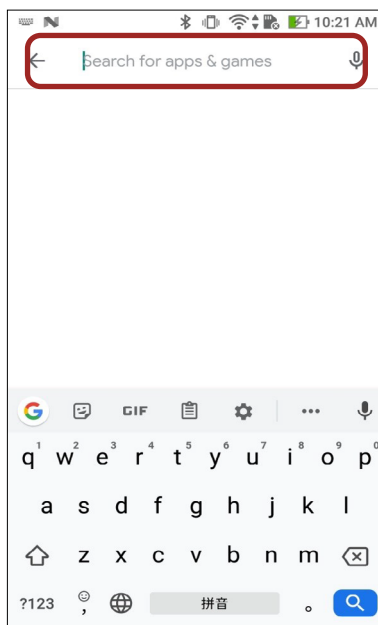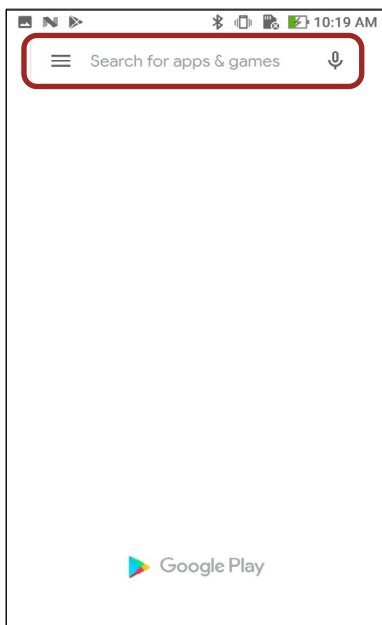

De volgende QR-code kan gebruikt worden voor installatie.



2. Nadat de zoekresultaten zijn getoond, tik op de target App hieronder getoond.



3. Tik op de "Install" knop
4. Nadat de installatie is voltooid verschijnt het icoon van de App op het Home scherm van de smartphone.
5. Tik op het icoon om de App te starten.


2 Installatieprocedure en eerste instellingen

2.2 Bluetooth pairing

Bluetooth pairing is vereist voor het gebruik van deze App.
Volg de onderstaande procedure voor pairing.

*De procedure en het scherm verschillen afhankelijk van uw smartphone en de versie van de toepassing. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone.

1. Verwijder de uitschakelkap van ALLUX™ om ALLUX™ in staat te stellen te communiceren.
*De stroom wordt ingeschakeld wanneer de uitschakelkap verwijderd wordt en wordt uitgeschakeld wanneer deze weer teruggeplaatst wordt. (zie pagina 7).
2. Tik op Bluetooth via de knop Instellingen of Apparaatverbindingen, enz. Selecteer ALLUX: XXXXXXXX uit de beschikbare apparaten en tik op Toestaan of Koppelen als toestemming vereist is.

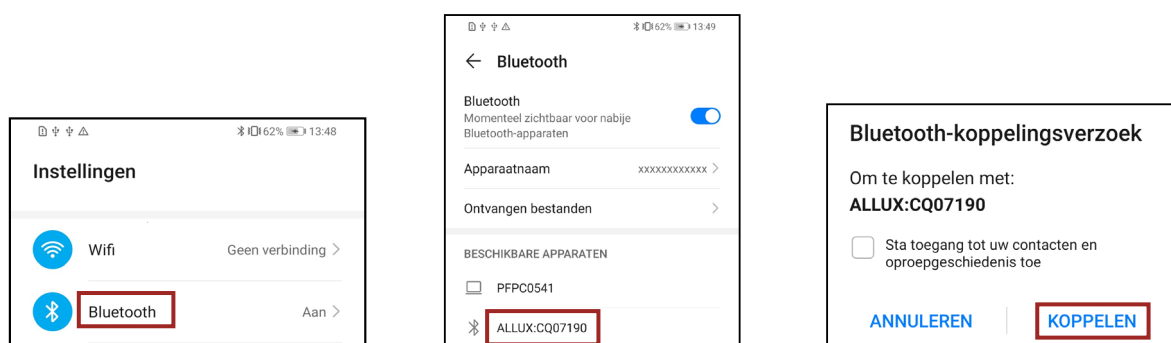

3. Bij correcte koppeling ziet het display er als volgt uit.




4. Plaats de uitschakelkap van ALLUX™ om de verbinding met ALLUX™ te verbreken.


3 Veilige Houding

Voordat u een modus via de afstandsbediening aanpast moet de gebruiker een houding die veilig is aannemen, ook bij aanpassingen van de hydraulische weerstand. Naar deze positie wordt gerefereerd als "Safe Posture". Zorg er voor dat u de volgende veilige houdingen begrijpt.

[Veilige houding]

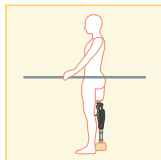

: status waarbij de ALLUX™ is gestrekt en rechtop en belast kan worden.

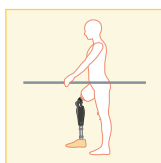

: status waarbij de ALLUX™ niet belast kan worden en de knie gebogen kan zijn.




VOORZICHTIG

- Bent u in een veilige houding zonder gewicht op de ALLUX™, houd dan een handrail vast of ga op een stoel zitten. U kunt anders uw balans verliezen en vallen.

[Verzoek om een veilige houding]

Als de ALLUX™ niet in een veilige houding is wanneer een afstelling of een instelling wordt gedaan, dan verschijnt een pop-up. Zorg ervoor dat u een veilige houding aan neemt en druk op "OK".


Neem een veilige houding aan



De ALLUX™ niet belasten

annuleren

of



Geen verandering van de kniehoek

OK

De ALLUX™ niet belasten

Geen verandering van de kniehoek.

*De pop-up tekst kan op sommige toestellen verborgen zijn.

Als dit het geval is, draai uw toestel dan horizontaal.

Als de tekst nog steeds zichtbaar is, ook al is het toestel horizontaal gedraaid, bekijk dan de tekst hierboven.

4

Communicatiemodus en het verbinden met Bluetooth


Om stroom te besparen is de ALLUX™ niet altijd in de communicatiemodus.

Om de communicatiemodus in te kunnen schakelen moet u de volgende acties uitvoeren.

Is de ALLUX™ communicatie eenmaal ingeschakeld, terwijl de App gebruikt wordt, dan duurt dit tot dat de communicatie weer verbroken wordt.

[Communicatiemodus aan]

1. Binnen 5 minuten nadat de ALLUX™ licht gebogen en gestrekt wordt..
2. Binnen 5 minuten nadat met uw lichaamsgewicht op de ALLUX™ druk hebt gedrukt.
3. Binnen 5 minuten nadat de oplader of de uitschakelkap is losgekoppeld van ALLUX™.

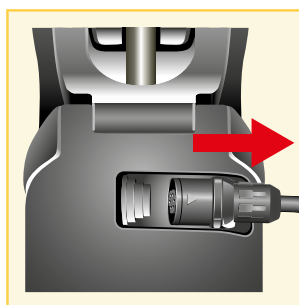

Met de afstandsbediening kunt u de draadloze verbinding uitschakelen bijvoorbeeld als de gebruiker op een vliegtuig stapt. Om de draadloze verbinding weer te herstellen vanuit deze stand kunnen onderstaande acties zoals hieronder getoond uitgevoerd worden.

1. Ontkoppel de lader of de power OFF kap van de ALLUX™.
2. Belast de hiel 4 keer kort achter elkaar of belast de teen 4 keer kort achter elkaar.

*U kunt met de afstandsbediening wisselen tussen deze mogelijkheden via de methode beschreven op pagina 14.



*Alleen de App starten zorgt niet automatisch voor verbinding met de ALLUX™. Tik op het Bluetooth icoon op het "Mode Change" scherm (zie pagina 12) om de ALLUX™ te verbinden.

*Alleen het tikken op de home knop etc. op de smartphone verbreekt niet automatisch de communicatie met de ALLUX™ en de App blijft op de achtergrond werken. Tikt u nu weer op het icoon van deze App, dan start deze onmiddellijk op in de verbonden status.

**VOORZICHTIG**

- Verlaat de App nooit moedwillig door het uitzetten van de smartphone. Hierdoor kunnen ingestelde waarden veranderen in ongewenste waarden, wat kan leiden tot een val.

NOTITIE

- Ook als de App verborgen is op de smartphone en de verbinding is behouden dan blijft de App energie nemen van de batterij van de smartphone. Als u niet wilt dat de App stroom blijft gebruiken, verbreek dan de verbinding met de ALLUX™ of sluit de App.

5 ALLUX™ operationele modi


De ALLUX™ heeft de volgende vijf operationele modi.

[Normale modus]

De normale modus is ingesteld voor normaal lopen. Verschillende loopsituaties worden beoordeeld via een sensor. Daardoor kan de ALLUX™ zich automatisch aan het lopen van dat moment aanpassen.


[“Flexion angle limit” modus]

In de “flexion angle limit” modus wordt de flexie vergrendeld in een vooraf ingestelde hoek terwijl de extensie vrij blijft.

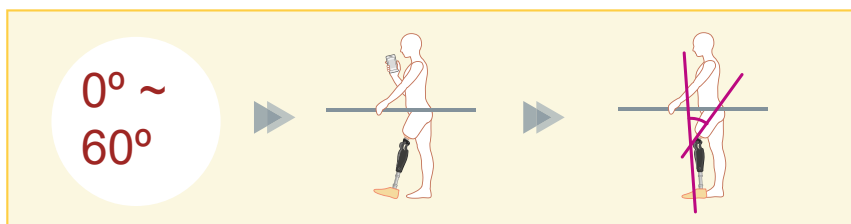

[“Variable selective flexion lock” modus]

De ALLUX™ onthoudt de hoek waarin de “variable selective flexion lock” is aangezet. De flexie wordt verder geblokkeerd maar de extensie blijft vrij.

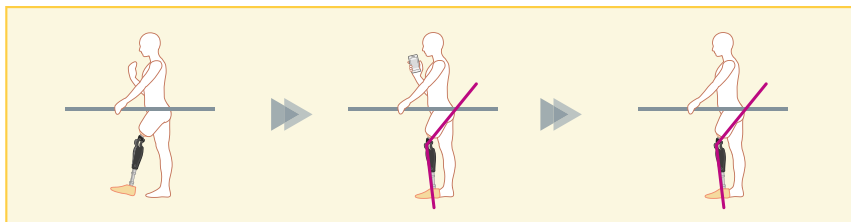


NOTITIE

- Als de “flexion angle limit” modus of de “selective flexion limit” modus wordt gebruikt, plaats dan geen buitensporig grote krachten op de ALLUX™ tijdens het vergrendelen. Als een buitensporig grote impact kracht op de knie komt kan de knie beschadigen.

5 ALLUX™ operationele modi


[“Full extension lock” modus]

De ALLUX™ wordt vergrendeld in volledige extensie.

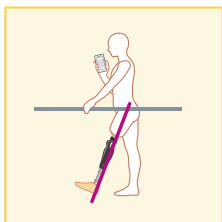

[“Free swing” modus]

In deze modus is de ALLUX™ vrij van weerstand.

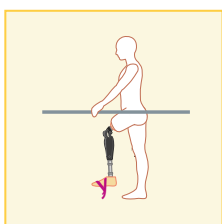

Deze modi kunnen worden toegewezen aan de knoppen van de afstandsbediening door uw instrumentmaker via de instel App. Door op de betreffende knop op het “mode change” scherm van de afstandsbediening App te tikken (pagina 12) kunt u vervolgens de modus die u wilt gebruiken. De normale modus is altijd toegewezen aan knop 1 van de afstandsbediening App. U kunt de bovenstaande operationele modi vrij toewijzen aan de knoppen 2 t/m 5 op de afstandsbediening App.

De fabrieksinstellingen van de afstandsbediening zijn:

- Knop 2: “Flexion Angle Limited” modus
- Knop 3: “Variable Selective Flexion Lock” modus
- Knop 4: “Full Extension Lock” modus
- Knop 5: “Free Swing” modus

6

Eerste Instellingen

*Het pop-up scherm dat u te zien krijgt, varieert afhankelijk van de gebruikte smartphone.



1. Tik op het icoon van deze App om te starten.



2. Een Popuo-venster wordt geopend en vraagt om toegang tot uw foto's, media en bestanden op uw smartphone. van uw smartphone. Druk op toestaan.



3. Er verschijnt een popup die vraagt om toestemming voor deze app om toegang te krijgen tot de locatie van de smartphone. Tik op "Toestaan".
Android 12 of latere versies gebruiken geen locatie-informatie. Er verschijnt een popup die vraagt om toestemming met betrekking tot apparaten in de buurt, sta deze toe.

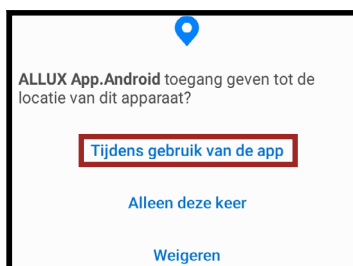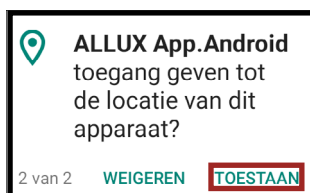

Android 12 of later

4. Het "Beleid & licentie" (wet en regelgeving) dialoog box wordt getoond. Lees de informatie en tik op de "OK" knop.



6 Eerste Instellingen

5. Het bedrijfslogo wordt getoond. Bij de tweede keer worden de bovenstaande schermen over geslagen als u op het icoon van de App tikt.
Nadat het bedrijfslogo is getoond op het scherm, voor 1 seconde, verandert dit scherm automatisch in het volgende scherm




6. Een pop-up met een waarschuwing verschijnt. Lees deze en tik op "OK".



7 Mode Change scherm


Het “Mode Change” scherm wordt getoond na de waarschuwing pop-up.

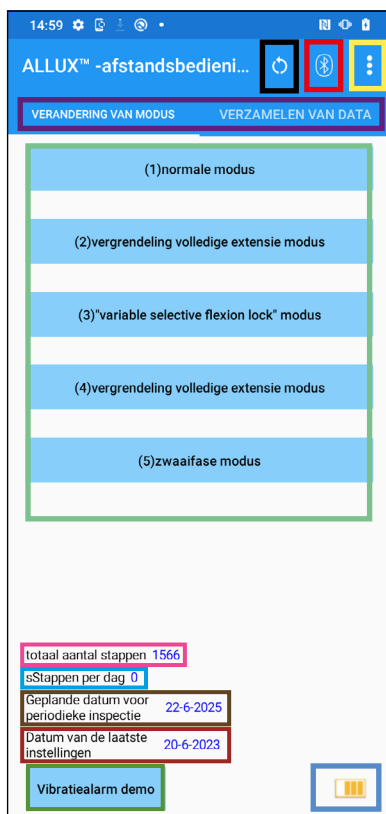

● Icoon Opnieuw verbinden:

Tik op dit icoon om verbinding te maken met een eerder verbonden ALLUX™.

U krijgt de volgende pop-up te zien voor en na de verbinding.

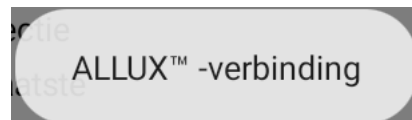

● Bluetooth icoon:

Tik op dit icoon om het “Connection to ALLUX™” scherm te tonen (pagina 13). Het icoon verandert afhankelijk van de verbindingstatus. Als de status “niet verbonden” is tik op het icoon om verbinding tot stand te brengen.




Niet verbonden

Verbonden

● Algemeen icoon:

Tik op dit icoon om het “General” scherm te tonen (pagina 15).

Stand-by markering:

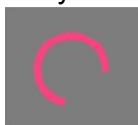

Terwijl de App bezig is met communicatie met de ALLUX™ of andere processen, wordt de stand-by markering getoond.

Terwijl deze markering wordt getoond zijn alle bewerkingen op het scherm niet mogelijk.

● Afstandsbediening knop:

Tikt u op een van deze knoppen dan verandert de status van de ALLUX™ in de modus die was toegewezen aan die knop. Na het tikken op een knop verschijnt een pop-up. Tik dan op “OK”.

● “Screen change” knop:

U kunt wisselen tussen het “Mode Change” scherm en het “Acquisition of Data” scherm. Tik op deze karakters of schuif elk scherm naar rechts of links om te wisselen.

● Totaal aantal stappen:

Laat het totaal aantal stappen zien dat u tot op dit punt gemaakt heeft.

● Stappen per dag:

Laat het aantal stappen zien van die dag..

● Geplande periodieke inspectie:

Wanneer u de begindatum gebruik invoert in de “Andere instellingen” onder het icoon Algemeen, wordt de geplande datum voor de periodieke inspectie weergegeven.

● “Latest adjustment date”:

Laat de datum zien wanneer de ALLUX™ de laatste keer ingesteld werd.

● “Vibration alarm demo” knop:

De ALLUX™ demonstreert alle vibratiepatronen.

● Batterij level:

Hier wordt het energieniveau van de batterij getoond.



10% of minder



10~40%




40~70%



70% of meer

8

Connection to ALLUX™ scherm

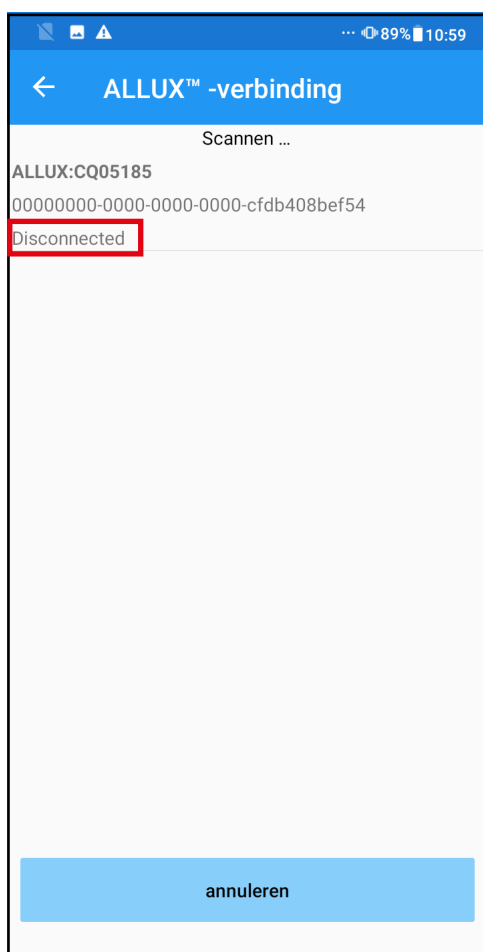

1. Met het “Connection to ALLUX™” scherm wordt automatisch gestart met het scannen naar draadloze apparatuur.
2. Alle zichtbare ALLUX™ verschijnen in de lijst. Ze worden getoond op basis van het serienummer dat bij de laadpoort op de knie staat. De derde regel laat de status van de **verbinding** zien.
 - Disconnected (niet verbonden)
 - Connecting (bezig met verbinden)
 - Connected (verbonden)
3. De ALLUX™ serienummers worden getoond. Zoek het serienummer van uw ALLUX™ uit de lijst om de verbinding tot stand te brengen.
4. Komt uw ALLUX™ niet in de lijst voor dan kan het zijn dat de knie in de slaap modus is. Activeer de knie volgens de beschrijving op pagina 7. Tik daarna op de “cancel” knop en vervolgens op de “Scan” knop om opnieuw naar draadloze apparaten te zoeken.
5. Tik op de juiste knie in de lijst. Als de draadloze verbinding succesvol tot stand is gebracht wordt automatisch het “Mode Change” scherm (pagina 12) getoond.




Als u voor het eerst verbinding maakt met ALLUX, “Connection to ALLUX™” wordt getoond. Voer het wachtwoord in dat naast de laadpoort van de ALLUX™ staat. Als u het wachtwoord 3 keer fout in toetst moet u de App opnieuw opstarten.



9


Verzamel data scherm


U kunt de status van de ALLUX™ controleren op dit scherm.

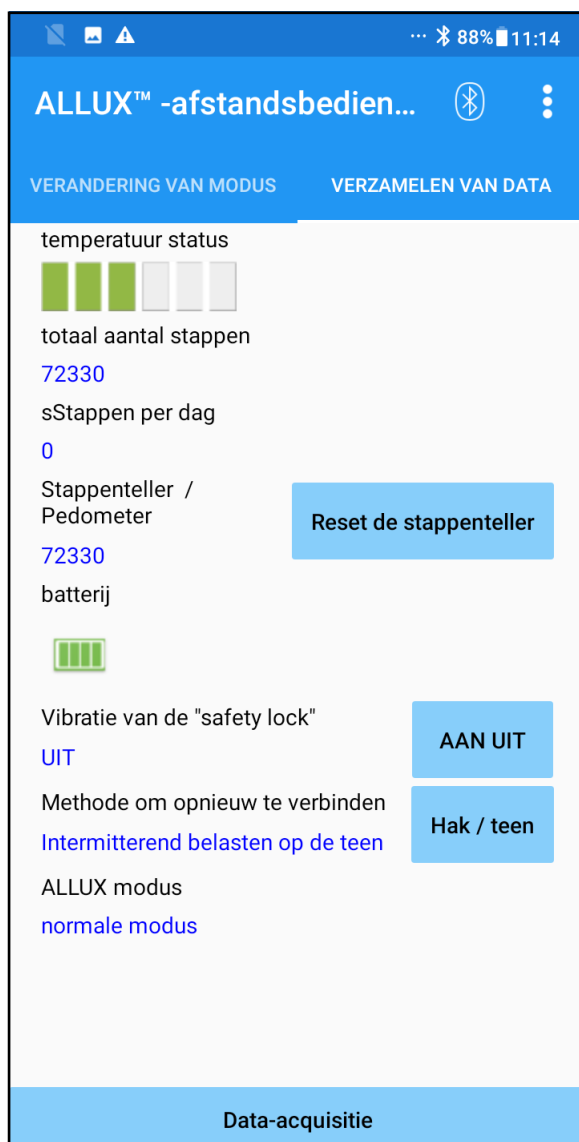

- **“Temperature state”:**
U kunt de temperatuur van de ALLUX™ controleren. Herhaaldelijke Yield bewegingen kunnen een hoge temperatuur veroorzaken. Wordt de ALLUX™ te heet dan komt de knie in de “High temperature” modus en kunt u niet meer lopen.
- **“Total Steps”:**
Laat het totaal aantal stappen zien dat u tot op dit punt gemaakt heeft.
- **“Steps of a day”:**
Laat het aantal stappen zien van die dag.
- **“Pedometer”:**
Als u op “Reset pedometer” tikt wordt het aantal stappen 0 en vervolgens ziet u het aantal stappen dat u neemt vanaf dat punt.
- **“Battery”:**
Laat het batterijniveau zien. De indicators zijn dezelfde als die van pagina 12.
- **“Vibration for safety lock”:**
Deze knop wordt gebruikt om in te stellen of de ALLUX™ wel of niet moet vibreren als de “safety lock” (zie pagina 10 van de gebruikers gids) ingeschakeld is. De fabrieksinstelling is op “ON” ingesteld.
- **“Reconnect method”:**
Deze knop wordt gebruikt om de draadloze verbinding te herstellen zonder gebruik van de lader of de power Off knop als de verbinding was verbroken omdat er op een vliegtuig gestapt werd. Zie pagina 7.
- **“ALLUX™ Mode”:**
Toont de huidige modus, zie pagina 8.
- **“Data acquisition” knop:**
Als u op deze knop tikt wordt informatie zoals het aantal stappen geüpdatet.


10 Algemeen scherm

Als u op het “General” icoon tikt  op het “Mode Change” of “Acquisition of Data” scherm ziet u het “General” scherm.

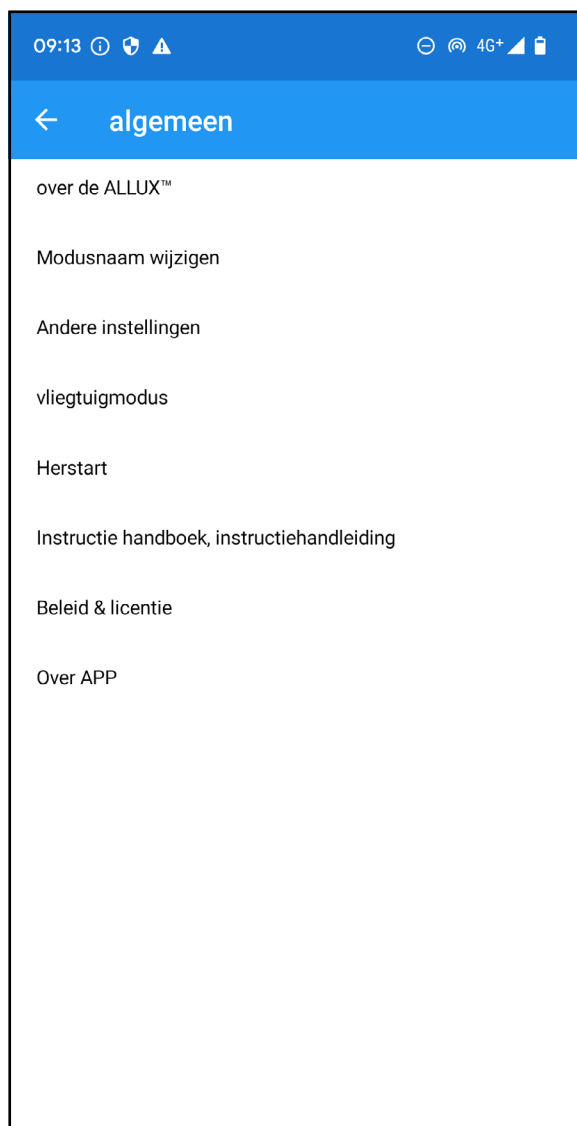

- “over de ALLUX™”:
Het over ALLUX™ scherm wordt getoond, zie pagina 17.
- “Modusnaam wijzigen”:
“Mode Name” scherm (pagina 18) wordt getoond.
- “Andere instellingen”:
Het scherm “Andere instellingen” wordt weergegeven (pagina 16).
In dit scherm kunt u instellen of er automatisch verbinding moet worden gemaakt met de eerder verbonden ALLUX™ bij het starten van de App, of er bevestiging vereist is bij het wisselen van modus, en kunt u ook de begindatum gebruik invoeren.
- “vliegtuigmodus”:
Een pop-up wordt getoond. Tik op “OK” om de draadloze verbinding met de ALLUX™ te verbreken.
- “Herstart”:
Als u op deze knop tikt wordt er een pop-up getoond. Tik op “OK” om de ALLUX™ te rebooten.
*Omdat de verbinding dan wordt verbroken moet u die opnieuw inschakelen.
(Dezelfde actie als verwijderen en aanbrengen van de power OFF kap).
- “Instructie handboek,instructiehandleiding”:
Download de instructiehandleiding via een downloadlink.
- “Beleid & licentie”:
De “Beleid & licentie” (wet en regelgeving) dialoog (pagina 10) verschijnt.
- “Over APP”:
Geeft de naam van de toepassing, het gebruik,UDI DI, enz. weer.

11 Andere instellingen scherm

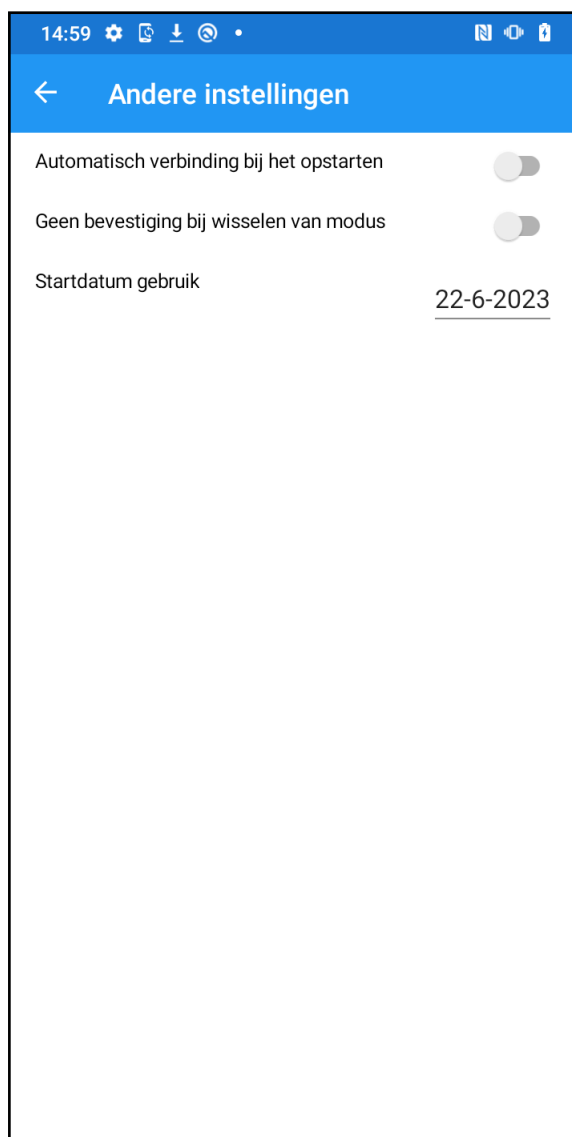

:AAN (in werking)



:UIT (NIET in werking)

- **Automatisch verbinden bij het opstarten:**
U hebt de keuze om automatisch te verbinden met de eerder verbonden ALLUX™ wanneer de App wordt gestart.
- **Geen bevestiging bij wisselen van modus:**
U hebt de keuze om een bevestigings pop-up be richten weer te geven wanneer u op een knop tikt om de modus te wijzigen.
- **Startdatum gebruik:**
U kunt de begindatum gebruik hier invoeren. De is nodig om de datum van de periodieke inspecti weer te geven.

12 over de ALLUX™ scherm



- “App Versie”:
De versie van de App wordt getoond.
- “De ALLUX™ programmatuurversie”:
De firmware versie wordt getoond.
- “serienummr”:
Het serienummer van de ALLUX™ wordt getoond.

13 “Modusnaam wijzigen” scherm

Het is toegestaan om de operationele modi van de ALLUX™, beschreven op pagina 8, vrij toe te wijzen aan de knoppen van de afstandsbediening App. Het is mogelijk om de namen van de knoppen, getoond op het “Mode Change” scherm, te wijzigen. Zorg ervoor dat u deze handelingen controleert met uw instrumentmaker en dat de namen veranderd worden passend bij de modus die aan de betreffende knop toegewezen is.

Het is handig de knoppen te vernoemen naar de instellingen. Bijvoorbeeld ‘Normal’ modus (voor een schoen met hoge hak) of ‘Flexion Angle Limited’ modus (50 graden naar de ingestelde hoek).

Als de instrumentmaker de toewijzing van de modi aanpast krijgen de modi weer de namen uit de fabrieksinstelling.

De naam van modus 1 van de ALLUX™

(1)normale modus

De naam van modus 2 van de ALLUX™

(2)normale modus

De naam van modus 3 van de ALLUX™

(3)flexiehoeklimiet modus

De naam van modus 4 van de ALLUX™

(4)vergrendeling volledige extensie mo

De naam van modus 5 van de ALLUX™

(5)zwaafase modus

1. Tik op de operationele modus waarvan u de naam wilt aanpassen.
2. Er wordt een toetsenbord getoond.
3. Voer een nieuwe naam in.
4. Tik op “√” om de invoer te bevestigen.
5. Eenmaal weer terug bij het “Mode Name” scherm is de naam toegevoegd aan de App.

14 Fout melding pop-up

Doet er zich een fout voor tijdens een handeling dan verschijnt een pop-up in beeld. Volg dan a.u.b. de instructies op de pop-up.

14.1 Opslag fout

ALLUX™ -afstandsbediening

Ga naar instellingen;
Apps;"ALLUX™afstandsbediening";
en geef toestemming voor het
gebruik van gegevens opslag.
Sluit de App af met "OK".

OK

Opslag is nodig om gebruik te kunnen maken van de afstandsbediening App. Daarom moet u de App toestemming geven om de opslagruimte van de smartphone te gebruiken. Zie de handleiding op pagina 10. Deze fout komt voor als u geen toestemming heeft gegeven aan de App op dat moment of later toestemming ingetrokken heeft. Volg de instructies uit de pop-up om gebruik van opslagruimte toe te staan.

14.2 Locatie informatie fout A

ALLUX™ -afstandsbediening

Ga naar Instellingen;
Apps;"ALLUX™afstandsbediening";
en geef toestemming voor het
gebruik van locatiegegevens.
Sluit de App af met "OK".

OK

Locatie informatie is vereist voor het gebruik van de ALLUX™ instel App. Daarvoor is het nodig dat u de App toestemming geeft om locatiegegevens te mogen gebruiken, zie pagina 10. Deze foutmelding ontstaat als u geen toestemming heeft gegeven aan het begin of wanneer u dit later heeft geweigerd. Volg de instructies uit de pop-up om het gebruik van locatiegegevens toe te staan.

14.3 Locatie informatie fout B

ALLUX™ -afstandsbediening

Ga naar instellingen;
Apps;"ALLUX™afstandsbediening";
en geef toestemming voor het
gebruik van gegevens opslag.
Sluit de App af met "OK".

OK

Deze fout komt voor als de locatie informatie functie van de telefoon zelf uit staat. Zet deze functie van de smartphone aan.

14.4 Bluetooth instelling fout

ALLUX™ -afstandsbediening

geen Bluetooth verbinding

OK

Als de Bluetooth uit staat dan kan de App niet communiceren met de ALLUX™. Zet de Bluetooth functie met de smartphone aan.

14.5 "Connection to ALLUX™" fout

ALLUX™ -afstandsbediening

Wachtwoord niet correct

OK

Deze fout komt voor als het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd in het "Connection to ALLUX™" scherm. Probeer het wachtwoord, dat naast de laadpoort achter op de ALLUX™ staat, opnieuw in te voeren.

14 Fout melding pop-up

14.6 “Password” fout (3 keer)

ALLUX™ -afstandsbediening

Wachtwoord 3 keer fout. De App sluit af met "OK".

OK

Deze fout komt voor als 3 keer het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd. De App sluit dan onmiddellijk. Als u de App opnieuw opent kunt u het wachtwoord opnieuw invoeren.

14.7 “Wireless connection” fout

ALLUX™ -afstandsbediening

Onmogelijk om te verbinden met Bluetooth

OK

Deze fout komt voor als de draadloze verbinding tussen de ALLUX™ en de Bluetooth van de smartphone is mislukt. Probeer de draadloze verbinding van de ALLUX™ aan te zetten. Zie hiervoor pagina 7.

14.8 “Wireless communication” fout

ALLUX™ -afstandsbediening

verbinding met de ALLUX™ is mislukt

OK

Deze fout komt voor als de communicatie tussen de ALLUX™ en de App op de smartphone niet werkt. Schakel de draadloze verbinding opnieuw in volgens pagina 12.

14.9 “Safe posture” fout

Neem een veilige houding aan



of



De ALLUX™ niet belasten

Geen verandering van de kniehoek

annuleren

OK

Als de gebruiker niet in een veilige houding staat kunt u de instellingen niet aanpassen. Laat de gebruiker een veilige houding aannemen, zie pagina 6.

14.10 “Hydraulic control” fout

ALLUX™ -afstandsbediening

Een waarschuwing geeft aan te stoppen met het gebruik van de ALLUX™ .
Neem contact op met de distributeur

OK

Omdat de hydraulische bediening mogelijk niet werkt, wordt de bediening van de ALLUX™ gestopt. Neem contact op met de distributeur voor een onderhoudsbeurt.

14 Fout melding pop-up

14.11 Verbindingsfout apparaten in de omgeving

ALLUX™ -afstandsbediening

Ga naar instellingen;
Apps;"ALLUX™ afstandsbediening"; en
geef toestemming voor het gebruik van
gegevens opslag.
Sluit de App af met "OK".

OK

Voor Android 12 of latere versies,
De toestemming van "Apparaten in de buurt" is vereist om
"ALLUX™ Adjustment App" te kunnen gebruiken. Daarom
moet u in de bediening op pagina 6 hebben ingesteld dat u
"Apparaten in de buurt" toestaat. Deze fout treedt op als u
dit toen niet hebt toegestaan of als u het daarna handma-
tig hebt geweigerd. Volg de instructies in deze popup om
"Apparaten in de buurt" toe te staan.

14.12 Fout bij knop Opnieuw verbinden

ALLUX™ -afstandsbediening

Geen voorafgaande verbinding met
apparaat.

OK

Deze foutmelding wordt weergegeven als u op de knop
Opnieuw verbinden tikt terwijl er nog geen verbinding met
ALLUX™ is gemaakt. Volg de gebruikelijke procedure om
verbinding te maken.

15 Problemen oplossen

Probleem	Check item	Oplossing
De afstandsbediening App kan niet worden geïnstalleerd.	Controleer of het besturingssysteem goed is.	Update het besturingssysteem naar Android 7 of later.
	Controleer of de harddisk van de smartphone de benodigde vrije ruimte heeft.	Vergroot de vrije ruimte op de hard-disk.
ALLUX™ kan niet verbonden worden.	Controleer of de ALLUX™ aanwezig is op het "Connection tot ALLUX™" scherm (pagina 13).	Selecteer de ALLUX™ op het "Connection to ALLUX™" scherm.
	Controleer of de ALLUX™ niet verbonden is met een ander apparaat.	De ALLUX™ kan niet verbonden zijn met meerdere apparaten. Als de instrumentmaker verbonden is met de knie, vraag deze de verbinding met de knie te verbreken.
	Controleer of Bluetooth aan is op de smartphone.	Zet Bluetooth aan op de smartphone.
	De opgegeven oplossingen helpen niet om verbinding te maken.	Voer de onderstaande drie stappen uit alvorens opnieuw te verbinden. (1) Start de voeding van ALLUX™ opnieuw op. (Plaats de oplader of de uitschakelkap eenmaal in hun juiste positie en verwijder deze vervolgens.) (2) Schakel Bluetooth van uw smartphone eenmaal uit en vervolgens weer in. (3) Start de afstandsbediening App opnieuw op.
De draadloze verbinding kan niet worden hersteld zelfs als de teen of hiel 4 keer kort belast wordt.	Controleer of de instellingen voor de teen en hiel correct zijn en of de belasting correct wordt aangebracht.	Controleer de setting van de App of de manier waarop er belast wordt volgens pagina 7. Kan de verbinding nog steeds niet worden hersteld, plaats en verwijder dan de lader of de power OFF kap.

15 Problemen oplossen

De ALLUX™ is niet zichtbaar op het "Connection to ALLUX™" scherm.	Controleer of de draadloze verbinding van de ALLUX™ aan staat.	Zet de draadloze verbinding aan. Zie pagina 7.
	Controleer of de batterij geladen is.	Laad de batterij van de ALLUX™ op.
	Controleer of er niet meerdere Apps tegelijk werken.	Sluit onnodige Apps.
	Controleer of de Bluetooth functie aan is op de smartphone.	Zet de Bluetooth aan.
De communicatie tussen de ALLUX™ en de App wordt gemakkelijk verbroken.	Controleer de batterijstatus van de ALLUX™ en van de smartphone.	Laad de batterij van de ALLUX™ of smartphone.
	Controleer of de ALLUX™ wordt gebruikt onder specifieke omstandigheden zoals naast een snelweg, trainrails, tv-toren, vliegveld etc.	Vermijd omstandigheden waar treinen of voertuigen regelmatig langskomen of omgevingen met meerdere draadloze verbindingen.
	Controleer of er zich zaken rond de gebruiker bevinden die radiogolven kunnen blokkeren.	Haal zaken die radiogolven blokkeren weg.



Nabtesco Corporation

Fabrikant

Nabtesco Corporation
Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku
Kobe, Japan 658-0024
Tel: +81-78-413-2724
Fax: +81-78-413-2725

<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Gemachtigde vertegenwoordiger voor EU landen

PROTEOR SAS
Geregistreerd adres:

6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollinaire
France

Tel: +33 3 80 78 42 42
Fax: +33 3 80 78 42 15
cs@proteor.com



Contact

Neem contact met ons op als u merkt dat een pagina ontbreekt of niet correct is.

Nabtesco

Nabtesco Corporation