



Application de Réglage Mode d'emploi

(Version Android)

Version Orthoprothésiste

Type de produit : NE-Z41, NE-Z41SH

Document N° : 81-SS00123 (ver.4)

Application Ver. 0.4.11 ou ultérieure

Date de publication : 2023-10-01

Langue : Français



ATTENTION

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le genou Allux™.
- Régler le genou Allux™ dans un endroit où la sécurité de l'utilisateur est assurée.
- Conserver ce manuel d'instructions pour les prochaines utilisations.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Introduction

Merci d'avoir acheté Nabtesco ALLUX™.

ALLUX™ ne peut être assemblé et ajusté que par une personne ayant participé à un séminaire de certification validé par Nabtesco et étant certifiée. Les questions concernant les utilisations courantes telles que la marche, l'entretien, les procédures de fonctionnement y compris le remplacement des pièces de rechange, le dépannage et les mises en garde sont décrites dans le guide d'utilisation qui accompagne un ALLUX™ (ci-après dénommé « Guide d'utilisation de l'ALLUX™ »).

Le présent mode d'emploi décrit comment installer et utiliser l'application de réglage (ci-après dénommée "Application") dans l'environnement Android.

Avant de régler ALLUX™, lire attentivement le Guide d'utilisation de l'ALLUX™ mentionné ci-dessus et le Mode d'emploi de l'Application de réglage, bien en comprendre le contenu et respecter strictement les précautions de sécurité indiquées dans ces documents.

- Nabtesco est le propriétaire des droits d'auteur de ce document.
- Android est une marque déposée par Google Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google est une marque déposée par Google Inc.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.
- La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant au Bluetooth SIG. Inc. et toute utilisation de ces marques par Nabtesco Corporation est soumise à une licence.
- QR code est une marque déposée de Denso Wave Incorporated.
- Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Table des matières

Introduction	1
Table des matières	2
1 Modèle concerné et système d'exploitation	3
2 Procédure d'installation et réglages de base	4
2.1 Procédure d'installation	4
2.2 Appairage Bluetooth	5
3 Réglages de base	6
4 Posture sécurisée	9
5 Mode de communication et connexion Bluetooth	10
6 Fonctionnement commun au démarrage et à chaque écran	11
7 Procédure de réglage	12
8 Réglages de base	13
9 Réglage du fuseau horaire	14
10 Calibration	15
11 Réglage du seuil de passage en phase pendulaire	16
12 Réglage de la résistance en phase d'appui	17
13 Réglage de l'amortissement de l'extension en phase d'appui	18
14 Réglage de la résistance de la flexion pendulaire	19
15 Réglage de l'impact terminal	20
16 Réglage du verrouillage de sécurité	21
17 Réglage batterie faible	22
18 Sauvegarde des données de réglage	23
19 Réglages avancés	24
20 Réglage de la télécommande	25
20.1 Modes de fonctionnement	25
20.2 Affectation des modes aux boutons de la télécommande	26
20.3 Écran de réglage	27
21 Copie des données	30
22 Données de marche	31
22.1 Écran données de marche	31
22.2 Écran Édition du diagramme	32
22.3 Création d'un rapport	33
23 Historique des réglages	34
24 Écran général	35
25 Fenêtres de message d'erreur	36
25.1 Erreur d'information sur la localisation A	36
25.2 Erreur d'information sur la localisation B	36
25.3 Erreur Bluetooth	36
25.4 Erreur de mot de passe (Écran "Entrer le mot de passe")	36
25.5 Erreur de mot de passe (Écran "Connexion à Allux™")	37
25.6 3 Erreurs de mot de passe	37
25.7 Erreur de connexion sans fil	37
25.8 Erreur de communication sans fil	37
25.9 Erreur posture sécurisée	37
25.10 Dysfonctionnement hydraulique	38
25.11 Erreur de connexion du dispositif à proximité	38
26 Dépannage	39

1 Modèle concerné et système d'exploitation

● ALLUX™ (type : NE-Z41)

* ALLUX™ (type : NE-Z4) n'est pas supporté.

Le modèle concerné peut être identifié par les protections antérieurs, plus striées et également par l'étiquette collée sur le port de chargement.



NE-Z41
(Modèle supporté)



NE-Z4
(Modèle non supporté)



NE-Z41
(Modèle supporté)



NE-Z4
(Modèle non supporté)

● Compatibilité de l'OS : Android 7 ou supérieur

Cette application est compatible avec l'OS pour Android 7 ou supérieur, mais il n'est pas garanti de fonctionner avec tous les appareils Android.

● Espace de stockage nécessaire : 500 MB ou plus sont recommandés.



Précautions concernant le Bluetooth

- Les ondes radio émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils électroniques et autres dispositifs. Éteignez les appareils Bluetooth lorsque vous vous trouvez à proximité de sièges prioritaires dans les trains, dans les zones où des gaz inflammables sont générés, comme dans les avions, à proximité des portes automatiques et des dispositifs d'alarme incendie, car cela peut provoquer un accident.
- Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de fuite d'informations lors de l'utilisation de la technologie Bluetooth.
- Ce produit ne garantit pas une connexion sans fil avec tous les appareils Bluetooth. Le périphérique Bluetooth à connecter doit être conforme à la norme Bluetooth spécifiée par le Bluetooth SIG et doit avoir obtenu au moins une certification. En outre, même si le dispositif à connecter est conforme à la norme Bluetooth, des phénomènes tels que l'incapacité de se connecter ou un affichage ou un fonctionnement différent peuvent se produire, en fonction des caractéristiques et des spécifications du dispositif.
- Ne pas démonter ou modifier ce produit car la fonctionnalité sans fil de ce produit a été certifiée conforme aux normes techniques.


2 Procédure d'installation et réglages de base

2.1 Procédure d'installation

1. Se connecter avec votre identifiant Google.

Taper le nom de l'application "ALLUX2" dans le champ de recherche.

Taper sur le bouton du clavier .

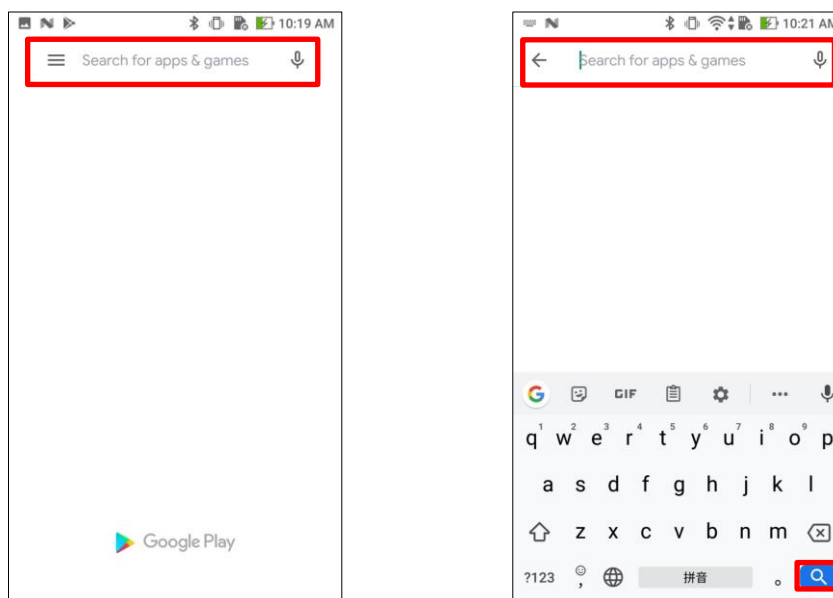

Ce QR code peut être utilisé pour l'installation.



2. Une fois les résultats de la recherche affichés, sélectionner l'application semblable à celle ci-dessous.



3. Taper sur le bouton "Installer".
4. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'application est créée sur l'écran d'accueil du smartphone.
5. Appuyer sur l'icône pour démarrer l'application.

2 Procédure d'installation et réglages de base


2.2 Appairage Bluetooth

L'appairage du Bluetooth est nécessaire avant d'utiliser l'application.


Suivre la procédure suivante pour l'appairage.

*La procédure et l'écran diffèrent en fonction de votre smartphone et de la version de l'application.
Veuillez consulter le manuel de votre smartphone.

1. Retirez le capuchon de mise hors tension de l'ALLUX™ pour permettre à l'ALLUX™ de communiquer.
* L'alimentation est activée lorsque le capuchon de mise hors tension est retiré et désactivée lorsqu'il est inséré. (Voir page 10)
2. Appuyez sur Bluetooth à partir des Paramètres ou Connexions de périphériques, etc.
Sélectionnez ALLUX : XXXXXXXX parmi les appareils disponibles et appuyez sur Autoriser ou Appairer si une autorisation est requise.

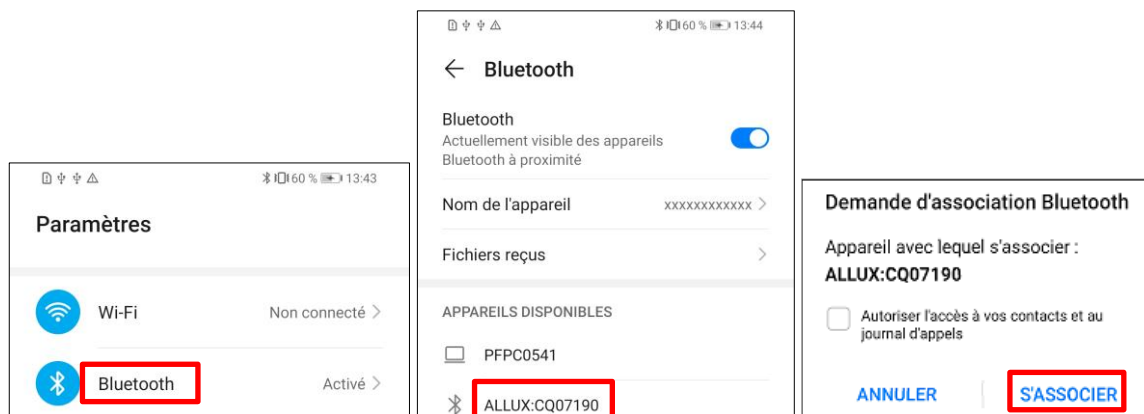

3. Si l'appairage est correct, l'affichage sera le suivant.

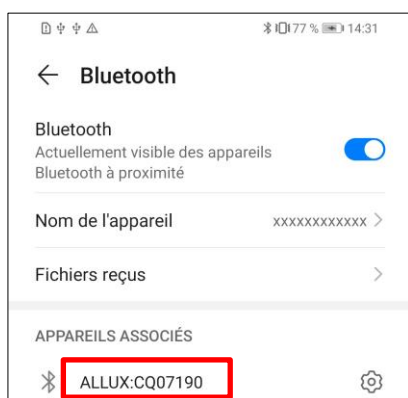


4. Insérez le capuchon de mise hors tension de l'ALLUX™ pour déconnecter l'appairage avec l'ALLUX™.

3 Réglages de base


- 1) Appuyer sur l'icône de cette application pour commencer.
- 2) Une fenêtre s'affiche et demande si l'utilisateur peut autoriser cette application à accéder à l'emplacement de l'appareil. Appuyer sur "Autoriser".

Les versions Android 12 ou ultérieures n'utilisent pas les informations de localisation. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour demander la permission concernant les appareils à proximité, veuillez l'autoriser.

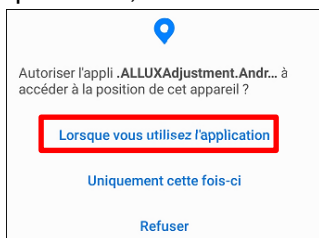


* L'écran contextuel varie en fonction du smartphone.

- 3) Après l'affichage du logo de la société, pendant une seconde, cet écran passe automatiquement à l'écran suivant.

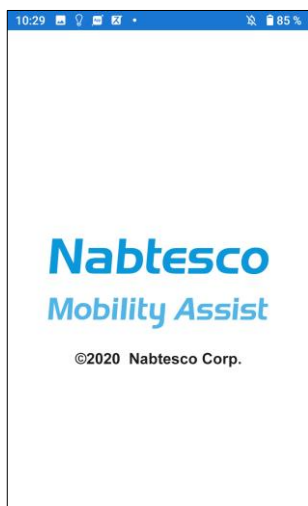


- 4) L'écran "Entrer le mot de passe" s'affiche. Saisir le mot de passe indiqué dans le manuel d'instructions. Si 3 tentatives erronées de mot de passe sont tentées, L'application doit être redémarrée.

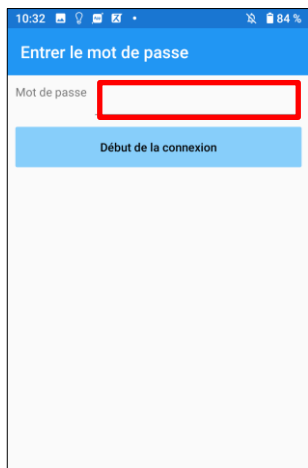

3 Réglages de base

- 5) Le formulaire "Politique & licence" s'affiche. Le lire avant d'appuyer sur le bouton "OK".

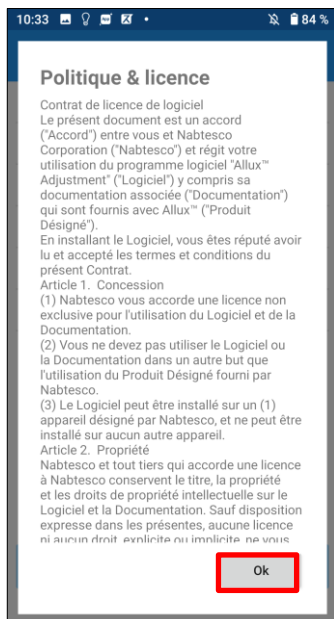

- 6) Le "profil de l'utilisateur de l'application" est affiché. Saisir chaque information et appuyer sur le bouton "OK".

Nom de la société :

Entrer le nom du Centre Orthopédique ou de la société pour laquelle l'utilisateur de l'application travaille.

Age :

Sélectionner l'âge de l'Orthoprothésiste dans la liste.

Genre :

Sélectionner le genre de l'Orthoprothésiste dans la liste.

3 Réglages de base

7) L'écran "Connexion à ALLUX™" s'affiche.



1. Sur l'écran "Connexion à ALLUX™", la recherche d'appareils sans fil démarre automatiquement.
2. Les appareils liés à ALLUX™ sont répertoriés. Les caractères indiqués varient en fonction du numéro de série de ALLUX™.

La troisième ligne indique l'état de la connexion.

- Déconnecté
- En cours de connexion
- Connecté

3. "ALLUX : Numéro de série" s'affiche. Si plusieurs appareils sont répertoriés, en fonction de votre propre numéro de série ALLUX™, sélectionner l'appareil sans fil approprié.

4. Si l'appareil sans fil pour ALLUX™ n'est pas répertorié, la connexion sans fil de ALLUX™ peut être en mode veille. Essayer d'activer la connexion sans fil en fléchissant et étendant légèrement ALLUX™ ou en appliquant du poids de l'utilisateur sur ALLUX™. Ensuite, appuyer sur le bouton "Annuler", puis sur le bouton "Rechercher" qui s'affiche à cet endroit pour rechercher à nouveau les appareils sans fil.


5. Appuyer sur le dispositif sans fil de la liste. Si la connexion sans fil est réussie, l'écran "Connexion à ALLUX™" s'affiche automatiquement.

*Pour les connexions suivantes, l'écran "Connexion à ALLUX™" passe directement à l'écran de démarrage initial s'affiche.

8) L'écran "Connexion à ALLUX™" s'affiche.

Sur la page "Connexion à ALLUX™", entrer le mot de passe qui accompagne ALLUX™. Le mot de passe est indiqué sur le port de chargement de ALLUX™.

Si le mot de passe est erroné 3 fois, cette application doit être redémarrée.

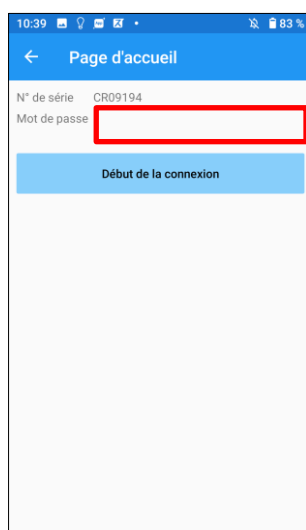

4 Posture sécurisée


Avant de changer le mode de fonctionnement de l'ALLUX™, à l'aide de l'application Remote Control, ou avant d'ajuster ou de régler l'ALLUX™, à l'aide de cette application, l'utilisateur doit adopter une posture sécurisée même si la résistance hydraulique change. Cette posture est appelée "posture sécurisée". Expliquer à l'utilisateur la posture sécurisée.




ATTENTION

- Expliquer à l'utilisateur la posture sécurisée et s'assurer qu'il la comprend.
 - Lorsque l'utilisateur prend la posture sécurisée sans appliquer le poids de son corps à l'ALLUX™, il doit tenir une main courante ou s'asseoir.
- La résistance à la flexion/extension peut changer soudainement, entraînant une chute.

[Posture sécurisée]

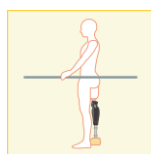

: État dans lequel ALLUX™ est immobile, bien droit et vertical et peut être soumis à une charge de poids.

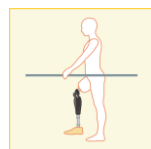


: État dans lequel l'ALLUX™ n'est pas soumis à une charge de poids et où le genou peut être fléchi et immobile.

[Demande de posture sécurisée]

Si ALLUX™ n'est pas dans une position sécurisée lors de son réglage, une fenêtre contextuelle s'affiche.

S'assurer que l'utilisateur est dans une position sécurisée, puis appuyer sur le bouton "OK" pour valider les ajustements ou les paramètres. Si le bouton "Annuler" est actionné, les réglages ou les paramètres seront annulés.

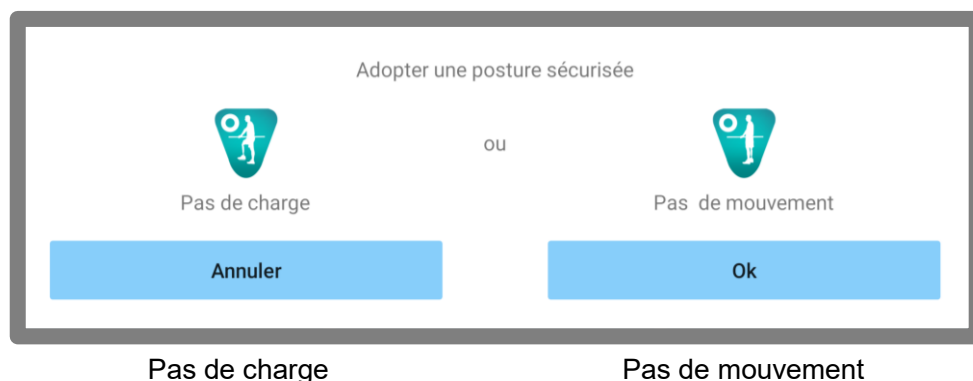

* Le texte de la fenêtre contextuelle peut être masqué sur certains appareils.

Si c'est le cas, veuillez tourner votre appareil à l'horizontale.

Si le texte est toujours visible même lorsque l'appareil est tourné à l'horizontale, veuillez vérifier le texte ci-dessus.

5 Mode de communication et connexion Bluetooth


Afin d'économiser l'énergie, ALLUX™ n'est pas toujours en mode de communication.

Pour activer le mode de communication, effectuer les opérations suivantes.

Une fois que la communication avec ALLUX™ est établie à l'aide de cette application, cet état dure jusqu'à ce que la communication soit déconnectée.

[Mode de communication activé]


1. Pendant 5 minutes après qu'ALLUX™ se soit légèrement fléchi et soit étendu.
2. Pendant 5 minutes après que l'utilisateur a appliqué son poids à ALLUX™.
3. Pendant 5 minutes après avoir débranché le chargeur ou le capuchon de mise hors tension.

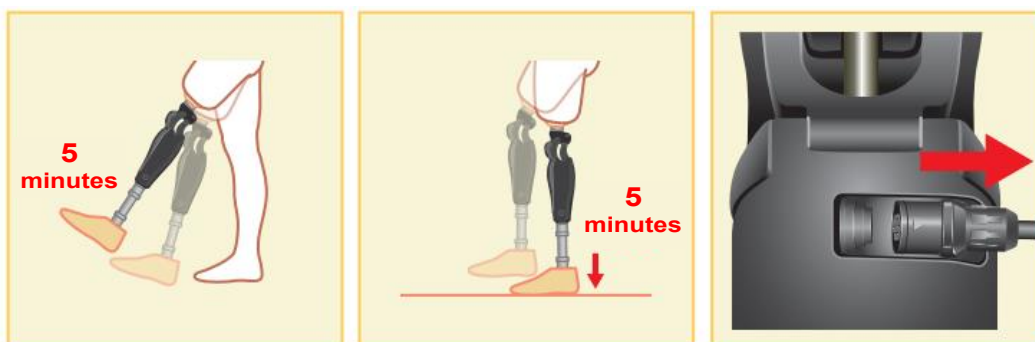

Avec l'application Remote Control, il est possible de désactiver la connexion sans fil lorsque l'utilisateur monte dans un avion, etc. Pour rétablir la connexion sans fil à partir de cet état, les actions telles que celles indiquées ci-dessous sont nécessaires.

1. Débrancher le chargeur ou le capuchon de mise hors tension.
2. Appliquer une charge sur le talon 4 fois de suite ou appliquer une charge sur la pointe 4 fois de suite.

*Possibilité de passer de l'un ou l'autre avec l'application Remote Control.

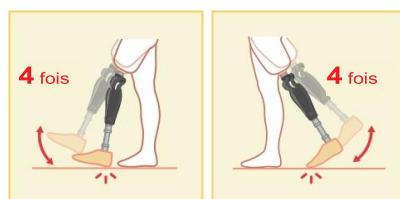

*Le simple fait de démarrer cette application ne permet pas de se connecter à ALLUX™. Toucher l'icône Bluetooth sur l'écran de démarrage initial (Reportez-vous à la page 11) pour se connecter à ALLUX™.

*Le simple fait d'appuyer sur le bouton "Accueil", etc. du smartphone ne coupe pas la communication avec l'ALLUX™ et cette application continue de fonctionner en arrière plan. En appuyant à nouveau sur l'icône de cette application, elle démarre à l'état connecté.



ATTENTION


■ Ne pas quitter cette application de force en éteignant le smartphone. Le faire, risque de mettre les valeurs des réglages dans un état pouvant entraîner une chute.

6

Fonctionnement commun au démarrage et à chaque écran

Au premier démarrage, l'écran de démarrage s'affiche après l'écran "Connexion à ALLUX™".

Lors du deuxième démarrage et des suivants, en mode normal, l'écran de démarrage initial est affiché après le logo de la société.

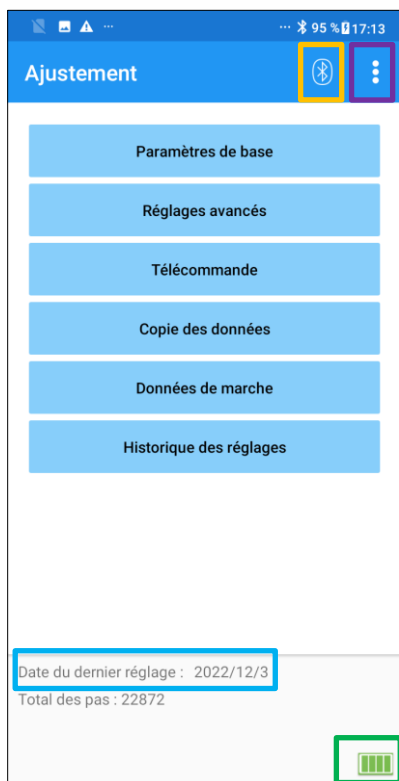

Icône Bluetooth :

Appuyer sur cette icône pour afficher l'écran "Connexion à ALLUX™". L'icône change en fonction de l'état de la connexion. Lorsqu'il est à l'état déconnecté, appuyer sur l'icône pour activer la connexion.



Déconnecté



Connecté

Icône Général :

Appuyer sur cette icône  pour afficher l'écran général.

Info attente : Pendant que cette application communique



avec ALLUX™ ou effectue d'autres traitements, une couronne d'attente s'affiche. Pendant qu'elle est affichée, toutes les opérations à l'écran sont désactivées.

Derniers réglages le :

Indique la date du dernier réglage de l'Allux™.

Niveau de charge batterie :

Indique le niveau de charge de la batterie ALLUX™.



10% ou moins



10~40%



40~70%




70% ou plus

- Réglage de base : Toucher ce bouton pour afficher l'écran " Réglages de base " (page 13).
- Réglages avancés : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Réglages avancés" (page 24).
- Télécommande : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Télécommande" (page 25).
- Copie des données : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Copie des données" (page 30).
- Données de marche : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Données de marche" (page 31).
- Historique des réglages : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Historique des réglages" (page 34).

7 Procédure de réglage


Les réglages sont effectués selon les étapes suivantes.

Écran de configuration Initial

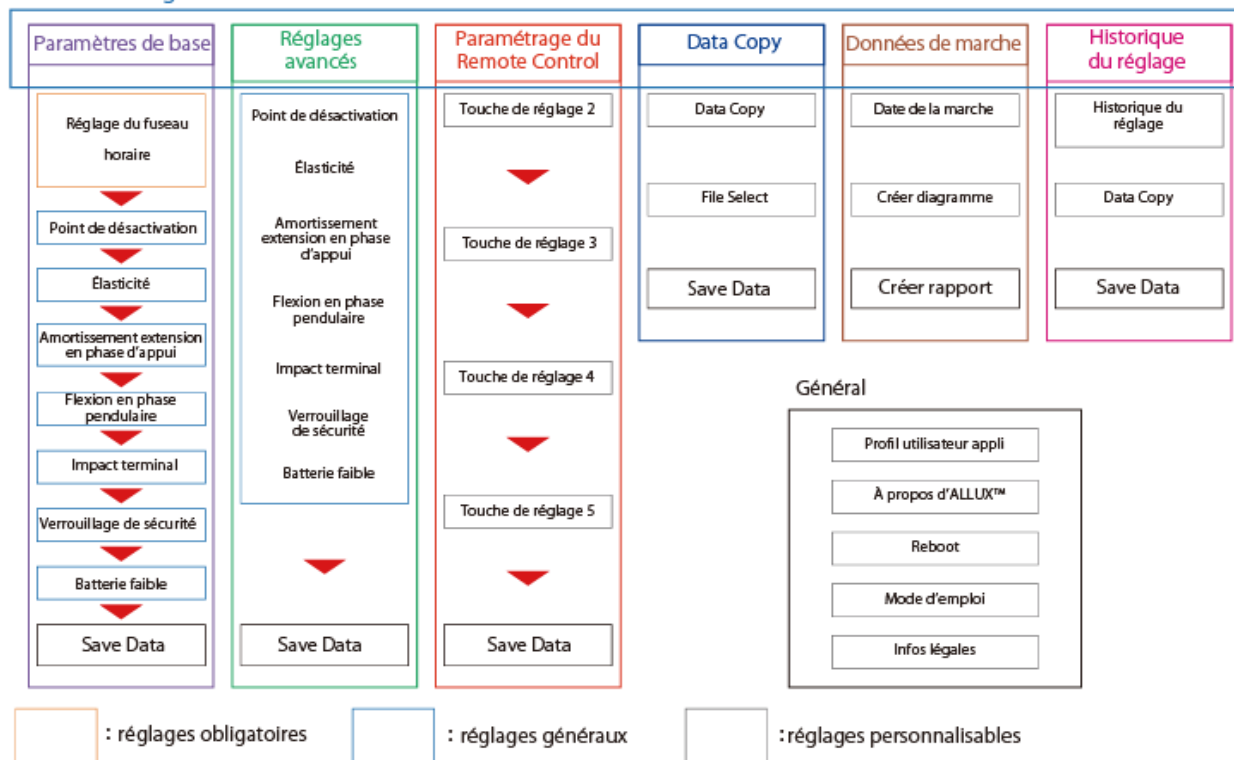

8 Réglages de base

* Lorsque cet écran est affiché, les éléments de réglage dans la partie inférieure peuvent ne pas être affichés. Faire glisser l'écran vers le haut pour afficher ces éléments de réglage.

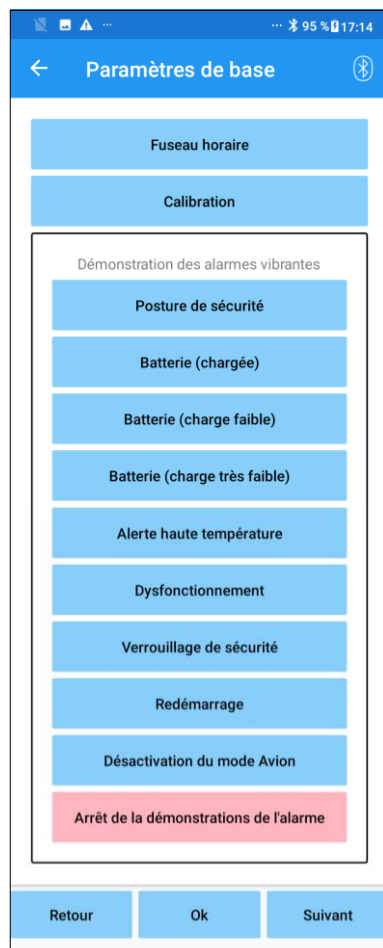

- Fuseau horaire : Toucher ce bouton pour afficher l'écran "Fuseau horaire" (page 19).

- Calibration : Toucher ce bouton pour afficher la fenêtre pour la calibration (page 15).

- Démonstration des alarmes vibrantes : ALLUX™ vibre pour informer et avertir l'utilisateur. En appuyant sur ces boutons, l'utilisateur peut reconnaître les différentes vibrations. Faire en sorte que l'utilisateur les comprenne.

En appuyant sur chaque bouton, une fenêtre contextuelle du modèle de l'alarme vibrante correspondant, s'affiche. Toucher le bouton "OK" pour faire vibrer ALLUX™.

- Posture sécurisée : ALLUX™ vibre lorsque l'utilisateur doit prendre une posture sécurisée.

- Batterie (chargée) : ALLUX™ vibre lorsque le niveau de batterie restant est de 3 heures ou plus.

- Batterie (charge faible) : ALLUX™ vibre lorsque le niveau de batterie restant est inférieur à 3 heures.

- Batterie (charge très faible) : ALLUX™ vibre lorsque le niveau de batterie restant est insuffisant et que la marche normale est impossible.

- Alerte température élevée : ALLUX™ vibre lorsque la température interne est trop élevée.

- Dysfonctionnement : ALLUX™ vibre lorsqu'il a besoin d'être réparée.

- Verrouillage de sécurité : ALLUX™ vibre lorsque le verrou de sécurité est activé.

- Redémarrage : ALLUX™ vibre lorsqu'il redémarre.

- Sortie du mode avion : ALLUX™ vibre lorsque le mode avion est désactivé.(page 10)

- Arrêt de la démonstration de l'alarme : ALLUX™ arrête les vibrations.



■ S'assurer que l'utilisateur reconnaît les différentes alarmes vibrantes et les comprend. Si l'utilisateur utilise ALLUX™ sans comprendre la signification des vibrations, il peut ne pas être en position de sécurité face à un avertissement de panne ou de température élevée au risque de tomber si ALLUX™ se verrouille lorsqu'il essaie de marcher.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de démarrage.

- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.


- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage du "seuil de passage en phase pendulaire".

9 Réglage du fuseau horaire

ALLUX™ contient une horloge interne utilisée pour enregistrer le nombre de pas quotidiens. L'heure est réglée par défaut sur le Japon (GMT+09:00). Régler le fuseau horaire suivant votre localisation géographique.

1. Appuyer sur le **sélecteur de fuseau horaire** pour afficher la liste des fuseaux horaires.
2. Sélectionner le fuseau horaire du lieu où se trouve l'utilisateur.
3. Appuyer sur le bouton "Paramètres" pour envoyer le fuseau horaire à ALLUX™.

* Une fois sélectionné, il n'est pas nécessaire de répéter cette étape sauf s'il y a une réinstallation permanente dans un autre fuseau horaire. Il est également inutile de le sélectionner à nouveau, lorsque l'utilisateur se rend à l'étranger pour une courte période de temps. Noter cependant que le fuseau horaire sélectionné ici devient le fuseau horaire standard pour le changement de jour.

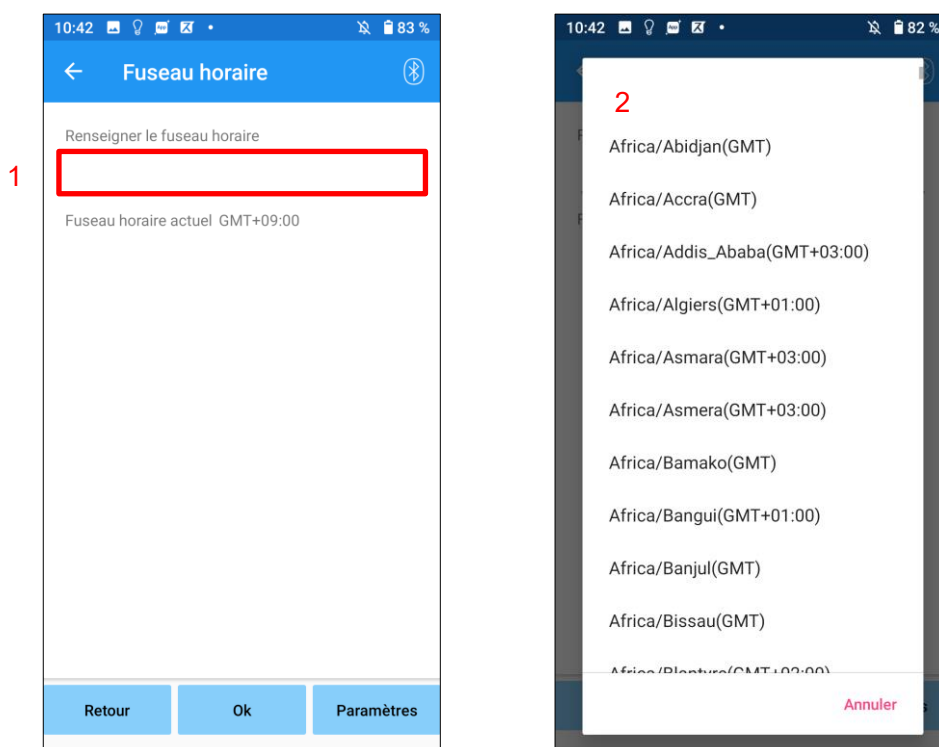

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de démarrage.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Réglages : Ce bouton permet l'envoi du fuseau horaire à ALLUX™.


10 Calibration

Lorsqu'ALLUX™ est utilisé pour la première fois, qu'il est réaligné ou que le pied est remplacé, ALLUX™ devra être calibré.



ATTENTION

- Calibrer ALLUX™ dans une position adéquate. S'il est calibré sous charge, l'utilisateur ne pourra pas marcher normalement et pourra tomber, ce qui peut entraîner une blessure.
- Lors de la calibration, veiller à la sécurité de l'utilisateur. Si l'utilisateur se tient sur un pied dans un état instable, il peut tomber.
- Calibrer avec les composants définitifs raccordés et complètement serrés. Si des ajustements d'alignement sont effectués, ALLUX™ peut ne pas fonctionner correctement.
- Appliquer le réglage du seuil de passage en phase pendulaire (Voir le chapitre 11) après la calibration. Le réglage de la valeur du seuil avant la calibration peut rendre la marche normale impossible ou dangereuse.

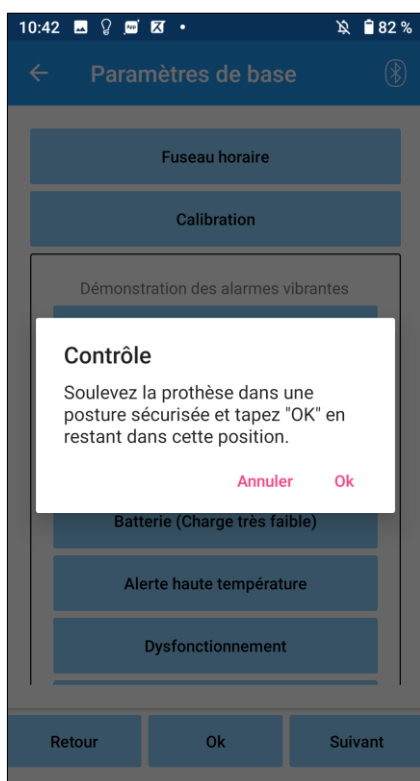

1. Appuyer sur le bouton "Calibration" de l'écran "Paramètres de base", une fenêtre contextuelle s'affiche.
2. Demander à l'utilisateur de lever son pied pour que l'ALLUX™ reste libre de toute charge.
* Faire en sorte que l'utilisateur se tienne dans des barres parallèles ou s'assiede sur une chaise pour assurer sa sécurité.
3. Appuyer sur le bouton "OK" de la fenêtre.
4. La fenêtre se ferme et l'écran "Paramètres de base" s'affiche.

11 Réglage du seuil de passage en phase pendulaire

Réglage usine par défaut = 80


Régler le moment de décolllement des orteils vers la phase pendulaire. Vérifier l'état de la marche dans les barres parallèles où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée.



ATTENTION

- Vérifier les conditions de marche dans un endroit, par exemple dans des barres parallèles, où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée.
- Si ALLUX™ ne peut pas passer en douceur à la phase de balancement, l'utilisateur risque de tomber.

1. Faire marcher l'utilisateur entre les barres parallèles et placer le pied prothétique derrière lui et mettre en charge la prothèse en simulant l'appui terminal.
2. La quantité de charge aux orteils s'affichera sur la barre d'affichage.
3. Régler la valeur de réglage sur la valeur de sortie maximale du capteur (elle est indiquée par une ligne rouge).
4. Tester en demandant à l'utilisateur de marcher lentement.
 - *Si ALLUX™ se libère à chaque pas, augmenter graduellement jusqu'à ce qu'il se bloque, puis réduire d'environ cinq points.
 - *Si ALLUX™ ne se libère pas à chaque pas, réduire la valeur jusqu'à ce qu'il se libère à chaque pas en marchant lentement.
5. Une fois le réglage effectué, appuyer sur le bouton "Suivant" pour passer à l'écran de réglage de la " Résistance en phase d'appui ".

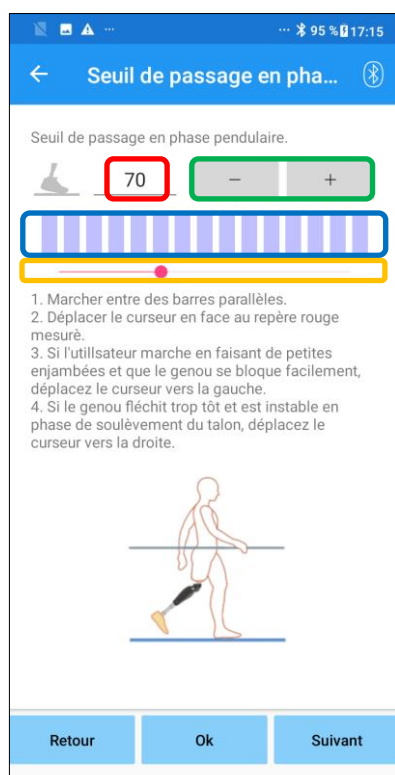

Réglage valeur d'entrée (minimum : 0, maximum : 200) :

La valeur du seuil de passage en phase pendulaire est affichée et peut être saisie en chiffres.

Boutons - + de réglage :

Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'ajustement par incréments de 1.

Barre de visualisation du réglage :

Il indique la mesure du capteur pendant la marche.

Curseur de réglage de la valeur :

Ce curseur est utilisé pour régler la valeur du seuil.

* Les réglages peuvent être effectués par l'une des trois options : saisie directe du nombre, boutons + ou -, ou cliquer et glisser.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de démarrage.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de la " Résistance en phase d'appui ".

12 Réglage de la résistance en phase d'appui

Réglage usine par défaut = 20 (Valeur standard : 15 ~ 25)

Ajuster la résistance de manière à ce que l'utilisateur se sente équilibré lorsqu'il s'assoit sur une chaise ou lorsqu'il descend des escaliers et des pentes. Augmenter ou réduire graduellement la valeur selon les préférences de l'utilisateur et toujours s'assurer qu'il se tient debout en toute sécurité avant de faire les réglages. Il est recommandé d'ajuster cette résistance à une température normale (+20°C/+68°F).



AVERTISSEMENT

- Si l'ALLUX™ est utilisé à une basse température (0°C/+32°F ou moins), la résistance de la flexion peut être augmentée. La vérifier avant de commencer les réglages, car comme ALLUX™ fléchit difficilement, l'utilisateur risque de tomber dans les escaliers ou dans une pente.




ATTENTION

- Ne pas toucher les parties mobiles de l'ALLUX™ en vous levant pour éviter tout risque de pincement.
- La résistance de la flexion, pour la descente d'escaliers ou de pentes, doit être ajustée après avoir effectué tous les autres réglages. Si les réglages ne sont pas suffisamment bien effectués, l'utilisateur peut tomber dans les escaliers ou dans une pente.

1. Ajuster la valeur de la résistance de manière à ce que le poids de l'utilisateur soit réparti sur les deux pieds au moment où l'utilisateur s'assoit sur une chaise.

*Si la résistance est trop faible, augmenter cette valeur.

*Si la résistance est trop élevée, diminuer cette valeur.

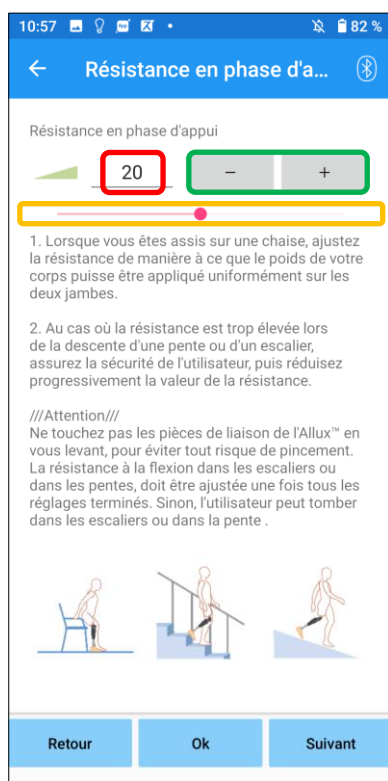

Réglage valeur d'entrée (minimum : 0, maximum : 40) :

La valeur de la résistance en phase d'appui est affichée et peut être saisie en chiffres.

Boutons - + de réglage :

Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'ajustement par incréments de 1.

Curseur de réglage de la valeur :

Ce curseur est utilisé pour régler la valeur de la résistance.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage du "Seuil de passage en phase pendulaire".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de l'"Amortissement de l'extension en phase d'appui".

13 Réglage de l'amortissement de l'extension en phase d'appui

Réglage usine par défaut = 5 (Valeur standard : 0 ~ 25)

Normalement, l'amortissement de l'extension en phase d'appui est réglé sur 5, sans résistance. Ajuster la résistance uniquement lorsque l'utilisateur marche avec la résistance en phase d'appui. Il est recommandé d'ajuster cette résistance à une température normale (+20°C/+68°F).



AVERTISSEMENT

- Quand ALLUX™ est utilisé à une basse température (0°C/+32°F ou moins), l'amortissement de l'extension en phase d'appui peut être augmenté. Vérifier la résistance de l'extension avant de commencer l'utilisation à une basse température. Comme ALLUX™ s'étend difficilement, l'utilisateur risque de trébucher et de tomber lors de l'initiation de la phase pendulaire.




ATTENTION

- Vérifier les conditions de marche dans un endroit, par exemple dans des barres parallèles, où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée.
- L'utilisateur doit marcher de sorte que le genou passe en phase pendulaire après son extension. Comme ALLUX™ ne peut pas passer en phase pendulaire en étant fléchi, l'utilisateur peut trébucher puis tomber.

1. Régler l'amortissement de l'extension en phase d'appui.

*Si la résistance est faible, augmenter la valeur de l'amortissement.

*Si la résistance est élevée, diminuer la valeur de l'amortissement.

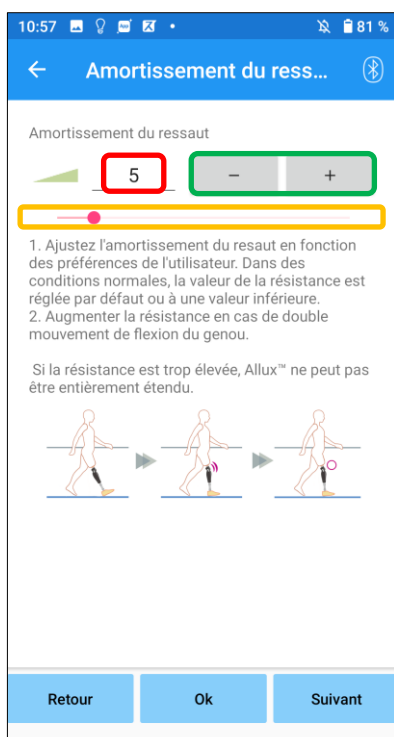

Réglage valeur d'entrée (minimum : 0, maximum : 40) :

La valeur de l'amortissement de l'extension en phase d'appui est affichée et peut être saisie en chiffres.

Boutons - + de réglage :

Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'ajustement par incréments de 1.

Curseur de réglage de la valeur :

Ce curseur est utilisé pour régler la valeur de l'amortissement.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage du "Résistance en phase d'appui".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de la "Résistance de la flexion pendulaire".

14 Réglage de la résistance de la flexion pendulaire

Réglage usine par défaut = 20 (Valeur standard : 15 ~ 35)


Ajuster la résistance de la flexion pendant la phase pendulaire. Une fois qu'elle est ajustée, basée sur une vitesse de marche normale, l'articulation du genou ajustera automatiquement la résistance de la flexion à la vitesse de marche.



- Evaluer la fonction de marche dans un endroit, par exemple entre des barres parallèles, où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée. Si ALLUX™ ne peut pas passer en phase pendulaire en douceur, l'utilisateur peut tomber.

* Si le pied frotte le sol parce qu'ALLUX™ n'a pas déclenché la phase pendulaire, réajuster le réglage du seuil de passage en phase pendulaire comme indiqué dans "réglage du seuil de passage en phase pendulaire" (page 16).

1. Ajuster la résistance de la flexion pendulaire sur une vitesse de marche normale.
 - * Si le talon remonte trop haut, la résistance est faible, augmenter la valeur de réglage.
 - * Si les orteils frottent le sol, la résistance est élevée, diminuer la valeur de réglage.

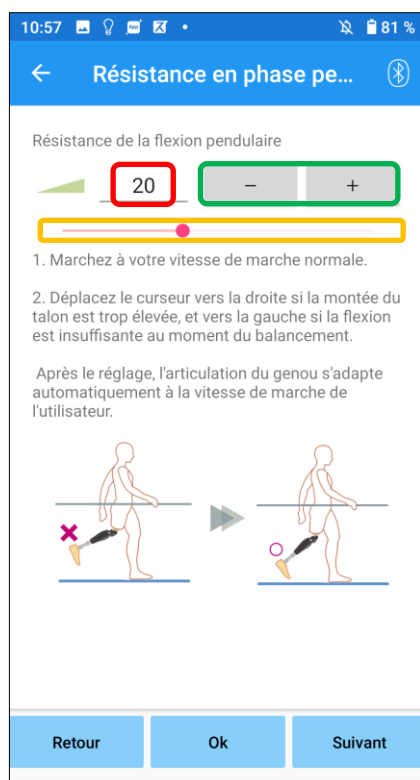

Réglage valeur d'entrée (minimum : 1, maximum : 50) :

La valeur de la résistance de la flexion pendulaire est affichée et peut être saisie en chiffres.

Boutons - + de réglage :

Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'ajustement par incréments de 1.

Curseur de réglage de la valeur :

Ce curseur est utilisé pour régler la valeur de la résistance.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage du "Amortissement de l'extension en phase d'appui".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de la "Impact terminal".

15 Réglage de l'impact terminal

Réglage usine par défaut = 5 (Valeur standard : 0 ~ 25)


Ajuster l'impact terminal pendant la phase pendulaire. En cas de choc terminal, augmenter progressivement la résistance. Une fois l'impact ajusté sur une vitesse de marche normale, ALLUX™ ajustera automatiquement l'impact en fonction de la vitesse de marche.



- Evaluer la fonction de marche dans un endroit, par exemple entre des barres parallèles, où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée.
- Si la résistance est trop importante, ALLUX™ ne peut pas s'étendre complètement, et l'utilisateur risque de tomber.

1. Ajuster l'impact terminal sur une vitesse de marche normale.

- * Si l'impact terminal est élevé, augmenter la valeur de réglage.
- * Si ALLUX™ ne s'étend pas complètement, diminuer la valeur de réglage.

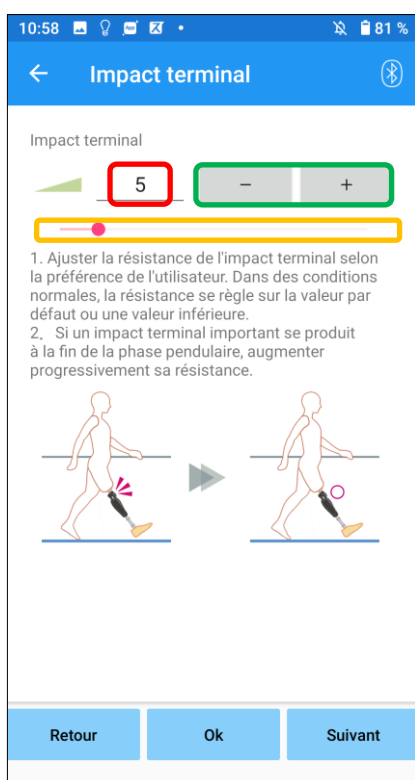

Réglage valeur d'entrée (minimum : 0, maximum : 40) :

La valeur de l'impact terminal est affichée et peut être saisie en chiffres.

Boutons - + de réglage :

Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'ajustement par incréments de 1.

Curseur de réglage de la valeur :


Ce curseur est utilisé pour régler la valeur de l'impact terminal.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage de la "résistance de la flexion pendulaire".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de la "Verrouillage de sécurité".

16 Réglage du verrouillage de sécurité

Réglage usine par défaut = Invalide

Le verrouillage de sécurité est conçu pour bloquer ALLUX™ en le chargeant dans un angle dans lequel l'utilisateur s'arrête pendant un certain temps. Pour utiliser le verrouillage de sécurité, régler le curseur pour définir le temps nécessaire pour l'activer.

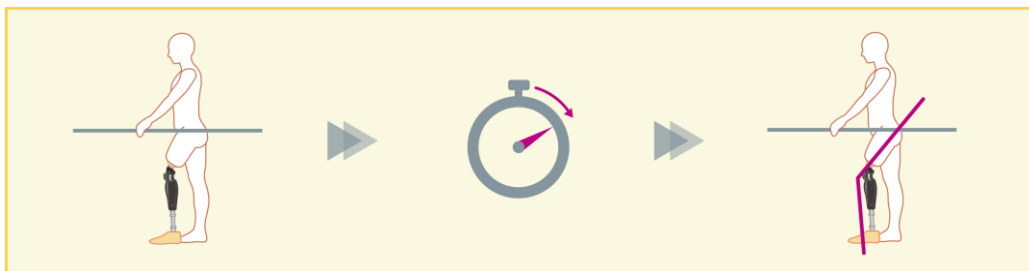

AVERTISSEMENT


■ Vérifier les conditions de marche dans un endroit, par exemple entre des barres parallèles, où la sécurité de l'utilisateur peut être assurée.

Si l'utilisateur n'est pas familiarisé avec le verrou de sécurité, il pourrait déverrouiller ALLUX™ par inadvertance et ALLUX™ pourrait fléchir.

* Avant de mettre en place le verrouillage de sécurité, s'assurer que l'utilisateur comprend la fonction et qu'il est suffisamment formé.

1. Ajuster la sensibilité du verrouillage de sécurité. Si l'option Quick est sélectionnée, le genou se bloquera même en cas de suspension de courte durée.

* Si l'option "Désactivé" est sélectionnée, le verrouillage de sécurité ne fonctionnera pas.

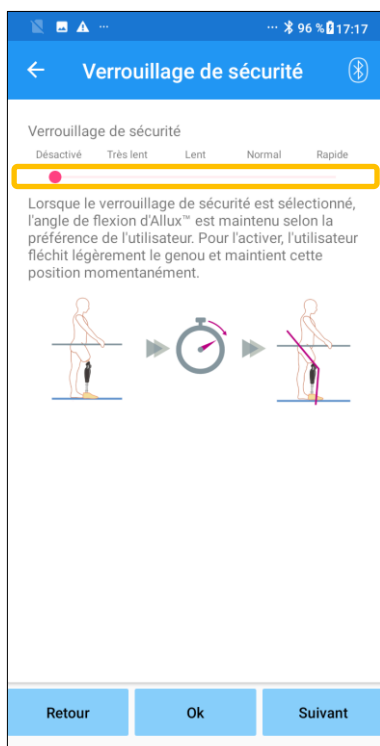

Curseur de réglage de la valeur :

Ce curseur est utilisé pour définir le temps nécessaire approximatif pour activer le verrouillage de sécurité.

- Très lent : Environ 3 secondes
- Lent : Environ 2 secondes
- Normal : Environ 1,5 seconde
- Rapide : Environ 1 seconde
- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage de l'"impact terminal".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de la "Batterie faible".

17 Réglage batterie faible


Réglage usine par défaut = Haute résistance (résistance en phase d'appui à 30)

Ajuster les paramètres lorsque la pile est faible.



- Si l'option "Libre" est sélectionnée, assurez-vous que l'utilisateur peut marcher dans cet état.
- L'utilisateur peut tester cette option en sélectionnant ce mode sur l'écran de l'application Remote Control (contrôle à distance).
- L'utilisateur pourrait ne pas être capable de se déplacer vers un endroit sûr en raison de la batterie faible.

1. Sélectionner le type de résistance à la flexion lorsque la batterie est presque épuisée.

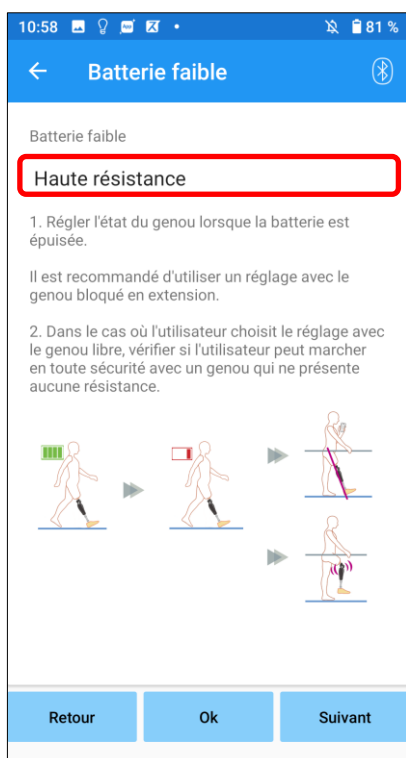

Sélecteur du réglage de la batterie faible :

Appuyer sur ce sélecteur pour définir la résistance du genou lorsque la batterie est trop faible, parmi les options suivantes.

- Haute résistance (recommandé) :

La résistance à la flexion est équivalente à la valeur en phase d'appui à 30.

- Libre :

Il n'y a aucune résistance en phase d'appui.

* Quel que soit l'option choisie, la résistance à l'extension est libre.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de réglage du "Verrouillage de sécurité".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage du "Verrouillage de sécurité".

18 Sauvegarde des données de réglage

Les données d'ajustement ou de réglage sont automatiquement stockées sur ALLUX™.

Ces données peuvent être enregistrées dans un dossier sur le smartphone.

Les données sauvegardées peuvent être utilisées en les copiant (page 30).

Même si les données de réglage ne sont pas sauvegardées, les données de réglage des 5 derniers jours sont automatiquement enregistrées dans l'historique des réglages (Voir page 34).

1. Appuyer sur le bouton "Enregistrer les données".
2. Pendant la sauvegarde, un signal d'attente est affiché et aucune autre opération n'est possible.
3. Une fois l'enregistrement terminé, une fenêtre s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton "OK" pour revenir à l'écran "Enregistrer les données".



● Bouton Sauvegarde des données :

Toucher ce bouton pour sauvegarder les données.

Les données sauvegardées peuvent être utilisées à partir de l'écran "Copie de données" (voir page 30).

*Il sera enregistré dans le dossier de rapport dans le téléphone.

● Bouton fermer :

Toucher ce bouton pour mettre fin à la connexion avec ALLUX™ et quitter cette application.

● Retour : Toucher ce bouton pour revenir à l'écran précédent.

● OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.


*Selon la version d'Android, il se peut que vous ne puissiez pas voir les données stockées sur votre smartphone. Dans ce cas, vous devrez vous connecter à un PC.

Les données sont stockées à l'emplacement suivant:

Emplacement du fichier des réglages

(PC ≠ Chaque smartphone) ≠ Mémoire de stockage interne

≠ Android ≠ data ≠ com.companynome.ALLUXAdjustment ≠ files ≠ data

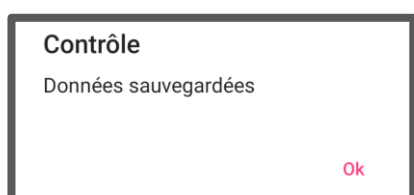


19 Réglages avancés

Les réglages précédemment décrits dans les chapitres 10 à 17 peuvent être ajustés collectivement sur cet écran.

Nous vous recommandons d'effectuer les premiers réglages sur l'écran "Réglages de base", et de procéder à des réajustements sur l'écran " Réglages avancés" à partir de la deuxième fois. Se reporter à chaque écran décrit dans les chapitres 10 à 17 pour les explications, les avertissements et les mises en garde de chaque réglage.

*Lorsque cet écran est affiché, les éléments de réglage de la partie inférieure peuvent ne pas être visibles. Faites glisser l'écran vers le haut pour afficher ces éléments de réglage.

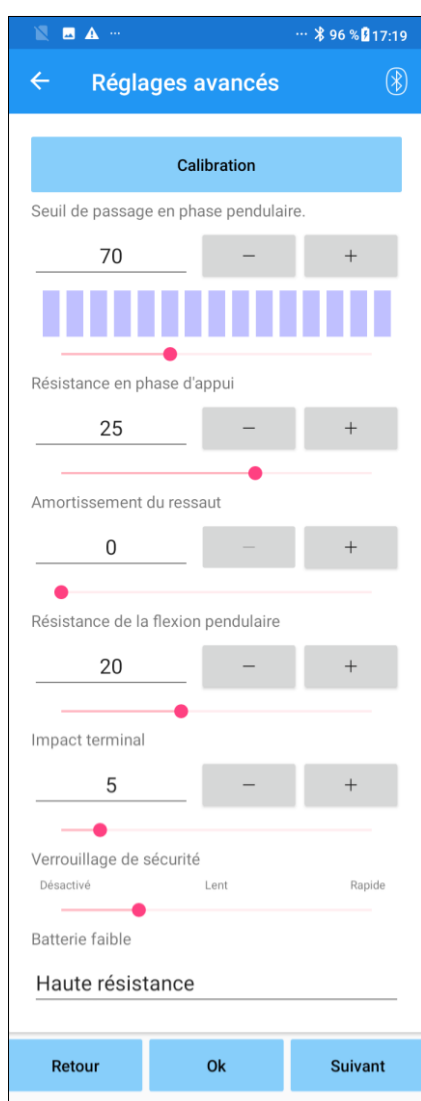

- Calibration : (page 15)
Réalisation de la calibration.
- Seuil de passage en phase pendulaire : (page 16)
Modification de la valeur du seuil de passage en phase pendulaire.
- Résistance en phase d'appui : (page 17)
Modification de la valeur de la résistance en phase d'appui.
- Amortissement de l'extension en phase d'appui : (page 18)
Modification de la valeur de l'amortissement de l'extension en phase d'appui.
- Résistance de la flexion pendulaire : (page 19)
Modification de la valeur de la résistance de la flexion pendulaire.
- Impact terminal : (page 20)
Modification de la valeur de l'impact terminal.
- Verrouillage de sécurité : (page 21)
Sélection de la sensibilité du verrouillage de sécurité.
- Batterie faible : (page 22)
Sélection du type de résistance lorsque la batterie est trop faible.
- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de démarrage.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de "Sauvegarde des données".

20 Réglage de la télécommande

20.1 Modes de fonctionnement


ALLUX™ dispose des cinq modes de fonctionnement suivants.

[Mode normal]

Le mode normal est ajusté pour une marche normale. En capturant les différentes situations de marche, les mouvements et les situations, ALLUX™ ajuste automatiquement la flexion et l'extension.


[Mode Angle de flexion limité]

En mode Angle de flexion limité, la flexion est limitée à un angle défini tandis que la résistance à l'extension reste libre.

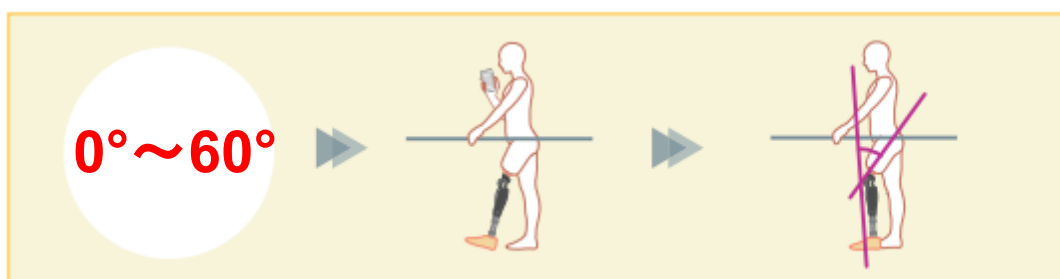

[Mode Limitation sélective de l'angle de flexion]

ALLUX™ enregistre l'angle de flexion au moment où le mode Limitation sélective de l'angle de flexion est activé. La flexion est limitée à cet angle tandis que la résistance à l'extension reste libre.

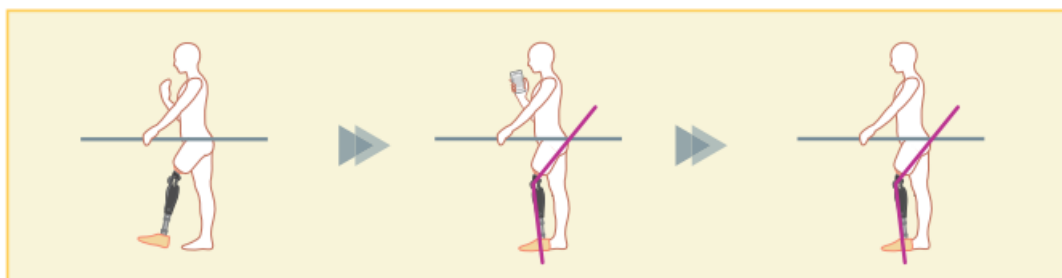


MISE EN GARDE

- Lorsque le mode angle de flexion limité ou le mode Limitation sélective de l'angle de flexion est utilisé, il est très important ne pas appliquer une force excessive à l'ALLUX™ lors du contact avec la butée. Si un impact excessif est appliqué à ALLUX™, celui-ci peut être endommagé.

20 Réglage de la télécommande


[Mode verrouillage en extension complète]

ALLUX™ est bloqué en extension complète. (Lorsqu'il est activé avec une flexion du genou, il permettra l'extension jusqu'à ce qu'ALLUX™ atteigne la butée d'extension). Ceci peut être utilisé comme une fonction "Position assise vers debout".

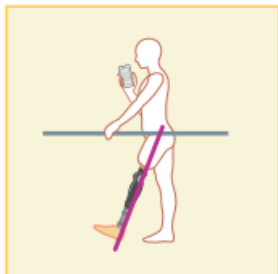

[Mode Genou libre]

En mode "genou libre", ALLUX™ est complètement libre (sans aucune résistance).

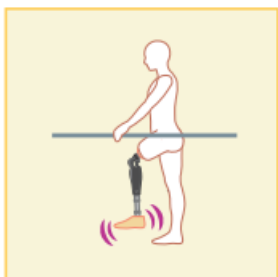

20.2 Affectation des modes aux boutons de la télécommande

Les modes de fonctionnement ci-dessus peuvent être assignés aux boutons de la télécommande. Le mode normal est toujours assigné au bouton 1 de la télécommande, et les paramètres de ce mode sont ceux ajustés sur l'écran "Réglage de base" ou sur l'écran "Réglages avancés".

Vous pouvez attribuer librement les cinq modes de fonctionnement ci-dessus aux boutons 2 à 5 de la télécommande.


Configuration par défaut de la télécommande :

- Bouton 2 : mode Angle de flexion limité
- Bouton 3 : Limitation sélective de l'angle de flexion
- Bouton 4 : verrouillage en extension complète
- Bouton 5 : Genou libre

20 Réglage de la télécommande

20.3 Écran de réglage

*Lorsque cet écran est affiché, les éléments de réglage de la partie inférieure peuvent ne pas être visibles. Faites glisser l'écran vers le haut pour afficher ces éléments de réglage.

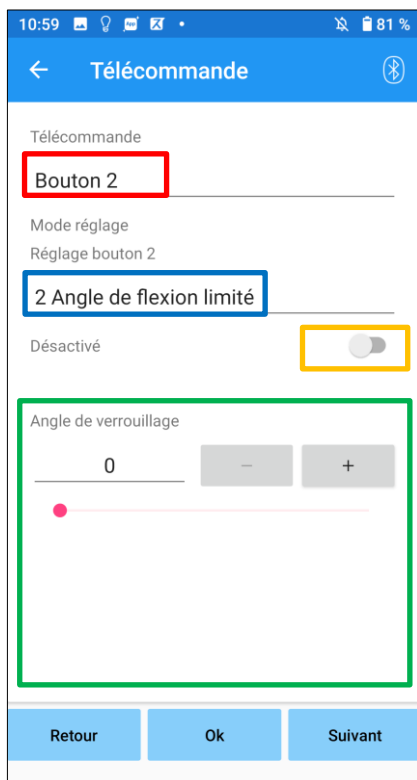

Sélecteur de réglage de la télécommande :

Touchez ce sélecteur pour changer le bouton à régler.
Sélectionnez un bouton dans la liste suivante.

- Bouton 2
- Bouton 3
- Bouton 4
- Bouton 5

Sélecteur de mode :

Vous pouvez sélectionner le mode à attribuer au bouton sélectionné, dans la liste suivante.

- Mode Normal
- Mode Angle de flexion limité
- Mode Limitation sélective de l'angle de flexion
- Mode verrouillage en extension complète
- Mode Genou libre

Interrupteur désactivé :

Lorsque cet interrupteur est activé, aucun bouton sélectionné ne fonctionne sur l'application de la télécommande.

De plus, les champs de réglage de chaque mode sont cachés.

Champ d'ajustement de chaque mode :


En mode Normal et en mode Angle de flexion limité, le champ de réglage est affiché.

En mode Limitation sélective de l'angle de flexion, en mode verrouillage en extension complète et en mode Genou libre, le champ de réglage n'est pas affiché.

- Retour : Ce bouton retourne vers l'écran de démarrage.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- Suivant : Ce bouton affiche l'écran de réglage de "Sauvegarde des données".

20 Réglage de la télécommande

[Champ de réglage du mode Normal]

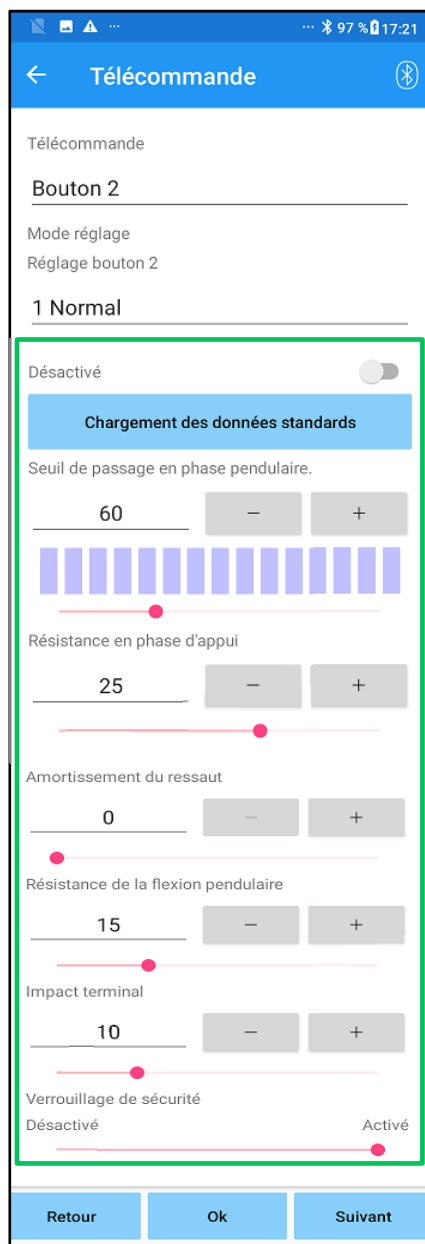

- **Bouton Chargement des données :**
Les réglages définis avec le bouton 1 (écran "Réglage de base" ou écran "Réglages avancés") peuvent être chargés en appuyant sur ce bouton.
- **Seuil de passage en phase pendulaire :**
Permet de changer la valeur du seuil de passage en phase pendulaire.
- **Résistance en phase d'appui :**
Permet de changer la valeur de la résistance en phase d'appui.
- **Amortissement de l'extension en phase d'appui :**
Permet de changer la valeur de l'amortissement de l'extension en phase d'appui.
- **Résistance de la flexion pendulaire :**
Permet de changer la valeur de la résistance de la flexion pendulaire.
- **Impact terminal :**
Permet de changer la valeur de l'impact terminal.
- **Verrouillage de sécurité :**
Permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de sécurité. Pour la sensibilité du verrouillage de sécurité (temps d'activation du verrouillage de sécurité), la valeur réglée sur l'écran "Réglage de base" ou sur l'écran "Réglages avancés" est appliquée.

* Se référer à chaque écran décrit dans les chapitres 11 à 16 pour les explications, les avertissements et les mises en garde de chaque élément.

20 Réglage de la télécommande

[Champ de réglage du Mode Angle de flexion limité]




● Angle limite de flexion :

ALLUX™ ne peut fléchir plus que l'angle défini dans ce champ.

21 Copie des données

Les données enregistrées dans l'écran "Sauvegarde des données" (page 23) peuvent être chargées pour réécrire les paramètres de ALLUX™.

1. Appuyez sur le bouton "Sélection du fichier" pour afficher l'écran "Sélection du fichier".
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur le bouton "OK" pour revenir à l'écran "Copie de données". A ce moment, les anciennes données sont chargées et affichées.
4. Confirmer les données.
5. Appuyez sur le bouton "Écraser données" pour écrire les nouvelles données de réglage.

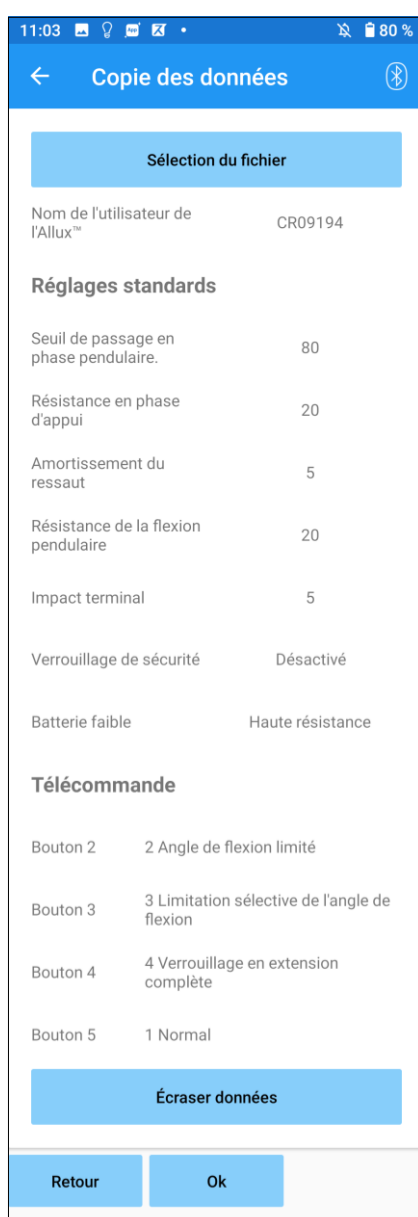

Données à utiliser

Écran de copie des données

- Retour : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
 - OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- * Si vous appuyez sur l'un des boutons ci-dessus sans avoir préalablement appuyé sur le bouton "Écraser", les données ne seront pas réécrites.


Écran de sélection du fichier

- Annuler : Ce bouton affiche l'écran "Copie de données" sans charger de données.
- OK : Ce bouton affiche l'écran "Copie des données" après le chargement des données.

22 Données de marche

ALLUX™ enregistre l'historique de la marche (cadence des pas) et ce sur une période de deux ans et affiche celui d'une période donnée, sous la forme d'un diagramme à barres ou d'un histogramme. Ces données de marche peuvent être imprimées.

22.1 Écran données de marche

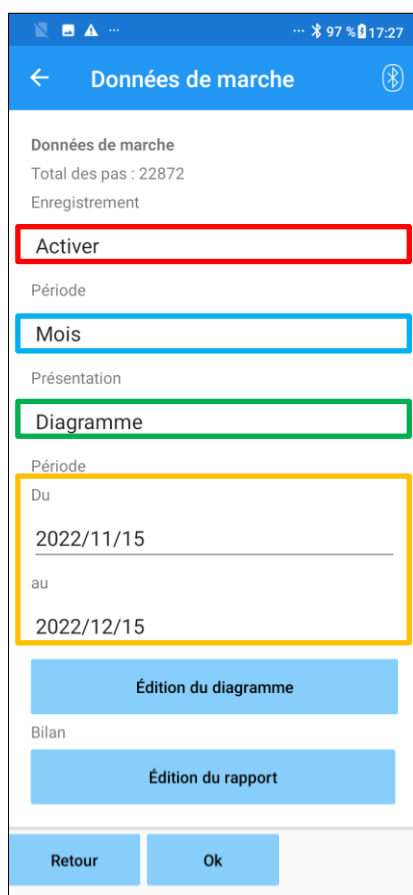

Sélecteur d'enregistrement :

Choisir d'enregistrer ou non les données.

- Activer
- Désactiver/Effacer données

* Lorsque l'option "Désactiver/effacer les données" est sélectionnée, une fenêtre s'affiche. Si vous appuyez sur "OK", et toutes les données enregistrées seront supprimées.

Sélecteur de période :

Sélectionnez une période pour que les données soient affichées dans un graphique. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes.

- Jour
- Mois
- 6 mois
- 2 ans

* Si vous sélectionnez 2 ans, la période est limitée à 2 ans avant la date actuelle.

* Lorsque vous sélectionnez "Barres" avec le sélecteur "Forme", vous ne pouvez pas sélectionner "jour" avec le sélecteur "Période".

Sélecteur de forme :

Vous pouvez sélectionner une forme de graphique entre "Barre" et "Histogramme".

Sélecteur de période :

Sélectionner une date de début ("De") et une date de fin ("à") avec le sélecteur. Lorsqu'une date est sélectionnée, l'autre date change automatiquement en fonction de la plage sélectionnée avec le sélecteur "Période".

- Édition du diagramme : Ce bouton affiche l'écran "Édition du diagramme".
- Édition du rapport : Touchez ce bouton pour afficher l'écran "Édition du rapport".
- Retour : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.

22 Données de marche


22.2 Écran Édition du diagramme

Un graphique est créé en fonction des paramètres définis sur l'écran "Données de marche".


Le graphique est codé par couleur en fonction de la cadence.

L'histogramme montre les données agrégées pendant la "période" sélectionnée avec le sélecteur.

Barre

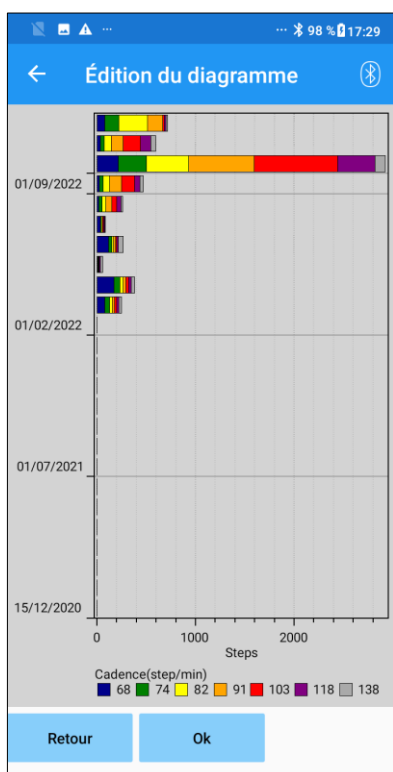

Histogramme

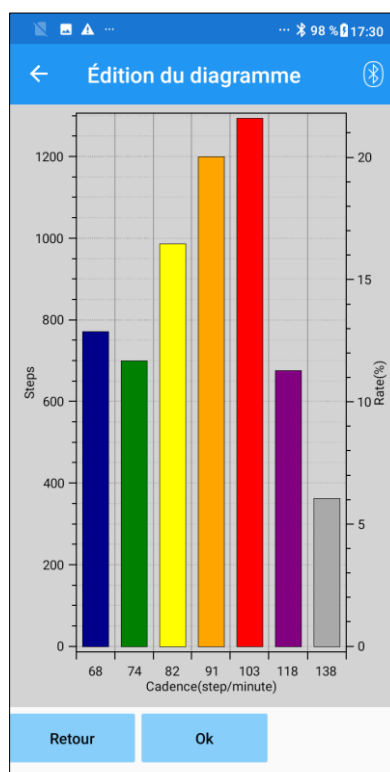

- Retour : Ce bouton affiche l'écran des "Données de marche".
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.

22 Données de marche

22.3 Création d'un rapport

Un rapport est créé pour la période définie sur l'écran "Données de marche".

Un diagramme à barres et un histogramme sont tous deux placés dans le rapport.

Vous pouvez retrouver dans le rapport, les informations et les commentaires de l'utilisateur saisis dans cet écran.

Zone Informations utilisateur :

L'éditeur est paramétré par défaut comme l'exemple figurant à gauche, mais il est possible de supprimer ou d'ajouter de nouvelles données.

Zone Personne en charge :

Entrer le nom de l'utilisateur de cette application, celui qui a effectué ces réglages. Il est possible de saisir le nom de l'entreprise.

Réglages ALLUX™ :



Les paramètres de marche sont chargés à partir de ALLUX™ et affichés automatiquement.

Commentaires :

Entrer des commentaires si nécessaire.

- Retour : Ce bouton affiche l'écran des "Données de marche".
- Rédaction d'un rapport : Ce bouton permet la création d'un rapport au format PDF.
Il sera sauvegardé dans le dossier du rapport dans le téléphone.

Image d'un rapport créé

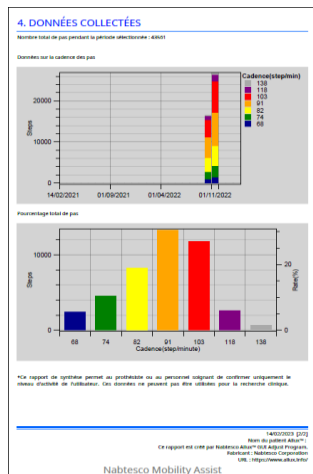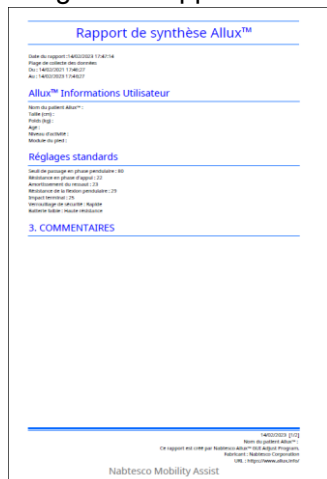


23 Historique des réglages

Cette application stocke les données relatives à l'historique des réglages effectués sur cet appareil au cours des 5 jours précédents. Elles sont sauvegardées séparément des données des réglages de l'écran "Sauvegarder les données" (page 23).

Vous pouvez consulter l'historique et appliquer les données sur ALLUX™.

*En faisant défiler horizontalement les écrans, vous pouvez voir les données précédentes.

Il se peut que l'historique des réglages effectués avec un autre ALLUX™ soit inclus parmi les données précédentes. Vérifiez bien les données avant de les utiliser.

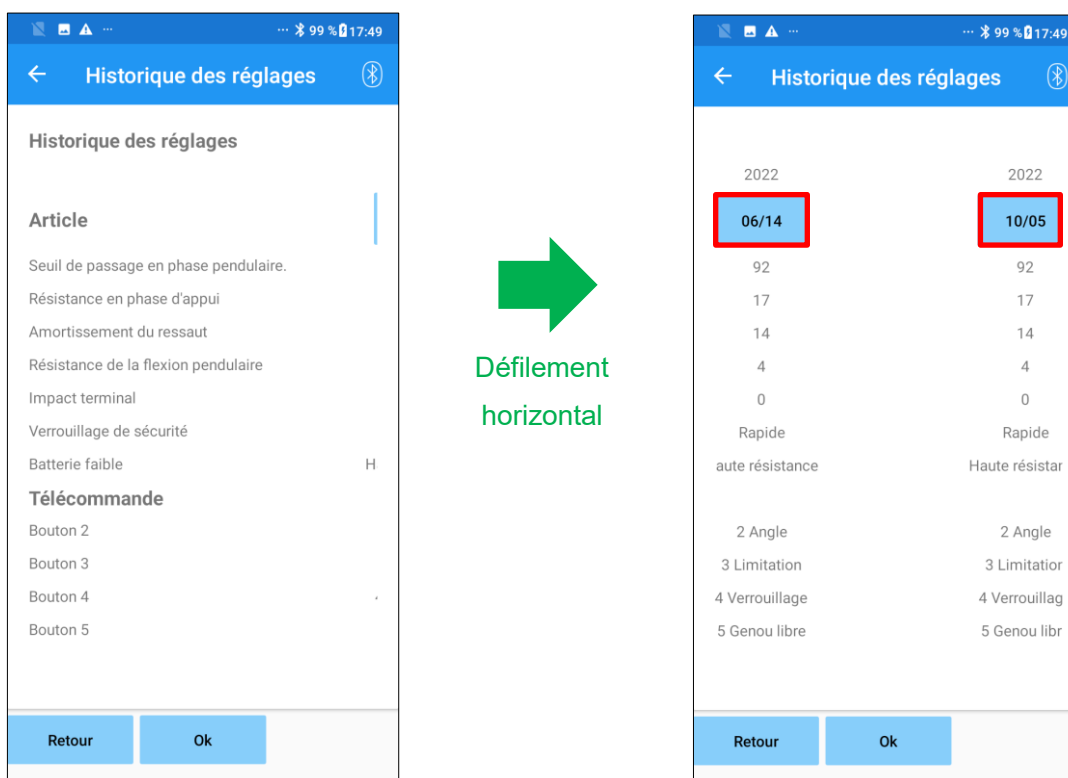


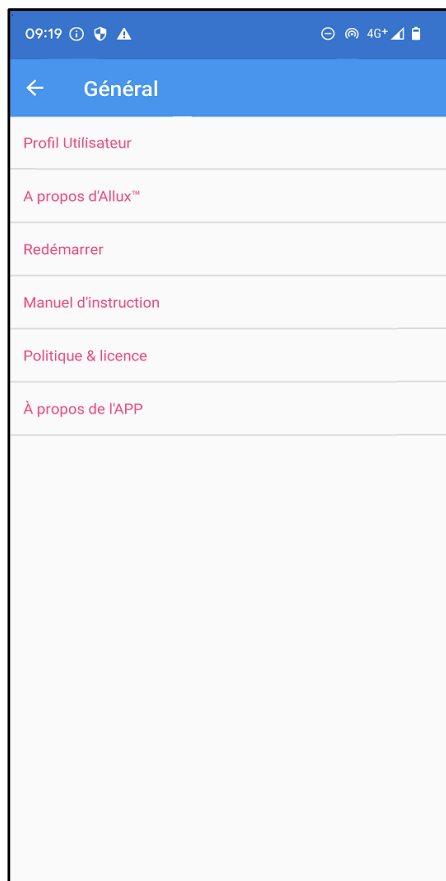
Bouton Date :

Lorsque le bouton est actionné, l'écran "Copie des données" (page 30) s'affiche et il est alors possible d'envoyer les données affichées à ALLUX™.

- Retour : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.
- OK : Ce bouton affiche l'écran de démarrage initial.


24 Écran général

Toucher l'icône "Général"  sur l'écran de démarrage (page 11), permet l'affichage l'écran "Général". Il est possible de réafficher l'écran qui ne s'affiche qu'au démarrage et de confirmer la version du logiciel de ALLUX™.



- **Profil Utilisateur :**
L'écran "Profil Utilisateur" (page 7) s'affiche.
- **A propos d'ALLUX™ :**
"L'écran "A propos d'ALLUX™" s'affiche.
- **Redémarrer :**
Redémarrer ALLUX™. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Appuyer sur le bouton "OK".
*Lorsque la communication est interrompue, il faut réactiver la connexion.
(C'est la même action que de retirer et d'insérer le capuchon de mise hors tension.)
- **Manual d'instruction :**
Appuyer sur ce bouton permet d'accéder à la page de téléchargement du manuel d'instructions. Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires.
- **Politique & licence :**
La page "Politique & licence" (page 7) s'affiche.
- **À propos de l'APP :**
Affiche le nom de l'application, l'utilisation, l'UDI DI, etc.

[Écran A propos d'ALLUX™]

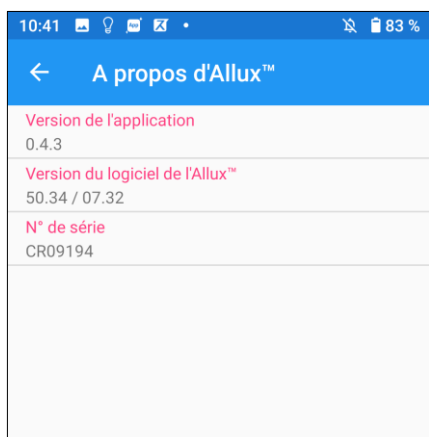

Cet écran montre la version de l'ALLUX™.


- **Version de l'Application :**
La version de l'application s'affiche.
- **Version du logiciel de l'Allux™ :**
La version du logiciel de l'Allux™ s'affiche.
- **N° de série :**
Le N° de série de l'ALLUX™ s'affiche.

25 Fenêtres de message d'erreur

Si une erreur se produit pendant une opération, une fenêtre s'affiche.

Suivre les instructions qui s'affichent dans la fenêtre.


25.1 Erreur d'information sur la localisation A

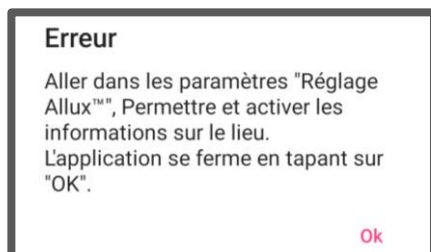

Les informations de localisation sont nécessaires pour utiliser l'application. Par conséquent, vous devez avoir réglé la permission pour que cette application accède aux informations de localisation du smartphone dans l'opération de la page 6. Suivre les instructions de cette fenêtre contextuelle pour autoriser l'utilisation des informations de localisation.

Android 12 ou les versions ultérieures n'utilisent pas les informations de localisation.

25.2 Erreur d'information sur la localisation B

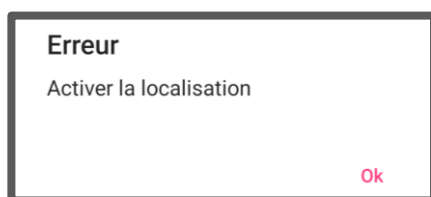


Cette erreur se produit lorsque la fonction d'information de localisation du smartphone lui-même n'est pas activée.

Activer la fonction d'information de localisation du smartphone.


Android 12 ou les versions ultérieures n'utilisent pas les informations de localisation.

25.3 Erreur Bluetooth

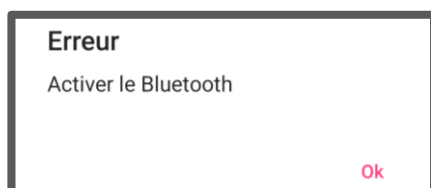

Si Bluetooth est désactivé, cette application ne peut pas communiquer avec ALLUX™. Activer le Bluetooth du smartphone.


25.4 Erreur de mot de passe (Écran "Entrer le mot de passe")

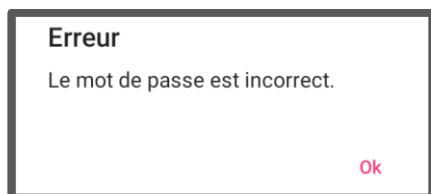

Cette erreur se produit lorsque le mauvais mot de passe a été saisi sur l'écran "Entrer le mot de passe". Essayer de saisir à nouveau le mot de passe indiqué dans le manuel d'instructions.(page 6)


25 Fenêtres de message d'erreur

25.5 Erreur de mot de passe (Écran "Connexion à Allux™")

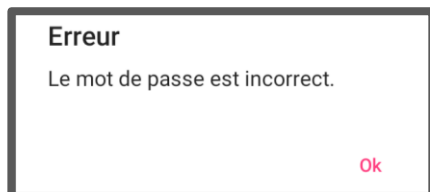

Cette erreur se produit lorsque le mauvais mot de passe a été saisi sur l'écran "Connexion à ALLUX™". Saisir le mot de passe indiqué sur le port de chargement.(page 8)

25.6 3 Erreurs de mot de passe

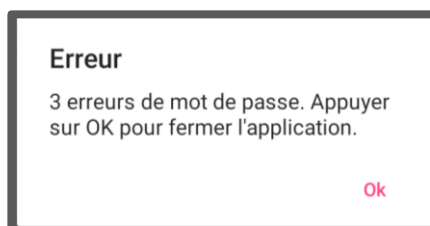


Cette erreur se produit si le mot de passe est mal saisi 3 fois de suite, sur l'écran "Entrer le mot de passe" ou sur l'écran " Connexion à ALLUX™". Cette application se ferme alors immédiatement. Lors du redémarrage de cette application, saisir à nouveau le mot de passe.

25.7 Erreur de connexion sans fil



Cette erreur se produit lorsque la connexion sans fil entre ALLUX™ et le Bluetooth du smartphone est défectueuse. Activer la connexion sans fil de l'ALLUX™ voir page 10.

25.8 Erreur de communication sans fil

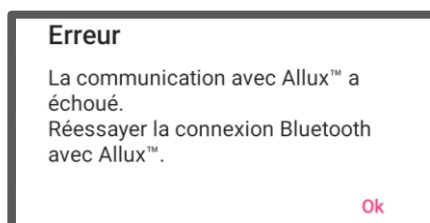

Cette erreur se produit lorsque la communication entre ALLUX™ et l'application sur le smartphone est défectueuse. Activer à nouveau la connexion sans fil voir page 11. Si le réglage est en cours, vérifiez la valeur du réglage après la reconnexion.


25.9 Erreur posture sécurisée



Si l'utilisateur n'adopte pas une posture sécurisée, ALLUX™ ne peut pas modifier les paramètres. Faire en sorte que l'utilisateur adopte une posture sécurisée voir page 9.

25 Fenêtres de message d'erreur


25.10 Dysfonctionnement hydraulique

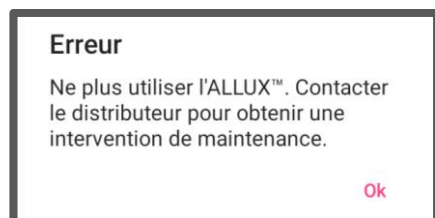

Le système hydraulique pouvant être hors service, le contrôle de ALLUX™ est arrêté.

Contactez le distributeur pour obtenir une intervention de maintenance.

25.11 Erreur de connexion du dispositif à proximité

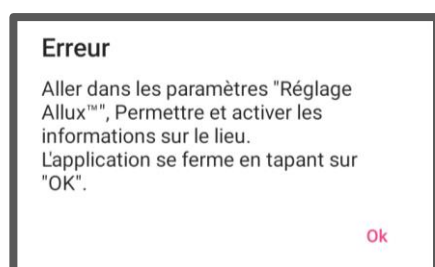

Pour Android 12 ou les versions ultérieures, L'autorisation des "Appareils à proximité" est nécessaire pour utiliser l'application de réglage de l'ALLUX™. Par conséquent, vous devez avoir activé l'autorisation "Appareils à proximité" dans l'opération de la page 6. Cette erreur se produit si vous ne l'avez pas autorisé à ce moment-là ou si vous l'avez refusé manuellement par la suite. Suivez les instructions dans ce popup pour autoriser les "Appareils à proximité".

26 Dépannage

Problème	Point à contrôler	Solution
L'application de réglages ne peut pas être installée.	Vérifier que la version du système d'exploitation est appropriée.	Mettre à jour le système d'exploitation vers Android 7 ou plus
	Vérifier que l'espace libre nécessaire du smartphone est suffisant.	Augmenter l'espace libre du smartphone.
ALLUX™ ne peut pas être connecté.	Vérifier que ALLUX™ est reconnu à l'écran "Connexion à ALLUX™" (page 8).	Sélectionner ALLUX™ sur l'écran "Connexion à ALLUX™".
	Vérifier que l'ALLUX™ n'est pas connecté à plusieurs appareils.	ALLUX™ ne peut pas être connecté à plusieurs appareils. Essayez les actions dans l'ordre suivant. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se déconnecter de l'application télécommande. 2. Éteindre l'application de réglage et l'application télécommande. 3. Si l'utilisateur utilise l'application télécommande, lui demander s'en déconnecter.
	Vérifier que la fonction Bluetooth est activée sur le smartphone.	Activer le Bluetooth sur le smartphone.
	La connexion est impossible même avec les solutions ci-dessus.	Effectuer les trois étapes suivantes avant de se connecter à nouveau. <ol style="list-style-type: none"> (1) Redémarrer l'alimentation d'ALLUX™. (Insérer le chargeur ou le capuchon de mise hors tension, puis le retirer.) (2) Désactiver Bluetooth sur le smartphone, puis le réactiver. (3) Redémarrer l'application de réglage.

26 Dépannage

ALLUX™ n'est pas présent sur l'écran "Connexion à ALLUX™".	Vérifier que la connexion sans fil ALLUX™ est activée.	Activer le Bluetooth sur le smartphone voir page 10.
	Vérifier que la batterie de ALLUX™ a été chargée.	Charger la batterie de l'ALLUX™.
	Vérifier que plusieurs applications ne fonctionnent pas en même temps.	Fermer les applications non nécessaires.
	Vérifier que la fonction Bluetooth est activée sur le smartphone.	Activer le Bluetooth sur le smartphone.
La communication entre ALLUX™ et l'Application est facilement déconnectée.	Vérifier si la charge de la batterie de l'ALLUX™ ou du smartphone est suffisante.	Recharger la batterie de l'ALLUX™ ou du smartphone.
	Vérifier si l'ALLUX™ est utilisé dans des conditions de communication sans fil spécifiques, par exemple à côté d'une voie ferrée, d'une autoroute, d'une tour de télévision, d'un aéroport, dans une exposition ou dans un hôpital.	Éviter d'utiliser l'appareil dans un environnement où les trains ou les véhicules vont et viennent fréquemment, ou dans un environnement où il y a de multiples connexions sans fil.
	Vérifier s'il y a des protections contre les ondes radio autour de l'utilisateur de ALLUX™.	Supprimer les protections qui bloquent les ondes radio. Aller dans un autre endroit.



Nabtesco Corporation

Fabricant

Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi Higashinada-ku
Kobe, 658-0024, Japon
Tél : +81 78 413 2724
Fax : +81 78 413 2725
<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Représentant autorisé pour les pays de l'EU

PROTEOR SAS

6, rue de la Redoute
21850 Saint-Apollinaire
France

Tél : +33 3 80 78 42 42
Fax : +33 3 80 78 42 15
cs@proteor.com



Contact

Merci de nous informer d'une erreur éventuelle ou d'un manque de page à ce document.

Nabtesco

Nabtesco Corporation