

ALLUX™

Sovellus Kaukosäädin Käyttöohjeet

(iOS-versio)

Käyttäjille

Tuotetyppi : NE-Z41, NE-Z41SH

Asiakirjan numero : 81-SS00128 (ver.5)

Sovellus Ver. 0.4.10 tai uudempi.

Antopäivä : 2024-04-01

Kieli : Suomi



VAROITUS

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Johdanto

Kiitos, että olet ostanut Nabtescon ALLUX™ .

Tyypilliseen käyttöön liittyvät asiat, kuten fitting ja kävely, huolto, vianetsintä ja varoitukset on kuvattu ALLUXin mukana toimitetussa käyttöoppaassa™ (jäljempänä käyttöopas).

Tässä sovelluskaukosäätimen käyttöohjeessa (jäljempänä "tämä käyttöohje") kuvataan sovelluskaukosäätimen (jäljempänä "sovellus") asentaminen ja käyttö iOS-järjestelmäympäristössä.

Turvallisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi lue huolellisesti edellä mainittu käyttöopas ja tämä käsikirja, ymmärrä niiden sisältö riittävästi ja noudata tiukasti kyseisissä asiakirjoissa mainittuja turvallisuusohjeita.

- Nabtesco omistaa tämän asiakirjan tekijänoikeudet.
- iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
- iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Apple on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.
- Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Inc. ja Nabtesco Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssin nojalla.
- QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut yritysten nimet ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

Johdanto.....	1
Sisällysluettelo	2
1 Tuettu malli ja käyttöympäristö	3
2 Asennusmenettelyt ja alkuasetukset	4
3 Turvallinen asento	5
4 Tietoliikennetila ja Bluetooth-yhteyden muodostaminen.....	6
5 ALLUX™ toimintatilat	7
6 Alkuasetukset	9
7 Tilanvaihtonäyttö	11
8 Liitäntä ALLUX™ -näyttöön	12
9 Tiedonkeruun näyttö	13
10 Yleinen näyttö	14
11 Muu asetusnäyttö	15
12 Tietoja ALLUX™ -näytöstä	16
13 Tilan nimi -näyttö.....	17
14 Ponnahdusikkuna virheilmoitus	18
14.1 Yhteys ALLUXiin™ virhe.....	18
14.2 Salasanavirhe (3 kertaa).....	18
14.3 Langattoman yhteyden virhe	18
14.4 Langattoman tiedonsiirron virhe	18
14.5 Turvallisen asennon virhe	19
14.6 Hydraulinen ohjausvirhe	19
14.7 Yhteyden uudelleen kytkentäpainikkeen virhe	19
15 Vianmääritys	20

1

Tuettu malli ja toimintaympäristö

● ALLUX™ (tyyppi: NE-Z41)

*ALLUX™ (tyyppi: NE-Z4) ei ole tuettu.

Mallin voi tunnistaa etulinkkityynyn muotoilusta.

Sen voi tunnistaa myös latausportin merkinnästä.



NE-Z41
(Tuettu tyyppi)



NE-Z4
(Ei tuettu tyyppi)



NE-Z41
(Tuettu tyyppi)



NE-Z4
(ei tuettu tyyppi)


● Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: iPhone, jossa on iOS 13 tai uudempi käyttöjärjestelmä





Bluetoothiin liittyvät varotoimet

- Bluetooth-laitteen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa elektronisten laitteiden ja muiden laitteiden toimintaan. Sammuta Bluetooth-laitteet, kun ne ovat lähellä etuoikeutettuja istuimia junissa tai alueilla, joilla syntyy syttyvää kaasua, kuten lentokoneissa automaattisten ovien ja palohälytyslaitteiden läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Emme ota vastuuta tietojen vuotamisesta Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä.
- Tämä tuote ei takaa langatonta yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa. Liitettävän Bluetooth-laitteen on oltava Bluetooth SIG:n määrittelemän Bluetooth-standardin mukainen, ja sillä on oltava vähintään sertifiointi. Lisäksi, vaikka liitettävä laite olisikin Bluetooth-standardin mukainen, laitteen ominaisuuksista ja eritelmistä riippuen voi esiintyä ilmiöitä, kuten yhteyden muodostamisen estyminen tai erilainen näyttö/toiminta.
- Älä pura tai muuta tätä tuotetta, sillä tuotteen langattomat toiminnot on sertifioitu teknisten standardien mukaisiksi.

2 Asennusmenettelyt ja alkuasetukset

1. Kirjaudu sisään Apple ID:lläsi.
Napauta hakukuvaketta  App Store -näytön oikeassa alakulmassa.
2. Kirjoita hakukenttään sovelluksen nimi "ALLUX2". Napauta näppäimistön "Etsi"-painiketta.

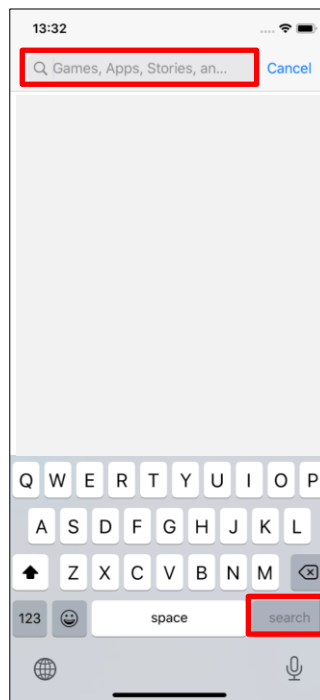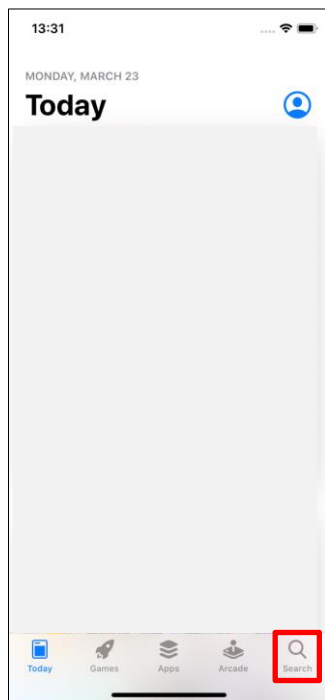

Asennus onnistuu seuraavan QR-koodin avulla.



3. Kun hakutulokset on näytetty, napauta kohdesovellusta alla olevan kuvan mukaisesti.




4. Napauta "GET"-painiketta ja napauta sitten "INSTALL"-painiketta.
5. Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake luodaan älypuhelimien aloitusnäyttöön.
6. Käynnistä sovellus napauttamalla kuvaketta.


3 Turvallinen asento

Ennen ALLUX™ -laitteen toimintatilan vaihtamista sovelluskaukosäätimellä käyttäjän on otettava asento, joka on turvallinen, vaikka hydrauliiikan vastus muuttuisi. Tätä asentoa kutsutaan "turvalliseksi asennoksi". Varmista, että ymmärrät seuraavat turvalliset asennot ennen ALLUX™ -laitteen käyttöä.

【Turvallinen asento】

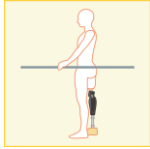

: ALLUX™ on täysin suorassa, vakaassa asennossa ja sen päälle on turvallista asettaa kehon paino.

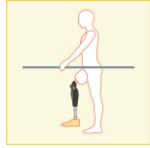

: Paino on pois ALLUX™ mutta se voi olla taipunut.



VAROITUS


■ Kun otat turvallisen asennon kohdistamatta kehon painoa ALLUX™ -laitteeseen, pidä kiinni kaiteesta tai istu alas.

Voit menettää tasapainosi ja kaatua.

[Pyyntö turvallisesta asennosta]

Jos ALLUX 2™ ei ole turvallisessa asennossa, kun ALLUX™ toimintatilaa vaihdetaan, näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Varmista, että olet turvallisessa asennossa, ja napauta "OK"-painiketta.


Ota turvallinen asento.



ALLUX™
ei kuormita

Peruuta

tai



Polvikulma
ei liiku

OK

4

Viestintätila ja Bluetooth-yhteyden muodostaminen


Virran säästämiseksi ALLUX™ ei ole aina viestintätilassa.

Viestintätilan ottamiseksi käyttöön sinun on suoritettava seuraavat toimenpiteet.

Kun ALLUX™ -yhteys on muodostettu tämän sovelluksen avulla, tämä tila kestää, kunnes yhteys katkaistaan.

[Viestintätila käytössä]

1. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun ALLUX™ on hieman taivutettu ja ojennettu.
2. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun olet kohdistanut kehon painon ALLUX:iin™
3. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun laturi tai virta OFF-korkki on irrotettu ALLUXista.™

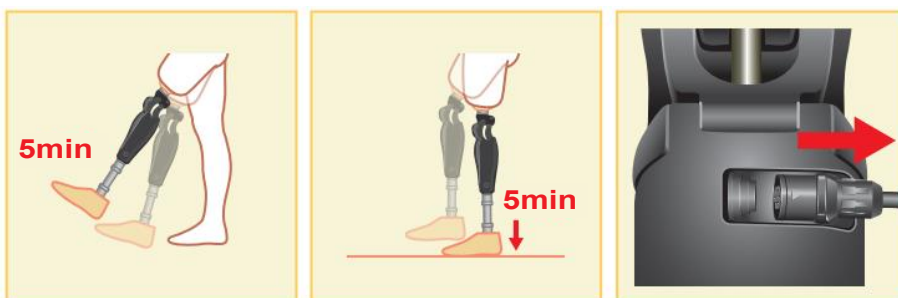


Langaton yhteys on mahdollista kytkeä pois päältä, kun käyttäjä nousee lentokoneeseen jne.

Langattoman yhteyden palauttaminen tästä tilasta edellyttää alla esitetyn kaltaisia toimia.

1. Irrota laturi tai virta OFF -korkki ALLUX™ -laitteesta.
2. "Kuormita kantapäätä 4 kertaa ajoittain" tai "Kuormita varpaita 4 kertaa ajoittain".

*Voit vaihtaa jompaankumpaan haluamaasi menetelmällä, joka on kuvattu sivulla 13.

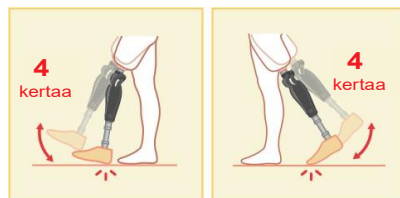

*Tämän sovelluksen käynnistäminen ei muodosta yhteyttä ALLUXiin™ . Napauta Bluetooth-kuvaketta "Tilan vaihto" -näytössä (katso sivu 11) muodostaaksesi yhteyden ALLUXiin™ .

*Älypuhelimien kotipainikkeen tms. napauttaminen ei katkaise yhteydenpitoa ALLUXin™ kanssa, vaan tämä sovellus jatkaa työskentelyä näytön takana. Jos napautat tämän sovelluksen kuvaketta uudelleen, se käynnistyy yhdistetyssä tilassa.

**VAROITUS**

- Älä sammuta älypuhelinia tai lopeta tätä sovellusta väkisin, kun vaihdat tilaa tällä sovelluksella. Se voi aiheuttaa säätöarvojen muuttumisen tahattomaan tilaan ja johtaa putoamiseen.

ILMOITUS

- Vaikka tämä sovellus olisi piilotettu älypuhelimeen, yhteys ALLUX™ -palveluun säilyy ja älypuhelimien akku kuluu jatkuvasti. Jos olet huolissasi akun kulutuksesta, katkaise älypuhelimien yhteys ALLUX™ -sovellukseen tai sulje tämä sovellus.

5 ALLUX™ toimintatilat


ALLUX™ -laitteessa on seuraavat viisi toimintatilaa.

[Normaali tila]

Normaalitila on säädetty normaalia kävelyä varten. ALLUX™ arvioi erilaisia kävelytilanteita ja normaaleja liikkeitä anturin avulla ja säättää automaattisesti fleksiota ja ekstensiota.


[Fleksiokulman rajoitustila]

Taivutuskulman rajoitustilassa taivutusvastus lukittuu määrättyyn kulmaan, kun taas ojennusvastus pysyy vapaana.

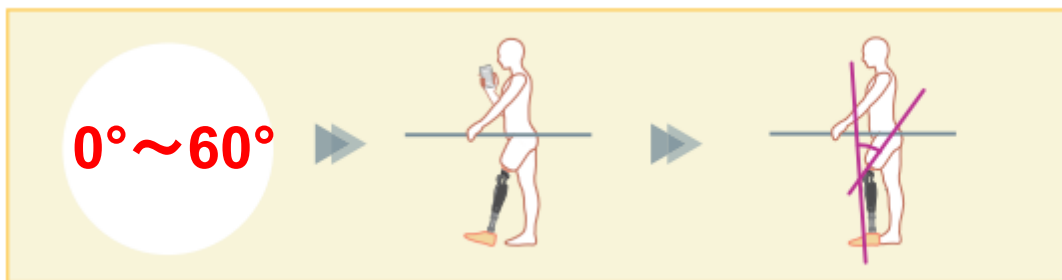

[Muuttuva valikoiva taivutuksen lukitustila]

ALLUX™ muistaa kulman, jossa muuttuva valikoiva taivutuksen lukitus on kytketty päälle. Fleksiovastus lukittuu, kun se saavuttaa kyseisen kulman, kun taas ekstensiovastus pysyy vapaana.

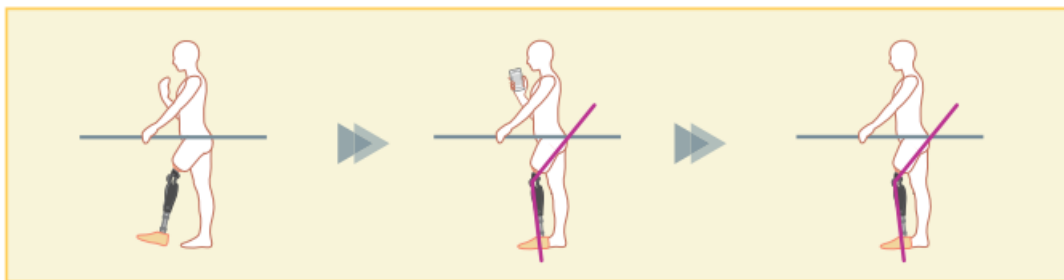


■ Kun käytetään taivutuskulman rajoitustilaa tai muuttuvan valikoivan taivutuksen lukitustilaa, älä käytä ALLUX™ -laitteeseen liian suurta voimaa sen lukitsemisessa.

ILMOITUS

5 ALLUX™ toimintatilat


[Täydellinen laajennuksen lukitustila]

ALLUX™ on lukittu täysin ulosvedettyyn tilaan.

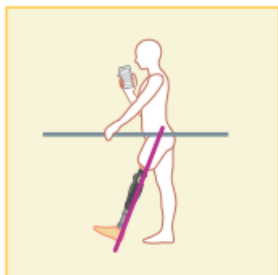

[Vapaa swing-tila]

Vapaassa swing-tilassa ALLUX™ pidetään vapaana (resistanssiton tila).

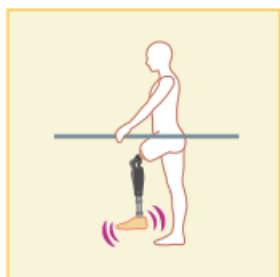

Proteesinhoitaja voi määrittää jokaisen näistä toimintatiloista sovelluskaukosäätimen painikkeille Säättösovelluksen avulla, ja voit vaihtaa haluamaasi tilaan napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluskaukosäätimen "Tilan vaihto" -näytössä (sivu 11).

Normaalitila on aina määritetty sovelluskaukosäätimen painikkeelle 1.

Voit määrittää edellä mainitut viisi toimintatilaa vapaasti sovelluskaukosäätimen painikkeille 2-5.

Kauko-ohjaimen oletuskonfiguraatio:


- Painike 2: Flexion Angle Limited -tila
- Painike 3: Vaihteleva valikoiva taivutuksen lukitustila
- Painike 4: Täydellinen laajennuksen lukitustila
- Painike 5: Free Swing -tila

6 Alkuasetukset

1. Aloita napauttamalla tämän sovelluksen kuvaketta.




2. Näyttöön tulee "Lainsäädäntö ja sääntely" -valintaikkuna.
Lue se ja napauta "OK"-painiketta.

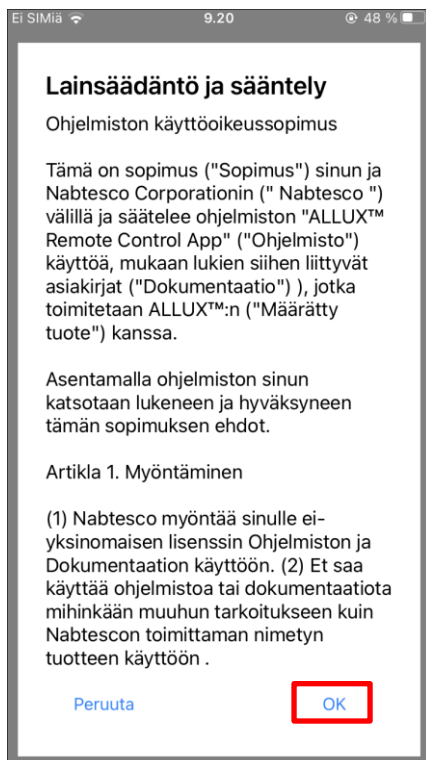

6 Alkuasetukset

3. Yrityksen logo näytetään. Toisesta kerrasta alkaen edellä mainitut näytöt ohitetaan, ja tämä näyttö tulee näkyviin, kun napautat tämän sovelluksen kuvaketta.

Kun yrityksen logo näkyy näytössä sekunnin ajan, tämä näyttö vaihtuu automaattisesti seuraavaan näyttöön.

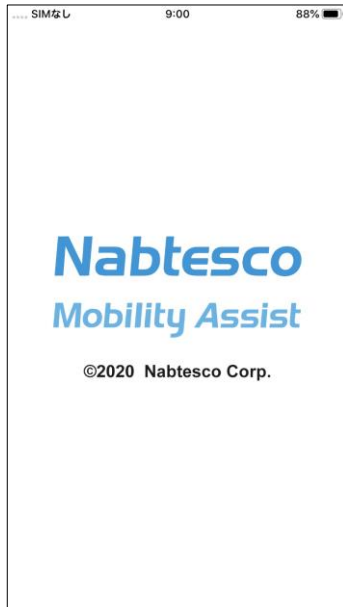


4. Näyttöön tulee varoitusikkuna. Lue se ja napauta OK-painiketta.




7 Tilanvaihtonäyttö

"Mode Change" -näyttö tulee näkyviin ponnahtusikkunan varoituksen jälkeen.

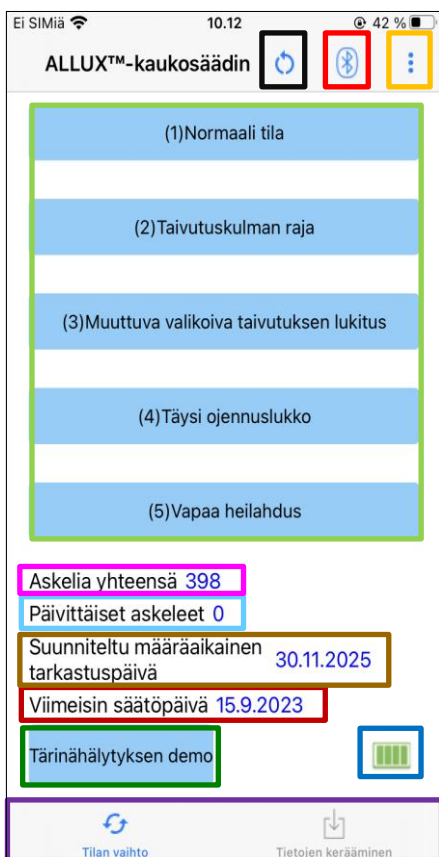

● Yhdistä uudelleen -kuvake:

Napauta tätä kuvaketta muodostaaksesi yhteyden aiemmin yhdistettyyn ALLUXiin™. Seuraavat ponnahtusikkunat näkyvät ennen ja jälkeen yhteyden muodostamisen.

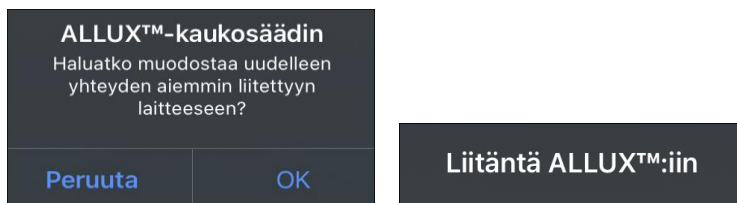

● Bluetooth-kuvake:

Napauttamalla tätä kuvaketta saat näkyviin "Yhteys ALLUXiin™" -näytön (sivu 12). Kuvake vaihtuu yhteyden tilan mukaan. Kun yhteys on katkaistu, ota yhteys käyttöön napauttamalla kuvaketta.



● Yleinen kuvake:

Napauttamalla tätä kuvaketta saat näkyviin "Yleiset"-näytön (sivu 14).

Valmiusmerkki:



Kun tämä sovellus kommunikoi ALLUX™ -sovelluksen kanssa tai suorittaa muuta käsittelyä, näytössä näkyy valmiustilan merkki. Kun tämä merkki on näkyvässä, kaikki näytön toiminnot ovat poissa käytöstä.

● Kaukosäätimen painike:

Kun napautat jotakin näistä painikkeista, ALLUX™ muuttuu toimintilaan, jonka proteesin valmistaja on määrittänyt etukäteen. Kun napautat painiketta, näyttöön tulee ponnahtusikkuna. Napauta OK-painiketta.

● Näytön vaihto -välilehti:

Voit vaihtaa "Tilan vaihto" -näytön ja "Tiedonkeruu" -näytön välillä. Vaihda näyttöä napauttamalla näitä merkkejä tai liu'uttamalla kutakin näyttöä vasemmalle tai oikealle.

● Askelia yhteensä:

Se näyttää tähän pisteeseen mennessä ottamiesi askelten määrän.

● Päivittäiset askeleet:

Se näyttää, kuinka monta askelta olet ottanut kyseisenä päivänä.

● Määräaikainen määräaikaistarkastus:

Jos syötät käytön alkamispäivän Yleiset-kuvakkeen kohdassa "Muut asetukset", määräaikaistarkastuksen suunniteltu päivämäärä tulee näkyviin.

● Viimeisin oikaisupäivä:

Se näyttää päivämäärän, jolloin ALLUX™ oli viimeksi säädetty.

● Tärinähälytyksen esittelypainike:

ALLUX™ värähtelee demossa.


● Akun varaustaso:

Se näyttää ALLUXin™ akun varaustason.



8

Liitäntä ALLUX™ -näyttöön

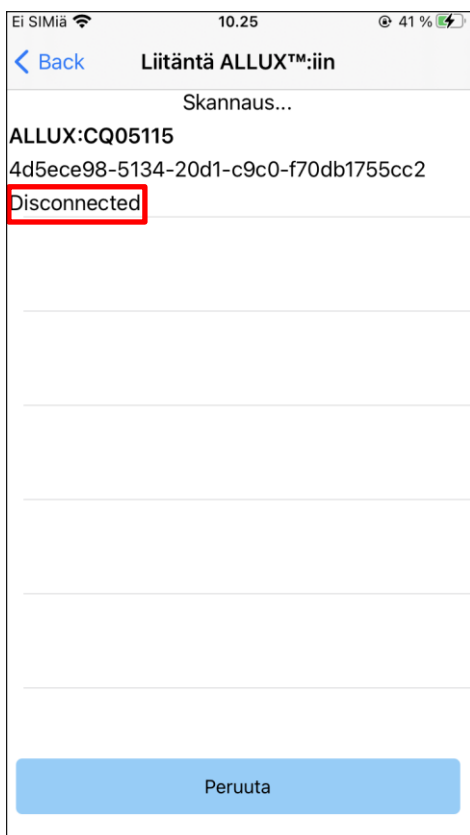

1. "Yhteys ALLUXiin™" -näytössä langattomien laitteiden skannaus käynnistyy automaattisesti.

2. ALLUXiin liittyvät laitteet™ on lueteltu ylhäällä. Ilmoitetut merkit vaihtelevat ALLUX™ -laitteen sarjanumeron mukaan.

Kolmas rivi osoittaa **yhteyden tilan**.

- Irrotettu
- Yhdistäminen
- Yhdistetty

3. Näyttöön tulee "ALLUX: Sarjanumero". Jos useampi kuin yksi laite on luettelossa, valitse ALLUXin sarjanumeron mukaan™, valitse sopiva langaton laite.

4. Jos ALLUX™ -laitteen langaton laite ei ole luettelossa, ALLUX™ -laitteen langaton yhteys voi olla lepotilassa. Aktivoi langaton yhteys sivun 6 mukaisesti.

Napauta sen jälkeen Cancel-painiketta ja napauta sitten kyseisessä kohdassa näkyvää Scan-painiketta etsiäksesi langattomia laitteita uudelleen.


5. Napauta luettelossa olevaa langatonta laitetta.

Näyttöön tulee "Yhteys ALLUXiin™". Syötä ALLUX™ -laitteen latausportissa ilmoitettu salasana. Jos salasanan syöttäminen epäonnistuu kolme kertaa, sinun on käynnistettävä sovellus uudelleen.

Jos langaton yhteys on muodostettu onnistuneesti, "Tilan vaihto" -näyttö (sivu 11) tulee automaattisesti näkyviin.


Kun yhteys muodostetaan ensimmäistä kertaa,

Bluetooth-pariliitäntä älypuhelimien vaaditaan. Salli se napauttamalla Pariliitoksen muodostaminen.

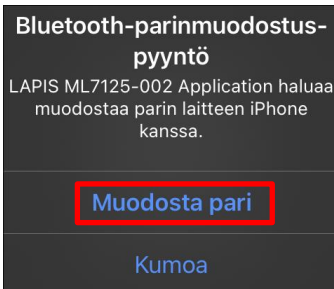

9 Tiedonkeruun näyttö


Voit tarkistaa ALLUXin tilan™ tästä näytöstä.

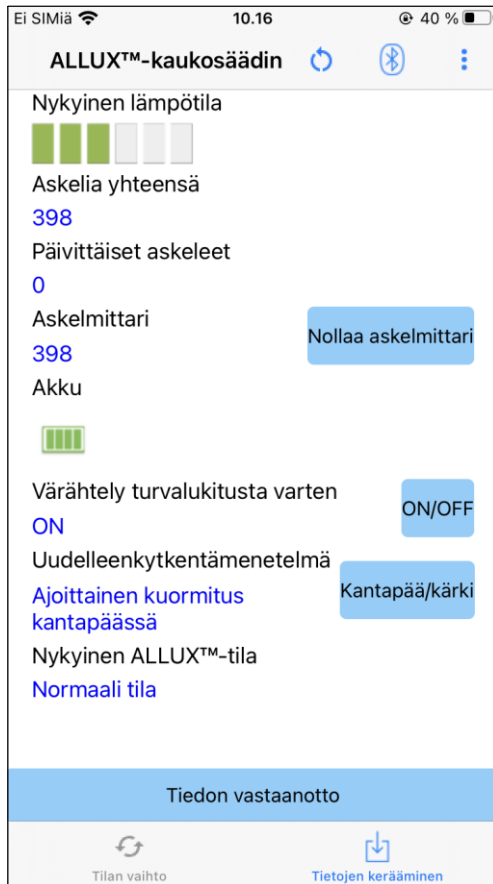

- **Nykyinen lämpötila:**
Voit tarkistaa ALLUXin lämpötilan™ .
Toistuva myötääminen voi aiheuttaa korkean lämpötilan. Kun ALLUX™ kuumenee, se siirtyy korkean lämpötilan tilaan, etkä voi kävellä.
- **Askelia yhteensä:**
Se näyttää tähän pisteeseen mennessä ottamiesi askelten määrän.
- **Päivittäiset askeleet:**
Se näyttää, kuinka monta askelta olet ottanut kyseisenä päivänä.
- **Askelmittari:**
Kun napautat painiketta "Askelmittarin nollaus", askelmäärä muuttuu kerran 0:ksi, ja sitten se alkaa näyttää siitä pisteestä alkaen tekemiesi askeleiden määrän.
- **Akku:**
Se näyttää akun varaustason. (Näytössä näkyvät merkit ovat samat kuin sivulla 11.)
- **Tärinä turvalukitusta varten:**
Tällä painikkeella asetetaan, värähteleekö ALLUX™ , kun turvalukitus (käyttöoppaan sivu 10) on käytössä. Oletusasetus on "ON" (värinä).
- **Uudelleenkytkentämenetelmä:**
Tällä painikkeella voit vaihtaa menetelmää, jolla langaton yhteys palautetaan PÄÄLLE ilman laturia tai virrankatkaisukorkkia, kun langaton yhteys on kytketty pois päältä lentokoneeseen nousemista varten jne. varten. Katso sivu 6.
- **Nykyinen ALLUX™ Mode:**
Näyttää nykyisen kävelytilan. Katso sivu 7.
- **Tiedonkeruupainike:**
Kun napautat tätä painiketta, tiedot, kuten askelten määrä, päivittyvät.


10 Yleinen näyttö

Kun napautat Yleistä-kuvaketta ☰ "Tilan vaihto" -näytössä tai "Tiedonkeruu" -näytössä, näyttöön tulee "Yleistä"-näyttö.

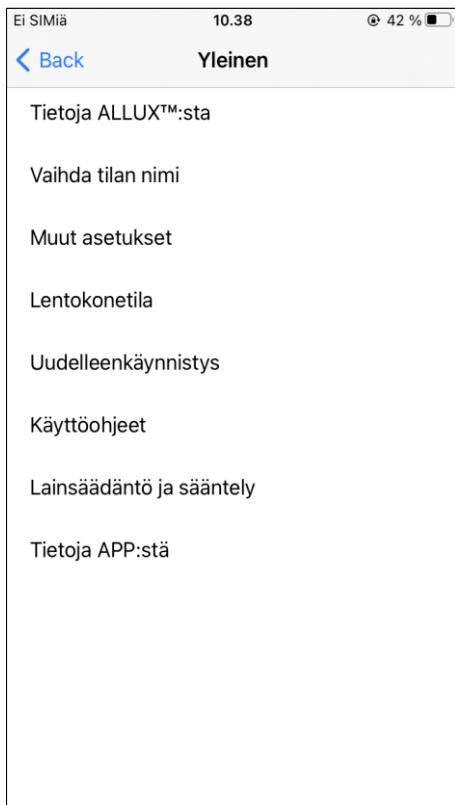

- Tietoja ALLUXista™ :
"Tietoja ALLUXista™ " -näyttö (sivu 16) tulee näkyviin.
- Vaihda tilan nimi:
"Tilan nimi" -näyttö (sivu 17) tulee näkyviin.
- Muut asetukset
"Muut asetukset" -näyttö (sivu 15) tulee näkyviin.
Tässä näytössä voit määrittää, muodostetaanko automaattisesti yhteys aiemmin yhdistettyyn ALLUXiin™ , kun sovellus käynnistyy, voit määrittää, vahvistetaanko tilojen vaihtaminen ja voit syöttää käytön alkamispäivän.
- Lentokonetila:
Näyttöön tulee ponnahtusikkuna. Sammuta langaton yhteys ALLUX™ napauttamalla OK-painiketta.
- Uudelleenkäynnistys:
Kun napautat tätä painiketta, näyttöön tulee ponnahtusikkuna. Käynnistä ALLUX uudelleen napauttamalla OK-painiketta™ .
* Koska yhteys on katkaistu, sinun on otettava yhteys uudelleen käyttöön.
(Sama toimenpide kuin virran OFF-korkin irrottaminen ja asettaminen paikalleen.)
- Käyttöohje:
Lataa käyttöohjeet hyppäämällä linkistä.
- Lainsäädäntö ja sääntely:
Näyttöön tulee "Lainsäädäntö ja määräykset" -valintaikkuna (sivu 9).
- Tietoja APP:stä:
Näyttää sovelluksen nimen, käytön, UDI-DI:n jne.

11 Muu asetusnäyttö

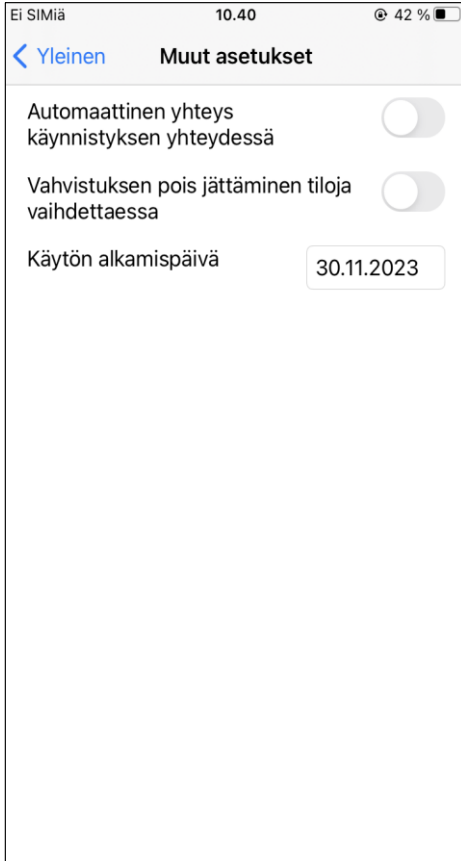


:ON (toimii)



:OFF (ei toimi)

- **Automaattinen yhteys käynnistyksen yhteydessä:**
Voit määrittää, muodostetaanko yhteys aiemmin yhdistettyyn ALLUXiin™ automaattisesti, kun sovellus käynnistyy.
- **Ohita vahvistus tiloja vaihdettaessa:**
Voit määrittää, näytetäänkö vahvistusponnahdusikkuna, kun napsautat painiketta tilan vaihtamiseksi.
- **Käytön alkamispäivä:**
Voit syöttää käytön alkamispäivämäärän. Tämä merkintä tarvitaan, kun näytetään suunnitellun määräaikaistarkastuksen päivämäärä.

12 Tietoja ALLUX™ -näytöstä

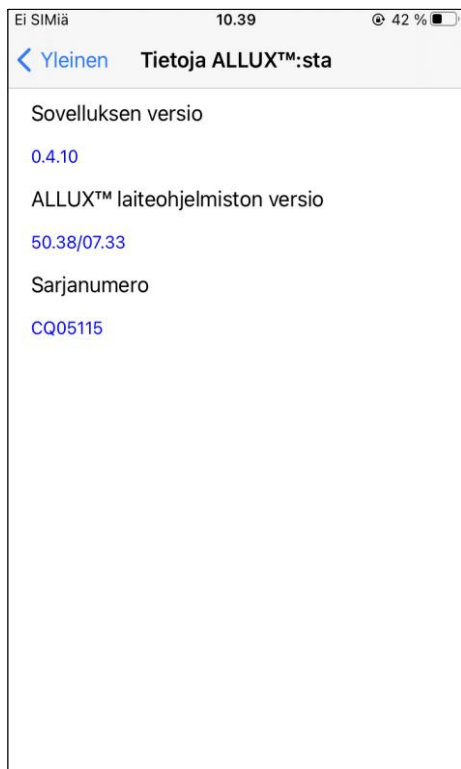


- **Sovelluksen versio:**
Tämän sovelluksen versio näytetään.
- **ALLUX™ laiteohjelmiston versio:**
ALLUXin™ laiteohjelmiston versio näytetään.
- **Sarjanumero**
ALLUXin™ sarjanumero näytetään.

13 Tilan nimi -näyttö

ALLUX™ mahdollistaa sivulla 8 kuvattujen toimintatilojen osoittamisen vapaasti sovelluskaukosäätimen painikkeille. ALLUX™ mahdollistaa myös "Mode Change" -näytössä ilmoitettujen painikkeiden nimien muuttamisen. Muista tarkistaa määrittäminen proteesinhoitajan kanssa ja muuttaa painikkeiden nimet määrittäksen mukaisesti.

On kätevää nimetä painikkeet säätöarvojen mukaan, esimerkiksi "Normaali tila (korkeakorkoiselle kengälle)" tai "Flexion Angle Limited mode (50 astetta)".

Jos proteesinpitäjä muuttaa tilojen määrittystä, tilojen nimet palautuvat oletusarvoihin.

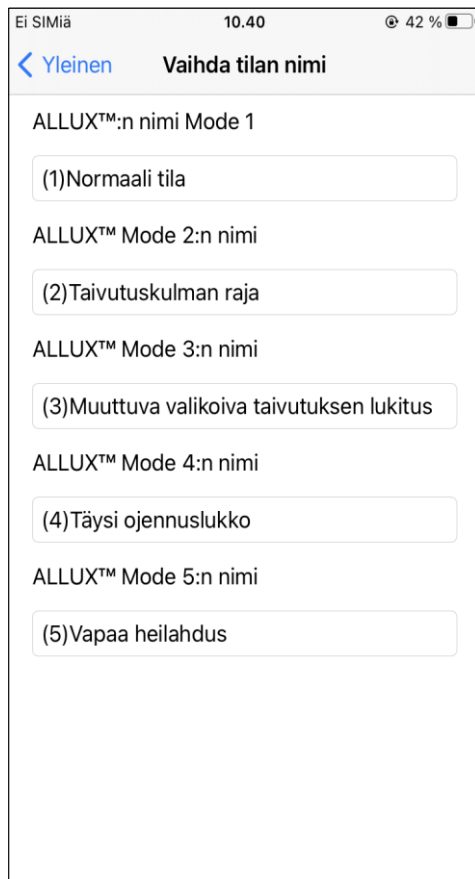


1. Muuta nimeä napauttamalla toimintatilaa.
2. Näytöllä näkyy näppäimistö.
3. Kirjoita uusi nimi.
4. Viimeistele merkintä napauttamalla " ".✓
5. Kun palaat "Tilan nimi" -näyttöön, nimi näkyy tässä sovelluksessa.

14 Virheilmoitus ponnahdusikkuna

Jos toiminnon aikana tapahtuu virhe, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.


Noudata ponnahdusikkunan ohjeita.

14.1 Yhteys ALLUXiin™ virhe

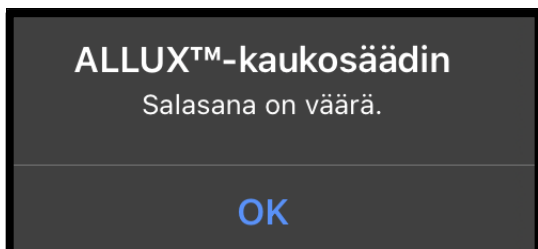


Tämä virhe ilmenee, kun väärä salasana on syötetty "Connection to ALLUX™" -näytössä. Syötä latausportissa ilmoitettu salasana uudelleen.

14.2 Salasanavirhe (3 kertaa)

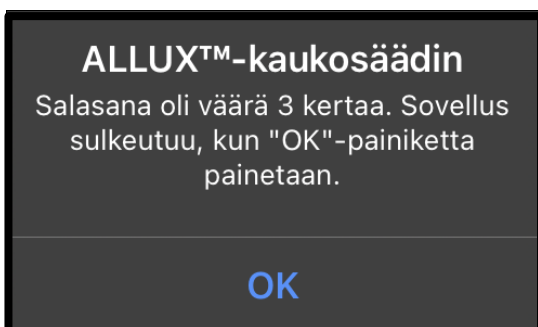


Tämä virhe ilmenee, jos salasanan syöttäminen epäonnistuu kolme kertaa. Ja sitten tämä sovellus sulkeutuu kerralla. Kun käynnistät tämän sovelluksen uudelleen, voit syöttää salasanan uudelleen.

14.3 Langattoman yhteyden virhe

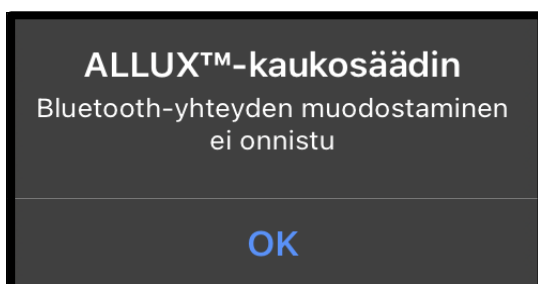

Tämä virhe ilmenee, kun langaton yhteys ALLUX™ ja älypuhelimien Bluetooth-yhteyden välillä epäonnistuu. Yritä kytkeä ALLUX™ langaton yhteys päälle sivun 6 mukaisesti.

14.4 Langattoman tiedonsiirron virhe

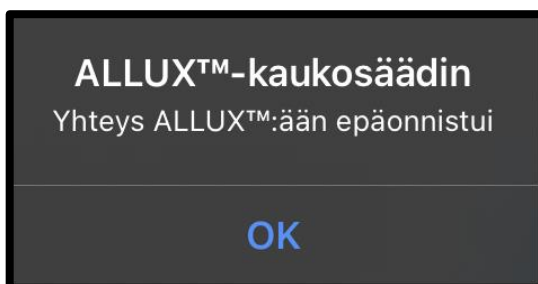


Tämä virhe ilmenee, kun ALLUX™ ja älypuhelimien sovelluksen välinen viestintä epäonnistuu. Ota langaton yhteys uudelleen käyttöön sivulla 11.

Jos tämä tapahtuu tilanvaihdon aikana, tarkista ALLUXin tila™ ja käytä sitä.


14 Ponnahdusikkuna virheilmoitus

14.5 Turvallisen asennon virhe

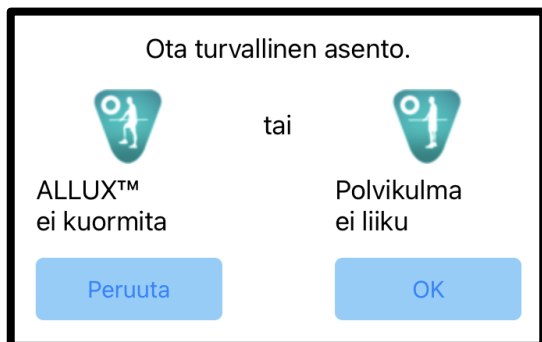


Jos käyttäjä ei ota turvallista asentoa, ALLUX™ ei voi muuttaa asetuksia. Ota turvallinen asento sivun 5 mukaisesti.

14.6 Hydraulinen ohjausvirhe

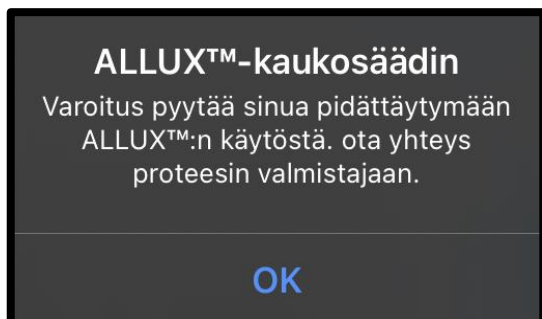

Koska hydrauliiikan ohjaus voi olla epäkunnossa, ALLUX™ -laitteen ohjaus pysähtyy. Ota yhteys proteesin huoltopalvelua varten.

14.7 Yhteyden uudelleen muodostuspainikkeen virhe

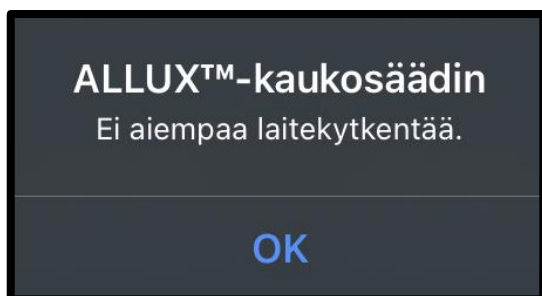

Tämä virhe tulee näkyviin, kun napautat Reconnect-painiketta ilman aiemmin yhdistettyä ALLUXia™. Tee yhteys tavanomaisen menettelyn mukaisesti ennen käyttöä.

15 Vianmääritys

Ongelma	Tarkista kohde	Korjaus
Sovelluksen kaukosäädintä ei voi asentaa.	Tarkista, että käyttöjärjestelmän versio on sopiva.	Päivitä käyttöjärjestelmä iOS 13:een tai uudempaan.
	Tarkista, että älypuhelimien kiintolevyllä jne. on riittävästi vapaata tilaa.	Lisää kiintolevyn vapaata tilaa.
ALLUX™ ei voi kytkeä.	Tarkista, että ALLUX™ on tunnistettu "Connection to ALLUX™ " -näytössä (sivu 12).	Valitse ALLUX™ "Connection to ALLUX™ " -näytössä.
	Tarkista, että ALLUX™ -yhteys ei ole yhteydessä useisiin laitteisiin.	ALLUX™ ei voi liittää useita laitteita. Jos proteesaaja käyttää Adjustment App -sovellusta, pyydä proteesaajaa katkaisemaan yhteys.
	Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth on päällä.	Kytke älypuhelimien Bluetooth päälle.
	Ei voida yhdistää edes edellä mainittujen korjaustoimenpiteiden kanssa.	Suorita seuraavat kolme vaihetta ennen uudelleen kytkemistä. (1) Käynnistä ALLUX™ -virtalähde uudelleen. (Aseta laturi tai virran OFF-korkki kerran paikalleen ja poista se sitten). (2) Kytke älypuhelimien Bluetooth kerran pois päältä ja sitten takaisin päälle. (3) Käynnistä sovellus Remote Control uudelleen.
Langatonta yhteyttä ei voida palauttaa, vaikka kantapäätä tai varpaita kuormitettaisiin 4 kertaa ajoittain.	Tarkista, että varpaiden tai kantapään asetus on oikea tai että kuorman kohdistamistapa on oikea.	Tarkista asetus tällä sovelluksella tai kuorman asettamistapa uudelleen sivulta 6. Jos langatonta yhteyttä ei vielä voida palauttaa, poista ja aseta akkulaturi tai virran OFF-korkki paikalleen palauttamista varten.

15 Vianmääritys

ALLUX™ ei näy "Connection to ALLUX™" -näytössä.	Tarkista, että langaton yhteys ALLUX™ on päällä.	Kytke langaton yhteys päälle sivun 6 mukaisesti.
	Tarkista, että ALLUX™ -laitteen akku on ladattu.	Lataa akku ALLUX™.
	Tarkista, että useat sovellukset eivät toimi samanaikaisesti.	Sulje tarpeettomat sovellukset.
	Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on päällä.	Kytke Bluetooth-toiminto päälle.
ALLUXin™ ja sovelluksen välinen viestintä on helppo katkaista.	Tarkista, että ALLUX™ tai älypuhelimien akun kapasiteetti on alhainen akun tila.	Lataa ALLUXin™ tai älypuhelimien akku.
	Tarkista ALLUX™ -osoitinta käytetään erityisessä langattomassa tilassa, kuten rautateiden, valtateiden, TV-tornien, lentokenttien, näyttelyiden ja sairaaloiden vieressä.	Vältä laitteen käyttöä ympäristössä, jossa junia tai ajoneuvoja tulee ja menee usein, tai ympäristössä, jossa on useita langattomia yhteyksiä.
	Tarkista, onko ALLUX™ -käyttäjän ympärillä valtavat suojaukset radioaaltoja vastaan.	Poista radioaaltoja estävät suojat.



Nabtesco Corporation

Valmistaja

Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi Higashinada-ku
Kobe, Japani 658-0024

PUH: +81-78-413-2724

FAKSI: +81-78-413-2725

<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Valtuutettu edustaja EU-maissa

PROTEOR SAS

6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollinaire
Ranska

PUH: +33 3 80 78 42 42

FAKSI: +33 3 80 78 42 15

cs@proteor.com



Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, jos jokin sivu puuttuu tai on epäjärjestyksessä.

Nabtesco

Nabtesco Corporation