



App för justering Instruktionsbok (iOS-version)

För ortopedingenjör

Produkttyp : NE-Z41, NE-Z41SH

Dokumentnummer : 81-SS00127 (ver.5)

Applikation Ver. 0.4.12 eller senare

Datum för utfärdande : 2024-04-01

Språk : Svensk



FÖRSIKTIGHET

- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda den.
- Anpassa knäleden till användaren på en plats där användarens säkerhet kan garanteras.
- Spara denna instruktionsbok för framtida bruk.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Inledning

Tack för att du har köpt Nabtescos ALLUX™.

ALLUX™ får endast monteras och justeras av personer som har deltagit i ett Nabtesco ALLUX™ certifieringsseminarium och är certifierade. Frågor som rör typisk användning såsom gång, underhåll, driftprocedurer inklusive byte av servicedel, felsökning och varningsanvisningar beskrivs i bruksanvisningen som medföljer en ALLUX™ (nedan kallad ALLUX™ bruksanvisning).

I denna bruksanvisning för appen Justering beskrivs hur du installerar och använder appen Justering (nedan kallad appen) i iOS-systemmiljön.

Innan du justerar ALLUX™, läs noggrant igenom bruksanvisningen för ALLUX™ som nämns ovan och bruksanvisningen för Adjustment App, förstå innehållet tillräckligt och följ noga de säkerhetsföreskrifter som anges i dessa bruksanvisningar.

- Nabtesco äger upphovsrätten till detta dokument.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Apple är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder.
- Bluetooth-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av Nabtesco Corporation sker under licens.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör Denso Wave Incorporated.
- Alla andra företagsnamn och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Innehållsförteckning	2
1 Stödmodell och driftsmiljö	3
2 Installationsprocedurer och initiala inställningar	4
3 Initiala inställningar.....	5
4 Säker position	8
5 Kommunikationsläge och hur man ansluter Bluetooth	9
6 Gemensam drift för den inledande starten och varje skärm	10
7 Inställningsförfarande	11
8 Grundläggande inställningar.....	12
9 Ställa in tidszon	13
10 Kalibrering.....	14
11 Justering av toe release point.....	15
12 Justering av positionen Flexion Yielding.....	16
13 Justering av Stance Extension Dampening.....	17
14 Justering av flexionsmotstånd i svingfas	18
15 Justering av terminalens påverkan.....	19
16 Justering av säkerhetslåset.....	20
17 Inställningar för svagt batteri	21
18 Spara inställningsdata.....	22
19 Avancerade justeringar	23
20 Ställa in fjärrkontrollen	24
20.1 ALLUX™ driftlägen.....	24
20.2 Tilldela driftlägen till knapparna på applikationsfjärrkontrollen.....	25
20.3 Inställningsskärm för fjärrkontroll	26
21 Kopiering av data.....	29
22 Uppgifter om gångdata.....	30
22.1 Skärm för gångdata	30
22.2 Skapa diagramskärm	31
22.3 Skapa en rapport	32
23 Historik över justeringar.....	33
24 Allmänt.....	34
25 Popup-fönster för felmeddelande	35
25.1 Fel på lösenord (skärmen "Ange lösenord")	35
25.2 Lösenordsfel ("Anslutning till ALLUX™ " skärm).....	35
25.3 Fel på lösenord (3 gånger)	35
25.4 Fel vid trådlös anslutning	35
25.5 Fel vid trådlös kommunikation	36
25.6 Säker arbetsställning fel	36
25.7 Fel i den hydrauliska styrningen	36
26 Felsökning	37

1 Stödmodell och driftsmiljö

● ALLUX™ (typ: NE-Z41)

* ALLUX™ (typ: NE-Z4) stöds inte.

Modellen kan identifieras genom utformningen av den främre länkplattan.

Den kan också identifieras med hjälp av indikationen på laddningsporten.



NE-Z41
(Typ som stöds)



NE-Z4
(Typ som inte stöds)



NE-Z41
(Typ som stöds)



NE-Z4
(typ som inte stöds)

● Kompatibelt operativsystem: iPhone med iOS 13 eller senare





Försiktighetsåtgärder för Bluetooth

- Radiovågor som avges av en Bluetooth-enhet kan påverka driften av elektroniska enheter och andra enheter. Stäng av Bluetooth-enheter i närheten av prioriterade sittplatser på tåg, i områden där brandfarlig gas genereras, t.ex. i flygplan nära automatiska dörrar och brandlarmsanordningar, eftersom det kan orsaka en olycka.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage vid användning av Bluetooth-teknik.
- Denna produkt garanterar inte trådlös anslutning till alla Bluetooth-enheter. Bluetooth-enheten som ska anslutas måste överensstämja med Bluetooth-standarden som anges av Bluetooth SIG och måste ha erhållit minst en certifiering. Även om den enhet som ska anslutas uppfyller Bluetooth-standarden kan fenomen som oförmåga att ansluta eller olika visning/funktion uppstå, beroende på enhetens egenskaper och specifikationer.
- Ta inte isär eller modifiera denna produkt eftersom den trådlösa funktionen hos denna produkt har certifierats för att uppfylla tekniska standarder.

2 Installationsprocedurer och initiala inställningar

1. Logga in med ditt Apple-ID.
Tryck på sökikonen  i det nedre högra hörnet av skärmen "App Store".
2. Skriv in appnamnet "ALLUX2" i sökfältet. Tryck på knappen "Sök" på tangentbordet.

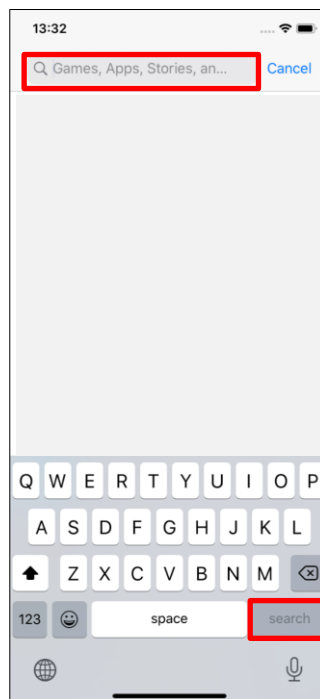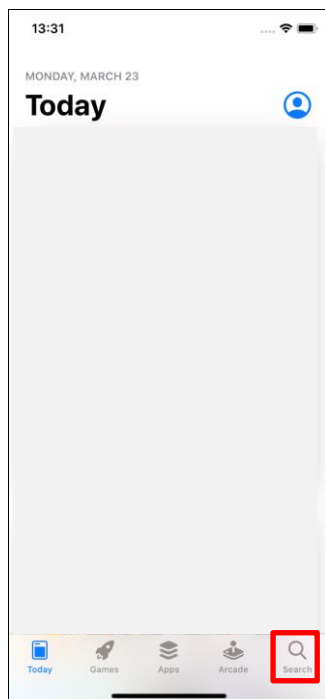

Följande QR-kod kan användas för att installera.



3. När sökresultaten visas trycker du på den önskade appen enligt bilden nedan.




4. Tryck på knappen "GET" och sedan på knappen "INSTALL".
5. När installationen är klar skapas en ikon för appen på smarttelefonens startskärm.
6. Tryck på ikonen för att starta appen.

3 Initiala inställningar




- 1) Tryck på ikonen för denna app för att starta.
- 2) När du startar appen första gången behöver du tillstånd för att använda Bluetooth.

När följande popup-fönster visas trycker du på Tillåt eller OK.

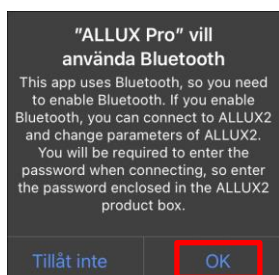


* Popup-skärmen varierar beroende på vilken smartphone du använder.

- 3) Efter att företagets logotyp har visats på skärmen i en sekund växlar denna skärm automatiskt till nästa skärm.

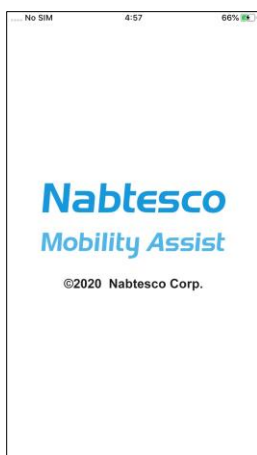


- 4) Skärmen "Ange lösenord" visas. Ange det lösenord som anges i bruksanvisningen. Om du misslyckas med att ange lösenordet 3 gånger måste du starta om appen.

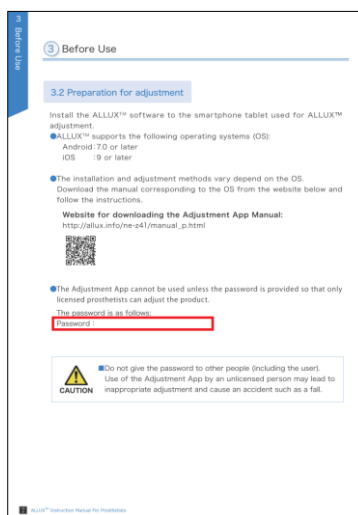

3 Ursprungliga inställningar

- 5) Dialogen "Juridik och reglering" visas.
Läs den och tryck på knappen "OK".

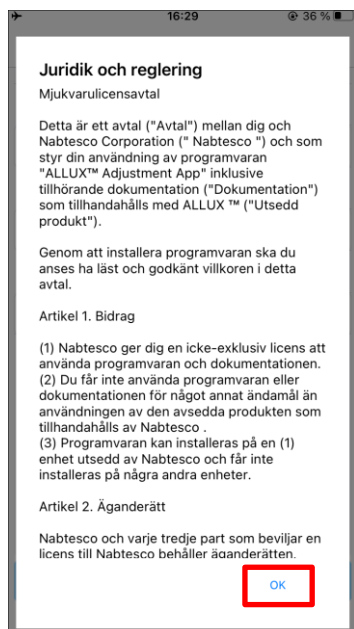

- 6) "Användarprofil för app" visas.
Ange alla uppgifter och tryck på knappen "OK".

Företag namn:

Ange namnet på P&O Clinic eller företaget som App-användaren arbetar för.

Ålder:

Välj ålder på skaderegleraren från listan.

Kön:

Välj kön på skaderegleraren från listan.

3 Ursprungliga inställningar

- 7) Skärmen "Anslutning till ALLUX™" visas.



1. På skärmen "Anslutning till ALLUX™" startar automatiskt sökningen efter trådlösa enheter.
2. De enheter som är relaterade till ALLUX™ listas upp. De angivna tecknen varierar beroende på serienumret för ALLUX™.
Den tredje raden indikerar **anslutningsstatus**.
 - Frånkopplad
 - Anslutning
 - Ansluten
3. "ALLUX:Serienummer" visas på displayen. Om mer än en enhet visas, välj lämplig trådlös enhet enligt serienumret för din egen ALLUX™.

4. Om den trådlösa enheten för ALLUX™ inte finns i listan, kan den trådlösa anslutningen för ALLUX™ vara i viloläge. Försök att aktivera den trådlösa anslutningen genom att böja och sträcka ALLUX™ något eller genom att lägga användarens kroppsvikt på ALLUX™. Tryck sedan på knappen "Avbryt" och sedan på knappen "Skanna" som visas i den positionen för att söka efter trådlösa enheter igen.

5. Tryck på den trådlösa enheten i listan. Om den trådlösa anslutningen lyckas visas skärmen "Anslutning till ALLUX™" automatiskt.

Vid flera på varandra följande anslutningar hoppar du över skärmen "Anslutning till ALLUX™" och kommer till den första startskärmen.

- 8) Skärmen "Anslutning till ALLUX™" visas.

På sidan "Anslutning till ALLUX™" måste du ange det lösenord som medföljer ALLUX™.

Lösenordet visas på laddningsuttaget på ALLUX™.

Om du misslyckas med att ange t lösenordet 3 gånger måste du starta om appen.

När du ansluter för första gången krävs Bluetooth-parning med en smartphone. Tryck på Para ihop för att tillåta det.



Bluetooth-parkopplingsfrågan

"LAPIS ML7125-002 Application" vill parkoppla med din iPhone.

Avbryt

Parkoppla


4 Säker position

Innan ALLUX™ ändras med hjälp av applikationens fjärrkontroll eller innan ALLUX™ justeras eller ställs in med hjälp av denna app, måste användaren inta en position som är säker även om det hydrauliska motståndet ändras. Denna position kallas "säker position". Förklara för användaren om säker position.




- Förklara för användaren om den säkra positionen och se till att användaren förstår den.
- När användaren intar den säkra positionen utan att lägga kroppsvikten på ALLUX™, måste han/hon hålla i ett räcke eller sitta ner. Flexions-/extensionsmotståndet kan plötsligt förändras och leda till ett fall.

[Säker position]

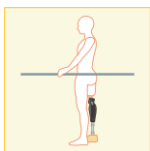

: Läge där ALLUX™ är stillastående, rak och vertikal och kan utsättas för viktbelastning

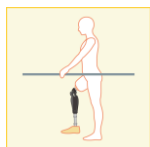

: Tillstånd där ALLUX™ inte är viktbarande och knäet kan vara böjt och stillastående.

[Begäran om säker position]

Om ALLUX™ inte är i säker position vid justering eller inställning av ALLUX™, visas ett popup-fönster.

Kontrollera att användaren har en säker kroppsposition och tryck sedan på knappen "OK" för att återspegla justeringarna eller inställningarna. Om du trycker på knappen "Avbryt" kommer justeringarna eller inställningarna att annulleras.



5 Kommunikationsläge och hur man ansluter Bluetooth


För att spara ström är ALLUX™ inte alltid i kommunikationsläge.

För att aktivera kommunikationsläget måste du utföra följande åtgärder.

När ALLUX™ kommunikation har upprättats med hjälp av denna app, varar detta tillstånd tills kommunikationen avbryts.

[Kommunikationsläge aktiverat]


1. I 5 minuter efter att ALLUX™ har böjts och sträckts något
2. I 5 minuter efter att du har applicerat din kroppsvikt på ALLUX™
3. I 5 minuter efter att laddaren eller OFF-locket har kopplats bort från ALLUX™

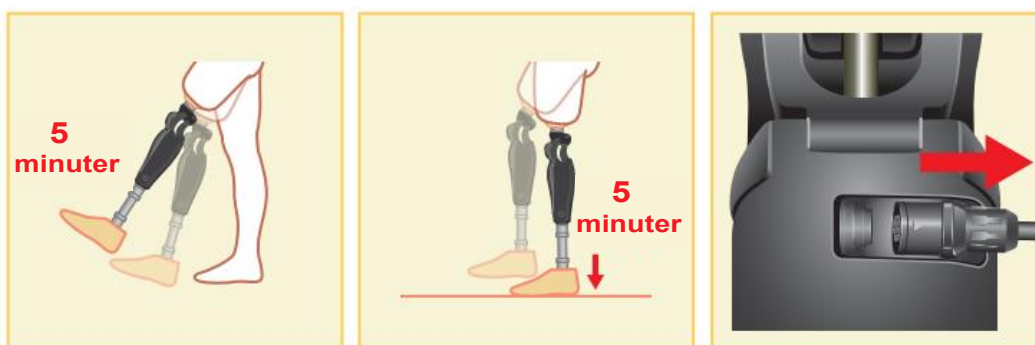

Med applikationen Fjärrkontroll är det möjligt att stänga av den trådlösa anslutningen när användaren sätter sig på ett flygplan etc. För att återställa den trådlösa anslutningen från detta tillstånd krävs åtgärder som de som visas nedan.

1. Koppla bort laddaren eller strömmen OFF cap form ALLUX™ .
2. "Belasta hälen 4 gånger med jämna mellanrum" eller "Belasta tån 4 gånger med jämna mellanrum".

*Du kan växla till vilken du vill med applikationens fjärrkontroll.

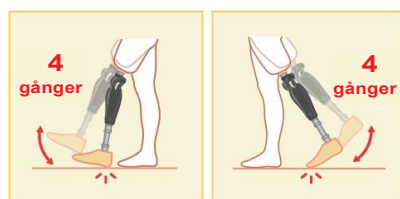

*Om du bara startar appen ansluts den inte till ALLUX™ . Tryck på Bluetooth-ikonen på den första startskärmen (se sidan 10) för att ansluta till ALLUX™ .

*Bara genom att trycka på hemknappen etc. på smarttelefonen avbryts inte kommunikationen med ALLUX™ och denna app fortsätter att fungera bakom skärmen. Om du trycker på ikonen för denna app igen startar den i anslutet tillstånd.



■ Tvinga inte fram en avslutning av appen genom att stänga av smarttelefonen. Om du gör det kan inställningsvärdena ändras till ett oavsiktligt tillstånd och leda till fall.

6 Gemensam drift för den inledande starten och varje skärm

Vid den första idrifttagningen visas startskärmen efter skärmen "Connection to ALLUX™". Vid den andra och efterföljande uppstarter i normalt tillstånd visas den inledande startskärmen efter företagslogotypen.



Bluetooth-ikon:

Tryck på denna ikon för att visa skärmen "Anslutning till ALLUX™". Ikonen ändras beroende på anslutningsstatus. När den är fränkopplad trycker du på ikonen för att aktivera anslutningen.



Fränkopplad




Ansluten

Allmän ikon:

Tryck på denna ikon  för att visa skärmen "Allmänt".

Standby-markering:

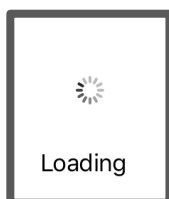

Medan denna app kommunicerar med ALLUX™ eller utför annan bearbetning visas en cirkelformad standby-markering. Medan denna markering visas, är alla funktioner på skärmen inaktiverade.

Senaste datum för justering:

Här visas det datum då ALLUX™ senast justerades.

Batterinivå:

Den visar batterinivån för ALLUX™.



10% eller mindre



10~40%



40~70%



70% eller mer

- Knapp för grundinställning : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Grundinställning" (sidan 12).
- Knapp för avancerade justeringar : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Avancerade justeringar" (sida 23).
- Knapp för fjärrkontroll : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Fjärrkontroll" (sidan 24).
- Knapp för datakopiering : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Datakopiering" (sidan 29).
- Knapp för gångdata : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Gångdata" (sida 30).
- Justering History knapp: Tryck på den här knappen för att visa skärmen " Justering History" (sidan 33).

7 Inställningsförfarande

Justeringarna genomförs i följande steg.

Inledande inställningsskärm

Grund inställningar	Avancerade justeringar	Fjärrkontrollinställning	Datakopia	Gångdata	Justeringshistorik
Tidszonskalibrering	Release Point	Inställningsknapp 2	Datakopia	Gångdatum	Justeringshistorik
Release Point	Ge efter	Inställningsknapp 3	Välj fil	Gör diagram	Datakopia
Ge efter	Stance Extension Dampening	Inställningsknapp 4	Spara data	Gör en rapport	Spara data
Stance Extension Dampening	Swing Flexion	Inställningsknapp 5			
Swing Flexion	Terminal påverkan				
Terminal påverkan	Säkerhetslås				
Säkerhetslås	Låg batterinivå				
Låg batterinivå					
Spara data	Spara data	Spara data			

Allmän

Appens användarprofil

Om ALLUX™

Starta om

Bruksanvisning

Juridisk och regulatorisk


: Obligatoriska inställningar

: Globala inställningar

: Anpassningsbara inställningar

8 Grundläggande inställningar

*När den här skärmen visas är det inte säkert att inställningsobjekten i den nedre delen visas. Svep skärmen uppåt för att visa dessa inställningsobjekt.

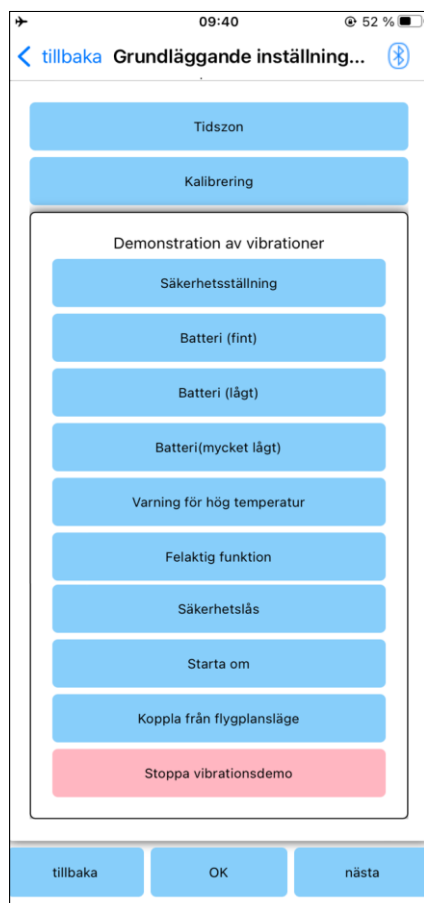

- **Tidszon:**
Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Tidszon" (sidan 13).
- **Kalibrering:**
Tryck på denna knapp för att visa popup-fönstret för kalibreringsdialog (sidan 14).
- **Demonstration av vibrationer:**
ALLUX™ vibrerar för att ge information och varningar till användaren. Genom att trycka på dessa knappar kan användaren känna igen vibrationsmönster. Se till att användaren förstår vilka typer av vibrationslarm som finns och vad de betyder.

När du trycker på varje knapp visas popup-fönstret för ett vibrationslarm som motsvarar knappen. Tryck på knappen "OK" för att vibrera ALLUX™.
- **Säker position:** ALLUX™ vibrerar när användaren bör inta en säker position.
- **Batteri (fin):** ALLUX™ vibrerar när den återstående batterinivån är 3 timmar eller mer.
- **Batterinivå (låg):** ALLUX™ vibrerar när den återstående batterinivån är mindre än 3 timmar.
- **Batteri (mycket låg):** ALLUX™ vibrerar när den återstående batterinivån är otillräcklig och normal gång är omöjlig.
- **Varning för hög temperatur:** ALLUX™ vibrerar när knäleden utsätts för hög temperatur.
- **Felaktig funktion:** ALLUX™ vibrerar när knäleden behöver service.
- **Säkerhetslås:** ALLUX™ vibrerar när säkerhetslåset är aktiverat.
- **Omstart:** ALLUX™ vibrerar när ALLUX™ startas om.
- **Frigör från flygplansläge:** ALLUX™ vibrerar när flygplansläget stängs av. (sida 9)
- **Demo för att stoppa vibrationer:** ALLUX™ stoppar vibrationer.



FÖRSIKTIGHET

- Se till att användaren känner igen alla vibrationsmönster och förstår skillnaderna. Om användaren använder ALLUX™ utan att förstå innebörden av vibrationerna, kanske han/hon inte befinner sig i en säker ställning vid en varning om fel eller hög temperatur och kan falla eftersom ALLUX™ är låst när han/hon försöker gå.


- **Knappen Tillbaka :** Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- **Knappen OK :** Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- **Nästa knapp :** Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Toe Release Point".

9 Ställa in tidszon

ALLUX™ innehåller en intern klocka som används för att registrera antalet steg som tas per dag. Standardinställningen är japansk standardtid (GMT+09:00). Ändra tidszon för att återspegla den lokala tiden.

1. Tryck på **tidszonsväljaren** för att visa tidszonslistan.
2. Välj tidszon för användarens plats.
3. Tryck på knappen "Inställningar" för att skicka tidszonen till ALLUX™.

* När detta val har gjorts är det onödigt att upprepa detta steg om det inte sker en permanent flytt till en annan tidszon. Det är också onödigt att välja den igen när användaren reser utomlands för en kort tid. Observera dock att den tidszon som väljs här blir standardtidszon för när dagen ändras.

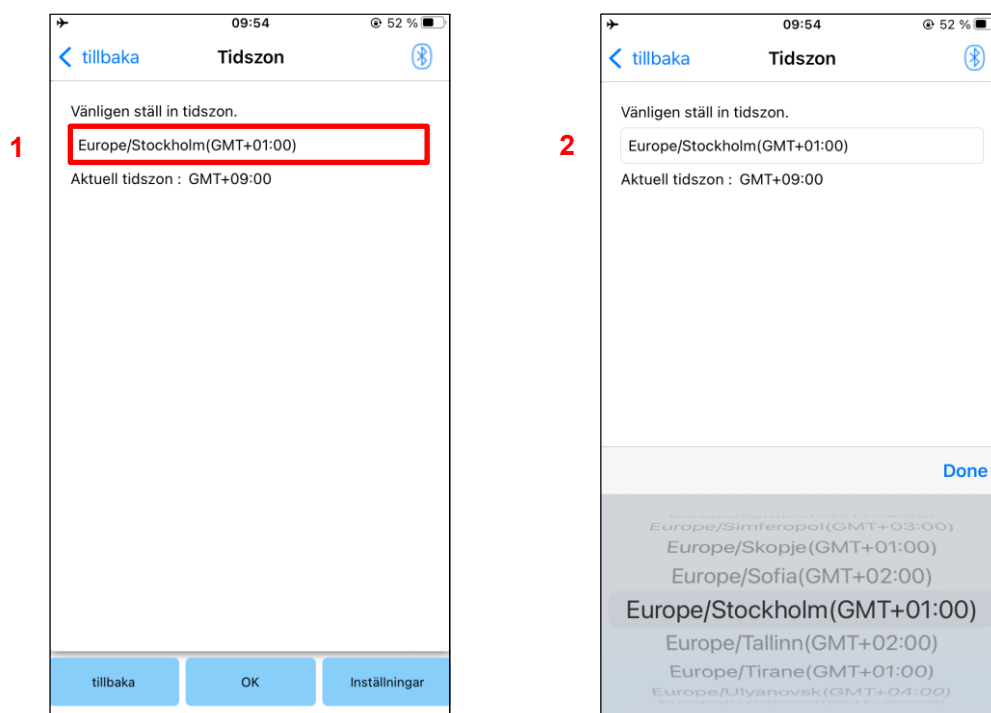


- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Grundinställning".
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Knapp för inställningar : Tryck på denna knapp för att skicka tidszonen till ALLUX™.

10 Kalibrering

När ALLUX™ används för första gången eller justeras på nytt eller när fotdelen byts ut måste ALLUX™ kalibreras.



- Kalibrera ALLUX™ i rätt kroppsposition.
Om den kalibreras under belastning kan användaren inte gå normalt och kan snubbla, vilket kan leda till skador.
- Vid kalibrering, se till att användaren är säker.
Om användaren står på en fot i ett instabilt tillstånd kan denne falla.
- Kalibrera med de slutgiltiga komponenterna monterade och helt åtdragna.
Om justeringar görs kan det hända att ALLUX™ inte fungerar korrekt.
- Tillämpa inställningen för tåutlösningsspunkten (se kapitel 11) efter kalibrering.
Om tåfrigöringspunkten ställs in före kalibreringen kan det göra det omöjligt eller osäkert att gå normalt.

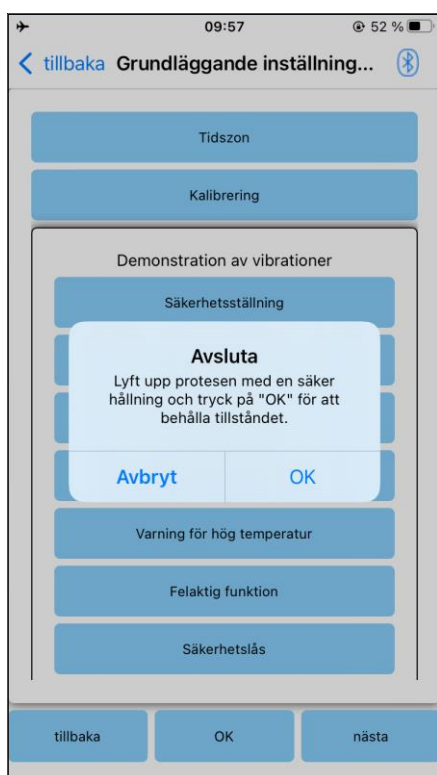

1. Tryck på knappen "Kalibrering" på skärmen "Grundinställning", ett popup-fönster visas.
2. Låt användaren lyfta foten för att hålla ALLUX™ fri från belastning.
* Låt användaren hålla i en ledstång i parallellbarr eller sitta på en stol för att säkerställa hans/hennes säkerhet.
3. Tryck på knappen "OK" i popup-fönstret.
4. Popup-fönstret stängs och skärmen återgår till "Grundinställning".

11 Justering av toe release point


Fabriksinställning = 80

Ställ in Toe Release Point för övergång till svängfasen. Kontrollera gångförhållandena i parallellstänger där användarens säkerhet kan garanteras.



- Kontrollera gångförmågan på en plats där användarens säkerhet kan garanteras, t.ex. i parallellstänger.
- Om ALLUX™ inte kan växla smidigt till svängfasen kan användaren falla.

- Låt användaren stå i parallella stänger och placera protesfoten bakom sig och belasta protesen för att simulera terminal position.
- Mängden tåbelastning visas på displayfältet.
- Ställ in justeringsvärdet till det maximala sensorutgångsvärdet (det indikeras som en röd linje).
- Testa genom att låta användaren gå långsamt.
 - *Om ALLUX™ släpper vid varje steg, öka gradvis tills det fastnar och minska sedan med cirka fem punkter.
 - *Om ALLUX™ inte släpper vid varje steg, minska värdet tills den släpper vid varje steg när du går långsamt.
- När du är klar trycker du på knappen "Nästa" för att gå till justeringsskärmen "Stance Flexion Yielding".

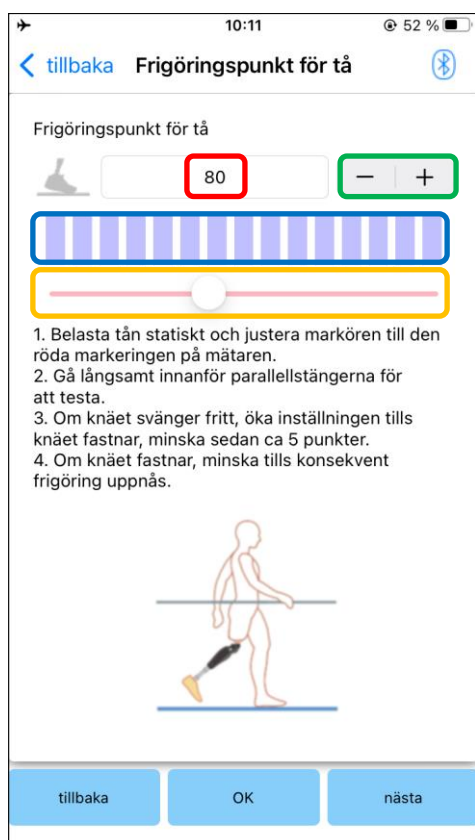

Justeringsvärde (min: 0, max: 200):

Ett värde för justering av tåens frigöringspunkt visas och anges i siffror.

Justeringsvärde stepper:

Dessa knappar ökar eller minskar inställningsvärdet i steg om 1.

Vy över barmätarbox:

Den visar sensorns utmatning under gång.

Skjutreglage för inställningsvärde:

Detta reglage används för att ställa in ett justeringsvärde.

*Justeringar kan göras med något av de tre alternativen: direkt sifferinmatning, + eller - knappar, eller klicka och dra.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Grundinställning".
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Stance Flexion Yielding".

12 Justering av positionen Flexion Yielding

Fabriksinställning = 25 (standardvärde: 20 ~ 30)

Justera eftergivningsmotståndet så att användaren känner sig balanserad när han eller hon sitter i en stol eller går nedför trappor och sluttningar. Öka eller minska värdet gradvis efter användarens önskemål och se alltid till att de står säkert innan du gör justeringar. Det rekommenderas att justera motståndet vid normal temperatur (+20°C/+68°F).



VARNING

- När ALLUX™ används i en miljö med låg temperatur (0°C/+32°F eller lägre) kan utbytesmotståndet vara högre. Kontrollera sträckgränsen innan du börjar använda produkten i en miljö med låga temperaturer. Eftersom ALLUX™ inte kan böjas lätt kan användaren falla i trappor eller sluttningar.




FÖRSIKTIGHET

- Rör inte vid länkdelen på ALLUX™ när du står upp för att undvika klämrisk.
- Eftergivningsmotståndet, för att gå i trappor eller backar, ska justeras efter att alla justeringar har slutförts. Om justeringarna inte har gjorts på ett ändamålsenligt sätt kan användaren falla i trappor eller sluttningar.

- Justera motståndet så att användarens vikt fördelas lika på båda fötterna när användaren sitter på en stol.

*Om motståndet är lågt, öka inställningsvärdet.

*Om motståndet är högt, minska inställningsvärdet.

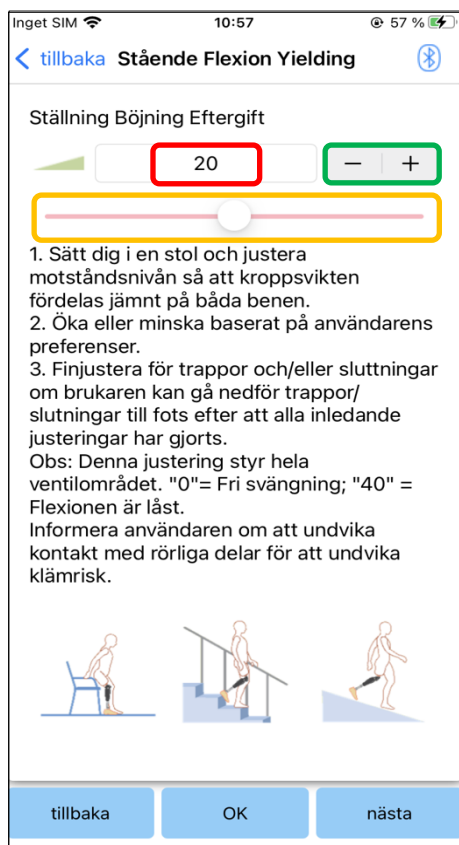

Justeringsvärde (min: 0, max: 40):

Ett värde för justering av stance flexion yielding visas och anges i siffror.

Justeringsvärde stepper:

Dessa knappar ökar eller minskar inställningsvärdet i steg om 1.

Skjutreglage för inställningsvärde:

Detta reglage används för att ställa in ett justeringsvärde.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Toe Release Point".
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Stance Extension Dampening".

13 Justering av Stance Extension Dampening

Fabriksinställning = 5 (standardvärde: 0 ~ 25)

Normalt ställs extensionmotståndet i stance-fasen in på 5, inget motstånd. Justera motståndet endast när användaren går med flexion i stance-fasen. Det rekommenderas att motståndet justeras vid normal temperatur (+20°C/+68°F).



- När ALLUX™ används i en miljö med låg temperatur (0°C/+32°F eller lägre) kan dämpningen av stansförlängningen öka. Kontrollera förlängningsmotståndet innan du börjar använda produkten i en miljö med låga temperaturer. Eftersom ALLUX™ inte enkelt kan förlängas kan användaren snubbla och sedan falla när svankfasen inleds.



- Kontrollera gångförhållandena på en plats, t.ex. i parallellstänger, där användarens säkerhet kan garanteras.
- Användaren måste gå på ett sådant sätt att knäet övergår till svängfasen efter att det har sträckts ut. Eftersom ALLUX™ inte kan övergå till svängfasen i böjt tillstånd för dubbel knärörelse, kan användaren snubbla och sedan falla.

1. Justera motståndet för dämpning av stance extension.

*Om motståndet är lågt, öka inställningsvärdet. *Om motståndet är högt, minska inställningsvärdet.



Justeringsvärde (min: 0, max: 40):

Ett värde för justering av dämpningen av positionens förlängning visas och anges i siffror.

Justeringsvärde stegper:

Dessa knappar ökar eller minskar inställningsvärdet i steg om 1.

Skjutreglage för inställningsvärde:

Detta reglage används för att ställa in ett justeringsvärde.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Stance Flexion Yielding".
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Swing Flexion".

14 Justering av flexionsmotstånd i swingfas

Fabriksinställning = 20 (standardvärde: 15 ~ 35)

Justerar flexionsmotståndet under svängfasen. När motståndet har justerats, baserat på normal gång, kommer knäleden automatiskt att justera flexionsmotståndet i enlighet med gånghastigheten.



FÖRSIKTIGHET

■ Utvärdera gångfunktionen på en plats där användarens säkerhet kan garanteras, t.ex. i parallellstänger.

Om ALLUX™ inte kan växla till svängfas på ett smidigt sätt kan användaren falla.

*Om foten skrapar i golvet på grund av att ALLUX™ inte utlöste svängfasen, justera tåfrigöringspunkten igen enligt anvisningarna i "Justera tåfrigöringspunkten" (sidan 15).

1. Justera svängflexionsmotståndet för normal gånghastighet.

*Om hälen höjs för mycket är motståndet lågt, öka inställningsvärdet.

*Om tårna skrapar i marken är motståndet högt, minska inställningsvärdet.



Justeringsvärde (min: 1, max: 50):

Ett värde för justering av svängflexionsmotståndet visas och anges i siffror.

Justeringsvärde steeper:

Dessa knappar ökar eller minskar inställningsvärdet i steg om 1.

Skjutreglage för inställningsvärde:

Detta reglage används för att ställa in ett justeringsvärde.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Stance Extension Dampening".
- OK-knapp : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Terminal Impact".

15 Justering av terminalens påverkan

Fabriksinställning = 5 (standardvärde: 0 ~ 25)

Justera förlängningsmotståndet under svingfasen. Om terminal påverkan uppstår, öka det gradvis. När motståndet har justerats baserat på normal gång kommer ALLUX™ automatiskt att justera förlängningsmotståndet baserat på gånghastigheten.




FÖRSIKTIGHET

- Utvärdera gångfunktionen på en plats där användarens säkerhet kan garanteras, t.ex. i en ribbstol.
Om motståndet ställs in för högt kan ALLUX™ inte fällas ut helt och användaren kan falla.

1. Justera terminalens slagmotstånd för normal gånghastighet.

*Om motståndet är lågt, öka inställningsvärdet.

*Om motståndet är högt, minska inställningsvärdet.

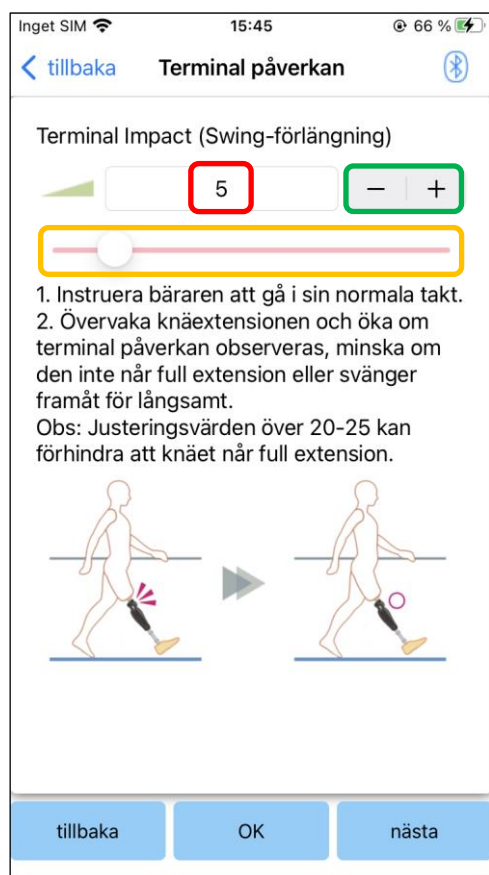

Justeringsvärde (min: 0, max: 40):

Ett värde för justering av terminalpåverkan visas och anges i siffror.

Justeringsvärde stepper:

Dessa knappar ökar eller minskar inställningsvärdet i steg om 1.

Skjutreglage för inställningsvärde:


Detta reglage används för att ställa in ett justeringsvärde.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Swing Flexion".
- OK-knapp : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Säkerhetslås".

16 Justering av säkerhetslåset

Fabriksinställning = Ogiltig

Säkerhetslåset är utformat för att låsa ALLUX™ i en böjd vinkel där användaren stannar under en viss tid med ALLUX™ böjd under en viss viktnivå. För att använda säkerhetslåset, justera reglaget för att ställa in aktiveringstiden.

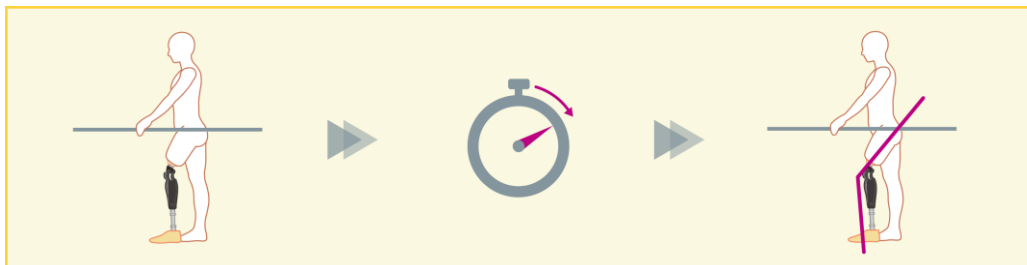


- Kontrollera funktionen på en plats där användarens säkerhet kan garanteras, t.ex. vid parallellstänger.
- Om användaren inte känner till säkerhetslåset kan han/hon oavsiktligt låsa upp ALLUX™, och ALLUX™ kan spännas fast.

*Se till att användaren förstår funktionen och har fått tillräcklig utbildning innan säkerhetslåset ställs in.

1. Justera känsligheten för säkerhetslåset. Om Quick väljs kommer knäet att låsas även med en kortvarig fjädring.

*Om Deaktiverad väljs kommer säkerhetslåset inte att fungera.

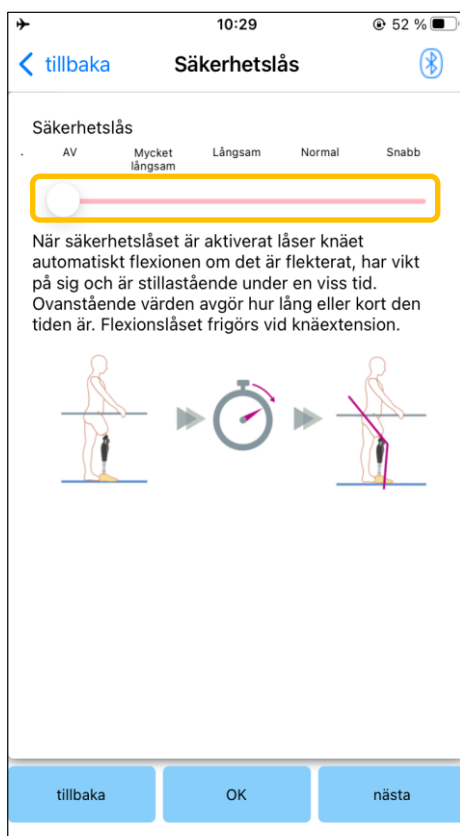

Skjutreglage för inställningsvärde:

Detta reglage används för att ställa in en ungefärlig tid (se nedan.) för aktivering av säkerhetslåset.

- Mycket långsam: Cirka 3 sekunder
 - Långsam: Cirka 2 sekunder
 - Normal: Cirka 1,5 sekunder
 - Snabbt: Cirka 1 sekund
- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Terminal Impact".
 - Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
 - Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa inställningsskärmen för "Lågt batteri".

17 Inställningar för svagt batteri

Fabriksinställning = Högt motstånd (motsvarar flexionsmotståndet 30)

Justera inställningarna för situationer med svagt batteri.



- Om Free väljs ska du se till att användaren kan gå i ett fritt svängtillstånd. Användaren kan testa fri gungning genom att välja fri gungning-läget på fjärrkontrollens skärm.
- Användaren kanske inte kan förflytta sig till en säker plats på grund av det svaga batteriet.

1. Välj flexionsmotstånd när batteriet nästan är urladdat.



Låg batterinivå inställning picker:

Tryck på denna väljare för att välja ett motstånd när batteriet är svagt från följande alternativ.

- Hög resistans (rekommenderas):
Flexionsmotståndet är likvärdigt med justeringsvärdet 30 för stance flexion yielding adjustment value.
- Gratis:
Det finns inget flexionsmotstånd.

*Oavsett vilket du väljer blir förlängningsmotståndet fritt.

- Tillbaka-knapp : Tryck på denna knapp för att visa justeringsskärmen för "Säkerhetslås".
- OK-knapp : Tryck på den här knappen för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Spara data".

18 Spara inställningsdata


Justerings- eller inställningsdata lagras automatiskt i ALLUX™.

Dessa data kan sparas i en mapp på din smartphone.

Sparade data kan användas genom att kopiera data (sidan 29).

Även om inställningsdata inte sparas, sparas inställningsdata för de senaste 5 dagarna automatiskt i justeringshistoriken (se sidan 33).

1. Tryck på knappen "Spara data".
2. Medan sparningen pågår visas en standby-markering och inga åtgärder accepteras.
3. När sparandet har slutförts visas ett popup-fönster.
4. Tryck på knappen "OK" för att återgå till skärmen "Spara data".

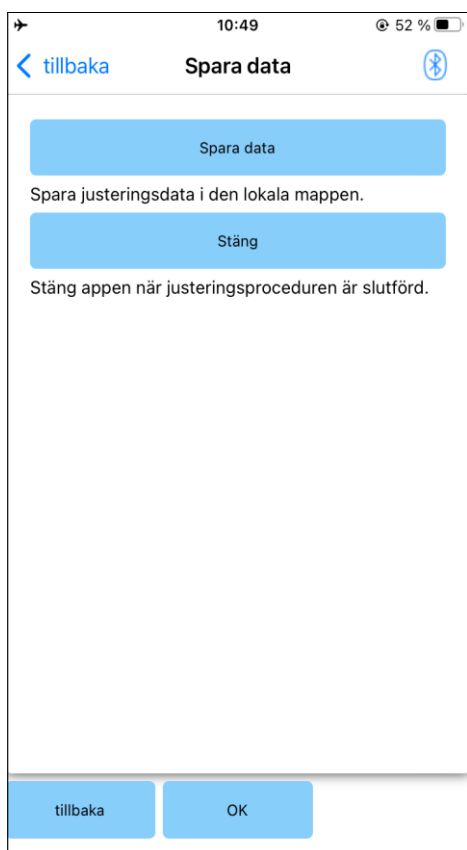

●Knappen Spara data:

Tryck på denna knapp för att spara data.

De sparade data kan användas från skärmen "Datakopiering" (Se sidan 29).

<<Lagringsplats för skapade data>>

*Smartphone "Filer" > "Bläddra" > "På min iPhone" > "ALLUX Pro" > "Datamapp"

- Stäng knapp : Tryck på den här knappen för att avsluta anslutningen till ALLUX™ och avsluta den här appen.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att återgå till föregående skärm.


- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.



19 Avancerade justeringar

De inställningar som tidigare beskrivits i kapitel 10 till 17 kan justeras gemensamt på denna skärm. Vi rekommenderar att du gör de första justeringarna på skärmen "Grundinställning" och gör efterjusteringar på skärmen "Avancerade justeringar" från och med andra gången. Se varje skärm som beskrivs i kapitel 10 till 17 för förklaringar, varningar och försiktighetsåtgärder för varje objekt.

*När denna skärm visas är det inte säkert att inställningsobjekten i den nedre delen visas. Svep skärmen uppåt för att visa dessa inställningsobjekt.

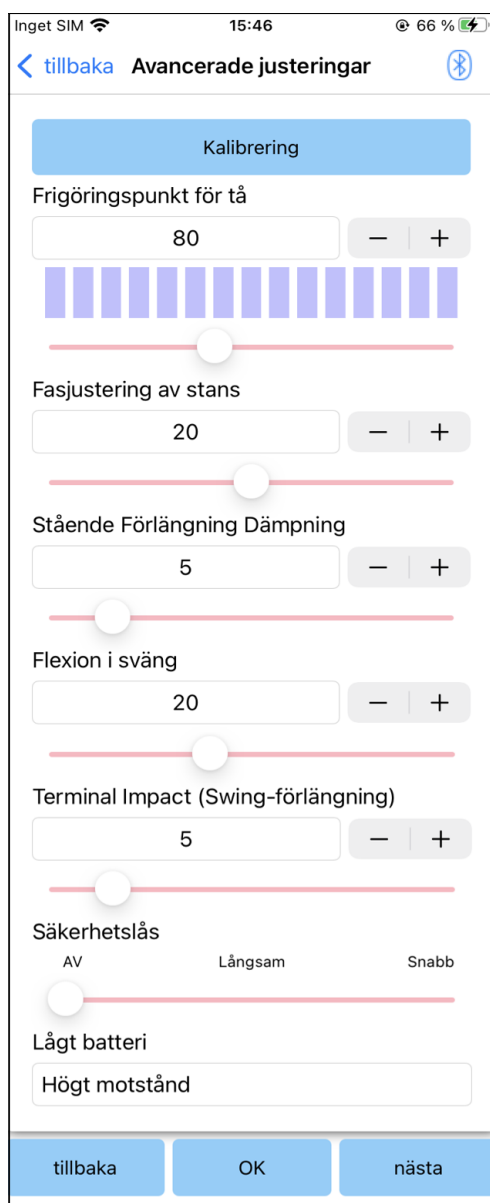

- **Kalibrering:** (sida 14)
Utför kalibrering.
- **Toe Release Point:** (sida 15)
Ändrar värdet för justering av tåutlösningsspunkten.
- **Fasjustering av position (Yielding):** (sida 16)
Ändrar justeringsvärdet för stance flexion yielding.
- **Stance Extension Dampening:** (sida 17)
Ändrar inställningsvärdet för dämpningen av positionens förlängning.
- **Swing Flexion:** (sida 18)
Ändrar värdet för justering av svängningsflexionsmotståndet.
- **Terminalens påverkan:** (sida 19)
Ändrar justeringsvärdet för terminalens påverkan.
- **Säkerhetslås:** (sida 20)
Väljer känslighet för säkerhetslåset.
- **Lågt batteri:** (sidan 21)
Väljer böjmotstånd när batterinivån är låg.
- **Tillbaka-knapp :** Tryck på den här knappen för att visa den första startskärmen.
- **OK-knapp :** Tryck på den här knappen för att visa den första startskärmen.
- **Nästa knapp :** Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Spara data".

20 Ställa in fjärrkontrollen

20.1 ALLUX™ driftlägen


ALLUX™ har följande fem driftlägen.

[Normalt läge]

Normalläget är anpassat för normal gång. ALLUX™ bedömer olika gångsituationer och normala rörelser med hjälp av sensorn och justerar automatiskt flexion och extension.


[Läge för begränsning av flexionsvinkel]

I läget för begränsning av flexionsvinkeln låses flexionsmotståndet vid en angiven vinkel medan extensionsmotståndet förblir fritt.

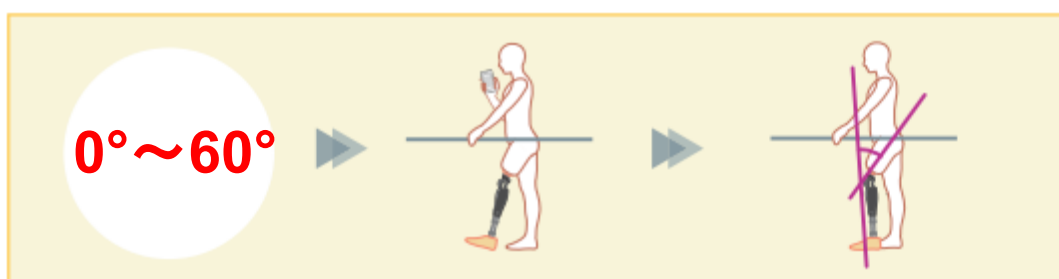

[Variabelt selektivt flexionslåsläge]

ALLUX™ kommer ihåg vid vilken vinkel det variabla selektiva flexionslåsläget är aktiverat. Flexionsmotståndet låses när det når den vinkeln medan extensionsmotståndet förblir fritt.

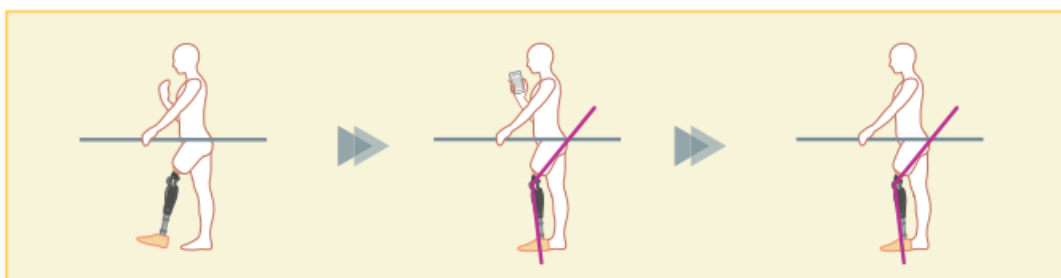


NOTICE

- När läget för begränsning av flexionsvinkeln eller läget för variabelt selektivt flexionslås används får ALLUX™ inte utsättas för alltför stor kraft när den kommer i kontakt med stoppet.
Om ALLUX™ utsätts för en alltför stor slagkraft kan den skadas.

20 Ställa in fjärrkontrollen


[Låsläge för full förlängning]

ALLUX™ är låst i ett helt utsträckt läge. (När den aktiveras med knäflexion tillåter den förlängning tills ALLUX™ når förlängningsstoppet). Detta kan användas som en "Sitt till stå"-funktion.

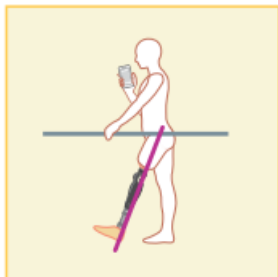

[Läge för fri svängning]

I frikopplingsläge hålls ALLUX™ fri (resistansfritt tillstånd).

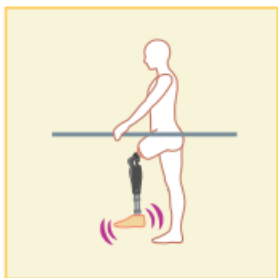

20.2 Tilldela driftlägen till knapparna på applikationsfjärrkontrollen

Ovanstående driftlägen kan tilldelas knapparna på applikationens fjärrkontroll.

Det normala läget är alltid kopplat till knapp 1 på applikationens fjärrkontroll, och inställningarna för detta läge är de som justeras på skärmen "Grundinställning" eller skärmen "Avancerade justeringar".


Du kan fritt tilldela de fem driftlägena ovan till knapparna 2 till 5 på applikationens fjärrkontroll. Standardkonfiguration för fjärrkontroll:

- Knapp 2 : Begränsat läge för flexionsvinkel
- Knapp 3 : Variabelt selektivt läge för flexionslås
- Knapp 4 : Låsläge för full förlängning
- Knapp 5 : Fritt svängläge

20 Ställa in fjärrkontrollen

20.3 Inställningsskärm för fjärrkontroll

*När den här skärmen visas är det inte säkert att inställningsobjekten i den nedre delen visas. Svep skärmen uppåt för att visa dessa inställningsobjekt.

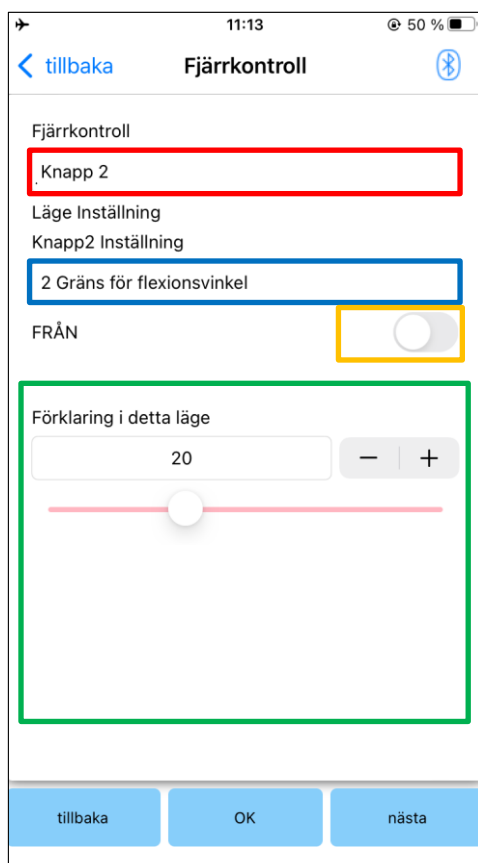

Fjärrkontroll för inställning av plockare:

Tryck på denna pickup för att ändra knappen till set. Välj en knapp från följande lista.

- Knapp 2
- Knapp 3
- Knapp 4
- Knapp 5

Läge Inställning av picker:

Du kan välja vilket läge som ska tilldelas den valda knappen. Välj ett läge från följande lista.

- Normalt läge
- Flexionsvinkel Begränsat läge
- Variabelt selektivt läge för flexionslås
- Full förlängning Låsläge
- Fritt svängläge

Avaktiverad brytare:

När denna omkopplare är på ON fungerar inte den valda knappen, även om man trycker på den på applikationens fjärrkontroll. Dessutom är justeringsfältet för varje läge dolt.

Justeringsfält för varje läge:

I läget Normal och läget Begränsad flexionsvinkel visas justeringsfältet.

I lägena Variable Selective Flexion Lock, Full Extension Lock och Free Swing visas inte justeringsfältet.

- Tillbaka-knapp : Tryck på den här knappen för att visa den första startskärmen.
- OK-knapp : Tryck på den här knappen för att visa den första startskärmen.
- Nästa knapp : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Spara data".

20 Ställa in fjärrkontrollen

[Justeringsfält för normalt läge]

Ingnet SIM 15:46 67 %

< tillbaka Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Knapp 2

Läge Inställning

Knapp2 Inställning

1 Normal

FRÅN

Laddning av standarddata

Frigöringspunkt för tå

80

Ställning Böjning Eftergift

20

Stående Förlängning Dämpning

5

Flexion i sväng

20

Terminal Impact (Swing-förlängning)

5

Säkerhetslås

AV Aktiverad

tillbaka OK nästa

- Knapp för laddning av standarddata:
De justeringsvärden som ställts in med knapp 1 (justeringsvärden som ställts in på skärmen "Grundinställning" eller skärmen "Avancerade justeringar") kan laddas genom att trycka på denna knapp.
- Utlösningsspunkt för tå:
Ändrar värdet för justering av tåfrigöring.
- Stans Flexion Yielding:
Ändrar justeringsvärdet för stance flexion yielding.
- Stance Extension Dämpning:
Ändrar inställningsvärdet för dämpningen av positionens förlängning.
- Flexion i sväng:
Ändrar värdet för justering av svängningsflexionsmotståndet.
- Terminalens påverkan:
Ändrar justeringsvärdet för terminalens påverkan.
- Säkerhetslås:
Väljer om säkerhetslåset ska aktiveras eller inaktiveras. För säkerhetslåsets känslighet (tid för att aktivera säkerhetslåset) används det värde som justerats på skärmen "Grundinställning" eller skärmen "Avancerade justeringar".

* Hänvisa till varje skärm som beskrivs i kapitel 11 till 16 för förklaringar, varningar och försiktighetsåtgärder för varje objekt.

20 Ställa in fjärrkontrollen

[Justeringsfält för läget Begränsad flexionsvinkel]

11:13 50 %

< tillbaka Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Knapp 2

Läge Inställning

Knapp2 Inställning

2 Gräns för flexionsvinkel

FRÅN

Förklaring i detta läge

20 - +

tillbaka OK nästa


● Låsningsvinkel:

ALLUX™ är låst i den inställda vinkeln.

21 Kopiering av data

De data som sparats på skärmen "Spara data" (sidan 22) kan laddas för att ändra inställningarna för ALLUX™.

1. Tryck på knappen "Välj fil" för att visa skärmen "Välj fil".
2. Välj de data som du vill använda.
3. Tryck på knappen "OK" för att återgå till skärmen "Datakopiering".
Vid den tidpunkten laddas och visas tidigare data.
4. Bekräfta uppgifterna.
5. Tryck på knappen "Skriv över" för att skriva justeringsdata.

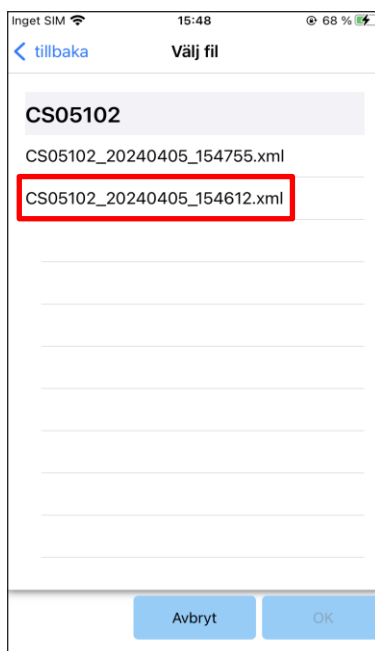

Uppgifter som ska användas

Skärmen för kopiering av data

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.

*Om du trycker på någon av knapparna ovan utan att först trycka på knappen "Skriv över" kommer data inte att skrivas över.

Skärmen för val av fil

- Knappen Avbryt : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Datakopiering" utan att ladda data.
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Data Copy" efter laddning av data.

22 Uppgifter om gångdata

ALLUX™ registrerar gånghistorik (steg per kadens) under en period på två år och visar den för en viss period som ett stapeldiagram eller histogram. Dessa gångdata kan skrivas ut.

22.1 Skärm för gångdata

Väljare för inspelning:

Välj om data ska registreras eller inte.

- Aktivera
- Inaktivering/Data Del

*När "Inaktivera/Data radera" väljs visas ett popup-fönster för bekräftelse. Om du trycker på knappen "OK" raderas alla sparade data.

Väljare av intervall:

Välj en period för data som ska visas i ett diagram.

Du kan välja mellan följande alternativ.

- Dag
- Månad
- Halvår
- Två år

*Om 2 år väljs begränsas perioden till 2 år före aktuellt datum.

* När "Stapeldiagram" har valts med väljaren "Form", kan du inte välja "Dag" med väljaren "Period".

Formulärväljare:

Du kan välja diagramform mellan "Stapeldiagram" och "Histogram".

Väljare för periodurval:

Välj ett startdatum ("Från") och ett slutdatum ("Till") med hjälp av väljaren. När du väljer ett datum ändras det andra datumet automatiskt i enlighet med det intervall som valts med väljaren "Period".

- Knapp Skapa diagram: Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Skapa diagram".
- Knapp Gör rapport: Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Skapa rapport".
- Knappen Tillbaka: Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Knappen OK: Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.


22 Uppgifter om gång

22.2 Skapa diagrammskärm

En graf skapas baserat på de inställningar som gjorts på skärmen "Gait Data".

Stapeldiagrammet är färgkodat efter kadens.

Histogrammet visar de aggregerade data under den "Period" som valts med väljaren.

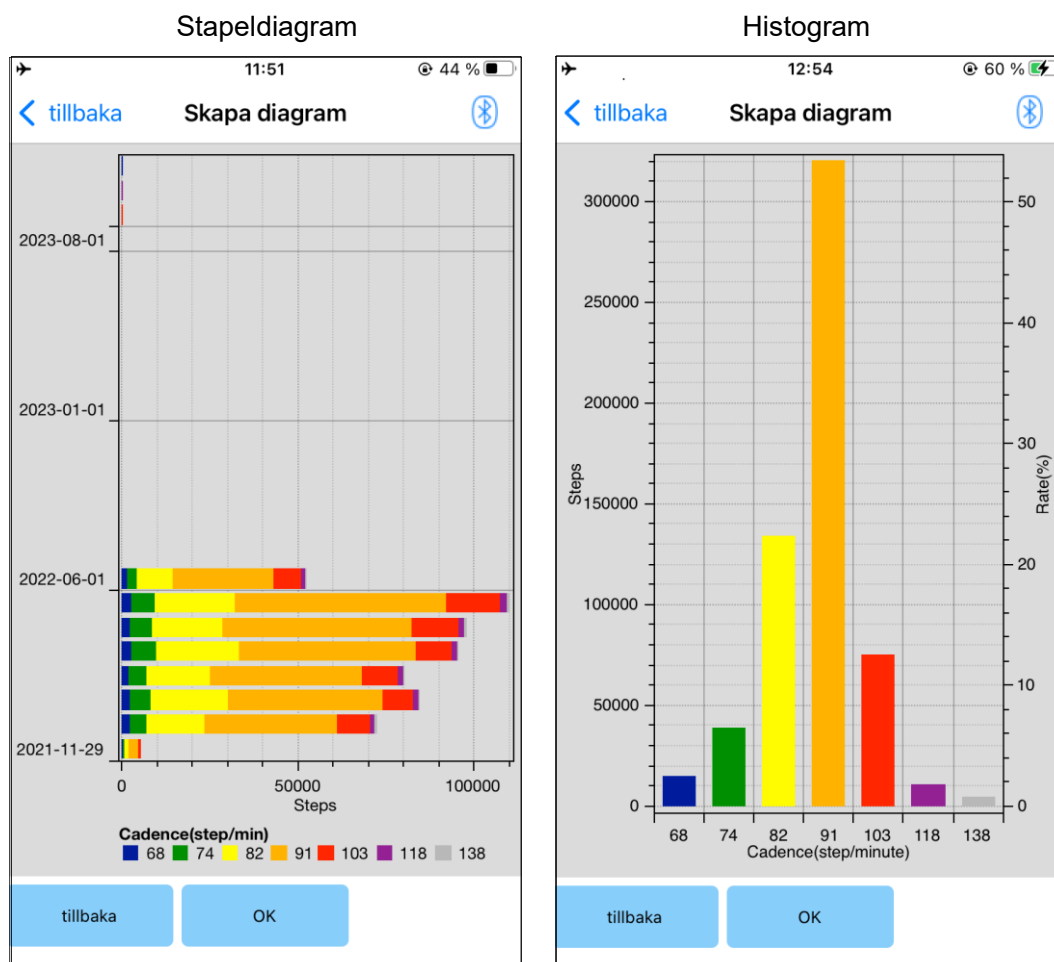

● Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Gait Data".

● Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.

22 Uppgifter om gång

22.3 Skapa en rapport

En rapport skapas för den period som anges på skärmen "Gait Data".

Både ett stapeldiagram och ett histogram finns med i rapporten.

Du kan återspegla användarinformationen och kommentarerna som anges på den här skärmen i rapporten.

Inget SIM 15:48 68 %

< tillbaka Skapa rapport

Användarinformation

ALLUX™ Användarnamn :
 Höjd[cm] :
 Vikt[kg] :
 Ålder :
 Aktiv Lebel:
 Fotmodul :

Ansvarig person

ALLUX™ Inställning

Frigöringspunkt för tå	80
Ställning Flexion	20
Eftergift	
Stående Förlängning	5
Dämpning	
Sving Flexion	20
Slutlig påverkan	5
Säkerhetslås	AV
Lågt batteri	Högt motstånd

Kommentarer

tillbaka Skapa en rapport

Kolumn för användarinformation:

Redigeraren har standardinställningar som de som visas vänster, men du kan ta bort dem eller lägga till nya inställningar som du vill.

Ansvarig person i kolumnen:

Ange information om författaren (användaren av denna app).

Du kan också ange företagsnamnet på några rader.

ALLUX™ Inställning:

Gångparametrar laddas från ALLUX™ och visas automatiskt.



Kommentarer:

Ange kommentarer vid behov.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa skärmen "Gait Data".
- Gör en rapport-knapp : Tryck på denna knapp för att skapa en rapport i PDF-format.

Tryck på Filer > Bläddra > På min iPhone > ALLUX Pro > datamapp på din smartphone för att hitta den skapade rapporten.


Bild av en skapad rapport

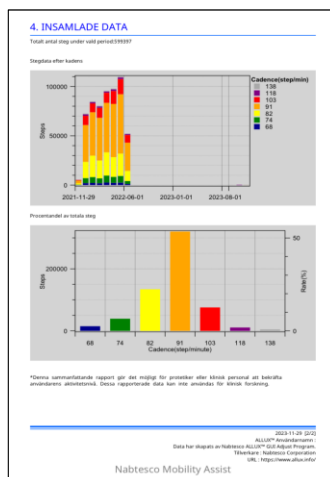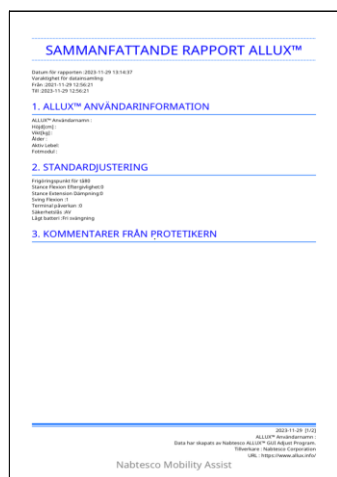

23 Historik över justeringar

Denna app lagrar historikdata för justeringar som gjorts i på din smartphone under upp till de senaste 5 dagarna. De sparas separat från justeringsdata på skärmen "Spara data" (sidan 22). Du kan se historik och tillämpa data för ALLUX™.

* Genom att scrolla visningsområdet horisontellt på denna skärm kan du se tidigare data. I tidigare data kan historiken för justeringar som gjorts med andra ALLUX™ -enheter inkluderas. Kontrollera uppgifterna innan du använder dem.

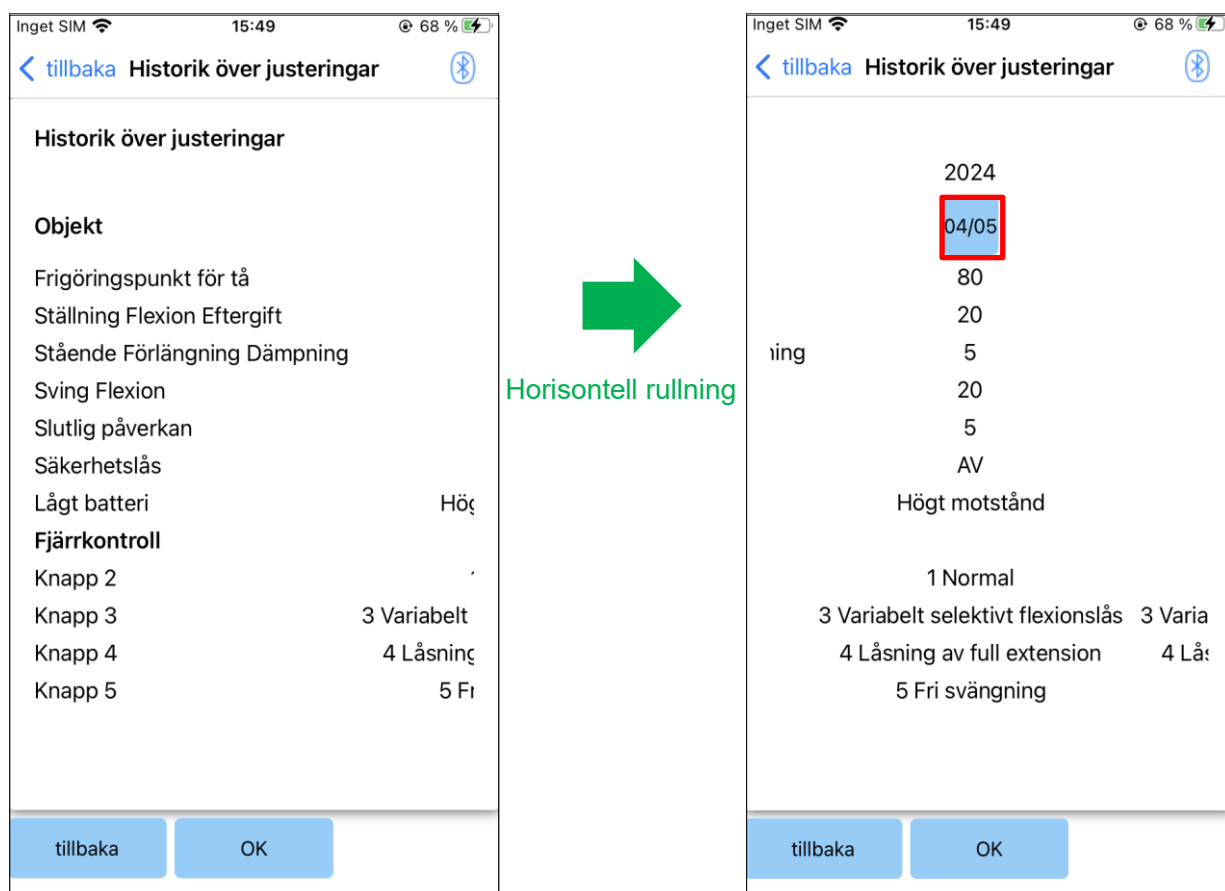

Knapp för datum:


När du trycker på knappen visas skärmen "Kopiera data" (sidan 29) och du kan skicka de data som visas till ALLUX™.

- Knappen Tillbaka : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.
- Knappen OK : Tryck på denna knapp för att visa den första startskärmen.

24 Allmänt

När du trycker på ikonen Allmänt  på den första startskärmen (sidan 10), visas skärmen "Allmänt" på skärmen.

Du kan återställa den skärm som bara visas vid den första starten och du kan bekräfta programversionen för ALLUX™.

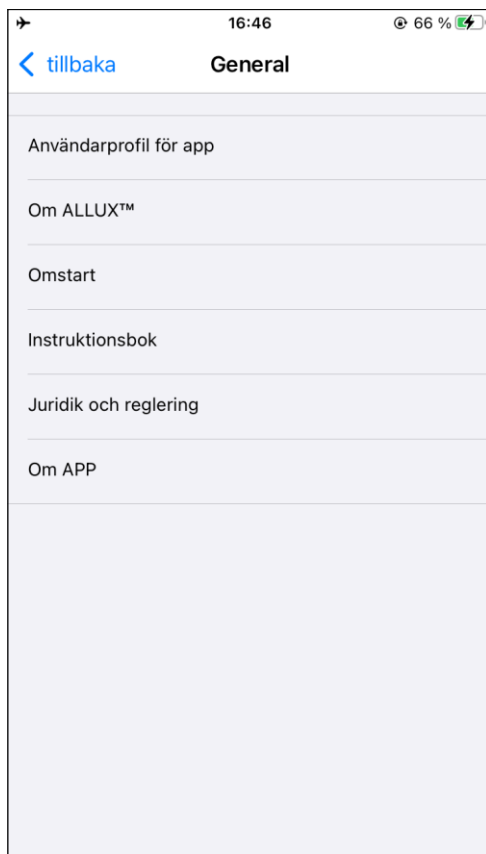

- Användarprofil för app:

Skärmen "Användarprofil för app" (sida 6) visas.

- Om ALLUX™ :

Skärmen "Om ALLUX™ " visas.

- Omstart:

Startar om ALLUX™ .

Ett popup-fönster för bekräftelse visas. Tryck på knappen "OK".

*Eftersom kommunikationen har avbrutits måste du aktivera anslutningen igen.
(Samma åtgärd som att ta bort och sätta i strömväggens strömbrytare.)

- Instruktionsbok:

Om du trycker på denna knapp länkas du till nedladdningssidan för bruksanvisningen. Ett användarnamn och ett lösenord krävs.

- Juridik och reglering:

Dialogrutan "Lagar och regler" (sidan 6) visas.

- Om APP:

Visar applikationens namn, användning, UDI-DI, etc.

[Om ALLUX™ skärm]



Denna skärm visar versionen av ALLUX™ .

- App Version : Versionen av denna app visas.

- ALLUX™ firmware-version :

Firmware-versionen av ALLUX™ visas.


- Serienummer : Serienumret för ALLUX™ visas.

25 Popup-fönster för felmeddelande

Om ett fel uppstår under en operation visas ett popup-fönster.

Följ instruktionerna i popup-fönstret.


25.1 Fel på lösenord (skärmen "Ange lösenord")

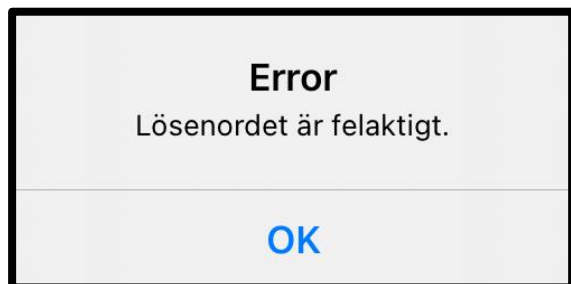

Detta fel uppstår när fel lösenord har angetts på skärmen "Enter Password".

Försök att ange det lösenord som anges i bruksanvisningen igen. (sida 5)

25.2 Lösenordsfel ("Anslutning till ALLUX™ " skärm)

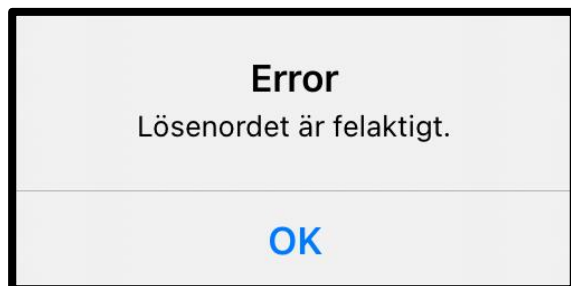

Detta fel uppstår när fel lösenord har angetts på skärmen "Anslutning till ALLUX™ ". Försök att

ange lösenordet som anges

på laddningsporten igen. (sida 7)

25.3 Fel på lösenord (3 gånger)



Detta fel uppstår om du inte lyckas ange


lösenordet 3 gånger på skärmen "Ange lösenord" eller på skärmen "Anslutning till ALLUX™ ".

Och sedan stängs den här appen på en gång.

När du startar appen igen kan du ange

lösenordet igen.

25.4 Fel vid trådlös anslutning

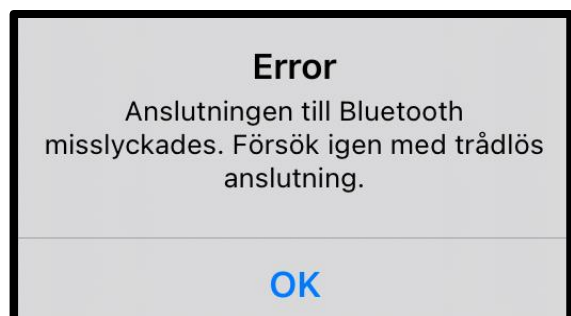

Detta fel uppstår när den trådlösa anslutningen mellan ALLUX™ och Bluetooth på

smarttelefonen inte fungerar. Försök att slå PÅ

den trådlösa anslutningen för ALLUX™

på sidan 9.

25 Popup-fönster för felmeddelande

25.5 Fel vid trådlös kommunikation



Detta fel uppstår när kommunikationen mellan ALLUX™ och appen på din smartphone misslyckas. Aktivera den trådlösa anslutningen igen på sidan 10.

Om justering pågår, kontrollera justeringsvärdet igen efter återinkoppling.

25.6 Säker arbetsställning fel



Om användaren inte intar en säker position kan ALLUX™ inte ändra inställningarna. Se till att användaren intar en säker position enligt sidan 8.

25.7 Fel i den hydrauliska styrningen



Eftersom hydraulstyrningen kan vara ur funktion stoppas styrningen av ALLUX .™
Kontakta återförsäljaren för underhållsservice.

26 Felsökning

Problem	Kontrollera objekt	Åtgärd
Justeringsappen kan inte installeras.	Kontrollera att operativsystemet har rätt version.	Uppdatera operativsystemet till iOS 13 eller senare.
	Kontrollera att hårddisken på din smartphone etc. har tillräckligt med ledigt utrymme.	Öka det lediga utrymmet på hårddisken.
ALLUX™ kan inte anslutas.	Kontrollera att ALLUX™ känns igen på skärmen "Anslutning till ALLUX™ " (sidan 7).	Välj ALLUX™ på skärmen "Anslutning till ALLUX™ ".
	Kontrollera att ALLUX™ - kommunikationen inte är ansluten till flera enheter.	ALLUX™ kan inte anslutas till flera enheter. Prova åtgärderna i följande ordning. 1. Koppla bort applikationens fjärrkontroll. 2. Stäng av appen Justering och applikationens fjärrkontroll. 3. Om användaren använder applikationens fjärrkontroll, be användaren att koppla bort den.
	Kontrollera att Bluetooth är "PÅ" på din smartphone.	Slå PÅ Bluetooth på din smartphone.
	Kan inte anslutas även med ovanstående åtgärder.	Utför följande tre steg innan du återansluter. (1) Starta om ALLUX™ nätaggregat. (Sätt i laddaren eller strömväxlingslocket en gång och ta sedan bort det). (2) Stäng av smarttelefonens Bluetooth en gång och slå sedan på den igen. (3) Starta om appen för justering.
ALLUX™ anges inte på skärmen "Anslutning till ALLUX™ ".	Kontrollera att ALLUX™ trådlös anslutning är ON.	Slå PÅ trådlös anslutning med hänvisning till (sida 9)
	Kontrollera att batteriet för ALLUX™ är laddat.	Ladda batteriet för ALLUX™ .
	Kontrollera att flera appar fungerar samtidigt.	Stäng onödiga appar.
	Kontrollera att Bluetooth-funktionen är "PÅ" på din smartphone.	Slå på Bluetooth-funktionen.

26 Felsökning

Kommunikationen mellan ALLUX™ och App kan lätt avbrytas.	Kontrollera att batterikapaciteten för ALLUX™ eller smartphone är låg batteristatus.	Ladda batteriet till ALLUX™ eller din smartphone.
	Check ALLUX™ används under specifika trådlösa förhållanden, t.ex. vid järnvägar, motorvägar, TV-torn, flygplatser, mässor och sjukhus.	Undvik att använda enheten i en miljö där tåg eller fordon ofta kommer och går, eller i en miljö där det finns flera trådlösa anslutningar.
	Kontrollera om det finns omfattande skydd mot radiovågor i närheten av ALLUX™ användaren.	Ta bort skydd som blockerar radiovågor.



Nabtesco Corporation

Tillverkare

Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi Higashinada-ku
Kobe, Japan 658-0024

TEL: +81-78-413-2724

FAX: +81-78-413-2725

<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Auktoriserad representant för EU-länder

PROTEOR SAS

6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollinaire
Frankrike

TEL: +33 3 80 78 42 42

FAX: +33 3 80 78 42 15

cs@proteor.com



Kontakt

Vänligen kontakta oss om du upptäcker att någon sida saknas eller är oordnad.

Nabtesco

Nabtesco Corporation