



Säätö App Käyttöohjeet

(iOS-versio)

Protetisteille

Tuotetyyppi : NE-Z41, NE-Z41SH

Asiakirjan numero : 81-SS00127 (ver.6)

Sovellus Ver.1.0.0 tai uudempi.

Antopäivä : 2025-10-31

Kieli : Suomi



VAROITUS

■ Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

■ Säädä polvinivel käyttäjälle sopivaksi paikassa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa.

■ Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Johdanto

Kiitos, että olet ostanut Nabtescon ALLUX™.

ALLUX™ voidaan koota ja säätää vain sellaisten henkilöiden toimesta, jotka ovat osallistuneet Nabtescon ALLUX™ -sertifikaattiseminaariin ja joilla on sertifiointi. Tyypilliseen käyttöön liittyvät asiat, kuten kävely, huolto, toimintamenetelmät, mukaan lukien huolto-osan vaihto, vianetsintä ja varoitukset, on kuvattu ALLUX™ -laitteen mukana tulevassa käyttöohjeessa (jäljempänä ALLUX™ -käyttöohje).

Tässä Adjustment App -käyttöoppaassa kuvataan Adjustment App -sovelluksen (jäljempänä "sovellus") asentaminen ja käyttö iOS-järjestelmäympäristössä.

Ennen ALLUXin™ säätämistä lue perusteellisesti edellä mainittu ALLUX™ -käyttöohje ja Adjustment App -käyttöohje, ymmärrä riittävästi niiden sisältö ja noudata tiukasti näissä käyttöohjeissa mainittuja turvallisuusohjeita.

- Nabtesco omistaa tämän asiakirjan tekijänoikeudet.
- IOS on Cison tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
- iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Apple on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.
- Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Inc. ja Nabtesco Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssin nojalla.
- QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut yritysten nimet ja tuotenimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Sisällysluettelo	2
1 Tuettu malli ja toimintaympäristö	3
2 Asennusmenettelyt ja alkuasetukset	4
3 Alkuasetukset	5
4 Turvallinen asento	8
5 Viestintätila ja Bluetooth-yhteyden muodostaminen	9
6 Yhteinen toiminta alkukäynnistyksen ja kunkin näytön osalta	10
7 Sääto menettely	11
8 Perusasetukset	12
9 Aikavyöhykkeen asettaminen	13
10 Kalibrointi	14
11 Varpaiden vapautuskohdan säätäminen	15
12 Asennon säätäminen Flexion Yielding	16
13 Asentopidennyksen vaimennuksen säätäminen	17
14 Heilahdusvastuksen säätäminen	18
15 Terminaalin vaikutuksen säätäminen	19
16 Turvalukon säätäminen	20
17 Akun alhaiset asetukset	21
18 säätötietojen tallentaminen	22
19 Edistyneet säädöt	23
20 Kaukosäätimen asettaminen	24
20.1 ALLUX™ toimintatilat	24
20.2 Toimintatilojen osoittaminen sovelluskaukosäätimen painikkeille Controlin painikkeille	25
20.3 Kaukosäätimen asetusnäyttö	26
21 Tietojen kopiointi	29
22 Kävelytiedot	30
22.1 Kävelytiedot-näyttö	30
22.2 Tee kaavion näyttö	31
22.3 Raportin luominen	32
23 Säätohistoria	33
24 Yleistä	34
25 Ponnahdusikkuna virheilmoitus	35
25.1 Salasanavirhe ("Enter Password" -näyttö)	35
25.2 Salasanavirhe ("Yhteys ALLUXiin™ " -näyttö)	35
25.3 Salasanavirhe (3 kertaa)	35
25.4 Langattoman yhteyden virhe	35
25.5 Langattoman tiedonsiirron virhe	36
25.6 Turvallisen asennon virhe	36
25.7 Hydraulinen ohjausvirhe	36
26 Vianmääritys	37

1 Tuettu malli ja toimintaympäristö

● ALLUX™ (tyyppi: NE-Z41)

* ALLUX™ (tyyppi: NE-Z4) ei ole tuettu.

Mallin voi tunnistaa etulinkkityynyn muotoilusta.

Sen voi tunnistaa myös latausportin merkinnästä.



NE-Z41
(Tuettu tyyppi)



NE-Z4
(Ei tuettu tyyppi)



NE-Z41
(Tuettu tyyppi)



NE-Z4
(ei tuettu tyyppi)

● Yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Katso App Storesta löytyvät yhteensopivuustiedot.





Bluetoothiin liittyvät varotoimet

- Bluetooth-laitteen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa elektronisten laitteiden ja muiden laitteiden toimintaan. Sammuta Bluetooth-laitteet, kun ne ovat lähellä etuoikeutettuja istuimia junissa tai alueilla, joilla syntyy syttyvää kaasua, kuten lentokoneissa automaattisten ovien ja palohälytyslaitteiden läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Emme ota vastuuta tietojen vuotamisesta Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä.
- Tämä tuote ei takaa langatonta yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa. Liitettävän Bluetooth-laitteen on oltava Bluetooth SIG:n määrittelemän Bluetooth-standardin mukainen, ja sillä on oltava vähintään sertifiointi. Lisäksi, vaikka liitettävä laite olisikin Bluetooth-standardin mukainen, laitteen ominaisuuksista ja eritelmistä riippuen voi esiintyä ilmiöitä, kuten yhteyden muodostamisen estyminen tai erilainen näyttö/toiminta.
- Älä pura tai muuta tätä tuotetta, sillä tuotteen langaton toiminta on sertifioitu teknisten standardien mukaiseksi.

2 Asennusmenettelyt ja alkuasetukset

1. Kirjaudu sisään Apple ID:lläsi.
Napauta hakukuvaketta  App Store -näytön oikeassa alakulmassa.
2. Kirjoita hakukenttään sovelluksen nimi "ALLUX2". Napauta näppäimistön "Etsi"-painiketta.

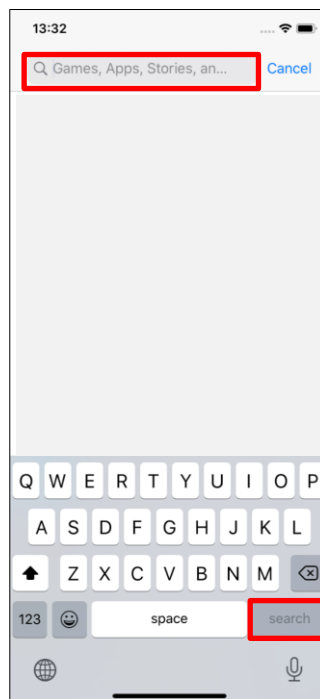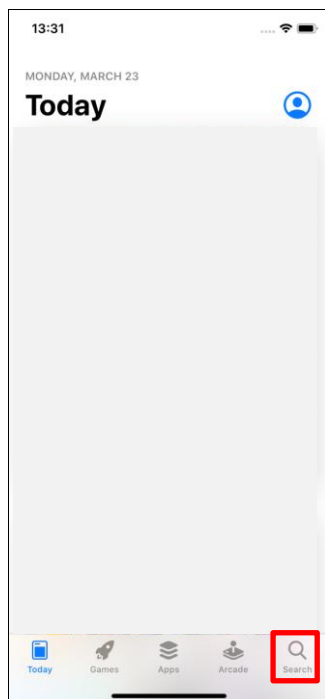

Asennus onnistuu seuraavan QR-koodin avulla.



3. Kun hakutulokset on näytetty, napauta kohdesovellusta alla olevan kuvan mukaisesti.




4. Napauta "GET"-painiketta ja napauta sitten "INSTALL"-painiketta.
5. Kun asennus on valmis, sovelluksen kuvake luodaan älypuhelimien aloitusnäyttöön.
6. Käynnistä sovellus napauttamalla kuvaketta.

3 Alkuasetukset




- 1) Aloita napauttamalla tämän sovelluksen kuvaketta.
- 2) Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, tarvitset luvan käyttää Bluetoothia.

Kun seuraava ponnahtusikkuna tulee näkyviin, napauta Salli tai OK.

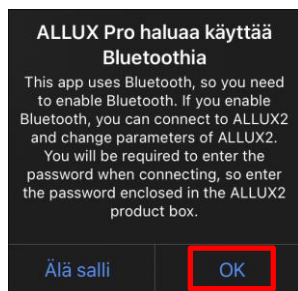

* Ponnahtusikkuna vaihtelee käyttämäsi älypuhelimien mukaan.

- 3) Kun yrityksen logo näkyy näytöllä sekunnin ajan, näyttö siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön.

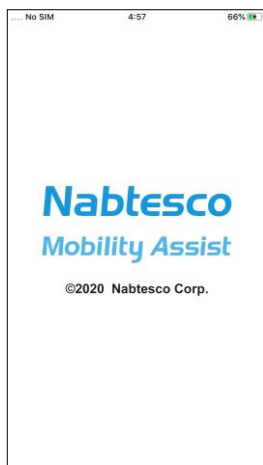


- 4) "Enter Password" -näyttö tulee näkyviin. Syötä käyttöohjeessa ilmoitettu salasana. Jos salasanan syöttäminen epäonnistuu kolme kertaa, sinun on käynnistettävä sovellus uudelleen.



3 Alkuasetukset

- 5) Näyttöön tulee "Lainsäädäntö ja sääntely" valintaikkuna.

Lue se ja napauta "OK"-painiketta.

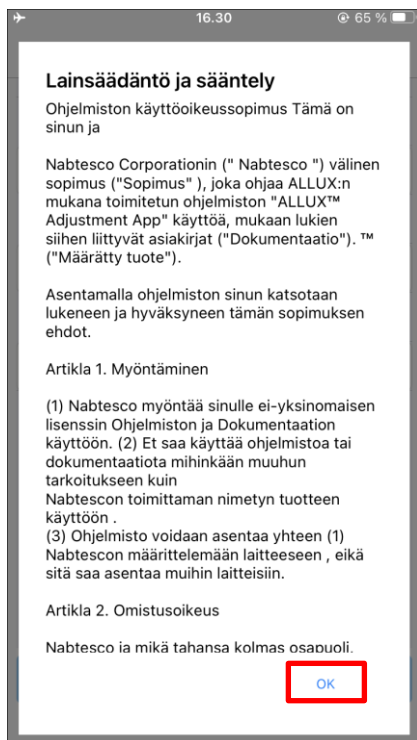

- 6) "Sovelluksen käyttäjäprofiili" tulee näkyviin.

Syötä kaikki tiedot ja napauta "OK"-painiketta.

Yrityksen nimi :

Kirjoita P&O-klinikan nimi tai yritys, jossa App-käyttäjä työskentelee.

Ikä:

Valitse säätäjän ikä luettelosta.

Sukupuoli:

Valitse säätäjän sukupuoli luettelosta.

3 Alkuasetukset

7) Näyttöön tulee "Connection to ALLUX™" -näyttö.



1. "Yhteys ALLUXiin™" -näytössä langattomien laitteiden skannaus käynnistyy automaattisesti.

2. ALLUXiin liittyvät laitteet™ on lueteltu ylhäällä. Ilmoitetut merkit vaihtelevat ALLUX™ -laitteen sarjanumeron mukaan.

Kolmas rivi osoittaa **yhteyden tilan**.

- Irrotettu
- Yhdistäminen
- Yhdistetty

3. Näyttöön tulee "ALLUX: Sarjanumero". Jos useampi kuin yksi laite on luettelossa, valitse sopiva langaton laite oman ALLUXin sarjanumeron™ mukaan.

4. Jos ALLUX™ -laitteen langatonta laitetta ei ole luettelossa, ALLUX™ -laitteen langaton yhteys voi olla lepotilassa. Yritä aktivoida langaton yhteys taivuttamalla ja ojentamalla ALLUX™ hieman tai kohdistamalla käyttäjän kehon paino ALLUX™ -laitteeseen. Napauta sen jälkeen "Cancel"-painiketta ja napauta sitten kyseisessä kohdassa näkyvää "Scan"-painiketta etsiäksesi langattomia laitteita uudelleen.

5. Napauta luettelossa olevaa langatonta laitetta. Jos langaton yhteys on muodostettu onnistuneesti, "Connection to ALLUX™" -näyttö tulee automaattisesti näkyviin. Peräkkäisten yhteyksien yhteydessä "Yhteys ALLUXiin™" -näyttö ohitetaan ja näyttöön tulee alkuperäinen käynnistysnäyttö.


8) "Yhteys ALLUXiin™" -näyttö tulee näkyviin.

Kohdassa "Connection to ALLUX™" (Yhteys ALLUX™) sinun on syötettävä ALLUX™ -palvelun mukana toimitettu salasana. Salasana ilmoitetaan ALLUXin latausportissa™.

Jos et onnistu t salasanantamisessa kolme kertaa, sinun on käynnistettävä sovellus uudelleen.

Kun yhteys muodostetaan ensimmäistä kertaa, Bluetooth-pariliitäntä älypuhelimeen vaaditaan.

Salli se napauttamalla Pariliitoksen muodostaminen.

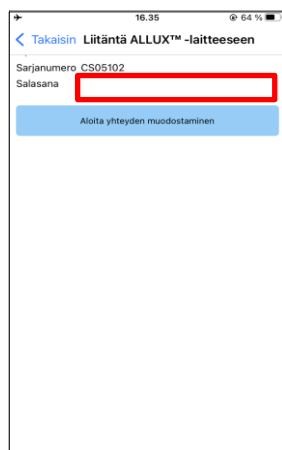

Bluetooth-parinmuodostuspyyntö

LAPIS ML7125-002 Application haluaa, että iPhone on sen laitepari.

Muodosta pari

Kumoa


4 Turvallinen asento

Ennen ALLUX™ -laitteen toimintatilan vaihtamista sovelluksen kaukosäätimellä tai ennen ALLUX™ -laitteen säätämistä tai asettamista tämän sovelluksen avulla käyttäjän on otettava asento, joka on turvallinen, vaikka hydrauliiikan vastus muuttuisi. Tätä asentoa kutsutaan "turvalliseksi asennoksi". Selitä käyttäjälle turvallinen asento.




- Selitä käyttäjälle turvallinen asento ja varmista, että käyttäjä ymmärtää sen.
- Kun käyttäjä ottaa turvallisen asennon ilman, että hänen painonsa kohdistuu ALLUX™ -laitteeseen, hänen on pidettävä kiinni kaiteesta tai istuttava. Taivutus-/ojennusvastus voi muuttua äkillisesti, mikä voi johtaa kaatumiseen.

[Turvallinen asento]

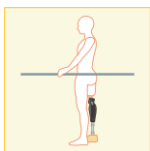

: Tila, jossa ALLUX™ on paikallaan, suora ja pystysuora ja johon voi kohdistua painokuormaa.

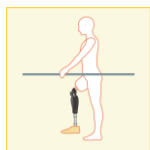


: Tila, jossa ALLUX™ ei kuormita ja polvi voi olla taivutettuna ja paikallaan.

[Pyyntö turvallisesta asennosta]

Jos ALLUX™ ei ole turvallisessa asennossa, kun ALLUX™ säädetään tai asetetaan, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Varmista, että käyttäjä on turvallisessa asennossa, ja napauta sitten "OK"-painiketta säätöjen tai asetusten heijastamiseksi. Jos napautat "Cancel"-painiketta, säädöt tai asetukset peruutetaan.

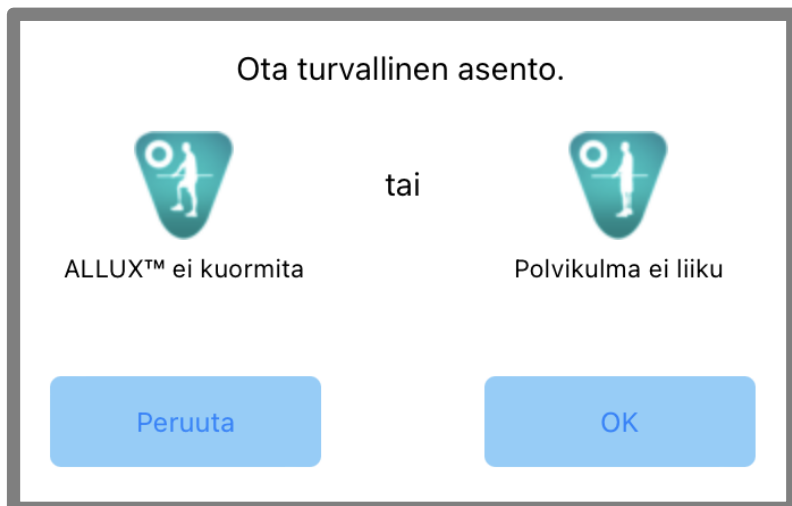

5

Viestintätila ja Bluetooth-yhteyden muodostaminen


Virran säästämiseksi ALLUX™ ei ole aina viestintätilassa.

Viestintätilan ottamiseksi käyttöön sinun on suoritettava seuraavat toimenpiteet.

Kun ALLUX™ -yhteys on muodostettu tämän sovelluksen avulla, tämä tila kestää, kunnes yhteys katkaistaan.

[Viestintätila käytössä]


1. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun ALLUX™ on hieman taivutettu ja ojennettu.
2. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun olet kohdistanut kehon painon ALLUX:iin™
3. 5 minuutin ajan sen jälkeen, kun laturi tai virta OFF-korkki on irrotettu ALLUXista.™

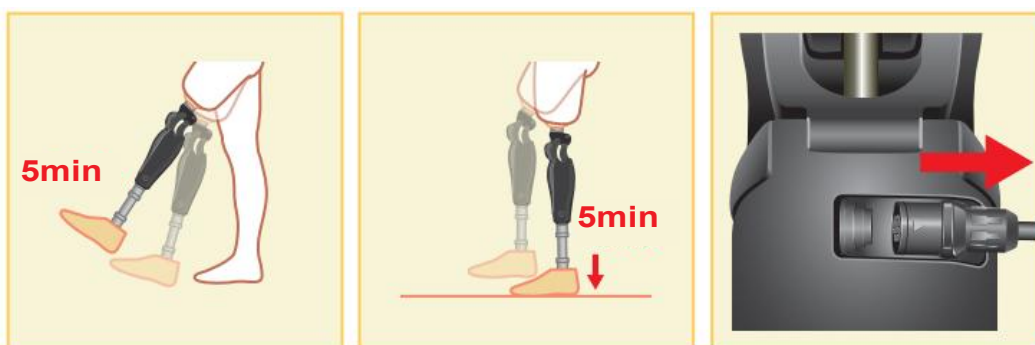

Sovelluksen kaukosäätimellä on mahdollista kytkeä langaton yhteys pois päältä, kun käyttäjä nousee lentokoneeseen jne. Langattoman yhteyden palauttaminen tästä tilasta edellyttää alla esitetyn kaltaisia toimia.

1. Irrota laturi tai virta OFF -korkki ALLUX™ -laitteesta.
2. "Kuormita kantapäätä 4 kertaa ajoittain" tai "Kuormita varpaita 4 kertaa ajoittain".

*Voit vaihtaa haluamaasi sovelluksen kaukosäätimellä.

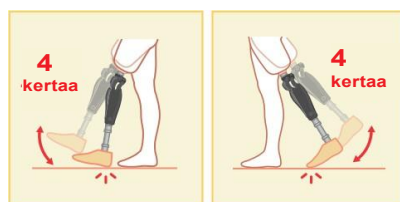

*Tämän sovelluksen käynnistäminen ei muodosta yhteyttä ALLUXiin™. Napauta Bluetooth-kuvaketta alkukäynnistysnäytössä (katso sivu 10) muodostaaksesi yhteyden ALLUXiin™.

*Älypuhelimien kotipainikkeen tms. napauttaminen ei katkaise yhteydenpitoa ALLUXin™ kanssa, vaan tämä sovellus jatkaa työskentelyä näytön takana. Jos napautat tämän sovelluksen kuvaketta uudelleen, se käynnistyy yhdistetyssä tilassa.



■ Älä lopeta tätä sovellusta väkisin sammuttamalla älypuhelinia.

Se voi aiheuttaa säätöarvojen muuttumisen tahattomaan tilaan ja johtaa putoamiseen.


6

Yhteinen toiminta alkukäynnistyksen ja kunkin näytön osalta


Ensimmäisellä käynnistyskerralla ensimmäinen käynnistysnäyttö tulee näkyviin "Connection to ALLUX™"-näytön jälkeen. Toisessa ja sitä seuraavissa normaalitilassa tapahtuvissa käynnistyksissä alkukäynnistysnäyttö näytetään yrityksen logon jälkeen.

**Bluetooth-kuvake:**

Napauta tätä kuvaketta näyttääksesi "Connection to ALLUX™"-näytön. Kuvake vaihtuu yhteyden tilan mukaan. Kun yhteys on katkaistu, ota yhteys käyttöön napauttamalla kuvaketta.

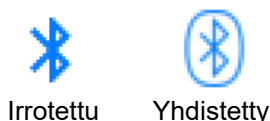**Yleinen kuvake:**

Napauta tätä kuvaketta : näyttääksesi "Yleiset"-näytön.

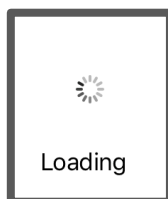Valmiusmerkki:


Kun tämä sovellus kommunikoi ALLUX™-sovelluksen kanssa tai suorittaa muuta käsittelyä, näytössä näkyy ympyrän muotoinen valmiustilamerkki. Kun tämä merkki on näkyvissä, kaikki näytön toiminnot ovat poissa käytöstä.

Viimeisin oikaisupäivä:

Se näyttää päivämäärän, jolloin ALLUX™ oli viimeksi säädetty.

Akun varaustaso:


Se näyttää ALLUX™-laitteen akun varaustason.

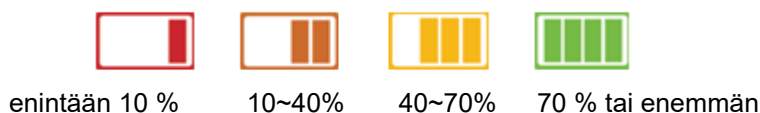

- Perusasetuspainike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Perusasetukset"-näytön (sivu 12).
- Lisäasetukset-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Lisäasetukset"-näytön. (sivu 23).
- Kaukosäätimen painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Kaukosäädin"-näytön (sivu 24).
- Tietojen kopiointi painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Data Copy"-näytön (sivu 29).
- Kävelytiedot-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Gait Data"-näytön (sivu 30).
- Säätöhistoria-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Säätöhistoria"-näytön (sivu 33).


7 Säättö menettely

Säädöt tehdään seuraavissa vaiheissa.

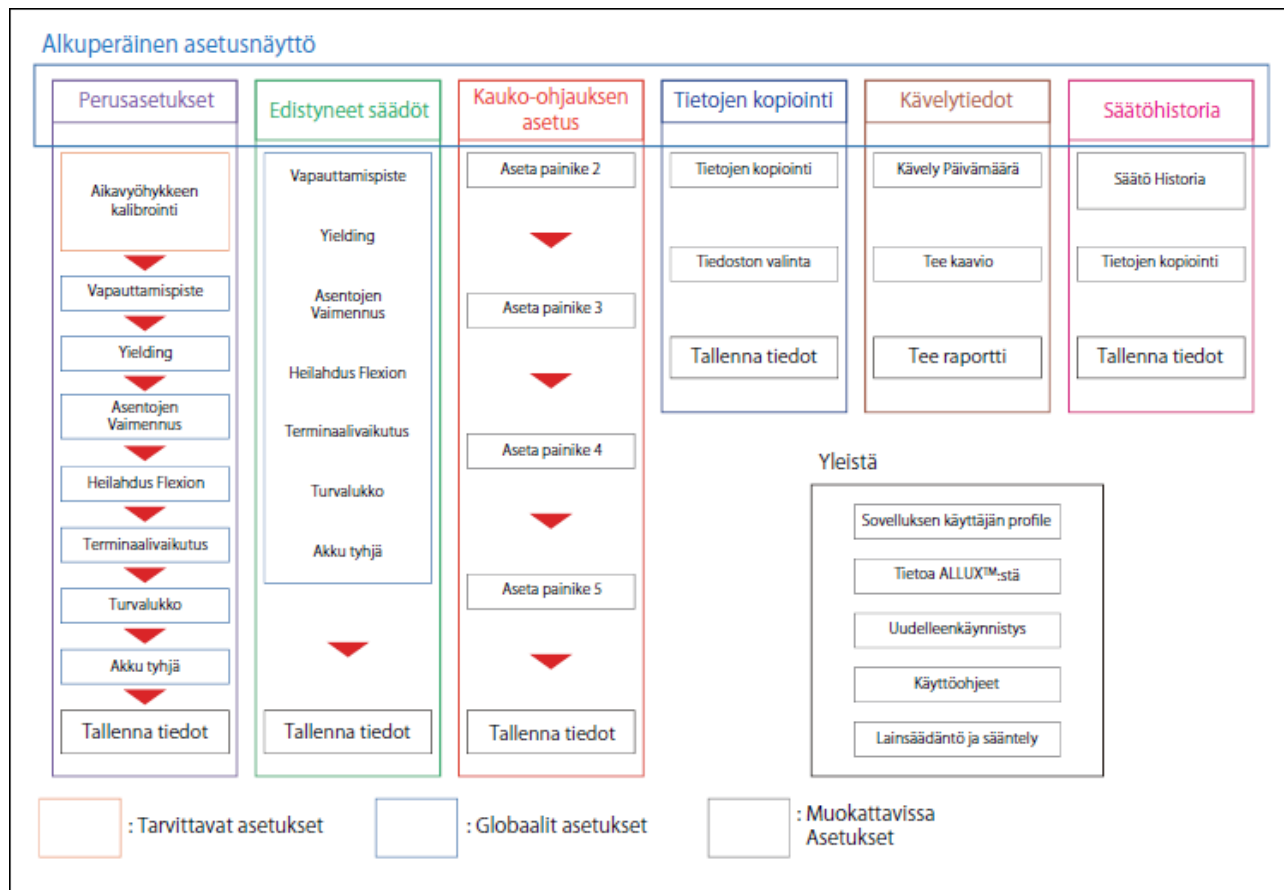

8 Perusasetukset

*Kun tämä näyttö on näkyvässä, alemman osan asetuskohteet eivät välttämättä näy. Pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin saat nämä asetuskohteet näkyviin.

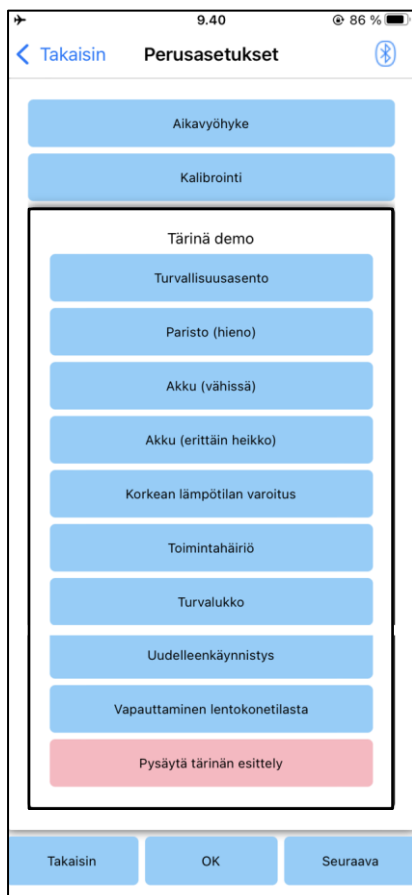

- **Aikavyöhyke:**
Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Aikavyöhyke"-näytön (sivu 13).
- **Kalibrointi:**
Napauttamalla tätä painiketta saat esiin kalibrointivalintaikkunan ponnahdusikkunan (sivu 14).
- **Tärinädemo:**
ALLUX™ värisee antaakseen käyttäjälle tietoja ja varoituksia. Näitä painikkeita napauttamalla käyttäjä voi tunnistaa värähtelymalleja. Pyydä käyttäjää ymmärtämään värinähälytyskuvioden tyypit ja merkitykset.
Kun napautat kutakin painiketta, näyttöön tulee painiketta vastaavan värinähälytyskuvion ponnahdusikkuna. Napauta "OK"-painiketta värinähälytyksen aikaansaamiseksi ALLUX™.
- **Turvallisuusasento:** ALLUX™ värisee, kun käyttäjän tulisi ottaa turvallinen asento.
- **Akku (hieno):** ALLUX™ värisee, kun akun jäljellä oleva varaustila on vähintään 3 tuntia.
- **Akku (tyhjä):** ALLUX™ värisee, kun jäljellä oleva akun varaustila on alle 3 tuntia.
- **Akku (erittäin heikko):** ALLUX™ värisee, kun jäljellä oleva akun varaustaso on riittämätön ja normaali kävely on mahdotonta.

- **Korkean lämpötilan varoitus:** ALLUX™ värisee, kun polvinivel on korkeassa lämpötilassa.
- **Toimintahäiriö:** ALLUX™ värisee, kun polvinivel tarvitsee huoltoa.
- **Turvalukko:** ALLUX™ värisee, kun turvalukko kytetään päälle.
- **Uudelleenkäynnistys:** ALLUX™ värisee, kun ALLUX™ käynnistetään uudelleen.
- **Vapauta lentokonetilasta:** ALLUX™ värisee, kun lentokonetila kytetään pois päältä. (sivu 9)
- **Lopeta tärinädemo:** ALLUX™ pysäyttää tärinän.



- Varmista, että käyttäjä tunnistaa kaikki värähtelymallit ja ymmärtää niiden erot. Jos käyttäjä käyttää ALLUXia™ ymmärtämättä värähtelyjen merkityksiä, hän ei välttämättä ole turvallisessa asennossa vikaantumisesta tai korkeasta lämpötilasta annettua varoitusta vastaan ja voi kaatua, koska ALLUX™ lukittuu, kun hän yrittää kävellä.


- **Takaisin-painike :** Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- **OK-painike :** Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- **Seuraava painike :** Paina tätä painiketta näyttääksesi "Toe Release Point" (Varpaiden irrotuspiste) säätönäytön.

9 Aikavyöhykkeen asettaminen

ALLUX™ sisältää sisäisen kellon, jota käytetään kirjaamaan päivittäin otettujen askelten määrää. Oletusasetus on Japanin normaaliaika (GMT+09:00). Vaihda aikavyöhyke paikallisen ajan mukaiseksi.

1. Näytä aikavyöhykeluettelo napauttamalla **Aikavyöhyke-valitsinta**.
2. Valitse käyttäjän sijainnin aikavyöhyke.
3. Lähetä aikavyöhyke ALLUXille™ napauttamalla "Asetukset"-painiketta.

*Valinnan jälkeen tätä vaihetta ei tarvitse toistaa, ellei aikavyöhykettä siirretä pysyvästi toiselle aikavyöhykkeelle. Sitä ei myöskään tarvitse valita uudelleen, kun käyttäjä matkustaa ulkomaille lyhyeksi ajaksi. Huomaa kuitenkin, että tässä valitusta aikavyöhykkeestä tulee vakioaikavyöhyke, kun päivä vaihtuu.

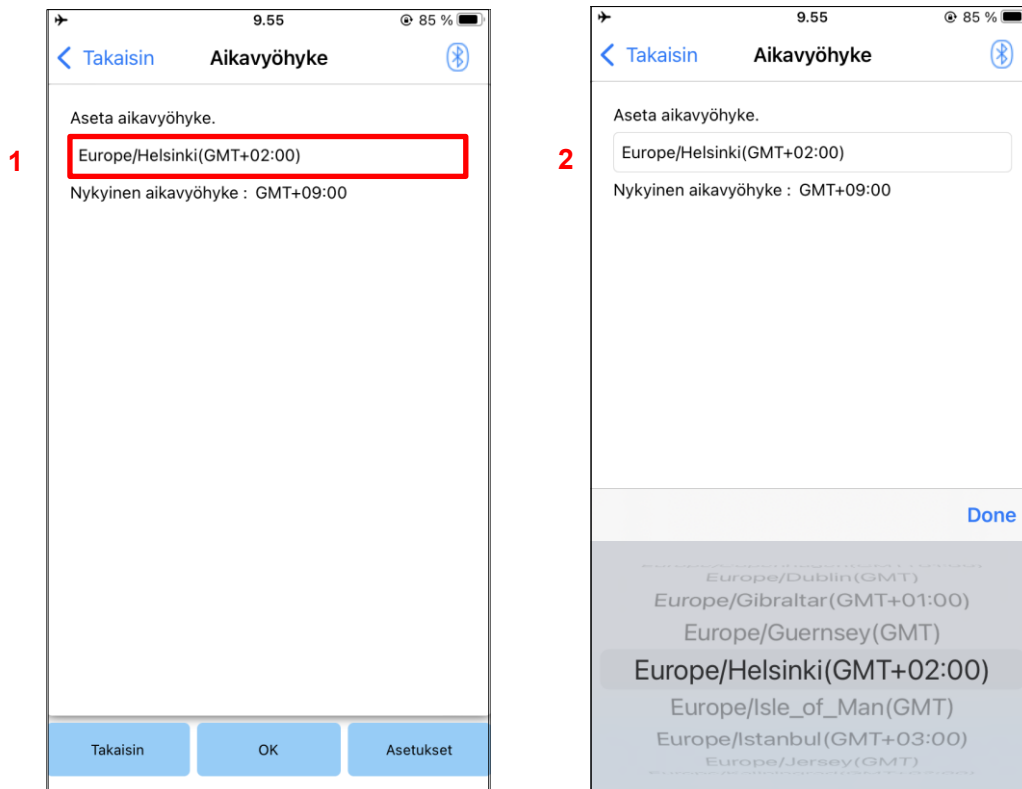

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Perusasetukset"-näytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Asetukset-painike : Napauta tätä painiketta lähettääksesi aikavyöhykkeen ALLUXille .™

10 Kalibrointi

Kun ALLUX™ -laitetta käytetään ensimmäistä kertaa tai se kohdistetaan uudelleen tai jalkaosa vaihdetaan, ALLUX™ on kalibroitava.



VAROITUS

- Kalibroi ALLUX™ oikeassa asennossa. Jos laite kalibroidaan kuormitettuna, käyttäjä ei voi kävellä normaalisti ja saattaa kompastua, mistä voi seurata loukkaantuminen.
- Varmista kalibroinnin yhteydessä, että käyttäjä on turvassa. Jos käyttäjä seisoo yhdellä jalalla epävakaa tilassa, hän voi kaatua.
- Kalibroi lopulliset osat kiinnitettynä ja täysin kiristettynä. Jos kohdistussäätöjä tehdään, ALLUX™ ei välttämättä toimi oikein.
- Sovelleta varpaiden vapautuspisteen asetusta (katso luku 11) kalibroinnin jälkeen. Varpaiden vapautuspisteen asettaminen ennen kalibrointia voi tehdä normaalin



1. Napauta "Kalibrointi"-painiketta "Perusasetukset"-näytössä, jolloin ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Pyydä käyttäjää nostamaan jalkaansa, jotta ALLUX™ pysyy kuormittamattomana.
- * Pyydä käyttäjää pitelemään käsijohteesta rinnakkaistangossa tai istumaan tuolilla oman turvallisuutensa varmistamiseksi.
3. Napauta ponnahdusikkunan OK-painiketta.
4. Ponnahdusikkuna sulkeutuu ja näyttö palaa "Perusasetukset"-näyttöön.

11 Varpaiden vapautuskohdan säätäminen

Tehtaan oletusasetus = 80


Aseta varpaiden irrotuspiste siirtymistä varten heilahdusvaiheeseen. Tarkista kävelykunto rinnakkaistangoissa, joissa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa.



VAROITUS

■ Tarkista kävelykunto paikassa, esim. rinnakkaistangossa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa. Jos ALLUX™ ei pysty siirtymään sujuvasti heilahdusvaiheeseen, käyttäjä voi kaatua.

1. Käyttäjän on seisottava rinnakkain ja asetettava proteesin jalka taakse ja kuormitettava proteesia simuloiden pääteasentoa.
2. Varpaan kuormituksen määrä näkyy näyttöpalkissa.
3. Aseta säätöarvo anturin enimmäislähtöarvoon (Se on merkitty punaisena viivana).
4. Testaa antamalla käyttäjän kävellä hitaasti.
 - *Jos ALLUX™ vapautuu jokaisella askeleella, lisää asteittain, kunnes se juuttuu, ja vähennä sitten noin viisi pistettä.
 - *Jos ALLUX™ ei vapautu jokaisella askeleella, pienennä arvoa, kunnes se vapautuu jokaisella askeleella hitaasti kävellessäsi.
5. Kun olet valmis, siirry "Stance Flexion Yielding" -säätöruudulle napauttamalla "Next"-painiketta.

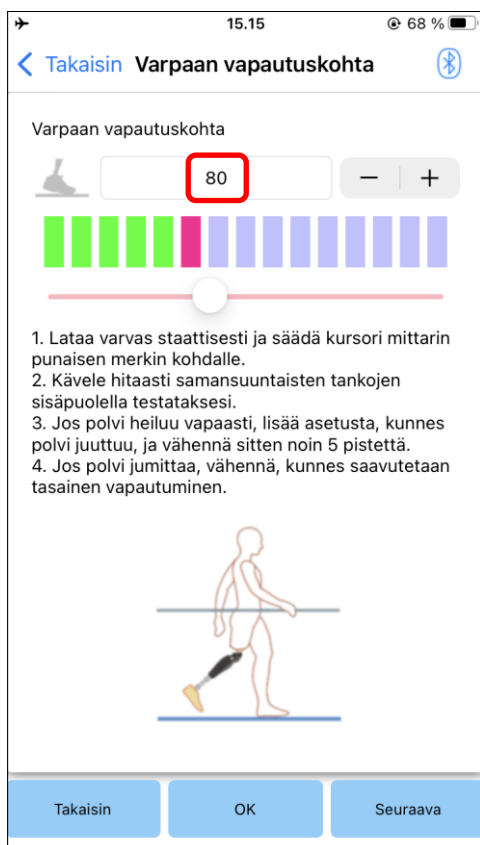

Säätöarvo (min: 0, max: 200):

Varpaiden vapautuspisteen säätöarvo näytetään ja syötetään lukuina.

Säätöarvon astinlaite:

Nämä painikkeet lisäävät tai vähentävät säätöarvoa 1:n askelin.

Palkkimittarin laatikkonäkymä:

Se näyttää anturin ulostulon kävelyn aikana.

Säätöarvon liukusäädin:

Tätä liukusäädintä käytetään säätöarvon asettamiseen.

*Säädöt voidaan tehdä millä tahansa kolmesta vaihtoehdosta: suoralla numerosyötöllä, + tai - painikkeilla tai napsauttamalla ja vetämällä.

● Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Perusasetukset"-näytön.

● OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

● Seuraava painike : Paina tätä painiketta näyttääksesi "Stance Flexion Yielding" -säätönäytön.

12

Asennon säätäminen Flexion Yielding

Tehtaan oletusasetus = 25 (vakioarvo: 20 ~ 30)

Säädä joustovastusta niin, että käyttäjä tuntee olonsa tasapainoiseksi istuessaan tuoliin tai kävellessään portaita ja rinteitä alas. Lisää tai vähennä arvoa asteittain käyttäjän mieltymysten mukaan ja varmista aina, että hän seisoo turvallisesti ennen säätöjen tekemistä. On suositeltavaa säätää vastus normaalissa lämpötilassa (+20°C/+68°F).



- Kun ALLUX™ käytetään matalalämpötilaympäristössä (0°C/+32°F tai vähemmän), myötävästus voi olla suurempi. Tarkista saantovastus ennen käytön aloittamista matalalämpötilaympäristössä. Koska ALLUX™ ei voi taipua helposti, käyttäjä voi kaatua portaissa tai rinteessä.




- Älä koske ALLUX™ -laitteen linkitysosiin, kun seisot, jotta vältät mahdolliset puristukset.
- Alakerran tai rinteiden kävelyn kestävyys on säädettävä kaikkien säätöjen jälkeen. Jos säätöjä ei ole tehty sufficiently, käyttäjä voi kaatua portaissa tai rinteissä.

1. Säädä vastus siten, että käyttäjän paino kohdistuu yhtä paljon molempiin jalkoihin, kun käyttäjä istuu tuolilla.

* Jos vastus on alhainen, lisää säätöarvoa.

* Jos vastus on suuri, pienennä säätöarvoa.

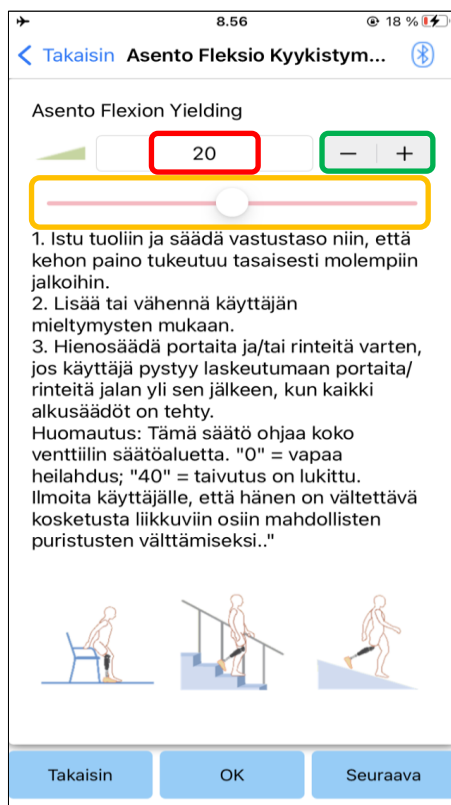

Säätöarvo (min: 0, max: 40):

Seisontataipuman säätöarvo näytetään ja syötetään lukuina.

Säätöarvon astinlaite:

Nämä painikkeet lisäävät tai vähentävät säätöarvoa 1:n askelin.

Säätöarvon liukusäädin:

Tätä liukusäädintä käytetään säätöarvon asettamiseen.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Toe Release Point" -säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Stance Extension Dampening" -säätönäytön.

13

Asentopidennyksen vaimennuksen säätäminen

Tehtaan oletusasetus = 5 (vakioarvo: 0 ~ 25)

Normaalisti aseta pidennysvastus seisontavaiheessa arvoon 5, ei vastusta. Säädä vastusta vain, kun käyttäjä kävelee asentoa taivuttaen. On suositeltavaa säätää vastus normaalissa lämpötilassa (+20°C/+68°F).



VAROITUS

- Kun ALLUX™ käytetään matalalämpötilaympäristössä (0°C/+32°F tai vähemmän), kannan pidennyksen vaimennusta voidaan lisätä. Tarkista pidennysvastus ennen käytön aloittamista matalalämpötilaympäristössä. Koska ALLUX™ ei ole helposti venytettävissä, käyttäjä voi kompastua ja kaatua aloittaessaan heilahdusvaiheen.




VAROITUS

- Tarkista kävelykunto paikassa, esim. rinnakkaistangoissa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa.
- Käyttäjän on käveltävä siten, että polvi siirtyy heilahdusvaiheeseen sen jälkeen, kun se on ojennettu. Koska ALLUX™ ei voi siirtyä heilahdusvaiheeseen taivutetussa tilassa kahden polven liikkeessä, käyttäjä voi kompastua ja kaatua.

1. Säädä vastusta kannan pidennyksen vaimennusta varten.

*Jos vastus on alhainen, lisää säätöarvoa. *Jos vastus on suuri, pienennä säätöarvoa.

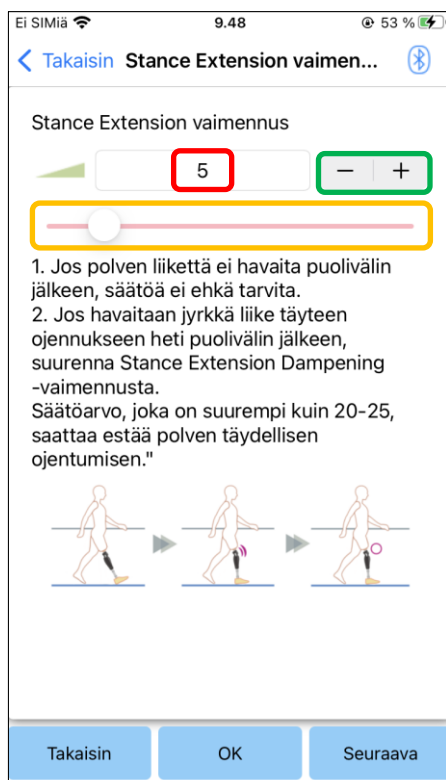

Säätöarvo (min: 0, max: 40):

Asentopidennyksen vaimennuksen säätöarvo näytetään ja syötetään lukuina.

Säätöarvon astinlaite:

Nämä painikkeet lisäävät tai vähentävät säätöarvoa 1:n askelin.

Säätöarvon liikusäädin:

Tätä liikusäädintä käytetään säätöarvon asettamiseen.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Stance Flexion Yielding" -säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Swing Flexion" -säätönäytön.

14 Heilahdusvastuksen säätäminen

Tehtaan oletusasetus = 20 (vakioarvo: 15 ~ 35)

Säätää taivutusvastusta heilahdusvaiheen aikana. Kun vastus on säädetty, polvinivel säätää normaalin kävelyn perusteella automaattisesti fleksiovastuksen kävelynopeuden mukaan.



■ Arvioi kävelytoiminto paikassa, esim. rinnakkaistangoissa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa.

Jos ALLUX™ ei pysty siirtymään sujuvasti heilahdusvaiheeseen, käyttäjä voi kaatua.

*Jos jalka hankaa lattiaa, koska ALLUX™ ei käynnistänyt heilahdusvaihetta, säädä varpaiden vapautuspiste uudelleen kohdan "Varpaiden vapautuspisteen säätäminen" (sivu 15).

1. Säädä Swing Flexion Resistance (heilahdusvastus) normaalia kävelynopeutta varten.

*Jos kantapää nousee liikaa, vastus on alhainen, lisää säätöarvoa.

*Jos varpaat hankaavat maata, vastus on suuri, pienennä säätöarvoa.



Säätöarvo (min: 1, max: 50):

Keinun taivutusvastuksen säätöarvo näytetään ja syötetään lukuina.

Säätöarvon astinlaite:

Nämä painikkeet lisäävät tai vähentävät säätöarvoa 1:n askelin.

Säätöarvon liukusäädin:

Tätä liukusäädintä käytetään säätöarvon asettamiseen.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Stance Extension Dampening" -säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Päätevaikutuksen" säätönäytön.

15 Terminaalin vaikutuksen säätäminen

Tehtaan oletusasetus = 5 (vakioarvo: 0 ~ 25)

Säädä pidennysvastus heilahdusvaiheen aikana. Jos päätepysähdys tapahtuu, lisää sitä vähitellen. Kun vastus on säädetty normaalin kävelyn perusteella, ALLUX™ säätää pidennysvastuksen automaattisesti kävelynopeuden mukaan.



- Arvioi kävelytoiminto paikassa, esim. rinnakaistangoissa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa. Jos vastus on asetettu liian suureksi, ALLUX™ ei voi ulottua kokonaan, ja käyttäjä voi kaatua.

1. Säädä päätelaitteen iskunkestävyys normaalia kävelynopeutta varten.

*Jos vastus on alhainen, lisää säätöarvoa.

*Jos vastus on suuri, pienennä säätöarvoa.



Säätöarvo (min: 0, max: 40):

Päätelaitteen vaikutuksen säätöarvo näytetään ja syötetään lukuina.

Säätöarvon astinlaite:

Nämä painikkeet lisäävät tai vähentävät säätöarvoa 1:n askelin.

Säätöarvon liukusäädin:


Tätä liukusäädintä käytetään säätöarvon asettamiseen.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Swing Flexion" -säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Turvalukon" säätönäytön.

16 Turvalukon säätäminen

Tehdasasetukset = Virheellinen

Turvalukko on suunniteltu lukitsemaan ALLUX™ taivutetussa kulmassa, jossa käyttäjä pysähtyy tietyksi ajaksi ALLUX™ taivutettuna tietyn painon alla. Käyttääksesi Safety Lockia säädä liikusäätimellä aktivointiaika.

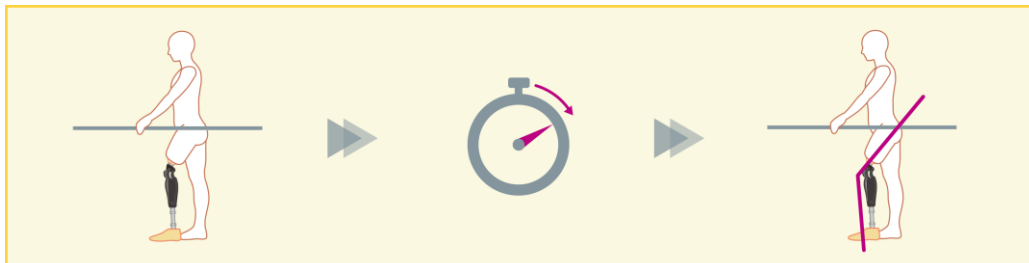


- Tarkista toiminta paikassa, esim. rinnakkaispalkissa, jossa käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa.
Jos käyttäjä ei tunne turvalukitusta, hän voi vahingossa avata ALLUX™ lukituksen ja ALLUX™ voi soljua.

*Varmista ennen turvalukon asettamista, että käyttäjä ymmärtää toiminnon ja että hän on saanut asianmukaisen koulutuksen.

1. Säädä turvalukon herkkyyttä. Jos valittuna on Quick (Nopea), polvi lukittuu myös lyhytaikaisessa jousituksessa.

*Jos Deactivated on valittu, turvalukko ei toimi.

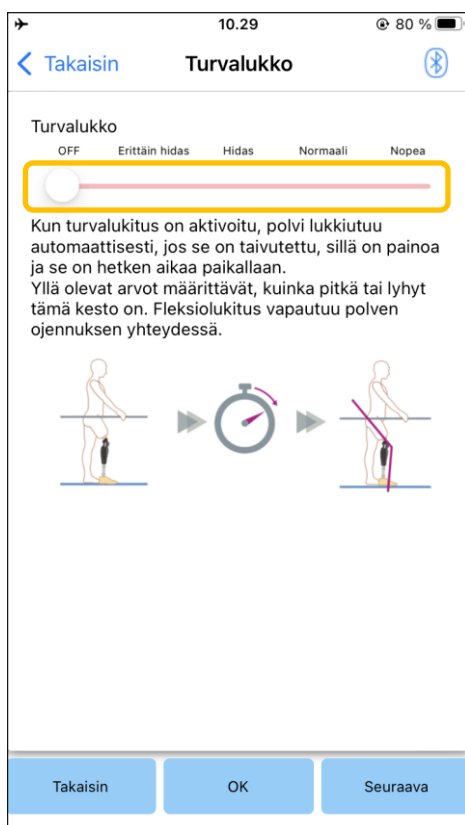

Säätöarvon liikusäädin:

Tällä liikusäätimellä asetetaan likimääräinen aika (katso alla.) turvalukon aktivoimiseksi.

- Hyvin hidas: Noin 3 sekuntia
- Hitaasti: Noin 2 sekuntia
- Normaali: Noin 1,5 sekuntia
- Nopeasti: Noin 1 sekunti
- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Terminal Impact" -säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Akku vähissä" -asetusnäytön.

17 Akun alhaiset asetukset


Tehtaan oletusasetus = Korkea vastus (vastaa taivutusvastusta 30).

Säädä asetuksia akun alhaisen varaustason tilanteita varten.



- Jos valittuna on Vapaa, varmista, että käyttäjä voi kävellä vapaassa tilassa. Käyttäjä voi testata vapaan keinun tilan valitsemalla vapaan keinun tilan kaukosäätimen näytöltä. Käyttäjä ei ehkä pysty siirtymään turvalliseen paikkaan, koska paristo on yhä.

1. Valitse taivutusvastus, kun akku on lähes tyhjä.

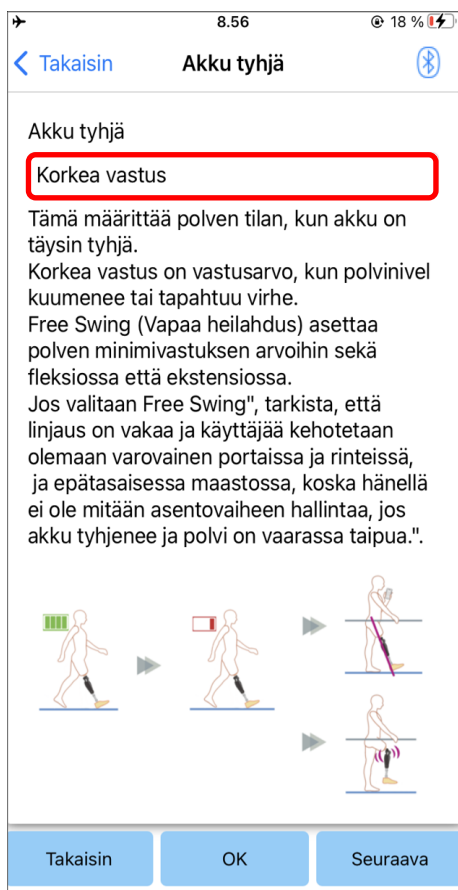

Pariston alhaisen varaustason valitsin:

Napauta tätä valitsinta valitaksesi seuraavista vaihtoehtoista vastuksen, kun akun varaus on vähissä.

- Korkea vastus (suositellaan):
Taivutusvastus vastaa kannan taivutuksen säätöarvoa 30.
- Ilmaiseksi:
Taivutusvastusta ei ole.

*Joko valitset, pidennysvastus vapautuu.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Turvalukituksen" säätönäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Tallenna tiedot" -näytön.


Säätö- tai asetustiedot tallennetaan automaattisesti ALLUXiin™.

Nämä tiedot voidaan tallentaa älypuhelimien kansioon.

Tallennettuja tietoja voidaan käyttää kopioimalla tiedot (sivu 29).

Vaikka asetustietoja ei tallennettaisikaan, viimeisten 5 päivän asetustiedot tallennetaan automaattisesti Säätohistoriaan (katso sivu 33).

1. Napauta "Tallenna tiedot" -painiketta.
2. Tallennuksen aikana näytössä näkyy valmiustilamerkki, eikä mitään toimintoja hyväksytä.
3. Kun tallennus on valmis, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Palaa "Tallenna tiedot" -näyttöön napauttamalla "OK"-painiketta.

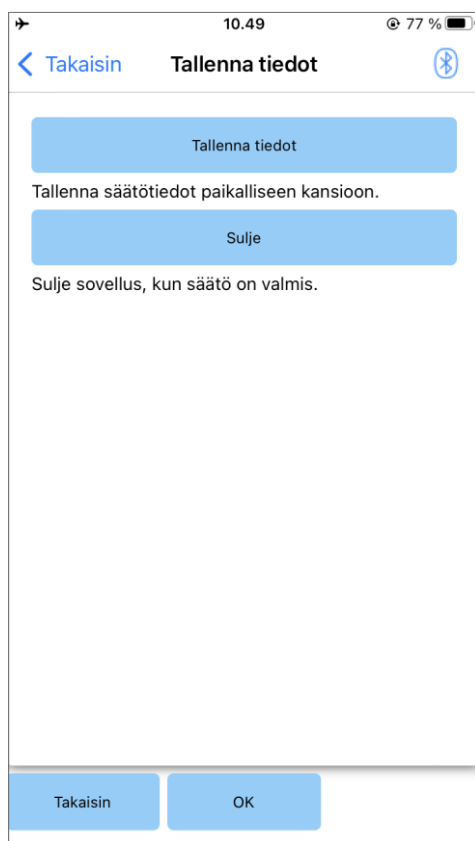

● Tallenna tiedot -painike:

Tallenna tiedot napauttamalla tätä painiketta.

Tallennettuja tietoja voidaan käyttää "Tietojen kopiointi" -näytössä (katso sivu 29).

<<Luotujen tietojen tallennuspaikka>>

*Älypuhelimien "Tiedostot" > "Selaa" > "Omassa iPhonessa" > "ALLUX Pro" > "datakansio".

● Sulje-painike :

Napauta tätä painiketta katkaistaksesi yhteyden ALLUX™ -sovellukseen ja poistuaksesi tästä sovelluksesta.

● Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta palataksesi edelliseen näyttöön.

● OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

Viimeistely

Säädöt on suoritettu. Irrota yhteys polvesta.

OK

19


Edistyneet säädöt

Luvuissa 10 osoitteessa 17 voidaan säätää yhdessä tässä näytössä.

Suosittelemme, että teet ensimmäiset säädöt "Perusasetukset"-näytössä ja teet uudelleensäädöt

"Lisäasetukset"-näytössä toisesta kerrasta alkaen. Tutustu kuhunkin näyttöön, joka on kuvattu luvuissa 10 osoitteessa 17 kunkin kohteen selitykset, varoitukset ja varoitukset.

*Kun tämä näyttö on näkyvässä, alemman osan asetuskohteet eivät välttämättä näy. Pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin saat nämä asetuskohteet näkyviin.

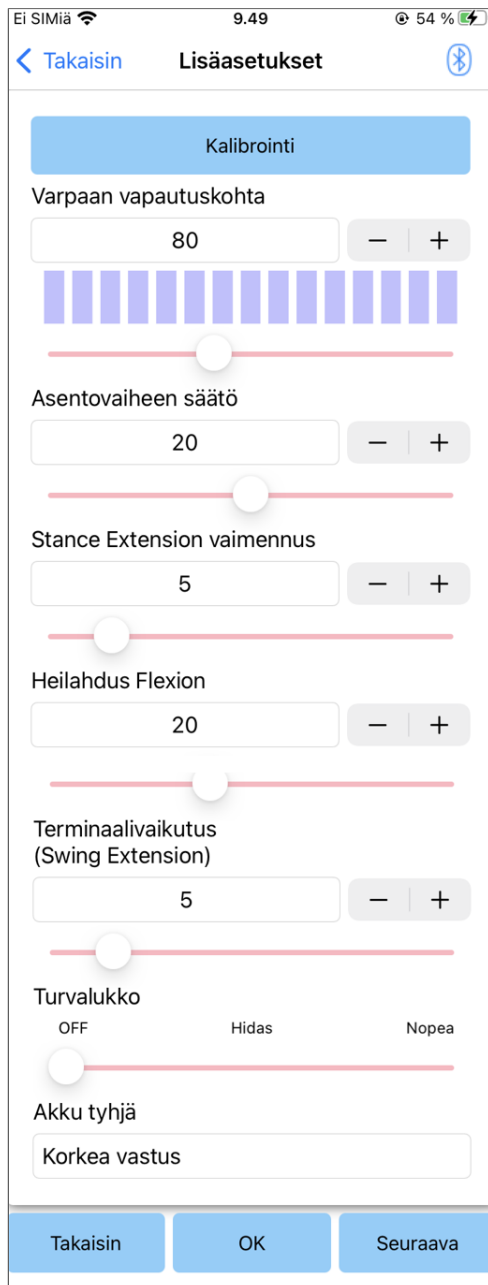

● Kalibrointi: (sivu 14)

Suorittaa kalibroinnin.

● Varpaiden vapautuskohta: (sivu 15)

Muuttaa varpaiden vapautuspisteen säätöarvoa.

● Asentovaiheen säätö (Yielding): (sivu 16)

Muuttaa asennon taipumisen tuottoa antavan säätöarvon.

● Stance Extension Dampening: (sivu 17)

Muuttaa kannan pidennyksen vaimennuksen säätöarvoa.

● Swing Flexion: (sivu 18)

Muuttaa heilahdusliikkeen taivutusvastuksen säätöarvoa.

● Terminaalivaikutus: (sivu 19)

Muuttaa terminaalivaikutuksen säätöarvoa.

● Turvalukko: (sivu 20)

Valitsee turvalukon herkkyyden.

● Akku vähissä: (sivu 21)

Valitsee taivutusvastuksen, kun akku on tyhjä.

● Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi

alkuperäisen aloitusnäytön.

● OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen

aloitusnäytön.

● Seuraava-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi

"Tallenna tiedot" -näytön.

20 Kaukosäätimen asettaminen

20.1 ALLUX™ toimintatilat

ALLUX™ -laitteessa on seuraavat viisi toimintatilaa.

[Normaali tila]

Normaalitila on säädetty normaalia kävelyä varten. ALLUX™ arvioi erilaisia kävelytilanteita ja normaaleja liikkeitä anturin avulla ja säättää automaattisesti fleksiota ja ekstensiota.


[Fleksiokulman rajoitustila]

Taivutuskulman rajoitustilassa taivutusvastus lukittuu määrättyyn kulmaan, kun taas ojennusvastus pysyy vapaana.



[Muuttuva valikoiva taivutuksen lukitustila]

ALLUX™ muistaa kulman, jossa muuttuva valikoiva taivutuksen lukitus on kytketty päälle. Fleksiovastus lukittuu, kun se saavuttaa kyseisen kulman, kun taas ekstensiovastus pysyy vapaana.

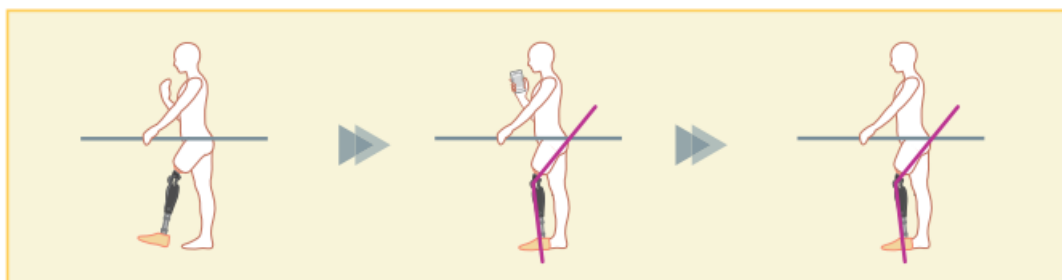


ILMOITUS

- Kun käytetään taivutuskulman rajoitustilaa tai muuttuvan valikoivan taivutuksen lukitustilaa, älä käytä ALLUX™ -laitteeseen liian suurta voimaa, kun se koskettaa pysäytintä.
- Jos ALLUX™ -laitteeseen kohdistetaan liiallinen iskuvoima, se voi vaurioitua.

20 Kaukosäätimen asettaminen


[Täydellinen laajennuksen lukitustila]

ALLUX™ on lukittu täysin ulosvedettyyn tilaan. (Kun se aktivoidaan polven taivutuksen yhteydessä, se sallii pidennyksen, kunnes ALLUX™ on saavuttanut pidennyspysäytyksen). Tätä voidaan käyttää "Sit to Stand" -toimintona.

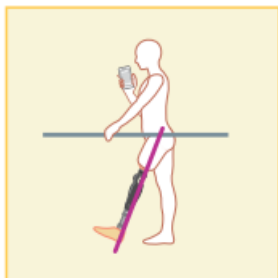

[Vapaa swing-tila]

Vapaassa swing-tilassa ALLUX™ pidetään vapaana (resistanssiton tila).

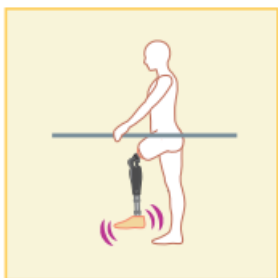

20.2 Toimintatilojen osoittaminen sovelluskaukosäätimen painikkeille Controlin painikkeille

Edellä mainitut toimintatilat voidaan määrittää sovelluskaukosäätimen painikkeille.

Normaali tila on aina määritetty sovelluskaukosäätimen painikkeelle 1, ja tämän tilan asetukset ovat ne, jotka on säädetty "Perusasetukset"-näytössä tai "Lisäasetukset"-näytössä.

Voit määrittää edellä mainitut viisi toimintatilaa vapaasti sovelluskaukosäätimen painikkeille 2-5.

Kauko-ohjaimen oletuskonfiguraatio:

- Painike 2: Flexion Angle Limited -tila
- Painike 3: Vaihteleva valikoiva taivutuksen lukitustila
- Painike 4: Täydellinen laajennuksen lukitustila
- Painike 5: Free Swing -tila

20 Kaukosäätimen asettaminen

20.3 Kaukosäätimen asetusnäyttö

*Kun tämä näyttö on näkyvässä, alemman osan asetuskohteet eivät välttämättä näy. Pyyhkäise näyttöä ylöspäin näyttääksesi nämä asetuskohteet.



Kauko-ohjaimen asetusvalitsin:

Napauta tätä valitsinta vaihtaaksesi asetettavan painikkeen.

Valitse painike seuraavasta luettelosta.

- Painike 2
- Painike 3
- Painike 4
- Painike 5

Tila-asetusvalitsin:

Voit valita tilan, joka osoitetaan valitulle painikkeelle.

Valitse tila seuraavasta luettelosta.

- Normaali tila
- Fleksiokulma Rajoitettu tila
- Muuttuva valikoiva Flexion Lock -tila
- Full Extension Lock -tila
- Vapaa Swing-tila

Deaktivoitu kytkin:

Kun tämä kytkin on kytketty päälle, valittu painike ei toimi, vaikka sitä napautetaan sovelluskaukosäätimellä. Lisäksi kunkin tilan säätökenttä on piilotettu.

Kunkin tilan säätökenttä:


Normaalitilassa ja Flexion Angle Limited -tilassa säätökenttä tulee näkyviin.

Muuttuvan valikoivan taivutuksen lukitus-tilassa, täyden ojennuksen lukitus-tilassa ja vapaan heilahduksen tilassa säätökenttä ei tule näkyviin.

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- Seuraava-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Tallenna tiedot" -näytön.

20 Kaukosäätimen asettaminen

[Normaalitilan säätökenttä]

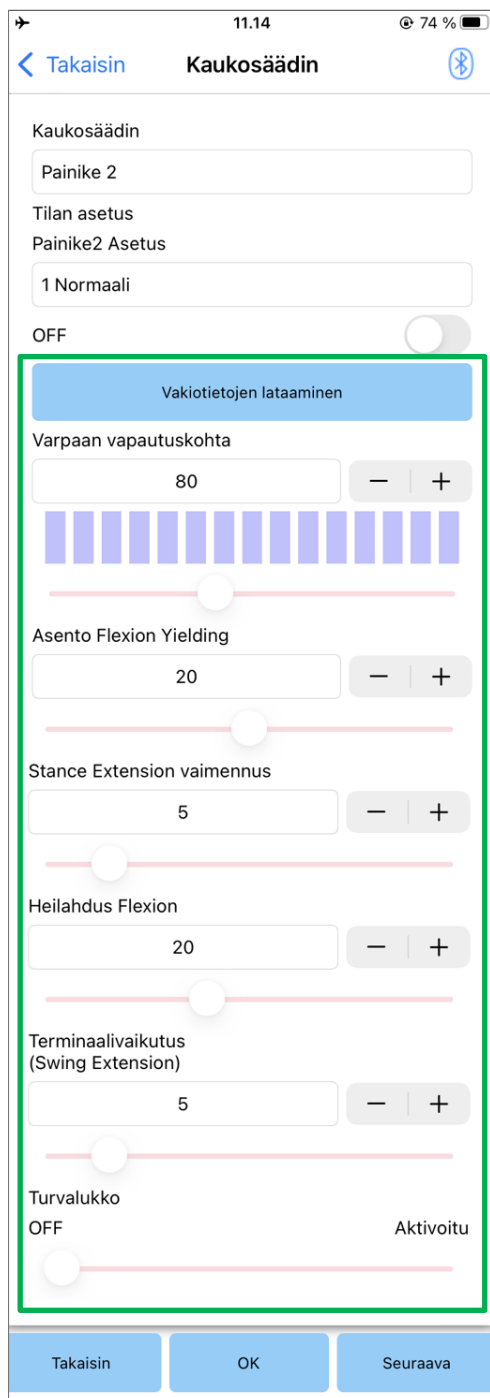

● Vakiotietojen lataaminen -painike:

Painikkeessa 1 asetetut säätöarvot (säätöarvot, jotka on asetettu "Perusasetukset"-näytössä tai "Lisäasetukset"-näytössä) voidaan ladata napauttamalla tätä painiketta.

● Varpaiden vapautuskohta:

Muuttaa varpaiden vapautuksen säätöarvoa.

● Asento Flexion Yielding:

Muuttaa asennon taipumisen tuottoa antavan säätöarvon.

● Stance Extension vaimennus:

Muuttaa kannan pidennyksen vaimennuksen säätöarvoa.

● Swing Flexion:

Muuttaa heilahdusliikkeen taivutusvastuksen säätöarvoa.

● Terminaalivaikutus:

Muuttaa terminaalivaikutuksen säätöarvoa.


● Turvalukko:

Valitsee, otetaanko turvalukko käyttöön vai poistetaanko se käytöstä. Turvalukon herkkyyteen (aika turvalukon aktivoitumiseen) sovelletaan "Perusasetukset"-näytössä tai "Lisäasetukset"-näytössä säädettyä arvoa.

* Katso kutakin luvuissa kuvattua näyttöä. 11 osoitteessa 16 kunkin kohteen selitykset, varoitukset ja varoitukset.

20 Kaukosäätimen asettaminen

[Säätökenttä Flexion Angle Limited -tilassa]

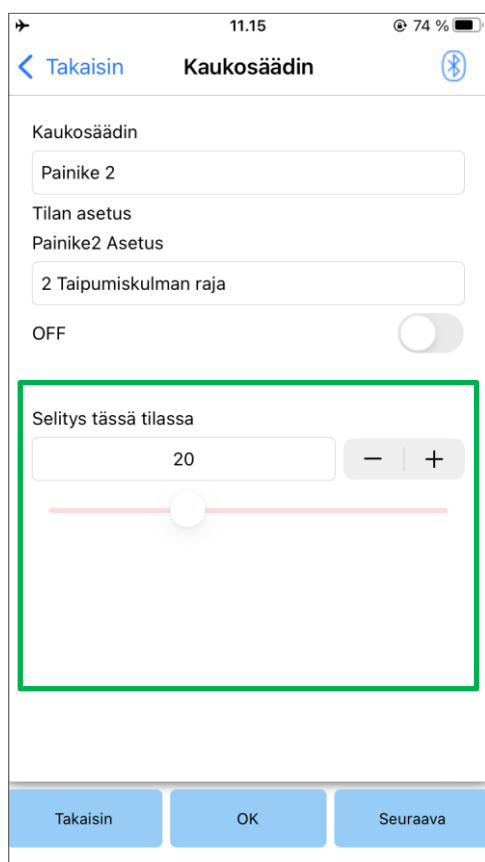

Kaukosäädin

Painike 2

Tilan asetus

Painike2 Asetus

2 Taipumiskulman raja

OFF

Selitys tässä tilassa

20

Takaisin OK Seuraava


● Lukituskulma:

ALLUX™ on lukittu asetettuun kulmaan.

21 Tietojen kopiointi

"Tallenna tiedot" -näytössä (sivu 22) voidaan ladata ALLUXin™ asetusten uudelleenkirjoittamiseksi.

1. Näytä "Tiedoston valinta" -näyttö napauttamalla "Tiedoston valinta" -painiketta.
2. Valitse tiedot, joita haluat käyttää.
3. Palaa "Tietojen kopiointi" -näyttöön napauttamalla "OK"-painiketta.
Tuolloin aiemmat tiedot ladataan ja näytetään.
4. Vahvista tiedot.
5. Kirjoita säätötiedot napauttamalla "Overwrite"-painiketta.

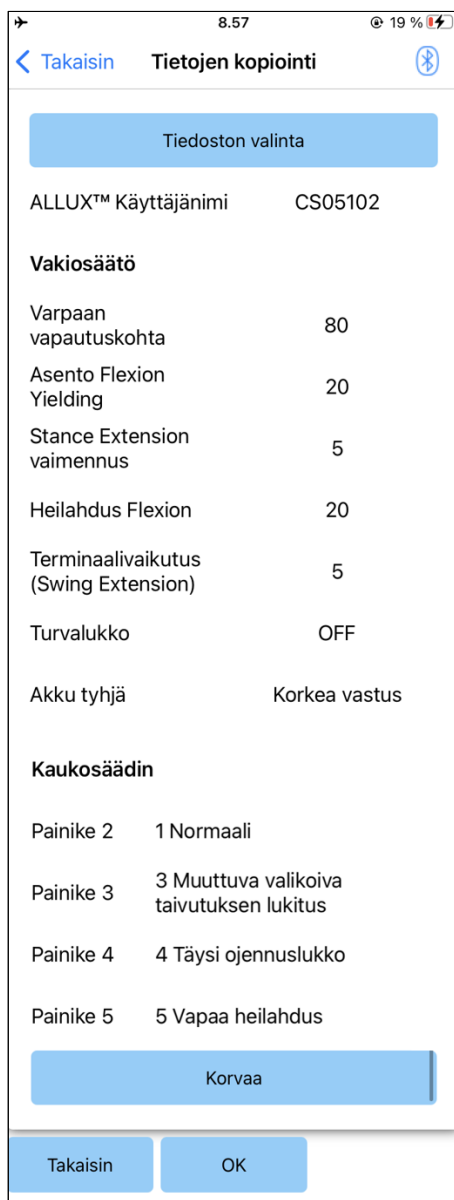

Käytettävät tiedot

Tietojen kopiointinäyttö

- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

* Jos jotakin edellä mainituista painikkeista napautetaan ilman, että ensin napautetaan "Overwrite"-painiketta, tietoja ei kirjoiteta uudelleen.

Tiedoston valintänäyttö

- Peruuta-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Data Copy" -näytön lataamatta tietoja.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Data Copy" -näytön tietojen lataamisen jälkeen.

22 Kävelytiedot

ALLUX™ tallentaa kävelyhistorian (askeleet per askeltiheys) kahden vuoden ajalta ja näyttää sen tietyn ajanjakson aikana pylväsdiagrammina tai histogrammina. Nämä kävelytiedot voidaan tulostaa.

22.1 Kävelytiedot-näyttö

Tallennuksen valitsin:

Valitse, tallennetaanko tietoja vai ei.

- Ota käyttöön
- Disable/Data Del

*Kun valitaan "Disable/Data Del" (Poista käytöstä/tiedot pois), näyttöön tulee ponnahtusikkuna vahvistusta varten. Jos napautat "OK"-painiketta, kaikki tallennetut tiedot poistetaan.

Valikoimanvalitsin:

Valitse kaaviossa näytettävien tietojen ajanjakso.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista.

- Päivä
- Kuukausi
- Puoli vuotta
- Kaksi vuotta

*Jos valitaan 2 vuotta, ajanjakso rajoittuu 2 vuoteen ennen nykyistä päivämäärää.

* Kun "Pylväsdiagrammi" on valittu "Lomake"-valitsimella, et voi valita "Päivää" "Jakso"-valitsimella.

Lomakevalinta:

Voit valita kaavion muodoksi "Pylväskaavio" tai "Histogrammi".

Ajanjakson valintavalitsin:

Valitse aloituspäivämäärä ("From") ja lopetuspäivämäärä ("To") valitsimella. Kun valitset jommankumman, toinen päivämäärä muuttuu automaattisesti "Period"-valitsimella valitun alueen mukaan.

- Tee kaavio –painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Tee kaavio" -näytön.
- Tee raportti painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Tee raportti" -näytön.
- Takaisin-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- OK-painike : Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.



22 Kävelytiedot

22.2 Tee kaavion näyttö

Kuvaaja luodaan "Gait Data" -näytössä asetettujen asetusten perusteella.

Pylväsdiagrammi on värikoodattu tahdin mukaan.

Histogrammi näyttää aggregoidut tiedot valintakentällä valitun jakson aikana.

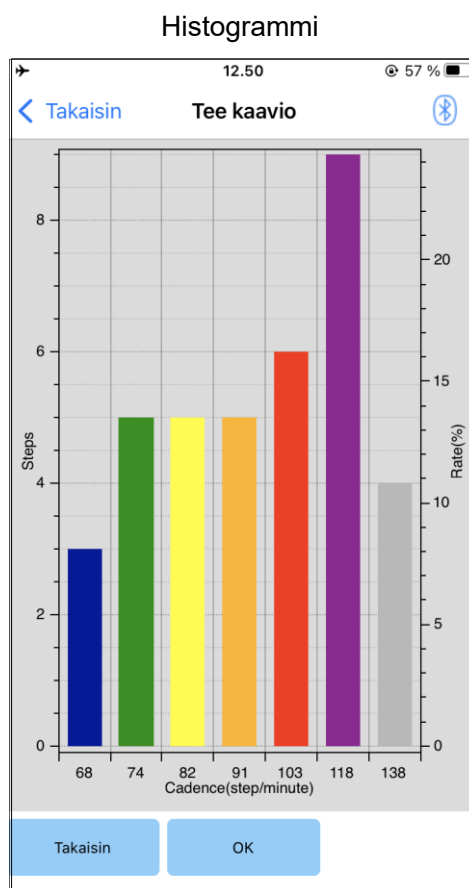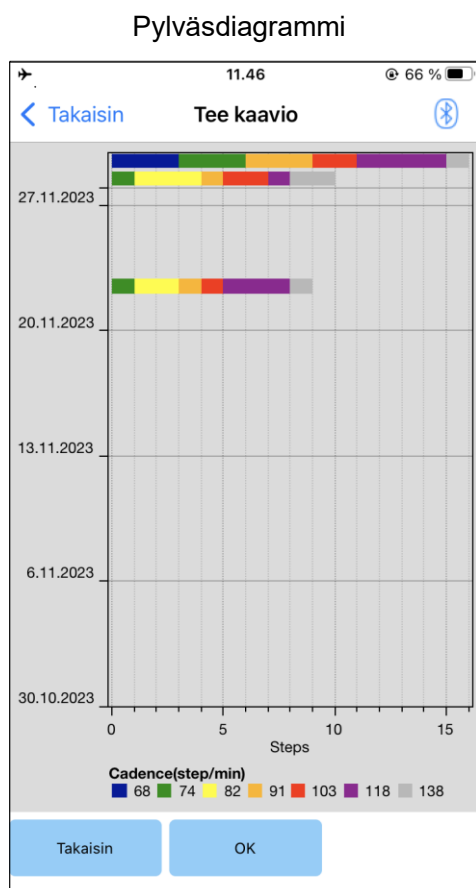

- Takaisin-painike: Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Gait Data" -näytön.
- OK-painike: Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

22 Kävelytiedot

22.3 Raportin luominen

Raportti luodaan "Gait Data" -näytössä määritetyille ajanjaksolle.

Raportissa on sekä pylväsdiagrammi että histogrammi.

Voit heijastaa tässä näytössä syötetyt käyttäjätiedot ja kommentit raporttiin.

Käyttäjätiedot-sarake:

Editorissa on oletusasetukset, kuten vasemmalla esitetyt, mutta voit poistaa ne tai lisätä uusia asetuksia haluamallasi tavalla.

Vastuuhenkilö-sarake:

Kirjoita Tekijän (tämän sovelluksen käyttäjän) tiedot.

Voit myös kirjoittaa yrityksen nimen muutamalla rivillä.

ALLUX™ Asetus:


Kävelyparametrit ladataan ALLUXista™ ja näytetään automaattisesti.

Kommentit:

Kirjoita tarvittaessa kommentteja.

- Takaisin-painike: Napauta tätä painiketta näyttääksesi "Gait Data" -näytön.
 - Tee raportti -painike: Napauta tätä painiketta luodaksesi raportti PDF-muodossa.
- Löydät luodun raportin napauttamalla Tiedostot > Selaa > Omassa iPhonessa > ALLUX Pro > datakansio älypuhelimessa.

Kuva luodusta raportista

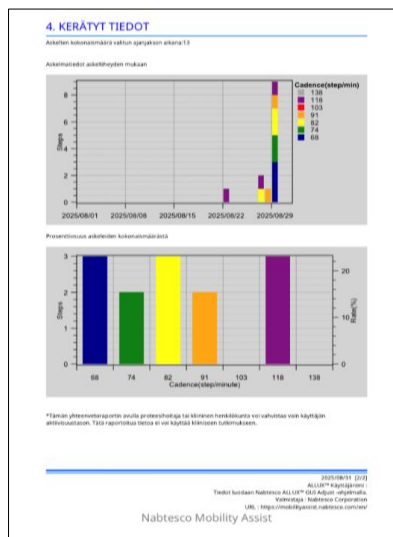



23 Säätöhistoria

Tämä sovellus tallentaa älypuhelimessä tehtyjen säätöjen historiatiedot enintään 5 viimeisen päivän ajalta. Ne tallennetaan erillään säätötiedoista "Tallenna tiedot" -näytössä (sivu 22).

Voit tarkastella historiaa ja soveltaa tietoja ALLUX™.

* Vierittämällä katselualuetta vaakasuunnassa tässä näytössä voit nähdä aiemmat tiedot.

Edellisiin tietoihin voidaan sisällyttää muilla ALLUX™ -laitteilla tehtyjen säätöjen historia. Tarkista tiedot ennen niiden käyttöä.

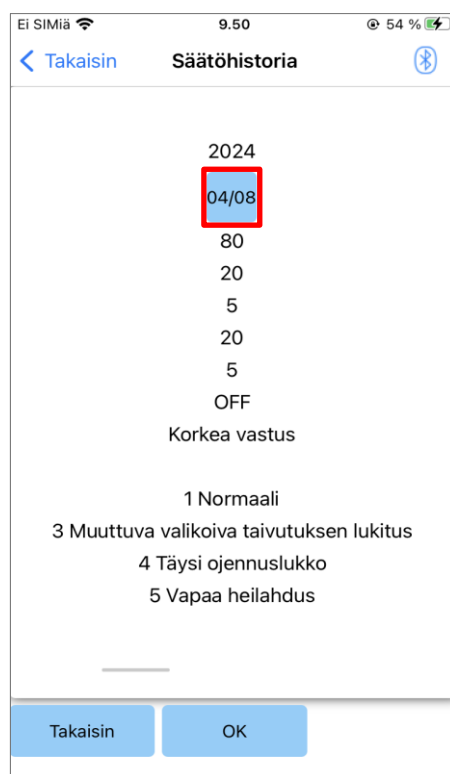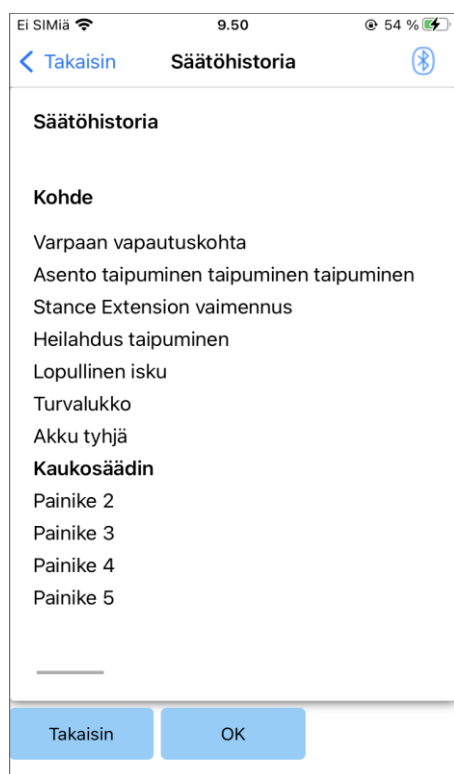

Päivämäärän painike:


Kun napautat painiketta, näyttöön tulee "Data Copy" -näyttö (sivu 29), ja voit lähettää näytetyt tiedot tällä hetkellä osoitteeseen ALLUX™.

- Takaisin-painike: Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.
- OK-painike: Napauta tätä painiketta näyttääksesi alkuperäisen aloitusnäytön.

24 Yleistä

Kun napautat Yleinen-kuvaketta  alkuperäisessä aloitusnäytössä (sivu 10), näyttöön tulee "Yleistä"-näyttö.

Voit näyttää uudelleen näytön, joka näkyy vain ensimmäisellä käynnistyskerralla, ja voit vahvistaa ALLUXin ohjelmistoversion™.

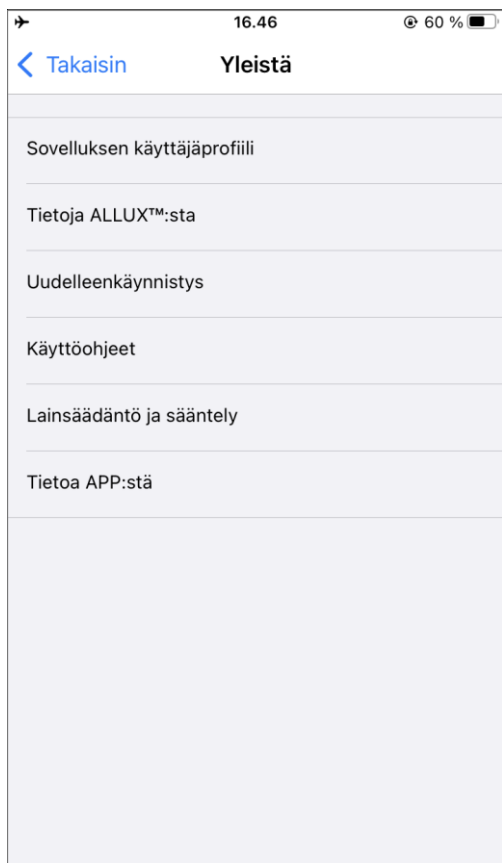

● Sovelluksen käyttäjäprofiili:

"Sovelluksen käyttäjäprofiili" -näyttö (sivu 6) tulee näkyviin.

● Tietoja ALLUX™:sta:

"Tietoja ALLUXista™" -näyttö tulee näkyviin.

● Uudelleenkäynnistys:

Käynnistää ALLUXin uudelleen™.

Ponnahdusikkuna vahvistusta varten tulee näkyviin.

Napauta OK-painiketta.

*Koska yhteys on katkaistu, sinun on otettava yhteys uudelleen käyttöön.

(Sama toimenpide kuin virran katkaisukorkin poistaminen ja asettaminen paikalleen.)

● Käyttöohjeet:

Tätä painiketta napauttamalla pääset käyttöoppaan lataussivulle. Tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

● Lainsäädäntö ja sääntely:


"Lainsäädäntö ja sääntely" -valintaikkuna (sivu 6) tulee näkyviin.

● Tietoja APP:stä:

Näyttää sovelluksen nimen, käytön, UDI-DI:n jne.

Tässä näytössä näkyy ALLUXin versio™.

[Tietoja ALLUX™ -näytöstä]

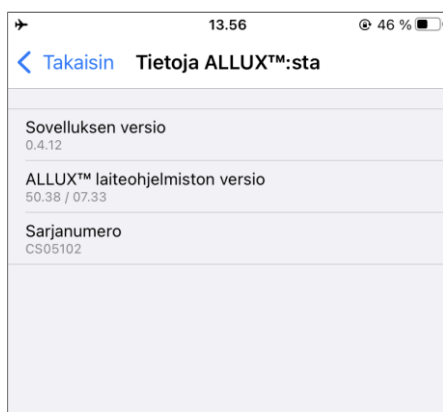

● Sovelluksen versio:

Tämän sovelluksen versio näytetään.

● ALLUX™ laiteohjelmiston versio:

ALLUXin™ laiteohjelmiston versio näytetään.

● Sarjanumero

ALLUXin™ sarjanumero näytetään.


25

Ponnahdusikkuna virheilmoitus

Jos toiminnon aikana tapahtuu virhe, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Noudata ponnahdusikkunan ohjeita.

25.1 Salasanavirhe ("Enter Password" -näyttö)

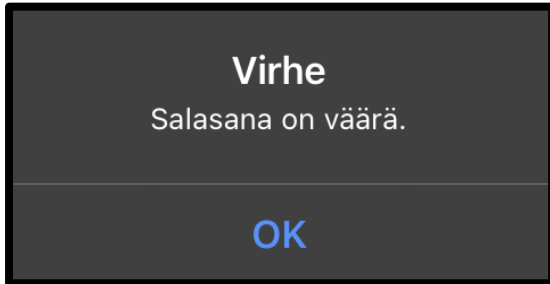


Tämä virhe ilmenee, kun "Syötä salasana"

-näytössä on syötetty väärä salasana.

Yritä syöttää käyttöohjeessa ilmoitettu salasana uudelleen. (sivu 5)

25.2 Salasanavirhe ("Yhteys ALLUXiin™" -näyttö)

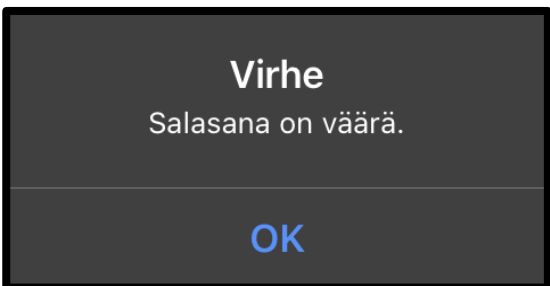


Tämä virhe ilmenee, kun väärä salasana on syötetty

"Connection to ALLUX™" -näytössä. Yritä syöttää

ilmoitettu salasana

latausporttiin uudelleen. (sivu 7)

25.3 Salasanavirhe (3 kertaa)

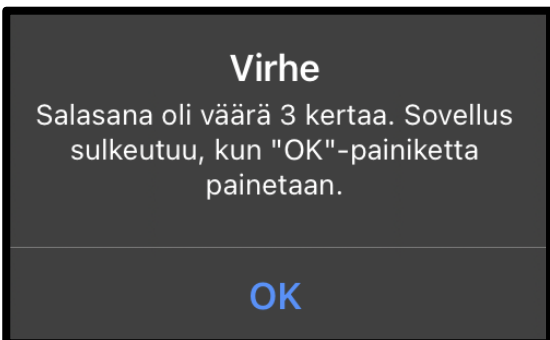

Tämä virhe ilmenee, jos salasanan syöttäminen


epäonnistuu kolme kertaa "Enter Password"

-näytössä tai "Connection to ALLUX™" -näytössä.

Ja sitten tämä sovellus sulkeutuu kerralla.

Kun käynnistät sovelluksen uudelleen, voit syöttää salasanan uudelleen.

25.4 Langattoman yhteyden virhe

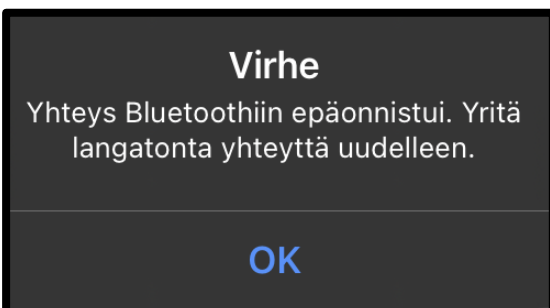

Tämä virhe ilmenee, kun langaton yhteys ALLUX™


ja älypuhelimien Bluetooth-yhteyden välillä

epäonnistuu. Yritä kytkeä ALLUXin langaton yhteys

päälle™ sivulla osoitteessa 9.

25 Ponnahdusikkuna virheilmoitus


25.5 Langattoman tiedonsiirron virhe

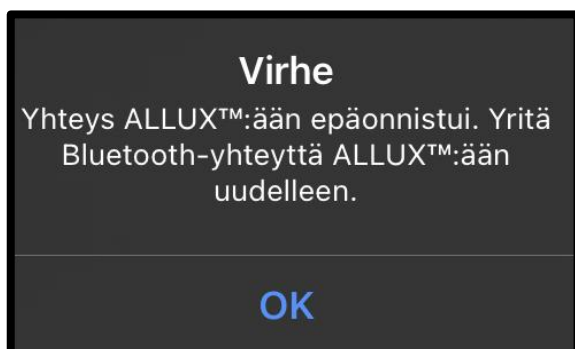

Tämä virhe ilmenee, kun ALLUX™ ja älypuhelimien sovelluksen välinen viestintä epäonnistuu. Ota langaton yhteys uudelleen käyttöön sivulla 10.


Jos säätö on käynnissä, tarkista säätöarvo uudelleen kytkemisen jälkeen.

25.6 Turvallisen asennon virhe

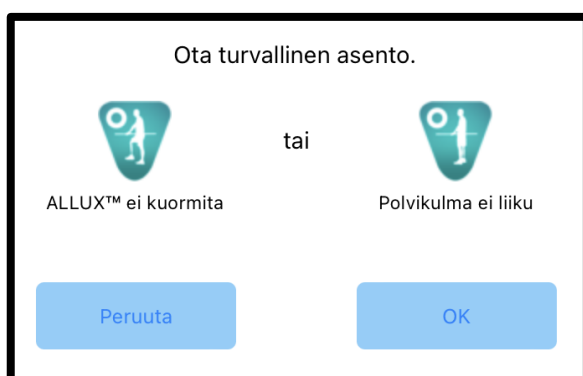

Jos käyttäjä ei ota turvallista asentoa, ALLUX™ ei voi muuttaa asetuksia. Pyydä käyttäjää ottamaan turvallinen asento sivulla 8.

25.7 Hydraulinen ohjausvirhe

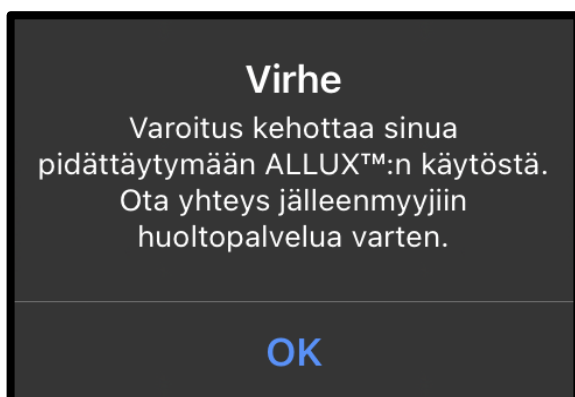

Koska hydrauliiikan ohjaus voi olla epäkunnossa, ALLUX™ -laitteen ohjaus pysähtyy. Ota yhteys jälleenmyyjään huoltopalvelua varten.

26

Vianmääritys

Ongelma	Tarkista kohde	Korjaus
Säätö-sovellusta ei voida asentaa.	Tarkista, että käyttöjärjestelmän versio on sopiva.	Päivitä käyttöjärjestelmäsi sovelluskaupassa lueteltuun yhteensopivaan versioon.
	Tarkista, että älypuhelimien kiintolevyllä jne. on riittävästi vapaata tilaa.	Lisää kiintolevyn vapaata tilaa.
ALLUX™ ei voi kytkeä.	Tarkista, että ALLUX™ on tunnistettu "Connection to ALLUX™" -näytössä (sivu 7).	Valitse ALLUX™ "Connection to ALLUX™" -näytössä.
	Tarkista, että ALLUX™ -yhteys ei ole yhteydessä useisiin laitteisiin.	ALLUX™ ei voi liittää useita laitteita. Kokeile toimia seuraavassa järjestyksessä. 1. Irrota yhteys sovelluskaukosäättimeen. 2. Sammuta säätö-sovellus ja sovelluksen kaukosäädin. 3. Jos käyttäjä käyttää sovelluskaukosäädintä, pyydä käyttäjää irrottamaan se.
	Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth on päällä.	Kytke älypuhelimien Bluetooth päälle.
	Ei voida yhdistää edes edellä mainittujen korjaustoimenpiteiden kanssa.	Suorita seuraavat kolme vaihetta ennen uudelleen kytkemistä. (1) Käynnistä ALLUX™ -virtalähde uudelleen. (Aseta laturi tai virran OFF-korkki kerran paikalleen ja poista se sitten). (2) Kytke älypuhelimien Bluetooth kerran pois päältä ja sitten takaisin päälle. (3) Käynnistä Adjustment App -sovellus uudelleen.
ALLUX™ ei näy "Connection to ALLUX™" -näytössä.	Tarkista, että langaton yhteys ALLUX™ on päällä.	Kytke langaton yhteys päälle osoitteessa (sivu 9)
	Tarkista, että ALLUX™ -laitteen akku on ladattu.	Lataa akku ALLUX™.
	Tarkista, että useat sovellukset toimivat samanaikaisesti.	Sulje tarpeettomat sovellukset.
	Tarkista, että älypuhelimien Bluetooth-toiminto on päällä.	Kytke Bluetooth-toiminto päälle.

26 Vianmääritys

ALLUXin™ ja sovelluksen välinen viestintä on helppo katkaista.	Tarkista, että ALLUX™ tai älypuhelimien akun kapasiteetti on alhainen akun tila.	Lataa ALLUXin™ tai älypuhelimien akku.
	Tarkista ALLUX™ -osoitinta käytetään erityisessä langattomassa tilassa, kuten rautateiden, valtateiden, TV-tornien, lentokenttien, näyttelyiden ja sairaaloiden vieressä.	Vältä laitteen käyttöä ympäristössä, jossa junia tai ajoneuvoja tulee ja menee usein, tai ympäristössä, jossa on useita langattomia yhteyksiä.
	Tarkista, onko ALLUX™ -käyttäjän ympärillä valtavat suojaukset radioaaltoja vastaan.	Poista radioaaltoja estävät suojat.



Nabtesco Corporation

Valmistaja

Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi Higashinada-ku

Kobe, Japani 658-0024

PUH: +81-78-413-2724

FAKSI: +81-78-413-2725

<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Valtuutettu edustaja EU-maissa

PROTEOR SAS

6 rue de la Redoute
21850 Saint-Apollinaire
Ranska

PUH: +33 3 80 78 42 42

FAKSI: +33 3 80 78 42 15

cs@proteor.com



Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, jos jokin sivu puuttuu tai on epäjärjestyksessä.

Nabtesco

Nabtesco Corporation