



Remote Control Uygulaması Kullanım Kılavuzu

(Android Versiyonu)

Kullanıcılar için

Ürün kodu : NE-Z41, NE-Z41SH

Doküman No : 81-SS00124 (ver.6)

Uygulama Ver. 1.0.0 veya üstü

Veriliş tarihi : 2025-10-31

Dil : Türkçe



DİKKAT

■ Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

■ Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Giriş

Nabtesco'nun ALLUX™ ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Montaj ve yürüme, bakım, sorun giderme ve uyarı notları gibi tipik kullanımla ilgili hususlar, ALLUX™ ile birlikte gelen Kullanıcı Kılavuzunda (bundan sonra Kullanıcı Kılavuzu olarak anılacaktır) açıklanmıştır.

Bu Uzaktan Kumanda Uygulaması Talimat Kılavuzu (bundan böyle bu kılavuz olarak anılacaktır), Android sistem ortamında Uzaktan Kumanda Uygulamasının (bundan sonra bu Uygulama olarak anılacaktır) nasıl kurulacağını ve kullanılacağını açıklar.

Güvenli ve rahat bir kullanım için yukarıda belirtilen Kullanıcı Kılavuzunu ve bu kılavuzu baştan sona okuyun, içeriğini yeterince anlayın ve bu belgelerde belirtilen güvenlik önlemlerine kesinlikle uyun.

- Nabtesco bu belgenin telif hakkına sahiptir.
- Android, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Google Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
- Google, Google Inc.'in ticari markasıdır.
- Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.
- Bluetooth kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG'e ait tescilli ticari markalardır. Inc. ve bu tür markaların Nabtesco Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- QR kodu, Denso Wave Incorporated'in tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

İçindekiler

Giriş	1
İçindekiler	2
1 Desteklenen model ve işletim ortamı	3
2 Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları	4
2.1 Kurulum Prosedürleri	4
2.2 Bluetooth eşleştirme	5
3 Güvenli Duruş	6
4 İletişim modu ve Bluetooth'un nasıl bağlanacağı	7
5 ALLUX™ çalışma modları	8
6 Başlangıç ayarları	10
7 Mod değiştirme ekranı	12
8 ALLUX™ bağlantı ekranı	14
9 Verilerin alınması ekranı	15
10 Genel ekran	16
11 Diğer ayarlar ekran	17
12 ALLUX™ hakkında ekranı	18
13 Mod ismi ekranı	19
14 Hata mesajı penceresi	20
14.1 Konum bilgisi hatası A	20
14.2 Konum bilgisi hatası B	20
14.3 Bluetooth ayar hatası	20
14.4 ALLUX™'a bağlantı hatası	21
14.5 Şifre hatası (3 kez)	21
14.6 Kablosuz bağlantı hatası	21
14.7 Kablosuz iletişim hatası	21
14.8 Güvenli duruş hatası	21
14.9 Hidrolik control hatası	22
14.10 Yakındaki cihaz bağlantı hatası	22
14.11 Yeniden bağlan düğmesi hatası	22
15 Sorun Giderme	23

1

Desteklenen model ve işletim ortamı

● ALLUX™ (ürün: NE-Z41)

* ALLUX™ (ürün: NE-Z4) desteklenmiyor.

Model, ön bağlantı pedinin tasarımı ile tanımlanabilir.

Şarj portundaki gösterge ile de tanımlanabilir.



NE-Z41
(Desteklenen ürün)



NE-Z4
(Desteklenmeyen ürün)



NE-Z41
(Desteklenen ürün)



NE-Z4
(Desteklenmeyen ürün)

- Uyumlu İşletim Sistemi: Lütfen Google Play Store'daki uygulama yazılımı bilgilerinde listelenen "İşletim Sistemi Gereksinimleri"ne bakın.
- Boş depolama alanı: 500 MB veya daha fazlası önerilir.



Bluetooth ile ilgili önlemler



- Bir Bluetooth cihazı tarafından yayılan radyo dalgaları, elektronik cihazların ve diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir. Kazaya neden olabileceğinden, trenlerdeki öncelikli koltukların yakınındayken, uçaklar gibi yanıcı gazların olduğu alanlarda, örneğin otomatik kapıların ve yangın alarm cihazlarının yakınındayken Bluetooth cihazlarını kapatın.
- Bluetooth teknolojisini kullanırken bilgi sızıntısı için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Bu ürün, tüm Bluetooth cihazlarıyla kablosuz bağlantıyı garanti etmez. Bağlanacak Bluetooth cihazı, Bluetooth SIG tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve en az bir sertifika almış olmalıdır. Ayrıca bağlanacak cihaz Bluetooth standardına uygun olsa bile cihazın özelliklerine ve teknik özelliklerine bağlı olarak bağlanamama veya farklı görüntü/çalışma gibi durumlar meydana gelebilir.
- Bu ürünün kablosuz işlevinin teknik standartları karşıladığı onaylandığı için bu ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.

2

Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları

2.1 Kurulum Prosedürleri

1. Google Kimliğinizle oturum açın.
Arama alanına Uygulama adını "ALLUX2" yazın.
Klavyede  simgesine dokununuz.

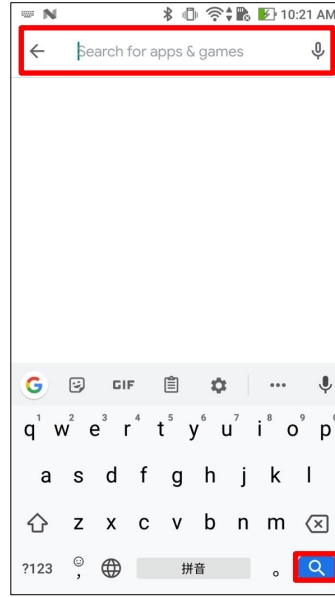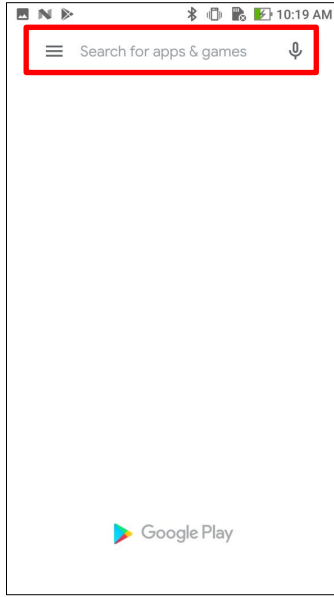

Kurulum için aşağıdaki QR kodu kullanılabilir.



2. Arama sonuçları görüntüledikten sonra, aşağıda gösterildiği gibi hedef Uygulamaya dokununuz.



3. "Yükle" düğmesine dokununuz.
4. Kurulum tamamlandıktan sonra, akıllı telefonun ana ekranında Uygulamanın simgesi oluşturulur.
5. Uygulamayı başlatmak için simgeye dokununuz.

2 Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları


2.2 Bluetooth eşleştirme

Bu Uygulamayı kullanmadan önce Bluetooth eşleştirmesi gereklidir.


Eşleştirme için aşağıdaki prosedürü izleyin.

* Prosedür ve ekran, akıllı telefonunuza ve uygulamanın sürümüne bağlı olarak farklılık gösterecektir. Lütfen akıllı telefonunuzun kılavuzunu kontrol edin.

1. ALLUX™'un iletişim kurmasını sağlamak için güç KAPATMA başlığını ALLUX™'tan çıkarınız.
*Güç KAPATMA başlığı çıkarıldığında güç açılır ve takıldığında kapanır. (7. sayfaya bakın)
2. Ayarlar düğmesinden Bluetooth'a veya Cihaz Bağlantıları'na vb. dokununuz. Mevcut cihazlardan ALLUX: XXXXXXXXXXXX'i seçin ve izin gerekiyorsa İzin Ver'e veya Eşleştir'e dokununuz.

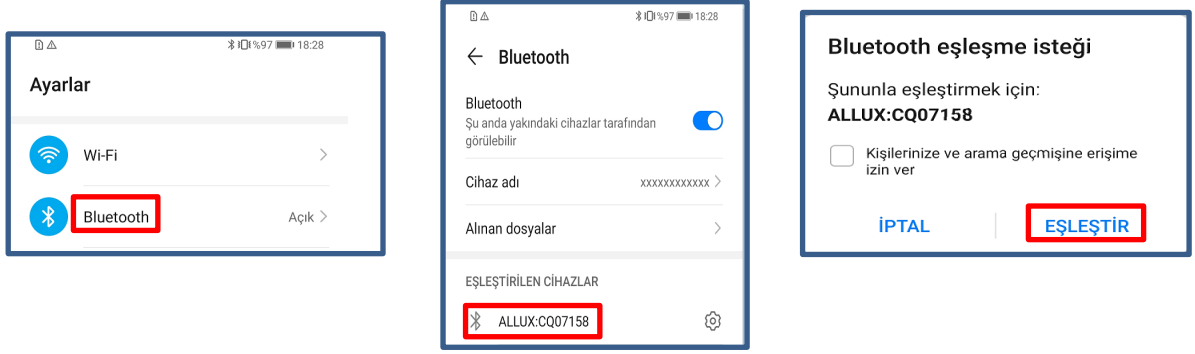

3. Doğru şekilde eşleştirildiğinde, ekran aşağıdaki gibi görünecektir

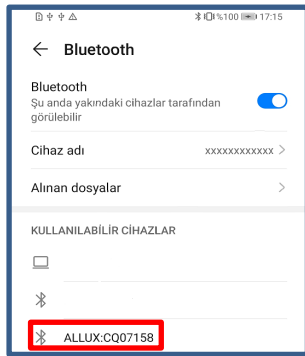


4. ALLUX™ ile eşleştirme bağlantısını kesmek için ALLUX™'un güç KAPATMA başlığını takınız.


3 Güvenli Duruş

ALLUX™'in çalışma modunu Remote Control Uygulamasını kullanarak değiştirmeden önce, kullanıcının hidrolik direnç değişse bile güvenli bir duruş alması gerekir. Bu duruşa 'güvenli duruş' denir. ALLUX™ kullanmadan önce aşağıdaki güvenli duruşları anladığınızdan emin olun.

【Güvenli duruş】

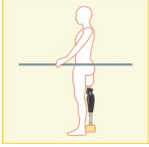

: ALLUX™ tamamen düzdür, sabittir ve vücut ağırlığınızı üzerine koymak güvenli olacaktır.

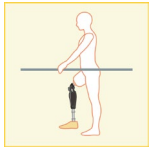

: ALLUX™'nin ağırlığı yoktur, ancak bükülebilir.




DİKKAT

- Vücut ağırlığınızı ALLUX™'a uygulamadan güvenli bir duruş alırken, bir tırabzan tutun veya oturun. Dengenizi kaybedebilirsiniz ve düşebilirsiniz.

[Güvenli duruş talebi]

ALLUX 2™, ALLUX™ çalışma modunu değiştirirken güvenli duruşta değilse, bir açılır pencere görüntülenir. Güvenli duruşa sahip olduğunuzdan emin olun ve "Tamam" düğmesine dokununuz.

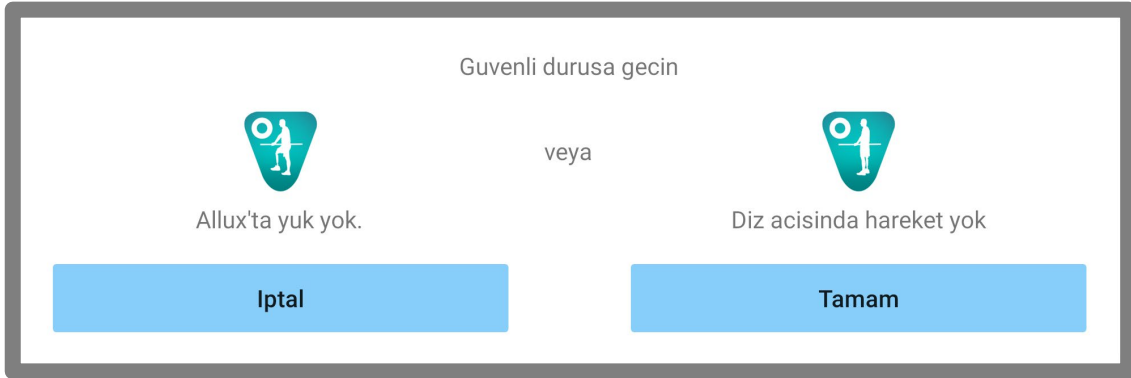

Allux'ta yuk yok

Diz acısında hareket yok

*Açılır metin bazı cihazlarda gizlenmiş olabilir.

Bu durumda lütfen cihazınızı yatay olarak çevirin.

Cihaz yatay olarak döndürüldüğünde bile metin hala görünüyorsa, lütfen yukarıdaki metni kontrol edin

4

İletişim modu ve Bluetooth'un nasıl bağlanacağı

Gücü korumak için ALLUX™ her zaman iletişim modunda değildir.

İletişim modunu etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

Bu Uygulama kullanılarak ALLUX™ iletişimi kurulduğunda, bu durum iletişim kesilene kadar devam eder.

[İletişim modu etkin]


1. ALLUX™ hafifçe esnetildikten ve uzatıldıktan sonra 5 dakika süreyle
2. Vücut ağırlığınızı ALLUX™'a uyguladıktan sonra 5 dakika süreyle
3. Şarj cihazının veya güç KAPATMA başlığının ALLUX™ ile bağlantısı kesildikten sonra 5 dakika süreyle



Kullanıcı uçağa vb. bindiğinde kablosuz bağlantıyı KAPATMAK mümkündür. Kablosuz bağlantıyı bu durumdan geri yüklemek için aşağıda gösterilenler gibi eylemler gereklidir.

1. Şarj cihazının veya güç KAPALI başlığının ALLUX™ ile bağlantısını kesin.
2. "Aralıklı olarak 4 kez topuk üzerine yük uygulayın" veya "Aralıklı olarak 4 kez ayak parmağına yük uygulayın"

*Sayfa 15 'te açıklanan yöntemle dilediğiniz birine geçiş yapabilirsiniz.

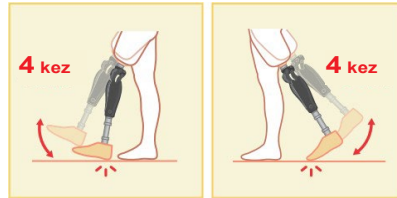

*Bu Uygulamayı yeni başlatmak ALLUX™'a bağlanmaz. ALLUX™'a bağlanmak için "Mod Değiştirme" ekranında (Bkz. Sayfa 12) Bluetooth simgesine dokununuz.

* Akıllı telefondaki ana sayfa düğmesine vb. dokunmak, ALLUX™ ile iletişimi kesmez ve bu Uygulama, ekranın arkasında çalışmaya devam eder. Bu Uygulamanın simgesine tekrar dokunursanız, bağlı durumda başlar.



DİKKAT

Bu Uygulama ile bir modu değiştirirken akıllı telefonu kapatmayın veya bu Uygulamadan zorla çıkmayın. Bunu yapmak, ayar değerlerinin istenmeyen bir duruma dönüşmesine ve düşmesine neden olabilir.

UYARI

Bu Uygulama akıllı telefonda gizli olsa bile ALLUX™ ile bağlantı korunur ve akıllı telefonun pili sürekli olarak tüketilir.

Pil tüketimi konusunda endişeleriniz varsa, akıllı telefonun ALLUX™ bağlantısını kesin veya bu Uygulamayı kapatın.

5

ALLUX™ çalışma modları

ALLUX™ aşağıdaki beş çalışma moduna sahiptir.

[Normal mod]

Normal mod, normal yürüyüş için ayarlanmıştır. Sensör ile çeşitli yürüme durumlarını ve normal hareketleri değerlendiren ALLUX™, esneme ve ekstansiyonu otomatik olarak ayarlar.


[Fleksiyon açısı limit modu]

Fleksiyon açısı limit modu, fleksiyon direnci belirlenmiş bir açıda kilitlenirken, ekstansiyon direnci serbest kalır.



[Değişken seçenekli fleksiyon kilit modu]

ALLUX™ Değişken seçenekli fleksiyon kilit modunun açıldığı açıyı hatırlar. Bu açıya ulaştığında fleksiyon direnci kilitlenirken ekstansiyon direnci serbest kalır.

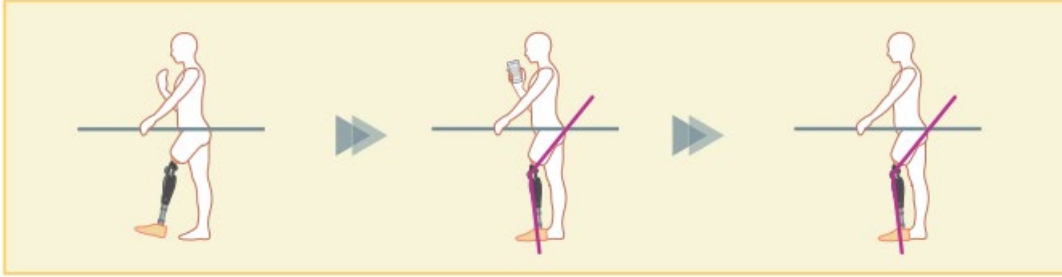


UYARI

- Fleksiyon açısı limit modu veya Değişken seçenekli fleksiyon kilit modu kullanıldığında, ALLUX™ 'u kilitletken aşırı kuvvet uygulamayın. ALLUX™ 'a aşırı darbe kuvveti uygulanırsa zarar görebilir.

5 ALLUX™ operasyonel modlar

[Tam ekstansiyon kilit modu]

ALLUX™ tamamen genişletilmiş durumda kilitlidir.

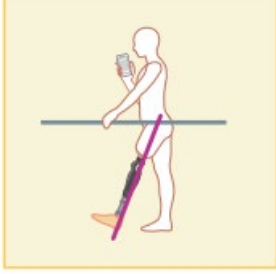

[Serbest Salınım Modu]

Serbest salınım modunda ALLUX™ serbest tutulur (dirençsiz durum).



Bu çalışma modlarının her biri, Ayarlama Uygulamasını kullanan protez uzmanı tarafından Remote Control Uygulamasındaki düğmelere atanabilir ve Remote Control Uygulamasının "Mod Değiştirme" ekranında ilgili düğmeye dokunarak istediğiniz moda geçebilirsiniz. (sayfa 12).

Normal mod, Remote Control Uygulamasında her zaman Düğme 1'e atanır.

Yukarıdaki beş çalışma modunu Remote Control Uygulamasındaki 2 ila 5 düğmelerine serbestçe atayabilirsiniz.

Varsayılan uzaktan kumanda yapılandırması:

- Düğme 2: Fleksiyon Açı Limit modu
- Düğme 3: Değişken Seçenekli Fleksiyon Kilit modu
- Düğme 4: Tam Ekstansiyon Kilit modu
- Düğme 5: Serbest Salınım modu

6 Başlangıç ayarları

*Açılır ekran, kullandığınız akıllı telefona bağlı olarak değişecektir.

1. Başlamak için bu Uygulamanın simgesine dokununuz.



2. Bu Uygulamanın akıllı telefonun konumuna erişmesi için izin isteyen bir açılır pencere görüntülenir. "İzin Ver"e dokununuz.


Android 12 veya sonraki sürümler konum bilgilerini kullanmaz.

Yakındaki cihazlarla ilgili izin isteyen bir açılır pencere görünecektir, lütfen izin verin.



3. "Politika & Lisans" iletişim kutusu görüntülenir.

Okuyunuz ve "Tamam" düğmesine dokununuz.

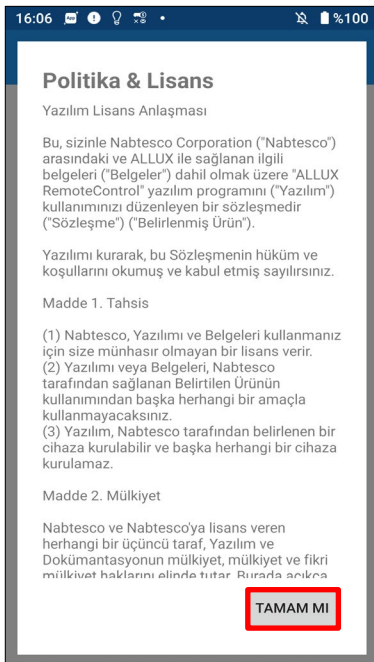

6 Başlangıç ayarları

4. Şirket logosu görüntülenir. İkinci seferden itibaren, yukarıdaki ekranlar atlanır ve bu Uygulamanın simgesine dokunduğunuzda bu ekran görüntülenir.

Firma logosu 1 saniye ekranda görüldükten sonra bu ekran otomatik olarak bir sonraki ekrana geçmektedir




5. Bir uyarı açılır penceresi görüntülenir. Okuyun ve “Tamam” düğmesine dokununuz.



7 Mod deęiřtirme ekranı

Uyarı penceresinden sonra “Mod Deęiřtirme” ekranı g r nt lenir.

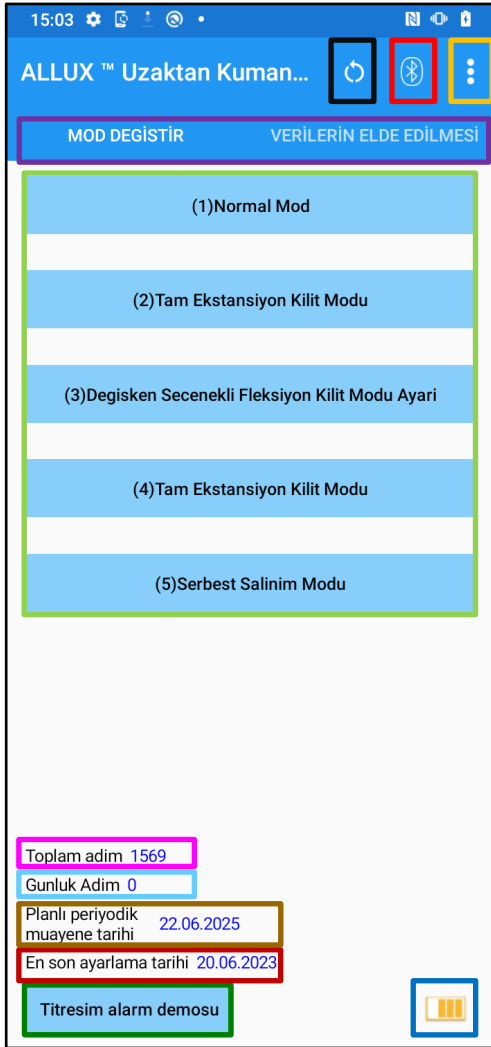

● Yeniden bağlan simgesi:

 nceden bağlanmış ALLUX™'a yeniden bağlanmak i in bu simgeye dokununuz. Baęlantıdan  nce ve sonra ařaęıdaki a ılır pencereler g r nt lenir.

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Daha  nce baęlandığınız cihaza tekrar bağlanmak istiyor musunuz?

[İptal](#) [TAMAM MI](#)

ALLUX™ ile baęlantı

● Bluetooth simgesi:

“ALLUX™ Baęlantısı” ekranını (sayfa 14) g r nt lemek i in bu simgeye dokununuz. Simge, baęlantı durumuna g re deęiřir. Baęlantı kesik durumdayken, baęlantıyı etkinleřtirmek i in simgeye dokununuz.



Baęlı deęil



Baęlı

● General simgesi:

“Genel” ekranını (sayfa 16) g r nt lemek i in bu simgeye dokununuz.

Bekleme iřareti:



Bu Uygulama ALLUX™ ile iletiřim kurarken veya bařka iřlemler ger ekleřtirirken, bir bekleme iřareti g r nt lenir. Bu iřaret g r nt lenirken, t m ekran iřlemleri devre dıřı bırakılır.

● Remote control d ęmesi:

Bu butonlardan birine dokunduęunuzda ALLUX™ durumu, protezci tarafından  nceden atanan  alıřma moduna ge er. D ęmeye dokunduęunuzda, bir a ılır pencere g r nt lenir. "Tamam" d ęmesine dokununuz.

● Ekran deęiřtirme sekmesi:

“Mod Deęiřtirme” ekranı ile “Veri Alma” ekranı arasında ge iř yapabilirsiniz. Ekranı deęiřtirmek i in bu karakterlere dokununuz veya her ekranı sola veya saęa kaydırınız.

● Toplam Adım:

Bu noktaya kadar yaptığınız adım sayısını g sterir.

● G nl k Adımlar:

G n i inde attığınız adım sayısını g sterir.

7 Mod deęiřtirme ekranı

● Planlanan periyodik denetim:

Genel simgenin "Dięer ayarlar" bۆlümüne kullanım bařlangıç tarihini girerseniz, planlanan periyodik denetim tarihi gۆrüntölenecektir.

● Son dűzenleme tarihi:

ALLUX™'nin en son ayarlandıęı tarihi gۆsterir.

● Titreřimli alarm demo dűęmesi:

ALLUX™ demoda titrer.

● Pil seviyesi:

ALLUX™ pil seviyelerini gۆsterir.



10% ou moins



10~40%




40~70%



70% ou plus

8

ALLUX™ bağlantı ekranı

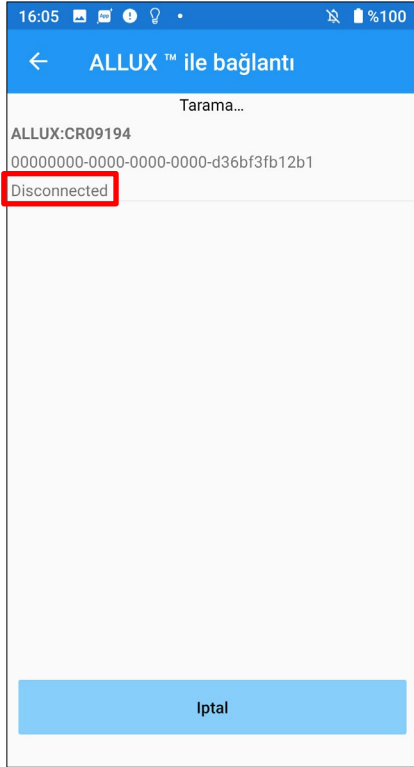

1. "ALLUX™ Bağlantısı" çalmaya başlar, kablosuz cihazların taranması otomatik olarak başlar.

2. ALLUX™ ile ilgili cihazlar listelenir. Belirtilen karakterler ALLUX™ seri numarasına göre değişir.

Üçüncü satır bağlantı durumunu gösterir.

- Bağlantı kesildi
- Bağlanıyor
- Bağlandı


3. "ALLUX:Seri No" görüntülenir. ALLUX™ ürününüzün Seri Numarasına göre birden fazla cihaz listelenmişse, uygun kablosuz cihazı seçin.

4. ALLUX™ kablosuz aygıtı listelenmemişse, ALLUX™ kablosuz bağlantısı uyku modunda olabilir. Sayfa 7'ye bakarak kablosuz bağlantıyı etkinleştirin.

Bundan sonra, "İptal" düğmesine ve ardından kablosuz cihazları tekrar aramak için o konumda görüntülenen "Tara" düğmesine dokununuz.

5. Listedeki kablosuz cihaza dokununuz. Kablosuz bağlantı başarılı bir şekilde yapılırsa, "Mod Değiştirme" ekranı (sayfa 12) otomatik olarak görüntülenir.


"ALLUX™ Bağlantısı" görüntülenir. ALLUX™ şarj bağlantı noktasında belirtilen parolayı girin. Parolayı 3 kez girmede başarısız olursanız, bu Uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

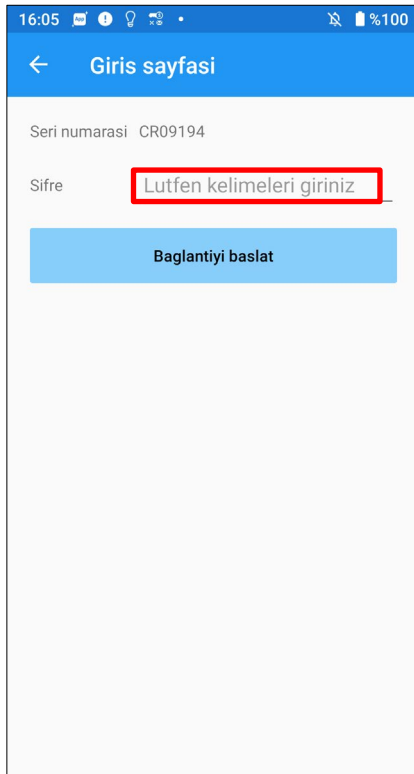

9

Verilerin alınması ekranı


ALLUX™ durumunu bu ekranda kontrol edebilirsiniz.

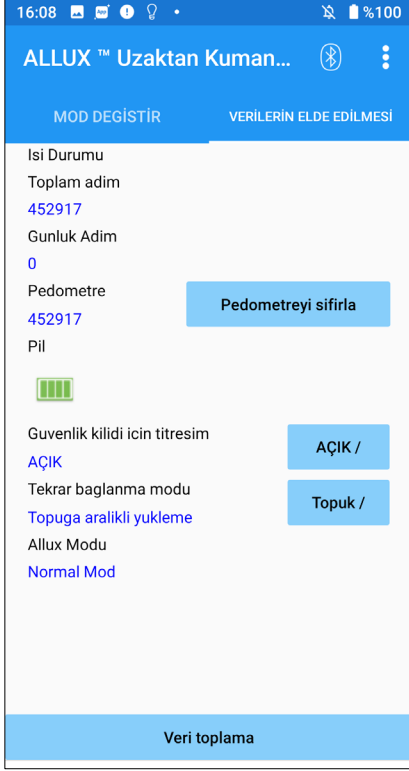

- **Mevcut Sıcaklık:**
ALLUX™ sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.
Tekrarlanan akma hareketi yüksek sıcaklığa neden olabilir.
ALLUX™ ısındığında yüksek sıcaklık moduna girer ve yürüyemezsiniz.
- **Toplam Adım:**
Bu noktaya kadar yaptığınız adım sayısını gösterir.
- **Günlük Adımlar:**
Gün içinde attığınız adım sayısını gösterir.
- **Pedometre:**
“Pedometreyi sıfırla” butonuna bastığınızda adım sayısı bir kez 0 olur ve ardından o noktadan itibaren yaptığınız adım sayısını göstermeye başlar.
- **Pil:**
Pil seviyesini gösterir. (Görüntülenen işaretler, sayfa 12’de gösterilenlerle aynıdır.)
- **Emniyet kilidi için titreşim:**
Bu düğme, güvenlik kilidi (Kullanıcı Kılavuzu, sayfa 10) etkinleştirildiğinde ALLUX™'nin titreşip titreşmeyeceğini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan "AÇIK" (titreşim) olarak ayarlanmıştır.
- **Yeniden bağlanma yöntemi:**
Bu düğme, uçağa binmek vb. için kablosuz bağlantı KAPALI konuma getirildiğinde, şarj cihazını veya güç KAPALI başlığını kullanmadan kablosuz bağlantıyı AÇIK duruma getirme yöntemini değiştirmek için kullanılır. Sayfa 7'ye bakın.
- **Geçerli ALLUX™ Modu:**
Geçerli yürüyüş modunu gösterir. 8. sayfaya bakın.
- **Veri toplama düğmesi:**
Bu düğmeye dokunduğunuzda, adım sayısı gibi bilgiler güncellenir.

10 Genel ekran

“Mod Deęiřtirme” ekranında veya “Veri Toplama” ekranında Genel  ikonuna dokunduęunuzda ekranda “Genel” ekranı g r nt lenir.

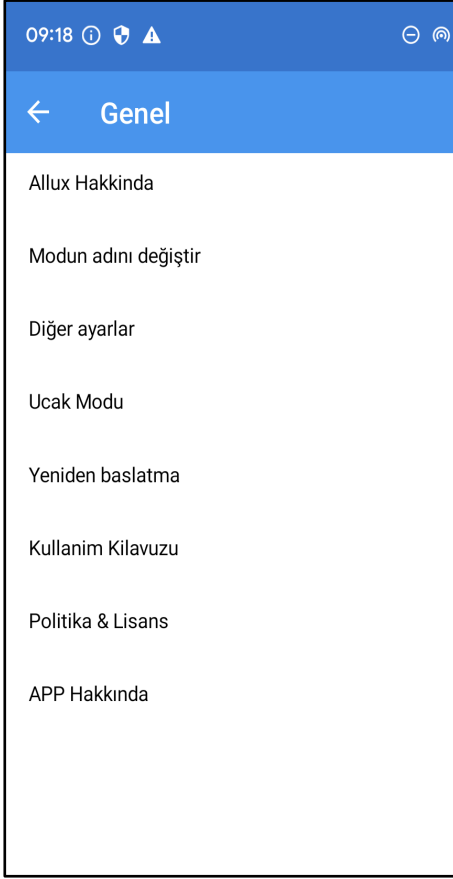

- ALLUX™ Hakkında:
“ALLUX™ Hakkında” ekranı (sayfa 18) g r nt lenir.
- Modun adını deęiřtirin:
“Mod Adı” ekranı (sayfa 19) g r nt lenir.
- Dięer ayarlar:
“Dięer ayarlar” ekranı (sayfa 17) g r nt lenir.
Bu ekranda, Uygulama bařlatıldıęında  nceden baęlanmış ALLUX™'a otomatik olarak baęlanılıp baęlanılmayacaęını ve mod deęiřtirirken onay verilip verilmeyeceęini ayarlayabilir ve kullanım bařlangıç tarihini girebilirsiniz.
- U ak modu:
Bir a ılır pencere g r nt lenir. ALLUX™ kablosuz baęlantısını KAPATMAK i in “OK” d ęmesine dokununuz.
- Yeniden bařlatın:
Bu d ęmeye dokunduęunuzda, bir a ılır pencere g r nt lenir. ALLUX™'yi yeniden bařlatmak i in “Tamam” d ęmesine dokununuz.
* İletiřim kesildięi i in baęlantıyı yeniden etkinleřtirmeniz gerekir.
(G   KAPALI bařlıęını  ıkarıp takmakla aynı eylem.)
- Kullanım Kılavuzu:
Atlanan baęlantıdan kullanım kılavuzunu indiriniz.
- Politika & Lisans:
“Politika & Lisans” iletiřim kutusu (sayfa 10) g r nt lenir.
- APP Hakkında:
Uygulama adını, kullanımını, UDI DI'yi vb. g r nt ler.

11 Diğer ayarlar ekranı



: AÇ (çalışır)



: KAPAT (çalışmaz)

● Başlangıçta otomatik bağlantı:

Uygulama başladığında önceden bağlanmış ALLUX™'a otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını ayarlayabilirsiniz.


● Modları değiştirirken onayı atlayın:

Mod değiştirmek için bir düğmeye tıkladığınızda onaylama açılır penceresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

● Kullanım başlangıç tarihi:

Kullanım başlangıç tarihini girebilirsiniz. Bu giriş, planlanan periyodik denetim tarihi görüntülenirken gereklidir.

12 ALLUX™ hakkında ekranı

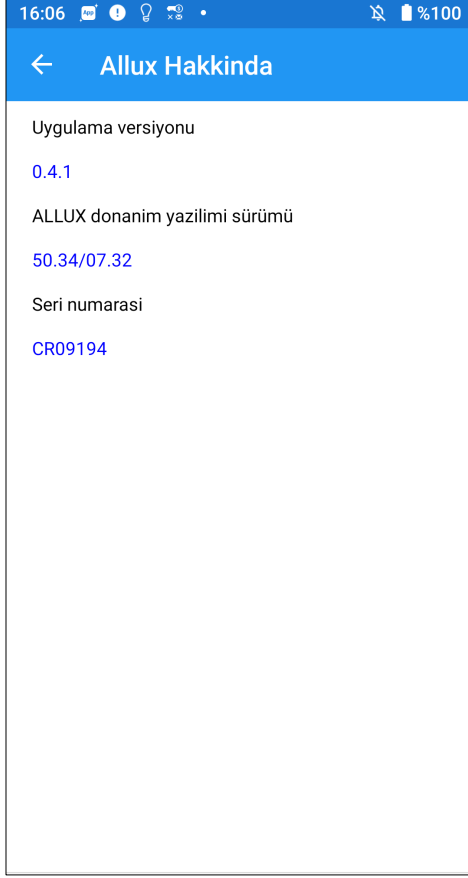


- Uygulama versiyonu
Bu Uygulamanın sürümü görüntülenir.
- ALLUX™ donanım yazılımı sürümü:
ALLUX™ ürün yazılımı sürümü görüntülenir.
- Seri No:
ALLUX™ seri numarası görüntülenir.

13 Mod ismi ekranı

ALLUX™ 8. sayfada açıklanan çalışma modlarının Uzaktan Kumanda Uygulamasındaki düğmelere serbestçe atanmasına izin verir. ALLUX™ ayrıca "Mod Değiştirme" ekranında belirtilen düğme adlarının değiştirilmesine de izin verir. Protezci ile mutlaka atamayı kontrol edin ve düğme isimlerini atamaya göre değiştirin.

Düğmeleri ayar değerlerine göre adlandırmak uygundur, örneğin "Normal mod (yüksek topuklu bir ayakkabı için)" veya "Eğilme Açısı Sınırlı mod (50 derece)".

Protezci mod atamasını değiştirirse, mod adları varsayılanlara döner.

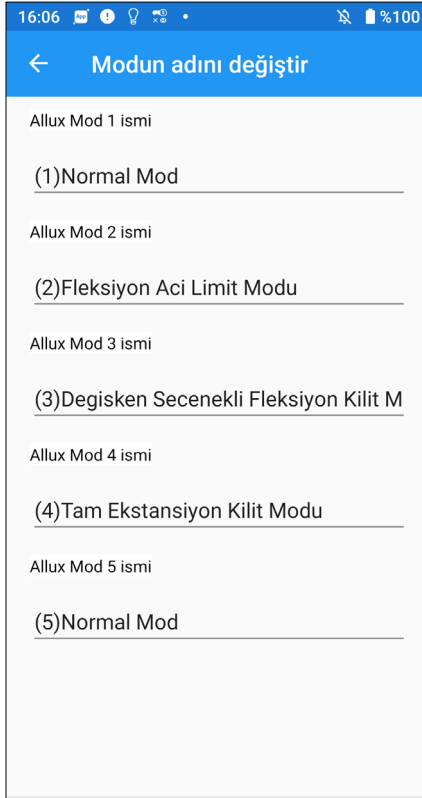

1. Adı değiştirmek için çalışma moduna dokununuz.
2. Ekranda bir klavye görüntülenir.
3. Yeni bir ad girin.
4. Girişi tamamlamak için "✓" ögesine dokununuz.
5. "Mod Adı" ekranına döndüğünüzde, ad bu Uygulamaya yansıtılır.

14 Hata mesajı penceresi

Bir işlem sırasında bir hata oluşursa, bir açılır pencere görüntülenir. Lütfen açılır penceredeki talimatları izleyin.

14.1 Konum bilgisi hatası A

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Ayarlar gidin sonrasında Uygulamalar bölümüne ve ALLUX Remote Control girin. İzinler bölümünden "Konumu aç"ı açın. "Tamam" düğmesine basıldığında uygulama kapanır.

TAMAM MI

"ALLUX™ Remote Control Uygulamasını" kullanmak için konum bilgisi gereklidir. Bu nedenle, sayfa 10'daki işlemde bu Uygulamanın akıllı telefonun konum bilgilerine erişmesine izin verecek şekilde ayarlamanız gerekir. Bu hata, o sırada izin vermediyseniz veya bundan sonra konum bilgilerinin kullanılmasını manuel olarak reddettiyseniz oluşur. Konum bilgilerinin kullanımına izin vermek için bu açılır penceredeki talimatları izleyin.

14.2 Konum bilgisi hatası B

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Lokasyonu Kullan'ı aç

TAMAM MI

Bu hata, akıllı telefonun konum bilgisi işlevi etkinleştirilmediğinde ortaya çıkar. Akıllı telefonun konum bilgisi işlevini etkinleştirin.

14.3 Bluetooth ayar hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Bluetooth'u aç

TAMAM MI

Bluetooth KAPALI ise, bu Uygulama ALLUX™ ile iletişim kuramaz. Akıllı telefonun işleviyle Bluetooth'u AÇIK konuma getirin.

14 Hata mesajı penceresi

14.4 ALLUX™'a bağlantı hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda
Sifre yanlış

TAMAM MI

Bu hata, "ALLUX™ Bağlantısı" ekranında yanlış şifre girildiğinde oluşur. Şarj portunda belirtilen şifreyi tekrar girin.

14.5 Şifre hatası (3 kez)

ALLUX™ Uzaktan Kumanda
Şifreyi 3 kere yanlış girdiniz. "OK" tusuna bastığınızda uygulama kapanacak.

TAMAM MI

Bu hata, parolayı 3 kez girmezseniz oluşur. Ve sonra bu Uygulama aynı anda kapanır. Bu Uygulamayı tekrar başlattığınızda, şifreyi tekrar girebilirsiniz.

14.6 Kablosuz bağlantı hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda
Bluetooth'a bağlanılamıyor

TAMAM MI

Bu hata, ALLUX™ ile akıllı telefondaki Bluetooth arasındaki kablosuz bağlantı başarısız olduğunda oluşur. Sayfa 7'ye bakarak ALLUX™ kablosuz bağlantısını AÇIK duruma getirmeye çalışın.

14.7 Kablosuz iletişim hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda
Allux'a bağlanma başarısız oldu

TAMAM MI

Bu hata, ALLUX™ ile akıllı telefondaki Uygulama arasındaki iletişim başarısız olduğunda ortaya çıkar. Sayfa 12'ye bakarak kablosuz bağlantıyı yeniden etkinleştirin.

Bu bir mod değişikliği sırasında meydana gelirse, ALLUX™ durumunu kontrol edin ve kullanın.

14.8 Güvenli duruş hatası



Kullanıcı güvenli bir duruş almazsa, ALLUX™ ayarları değiştirilemez.6. sayfaya bakarak güvenli bir duruşa geçin.

14 Hata mesajı penceresi

14.9 Hidrolik control hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Bir uyarı, ALLUX'u kullanmaktan kaçınmanızı ister.
Distribütörlerle iletişime geçin.

TAMAM MI

Hidrolik kontrol arızalı olabileceğinden, ALLUX™ kontrolü durdurulur.

Bakım hizmeti almak için protezci ile iletişime geçin.

14.10 Yakındaki cihaz bağlantı hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Ayarlar gidin sonrasında Uygulamalar bölümüne ve ALLUX Remote Control girin. İzinler bölümünden Depolama'yı açın.
"Tamam" düğmesine basıldığında uygulama kapanır.

TAMAM MI

"ALLUX™ Uzaktan Kumanda Uygulaması"nı kullanmak için "Yakındaki cihazlar" izni gereklidir. Bu nedenle, "ALLUX™ Uzaktan Kumanda Uygulaması"nda "Yakındaki cihazlar"ı izin vermeyi ayarlamış olmanız gerekir. sayfa 10. Bu hata, o sırada izin vermediyseniz veya daha sonra manuel olarak reddettiyseniz oluşur. "Yakındaki cihazlar"ı izin vermek için bu açılır penceredeki talimatları izleyin

14.11 Yeniden bağlan düğmesi hatası

ALLUX™ Uzaktan Kumanda

Önceden bir cihaz bağlantısı yok.

TAMAM MI

Bu hata, önceden bağlanmış bir ALLUX™ yokken Yeniden Bağlan düğmesine dokunduğunuzda görüntülenir. Kullanmadan önce bağlantıyı normal prosedüre göre yapınız.

15

Sorun Giderme

Problem	Kontrol	Çözüm
Uzaktan Kontrol Uygulaması yüklenemez.	İşletim sistemi sürümünün uygun olup olmadığını kontrol edin.	İşletim sisteminizi uygulama mağazasında listelenen uyumlu bir sürüme güncelleyin.
	Akıllı telefonun vb. sabit diskinde gerekli boş alana sahip olup olmadığını kontrol edin.	Sabit diskteki boş alanı artırın.
ALLUX™ bağlanamaz.	“ALLUX™ Bağlantısı” ekranında (sayfa 14) ALLUX™'nin tanındığını kontrol edin.	“ALLUX™ Bağlantısı” ekranında ALLUX™'yi seçin.
	ALLUX™ iletişiminin birden fazla cihazla bağlantılı olmadığını kontrol edin.	ALLUX™ birden fazla cihaza bağlanamaz. Protez uzmanı Adjustment Uygulamasını kullanıyorsa protez uzmanından iletişimi kesmesini isteyin.
	Akıllı telefonda Bluetooth'un AÇIK mı kontrol edin.	Akıllı telefonda Bluetooth'u AÇIK konuma getirin.
	Yukarıdaki işlemlere rağmen bağlantı kurulamadı.	Yeniden bağlanmadan önce aşağıdaki üç adımı uygulayınız. (1) ALLUX™ güç kaynağını yeniden başlatınız. (Şarj cihazını veya güç KAPATMA başlığını bir kez takınız ve ardından çıkarınız). (2) Akıllı telefonun Bluetooth'unu bir kez KAPATINIZ ve ardından tekrar AÇINIZ. (3) Uzaktan Kontrol Uygulamasını yeniden başlatınız.
Aralıklı olarak 4 kez topuk veya ayak parmağına yük uygulansa bile kablosuz bağlantı yeniden kurulamaz.	Burun veya topuk ayarının veya yük uygulama şeklinin doğru olup olmadığını kontrol edin.	Bu Uygulama ile ayarı veya sayfa 7'ye bakarak tekrar bir yük uygulama şeklini kontrol edin. Kablosuz bağlantı hala geri yüklenemiyorsa, geri yüklemek için pil şarj cihazını veya güç KAPALI başlığını çıkarın ve takın.

15 Sorun Giderme

ALLUX™, "ALLUX™ Bağlantısı" ekranında gösterilmez.	ALLUX™ kablosuz bağlantısının AÇIK olduğundan emin olun.	Sayfa 7'ye bakarak kablosuz bağlantıyı AÇIN.
	ALLUX™ pilinin şarj ediliyor mu kontrol edin.	ALLUX™ için pili şarj edin.
	Birden fazla Uygulamanın aynı anda çalışmadığını kontrol edin.	Gereksiz Uygulamaları kapatın.
	Akıllı telefonda Bluetooth'un AÇIK mı kontrol edin.	Bluetooth işlevini AÇIK konuma getirin.
ALLUX™ ve Uygulama arasındaki iletişim kolayca kesilir.	ALLUX™ veya akıllı telefon için pil kapasitesinin düşük pil durumu olup olmadığını kontrol edin.	ALLUX™ veya akıllı telefon için pili şarj edin.
	ALLUX™, demiryolu, otoyol, TV kulesi, havaalanı, sergi ve hastane gibi belirli kablosuz koşullar altında mı kullanılıyor, kontrol edin.	Cihazı, trenlerin veya araçların sık sık gelip geçtiği ortamlarda veya birden çok kablosuz bağlantının olduğu ortamlarda kullanmaktan kaçınin.
	ALLUX™ kullanıcısının çevresinde radyo dalgasına karşı büyük kalkanlar olup olmadığını kontrol edin.	Radyo dalgalarını engelleyen kalkanları kaldırın.



Nabtesco Corporation

Üretici

Nabtesco Corporation
Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department
35, Uozakihama-machi Higashinada-ku
Kobe, Japan 658-0024
TEL: +81-78-413-2724
FAX: +81-78-413-2725
<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

AB ülkeleri için yetkili temsilci



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

İletişim

Eksik veya düzensiz bir sayfa görürseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Nabtesco

Nabtesco Corporation