

ALLUX™

Ayarlama Uygulaması Kullanım klavuzu

Protezler İçin

Ürün Kodu : NE-Z41, NE-Z41SH

Dosya No : 81-SS00123 (ver.7)

iOS Uygulama Ver. 1.0.1 veya üstü

Android Uygulama Ver. 1.0.1 veya üstü

Veriliş tarihi : 2026.04

Dil : Türkçe



DİKKAT

- Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Diz eklemine kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği bir yerde kullanıcıya göre ayarlayınız.
- Bu talimat kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.

Nabtesco

Nabtesco Corporation

Giriş

Nabtesco'nun ALLUX™ ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

ALLUX™ yalnızca Nabtesco ALLUX™ sertifikasyon seminerine katılmış ve sertifikalandırılmış kişiler tarafından monte edilebilir ve ayarlanabilir. Yürüme, bakım, servis parçasının değiştirilmesi dahil çalıştırma prosedürleri, sorun giderme ve uyarı notları gibi tipik kullanıma ilişkin hususlar ALLUX™ ile birlikte gelen talimat kılavuzunda (bundan böyle ALLUX™ Talimat Kılavuzu olarak anılacaktır) açıklanmıştır.

Bu Adjustment Uygulaması Talimat Kılavuzu, Adjustment Uygulamasının (bundan sonra bu Uygulama olarak anılacaktır) nasıl kurulacağını ve kullanılacağını açıklar.

ALLUX™'yi ayarlamadan önce, yukarıda belirtilen ALLUX™ Talimat Kılavuzunu ve Ayarlama Uygulaması Talimat Kılavuzunu baştan sona okuyun, içeriğini yeterince anlayın ve bu kılavuzlarda belirtilen güvenlik önlemlerine kesinlikle uyun.

Bu belgede gösterilen uygulama ekran görüntüleri bir Android cihazdan alınmıştır. Ekran görüntüsü, kullandığınız cihaza ve işletim sistemi sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

- Nabtesco bu belgenin telif hakkına sahiptir.
- Android, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Google Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
- Google, Google Inc.'in ticari markasıdır.
- Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.
- IOS, Cisco'nun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.
- iPhone, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in ticari markasıdır.
- Apple, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in ticari markasıdır.
- App Store, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kayıtlı bir hizmet markasıdır.
- Bluetooth kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG'e ait tescilli ticari markalardır. Inc. ve bu tür markaların Nabtesco Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.
- QR kodu, Denso Wave Incorporated'in tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

İçindekiler

Giriş.....	1
İçindekiler	2
1 Desteklenen model ve işletim ortamı	3
2 Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları	4
2.1 Kurulum Prosedürleri	4
2.2 Bluetooth eşleştirme	5
3 Başlangıç ayarları	6
4 Güvenli duruş	9
5 İletişim modu ve Bluetooth'un nasıl bağlanacağı	10
6 İlk başlatma ve her ekranla ilgili ortak işlem	11
7 Ayarlama prosedürü	12
8 Temel Ayarlar	13
9 Saat Diliminin Ayarlanması	14
10 Kalibrasyon	15
11 Baş Parmak Serbest Bırakma Noktasının Ayarlanması	16
12 Duruş Fleksiyon Verimini Ayarlama	17
13 Duruş Uzatma Sönümlemesini Ayarlama	18
14 Salınım Fleksiyon Direncinin Ayarlanması	19
15 Terminal Etkisini Ayarlama	20
16 Güvenlik Kilidini Ayarlama	21
17 Düşük Pil ayarları	22
18 Ayar verilerinin kaydedilmesi	23
19 Gelişmiş Ayarlama	24
20 Remote Control Uygulamasının Ayarlanması	25
20.1 ALLUX™ çalışma modları	25
20.2 Remote Control Uygulamasındaki düğmelere çalışma modları atama	26
20.3 Remote control ayarlama ekranı	27
21 Veri Kopyalama	30
22 Yürüyüş Verisi	31
22.1 Yürüyüş verisi ekranı	31
22.2 Grafik oluştur ekranı	32
22.3 Rapor oluşturma	33
23 Ayarlama Geçmişi	34
24 Genel	35
25 Hata mesajı açılır ekranı	36
25.1 Konum bilgisi hatası A	36
25.2 Konum bilgisi hatası B	36
25.3 Bluetooth hatası	36
25.4 Parola hatası ("Parolayı Girin" ekranı)	36
25.5 Parola hatası ("ALLUX™ Bağlantısı" ekranı)	37
25.6 Şifre hatası (3 kez)	37
25.7 Kablosuz bağlantı hatası	37
25.8 Kablosuz iletişim hatası	37
25.9 Güvenli duruş hatası	37
25.10 Hidrolik kontrol hatası	38
25.11 Yakındaki cihaz bağlantı hatası	38
26 Sorun giderme	39

1 Desteklenen model ve işletim ortamı

● ALLUX™ (ürün: NE-Z41)

* ALLUX™ (ürün: NE-Z4) desteklenmiyor.

Model, ön bağlantı pedinin tasarımı ile tanımlanabilir.

Şarj portundaki gösterge ile de tanımlanabilir.



NE-Z41
(Desteklenen Ürün)

NE-Z4
(Desteklenmeyen
Ürün)

NE-Z41
(Desteklenen Ürün)

NE-Z4
(Desteklenmeyen
Ürün)

● Uyumlu İşletim Sistemi:

Android: Lütfen Google Play Store'daki uygulama yazılımı bilgilerinde listelenen "İşletim Sistemi Gereksinimleri"ne bakın.

iOS: Lütfen App Store'da yayınlanan "Uyumluluk" bilgilerine bakın.

● Boş depolama alanı: 500 MB veya daha fazlası önerilir.


Bluetooth®



Bluetooth ile ilgili önlemler

- Bir Bluetooth cihazı tarafından yayılan radyo dalgaları, elektronik cihazların ve diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir. Kazaya neden olabileceğinden, trenlerdeki öncelikli koltukların yakınındayken, uçaklar gibi yanıcı gazların olduğu alanlarda, örneğin otomatik kapıların ve yangın alarm cihazlarının yakınındayken Bluetooth cihazlarını kapatın.
- Bluetooth teknolojisini kullanırken bilgi sızıntısı için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Bu ürün, tüm Bluetooth cihazlarıyla kablosuz bağlantıyı garanti etmez. Bağlanacak Bluetooth cihazı, Bluetooth SIG tarafından belirtilen Bluetooth standardına uygun olmalı ve en az bir sertifika almış olmalıdır. Ayrıca bağlanacak cihaz Bluetooth standardına uygun olsa bile cihazın özelliklerine ve özelliklerine bağlı olarak bağlanamama veya farklı görüntü/çalışma gibi durumlar meydana gelebilir.
- Bu ürünün kablosuz işlevinin teknik standartları karşıladığı onaylandığı için bu ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.

2 Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları

2.1 Kurulum Prosedürleri

1. Google Play Store/App Store'daki arama kutusuna "ALLUX2" uygulama adını girin ve klavyedeki düğmeye dokunun. 

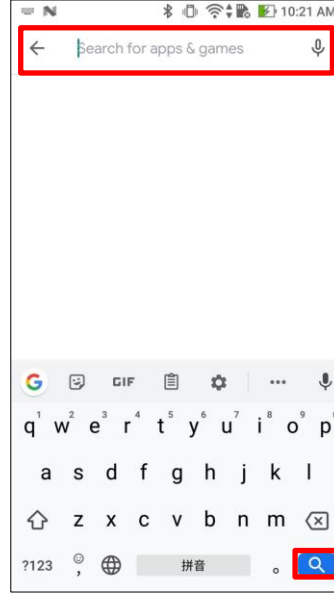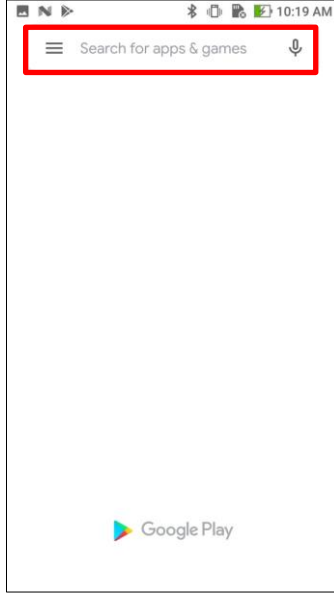

※Kurulum için aşağıdaki QR kodu kullanılabilir.



Android



iOS

2. Arama sonuçları görüntüledikten sonra, aşağıda gösterildiği gibi hedef Uygulamaya dokunun.



3. "Yükle" simgesine dokunun.
4. Kurulum tamamlandıktan sonra, akıllı telefonun ana ekranında Uygulamanın simgesi oluşturulur.
5. Uygulamayı başlatmak için simgesine dokunun.

2 Kurulum prosedürleri ve başlangıç ayarları

2.2 Bluetooth eşleştirme

Bu Uygulamayı kullanmadan önce Bluetooth eşleştirmesi gereklidir.

Eşleştirme için aşağıdaki prosedürü izleyin.

*Prosedür ve ekran, akıllı telefonunuza ve uygulamanın sürümüne bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Lütfen akıllı telefonunuzun kılavuzunu kontrol edin.

Bir cihaz seçtikten sonra, akıllı telefonunuzun ekranında bir Bluetooth eşleştirme açılır penceresi görünecektir.

İçeriği kontrol edin ve "İzin Ver" veya "Eşleştir ve Bağlan" seçeneğine dokununuz.



Android



iOS

●iOS cihazlar için

Görünen açılır pencerede "Eşleştir", "Eşleştir ve bağlan", "Tamam" veya "İzin ver" seçeneklerinden birini seçin. Açılır pencere bir kez görünecek ve kabul ettiğinizde eşleştirme tamamlanacaktır.

●Android cihazlar için

Android işletim sistemi özelliklerinden dolayı, Bluetooth eşleştirme açılır penceresini iki kez kabul etmeniz gerekir.

***İki kez kabul etmezseniz, ALLUX ile düzgün bir şekilde eşleştiremezsiniz.**

*Eşleştirme başarısız olursa, uygulamayı kapatıp yeniden başlatın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.

Yukarıdaki adımları kullanarak eşleştiremezseniz, lütfen aşağıdaki "Ayarlar Ekranından Eşleştirme" yöntemini de deneyin.


●Ayarlar Ekranından Eşleştirme


1.ALLUX™'ta iletişimi etkinleştirin ve Ayarlar düğmesinden veya Cihaz Bağlantıları'ndan Bluetooth'a dokununuz.

*Güç kapatma kapağı çıkarıldığında güç açılır ve takıldığında kapanır.

2.Mevcut bir cihaz seçin (ALLUX: XXXXXXXXXX) ve üzerine dokununuz (veya izin verin).

3 Başlangıç ayarları

- 1) Uygulamayı başlatmak için uygulama logosuna dokununuz. 
- 2) Firma logosu 1 saniye ekranda görüldükten sonra bu ekran otomatik olarak bir sonraki ekrana geçmektedir.

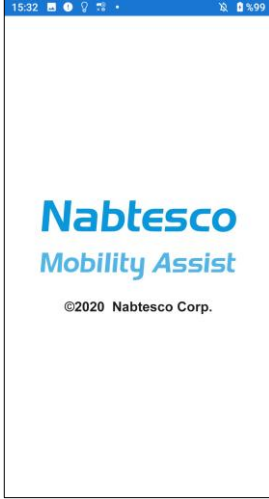

- 3) Bir açılır pencere görüntülenir ve kullanıcının bu Uygulamanın cihazın konumuna erişmesine izin verip veremeyeceğini sorar. "İzin Ver"e dokununuz.



Android 12 veya sonraki sürümler konum bilgilerini kullanmaz. Yakındaki cihazlarla ilgili izin isteyen bir açılır pencere görünecektir, lütfen izin verin.



* Açılır ekran akıllı telefona bağlı olarak değişecektir.


- 4) "Parolayı Girin" ekranı görüntülenir. Talimat kılavuzunda belirtilen şifreyi girin.

Parolayı 3 kez girmede başarısız olursanız, bu Uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

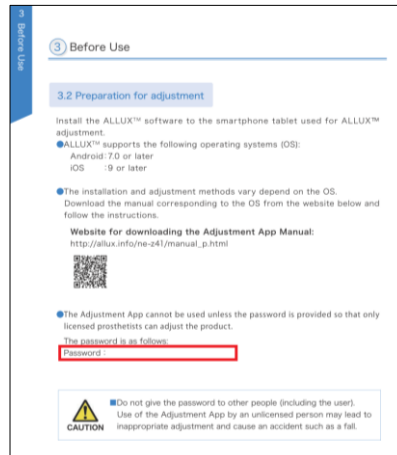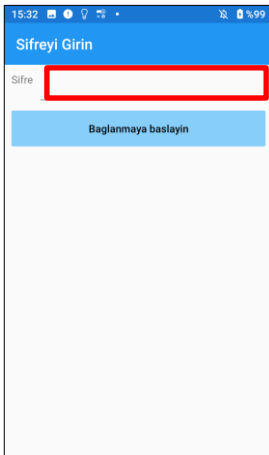

3 Başlangıç ayarları

- 5) "Politika ve Lisans " Düzenleyici" iletişim kutusu görüntülenir.
Okuyun ve "Tamam" düğmesine dokununuz.

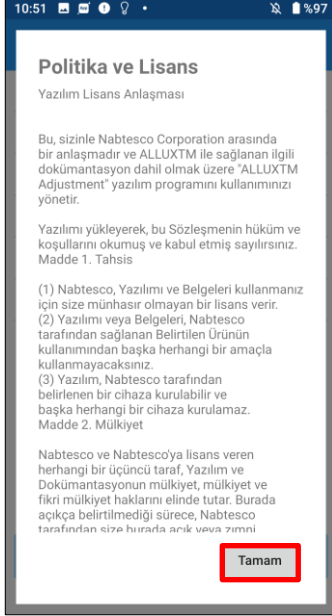

- 6) "Uygulama kullanıcı profili" görüntülenir.
Her bilgiyi girin ve "Tamam" düğmesine dokununuz.

Şirket İsmi:

Uygulama kullanıcısının çalıştığı P&O Kliniği adını veya şirketini girin.

Yaş:


Listeden ayarlayıcının yaşını seçin.

Gender:

Listeden ayarlayıcının cinsiyetini seçin.

3 Başlangıç ayarları

7) "ALLUX™ Bağlantısı" ekranı görüntülenir.

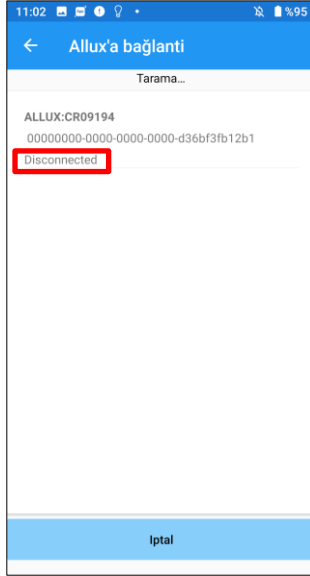

1. "ALLUX™ Bağlantısı" ekranında, kablosuz cihazlar için tarama otomatik olarak başlar.
2. ALLUX™ ile ilgili cihazlar listelenir. Belirtilen karakterler ALLUX™ seri numarasına göre değişir. Üçüncü satır bağlantı durumunu gösterir.
 - Bağlantı kesildi
 - Bağlanıyor
 - Bağlandı
3. "ALLUX:Seri No" görüntülenir. Kendi ALLUX™'inizin Seri Numarasına göre birden fazla cihaz listelenmişse, uygun kablosuz cihazı seçin.

4. ALLUX™ için kablosuz cihaz listelenmemişse, ALLUX™ kablosuz bağlantısı uyku modunda olabilir. ALLUX™'i hafifçe esneterek ve uzatarak veya kullanıcının vücut ağırlığını ALLUX™ üzerine uygulayarak kablosuz bağlantıyı etkinleştirmeyi deneyin. Bundan sonra, "İptal" düğmesine ve ardından kablosuz cihazları yeniden aramak için o konumda görüntülenen "Tara" düğmesine dokunun.

5. Listedeki kablosuz cihaza dokununuz. Kablosuz bağlantı başarılı bir şekilde yapılırsa, otomatik olarak "ALLUX™'a Bağlantı" ekranı görüntülenir.

* Ardışık bağlantılar için "ALLUX™ Bağlantısı" ekranı atlanır ve ilk başlangıç ekranı görüntülenir.


8) "ALLUX™ bağlantısı" ekranı görüntülenir.

"ALLUX™ Bağlantısı"nda, ALLUX™ ile birlikte gelen şifreyi girmeniz gerekir.

Parola, ALLUX™'nin şarj bağlantı noktasında belirtilir.

Parolayı 3 kez girmede başarısız olursanız, bu Uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir.

*İlk bağlantı kurulurken öncelikle Bluetooth eşleştirmesi yapılması gerekmektedir (bkz. sayfa 5).

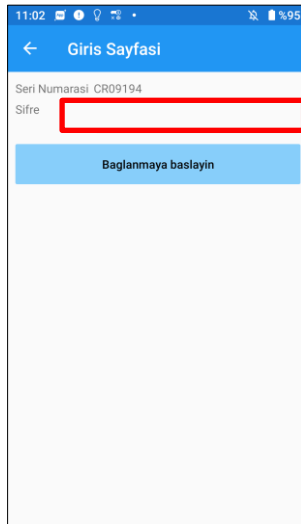

4 Güvenli duruş


ALLUX™'in çalışma modunu Remote Control Uygulamasını kullanarak değiştirmeden veya ALLUX™'yi bu Uygulamayı kullanarak ayarlamadan önce, kullanıcının hidrolik direnç değişse bile güvenli bir duruş alması gerekir. Bu duruşa 'güvenli duruş' denir. Kullanıcıya güvenli duruş hakkında açıklama yapın.




DİKKAT

- Kullanıcıya güvenli duruşu açıklayın ve kullanıcının bunu anladığından emin olun.
- Kullanıcı vücut ağırlığını ALLUX™'a uygulamadan güvenli duruşa geçtiğinde, bir tirabzan tutmalı veya oturmalıdır. Fleksiyon/uzama direnci aniden değişerek düşmeye neden olabilir.

[Güvenli Duruş]

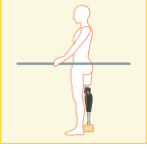

: ALLUX™'nin nerede sabit, düz ve dikey olduğunu ve ağırlık yüklemesine tabi olabileceğini belirtin

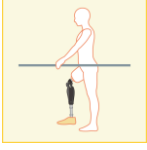


: ALLUX™'in yük taşımaya tabi olmadığı ve dizin fleksiyonda ve sabit olabileceği durumları belirtin.

[Güvenli Duruş Talebi]

ALLUX™ ayarlanırken veya ayarlanırken ALLUX™ güvenli duruşta değilse, bir açılır pencere görüntülenir.

Kullanıcının güvenli bir duruşta olduğundan emin olun ve ardından ayarlamaları veya ayarları yansıtmak için "Tamam" düğmesine dokununuz. "İptal" düğmesine dokunursanız, ayarlamalar veya ayarlar iptal edilecektir.

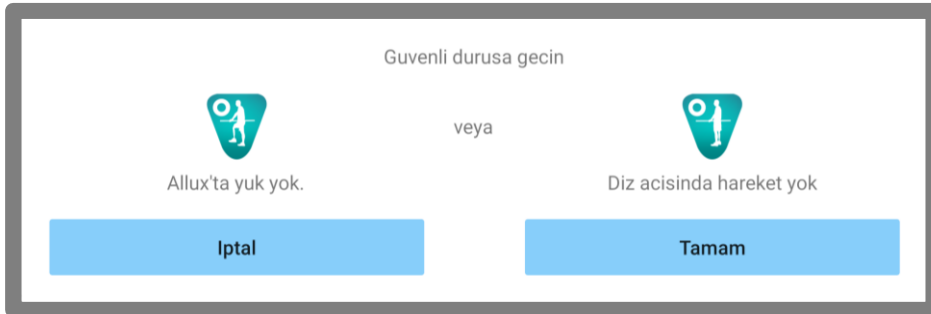

Allux'ta yük yok.

Diz acısında hareket yok

* Açılır metin bazı cihazlarda gizlenmiş olabilir.

Bu durumda lütfen cihazınızı yatay olarak çevirin.

Cihaz yatay olarak döndürüldüğünde bile metin hala görünüyorsa, lütfen yukarıdaki metni kontrol edin.

5

İletişim modu ve Bluetooth'un nasıl bağlanacağı


Gücü korumak için ALLUX™ her zaman iletişim modunda değildir.

İletişim modunu etkinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

Bu Uygulama kullanılarak ALLUX™ iletişimi kurulduğunda, bu durum iletişim kesilene kadar devam eder.


[İletişim Modu Etkin]

1. ALLUX™ hafifçe esnetildikten ve uzatıldıktan sonra 5 dakika süreyle
2. Vücut ağırlığınızı ALLUX™'a uyguladıktan sonra 5 dakika süreyle
3. Şarj cihazının veya güç KAPATMA başlığının ALLUX™ ile bağlantısı kesildikten sonra 5 dakika süreyle

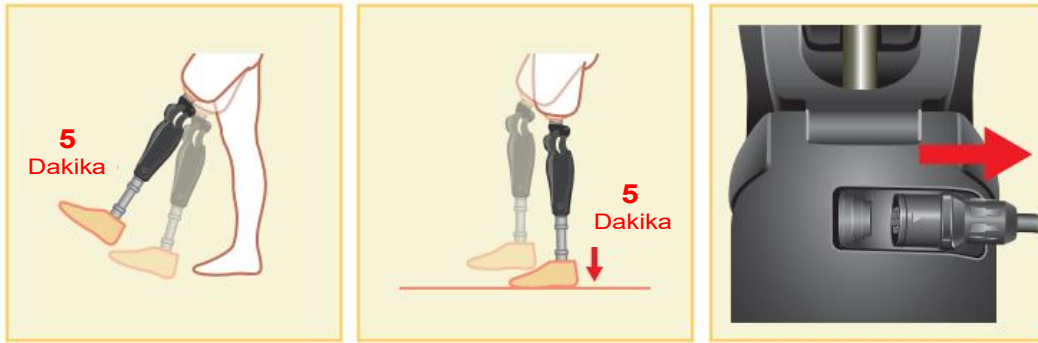

Remote Control Uygulaması ile, kullanıcı uçağa vb. bindiğinde kablosuz bağlantıyı KAPATMAK mümkündür. Kablosuz bağlantıyı bu durumdan geri yüklemek için, aşağıda gösterilen gibi eylemler gereklidir.

1. Şarj cihazının veya güç KAPALI başlığının ALLUX™ ile bağlantısını kesin.
2. "Aralıklı olarak 4 kez topuk üzerine yük uygulayın" veya "Aralıklı olarak 4 kez ayak parmağına yük uygulayın".
3. *Uzaktan Kumanda Uygulaması ile dilediğiniz birine geçiş yapabilirsiniz.

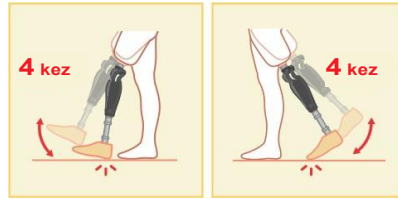

* Bu Uygulamayı başlatmak ALLUX™'a direkt olarak bağlanmaz. ALLUX™'a bağlanmak için başlangıç ekranında (bkz. sayfa 11) Bluetooth simgesine dokununuz.

* Akıllı telefondaki ana sayfa düğmesine vb. dokunmak, ALLUX™ ile iletişimi kesmez ve bu Uygulama, ekranın arkasında çalışmaya devam eder. Bu Uygulamanın simgesine tekrar dokunursanız, bağlı durumda başlar.




DİKKAT

- Akıllı telefonu kapatarak bu Uygulamadan zorla çıkmayın. Bunu yapmak, ayar değerlerinin istenmeyen bir duruma dönüşmesine ve düşmesine neden olabilir.

6

İlk başlatma ve her ekranla ilgili ortak işlem

İlk çalıştırmada, "ALLUX™ Bağlantısı" ekranından sonra ilk çalışma ekranı görüntülenir. Normal durumdaki ikinci ve sonraki çalıştırmalarda şirket logosundan sonra ilk çalışma ekranı gelir.

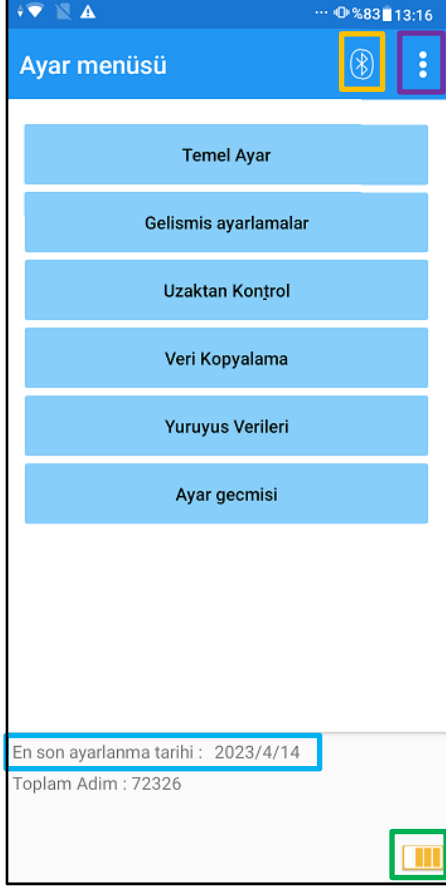

Bluetooth simgesi:

"ALLUX™ Bağlantısı" ekranını görüntülemek için bu simgeye dokununuz. Simge, bağlantı durumuna göre değişir. Bağlantı kesik durumdayken, bağlantıyı etkinleştirmek için simgeye dokununuz.



Bağlı değil



Bağlı

Genel simge:

Bu simgeye  genel ekranı görmek için dokununuz.

Bekleme işareti:



Bu Uygulama ALLUX™ ile iletişim kurarken veya başka işlemler gerçekleştirirken, bir daire bekleme işareti görüntülenir. Bu işaret görüntülenirken, tüm ekran işlemleri devre dışı bırakılır.

Son Düzeltme Tarihi:

ALLUX™ 'nin en son ayarlandığı tarihi gösterir.

Pil Seviyesi:

ALLUX™ pil seviyesini gösterir.



10% ya da az



10~40%



40~70%




70% ya da fazla

- Temel ayar düğmesi: "Temel ayar" ekranını (sayfa 13) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Gelişmiş Ayarlar düğmesi: "Gelişmiş Ayarlar" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz (sayfa 24).
- Uzaktan Kumanda düğmesi: "Uzaktan Kumanda" ekranını (sayfa 25) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Veri Kopyalama düğmesi: "Veri Kopyalama" ekranını (sayfa 30) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Yürüyüş Verisi düğmesi: "Yürüyüş Verisi" ekranını (sayfa 31) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Ayarlama Geçmişi düğmesi: "Ayarlama Geçmişi" ekranını (sayfa 34) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

7 Ayarlama prosedürü

Ayarlamalar aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

İlk kurulum ekranı

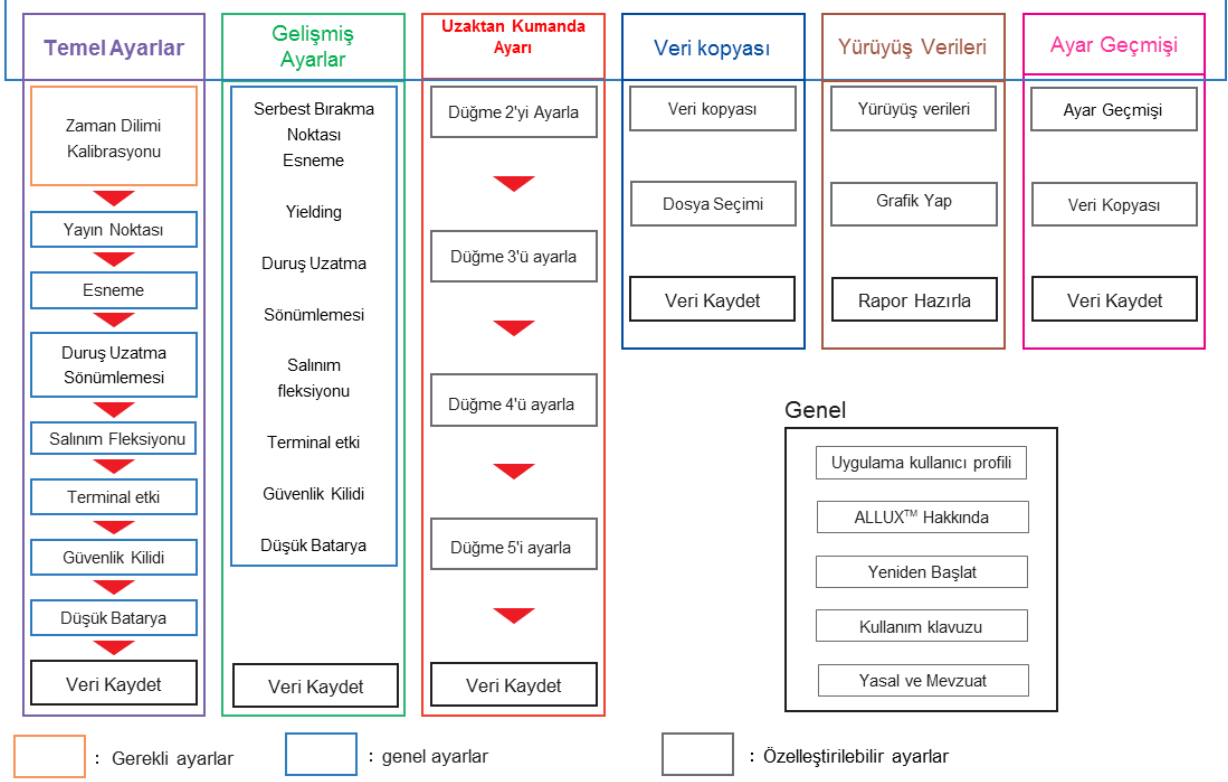

8 Temel Ayarlar

*Bu ekran görüntülediğinde, alt kısımdaki ayar öğeleri görüntülenmeyebilir. Bu ayar öğelerini görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.



- **Saat Dilimi:**
“Zaman Dilimi” ekranını (sayfa 14) görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- **Kalibrasyon:**
Kalibrasyon iletişim kutusu açılır penceresini görüntülemek için bu düğmeye dokununuz (sayfa 15).
- **Titreşim Alarmı Demosu :**
ALLUX™ titreşerek kullanıcıya bilgi ve uyarı verir. Kullanıcı bu düğmelere dokunarak titreşim modellerini tanıyabilir. Lütfen kullanıcının titreşimli alarm modellerinin türlerini ve anlamlarını anlamasını sağlayın.
Her bir düğmeye dokunduğunuzda, düğmeye karşılık gelen bir titreşim alarm modeli açılır penceresi görüntülenir. ALLUX™'u titreştirmek için "Tamam" düğmesine dokununuz.
- **Güvenli Duruş:** ALLUX™, kullanıcının güvenli bir duruş alması gerektiğinde titreşir.
- **Pil (Yeterli):** ALLUX™, kalan pil seviyesi 3 saat veya daha fazla olduğunda titreşir.
- **Pil (Düşük):** ALLUX™, kalan pil seviyesi 3 saatten az olduğunda titreşir.
- **Pil (Çok Düşük):** ALLUX™, kalan pil seviyesi yetersiz olduğunda ve normal yürüme mümkün olmadığında titreşir.

- **Yüksek sıcaklık uyarısı:** ALLUX™, diz eklemi yüksek sıcaklıkta olduğunda titreşir.
- **Arıza:** ALLUX™, diz eklemine bakıma ihtiyacı olduğunda titreşir.
- **Güvenlik Kilidi:** ALLUX™, güvenlik kilidi açıldığında titreşir.
- **Yeniden başlat:** ALLUX™ yeniden başlatıldığında ALLUX™ titreşir.
- **Uçak modundan çıkın:** ALLUX™, uçak modu kapatıldığında titreşir. (sayfa 10)
- **Titreşim demosunu durdur:** ALLUX™ titreşimi durdurur.



UYARI

■ Kullanıcının tüm titreşim modellerini tanıdığından ve farklılıkları anladığından emin olun. Kullanıcı ALLUX™'u titreşimlerin anlamını anlamadan kullanırsa, arıza veya yüksek sıcaklık uyarısına karşı güvenli bir durumda olmayabilir ve yürümeye çalışıldığında ALLUX™ kilitlendiği için düşebilir.

- **Geri düğmesi:** Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- **Tamam düğmesi:** Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- **Sonraki düğmesi:** “Ayak Ucu Serbest Bırakma Noktası” ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.


9

Saat Diliminin Ayarlanması

ALLUX™, günde atılan adım sayısının kaydını tutmak için kullanılan dahili bir saat içerir. Varsayılan ayar Japonya Standart Saati'dir (GMT+09:00). Lütfen saat dilimini yerel saati yansıtacak şekilde değiştirin.

1. Saat dilimi listesini görüntülemek için Saat Dilimi seçicisine dokununuz.
2. Kullanıcının bulunduğu yerin saat dilimini seçin.
3. Saat dilimini ALLUX™'e göndermek için "Ayarlar" düğmesine dokununuz.

* Seçildikten sonra, başka bir saat dilimine kalıcı bir yer değiştirme olmadığı sürece bu adımı tekrarlamak gereksizdir. Ayrıca kullanıcı kısa bir süre için yurt dışına seyahat ettiğinde tekrar seçilmesine gerek yoktur. Ancak, burada seçilen saat diliminin gün değiştiğinde standart saat dilimi olacağını unutmayın.

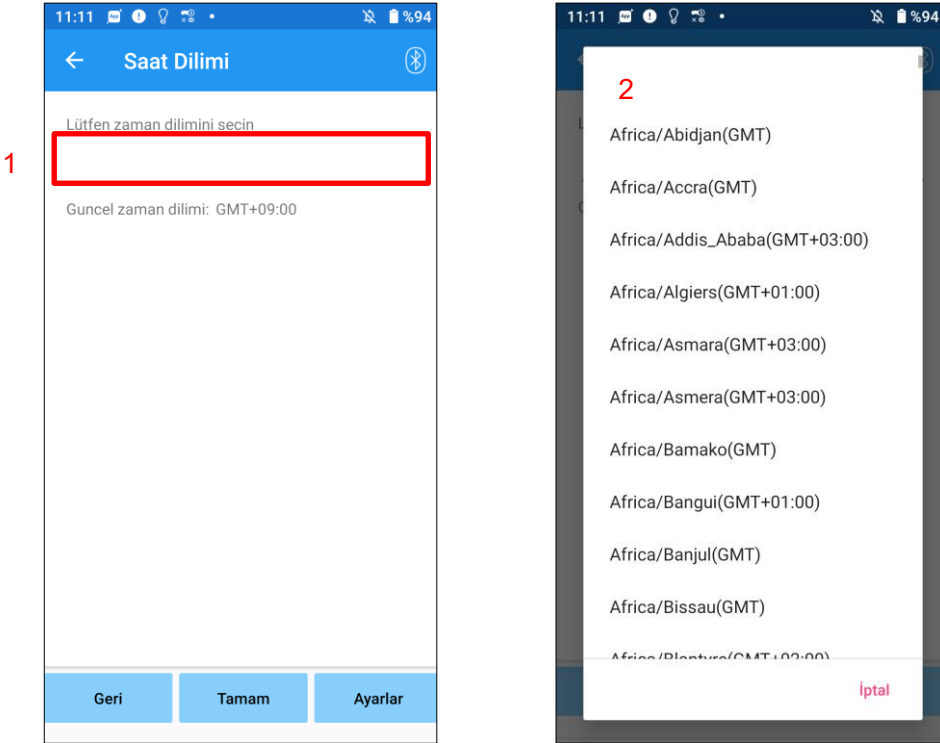

- Geri düğmesi: "Temel ayar" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Ayarlar düğmesi : Saat dilimini ALLUX™'e göndermek için bu düğmeye dokununuz.

10 Kalibrasyon

ALLUX™ ilk kez kullanıldığında veya yeniden hizalandığında veya ayak parçası değiştirildiğinde, ALLUX™'nin kalibre edilmesi gerekecektir.



UYARI

- ALLUX™'u doğru duruşta kalibre edin.
Yük altında kalibre edilirse, kullanıcı normal şekilde yürüyemez ve tökezleyerek muhtemelen yaralanmaya neden olabilir.
- Kalibrasyon yaparken kullanıcının güvende olduğundan emin olun.
Kullanıcı dengesiz bir durumda tek ayak üzerinde durursa düşebilir.
- Kesin bileşenler takılı ve tamamen sıkılmış olarak kalibre edin.
Hizalama ayarları yapılırsa ALLUX™ düzgün çalışmayabilir.
- Kalibrasyondan sonra parmak serbest bırakma noktası ayarını uygulayın (bkz. Bölüm 11).
Ayak Serbest Bırakma Noktasının kalibrasyondan önce ayarlanması normal yürümeyi imkansız veya güvensiz hale getirebilir.



1. "Temel ayar" ekranındaki "Kalibrasyon" düğmesine dokunun, bir açılır pencere görüntülenir.
2. ALLUX™'i yüksüz tutmak için kullanıcının ayağını kaldırmasını sağlayın.
* Kullanıcının güvenliğini sağlamak için paralel çubuklarda bir tırabzan tutmasını veya bir sandalyeye oturmasını sağlayın.
3. Açılır pencerede "Tamam" düğmesine dokunun.
4. Açılır pencere kapanır ve ekran "Temel ayar" ekranına döner.

11

Baş Parmak Serbest Bırakma Noktasının Ayarlanması

Fabrika varsayılan ayarı = 80


Salınım aşamasına geçiş için Baş Parmak Serbest Bırakma Noktasını ayarlayın. Kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda yürüme durumunu kontrol edin.



DİKKAT

- Bir yerde yürüme durumunu kontrol edin, örn. kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda.
ALLUX™ salınım fazına yumuşak bir şekilde geçemezse, kullanıcı düşebilir.

1. Kullanıcının paralel çubuklarda durmasını sağlayın ve protez ayağı bunların arkasına yerleştirin ve terminal duruşunu simüle ederek protezi yükleyin.
2. Burun yükü miktarı ekran çubuğunda görüntülenecektir.
3. Ayar değerini maksimum sensör çıkış değerine ayarlayın (Kırmızı çizgi ile gösterilir).
4. Kullanıcının yavaş yürümesini sağlayarak test edin.
*ALLUX™ her adımda serbest kalıyorsa, yapışana kadar kademeli olarak artırın, ardından yaklaşık beş puan azaltın.
*ALLUX™ her adımda serbest bırakmıyorsa, yavaş yürürken her adımda bırakana kadar değeri azaltın.
5. Tamamlandığında, "Duruş Esneme Eğilme" ayar ekranına geçmek için "İleri" düğmesine dokununuz.

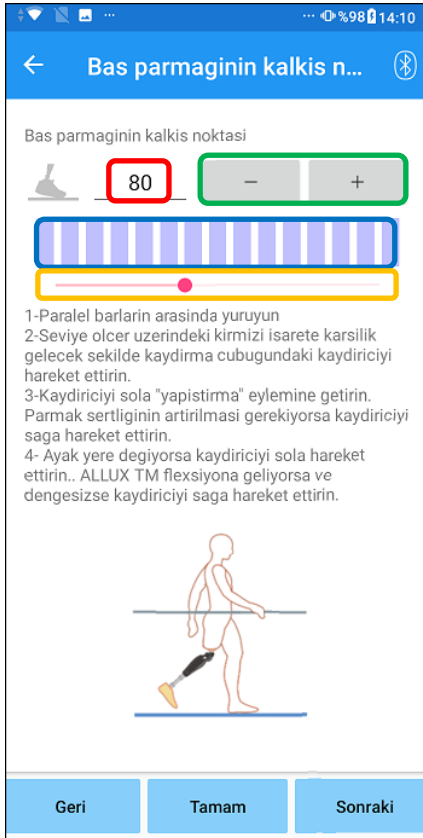

Ayar değeri (min: 0, max: 200):

Ayak serbest bırakma noktası ayar değeri görüntülenir ve rakamlarla girilir.

Ayak değer kademesi:

Bu düğmeler, ayar değerini 1'lik artışlarla artırır veya azaltır.

Bar metre kutusu görünümü:

Ambulasyon sırasında sensör çıkışını gösterir.

Ayar değeri kaydırıcısı:

Bu kaydırıcı, bir ayar değeri ayarlamak için kullanılır.

* Ayarlamalar üç seçenekten herhangi biriyle yapılabilir: doğrudan sayı girişi, + veya – düğmeleri veya tıklayıp sürükleyin.

- Geri düğmesi: "Temel ayar" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Duruş Esneme Eğilme" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

12 Duruş Fleksiyon Verimini Ayarlama

Fabrika varsayılan ayarı = 25 (Standart değer: 20 ~ 30)

Eğilme direncini, kullanıcının bir sandalyeye otururken veya merdivenlerden ve yokuşlardan aşağı inerken dengeli hissedeceği şekilde ayarlayın. Kullanıcının tercihinine göre değeri kademeli olarak artırın veya azaltın ve ayarlama yapmadan önce her zaman güvenli bir şekilde durduklarından emin olun. Direnci normal bir sıcaklıkta (+20°C/+68°F) ayarlamamız önerilir.



UYARI

- ALLUX™ düşük sıcaklıktaki bir ortamda (0°C/+32°F veya daha az) kullanıldığında, akma direnci daha yüksek olabilir. Düşük sıcaklıktaki bir ortamda kullanıma başlamadan önce akma direncini kontrol edin. ALLUX™ kolayca esnetilemediği için kullanıcı merdivenlerden veya yokuşlardan düşebilir.




DİKKAT

- Olası bir sıkışmayı önlemek için ALLUX™ üzerindeki bağlantı parçalarına ayakta dururken dokunmayın.
- Aşağı inerken veya yokuşlarda akma direnci, tüm ayarlamalar tamamlandıktan sonra ayarlanmalıdır. Ayarlamalar yeterince yapılmadıysa kullanıcı merdivenlerden veya yokuşlardan düşebilir.

1. Kullanıcı bir sandalyeye oturduğunda, kullanıcının ağırlığı her iki ayağa eşit olarak uygulanacak şekilde direnci ayarlayın.

*Direnci düşük ise ayar değerini yükseltiniz.

*Direnci yüksekse ayar değerini düşürün.

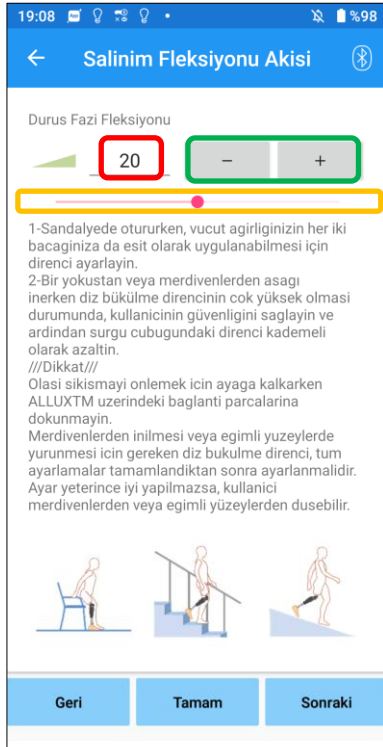

Ayar değeri (min: 0 , max: 40):

Ayar değerini sağlayan bir duruş fleksiyonu görüntülenir ve rakamlarla girilir.

Ayar değeri kademesi:

Bu düğmeler, ayar değerini 1'lik artışlarla artırır veya azaltır.

Ayar değeri kaydırıcısı:

Bu kaydırıcı, bir ayar değeri ayarlamak için kullanılır.

- Geri düğmesi: "Ayak Ucu Serbest Bırakma Noktası" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Duruş Uzatma Sönümlenme" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

13 Duruş Uzatma Sönümlemesini Ayarlama

Fabrika varsayılan ayarı = 5 (Standart değer: 0 ~ 25)

Normalde, uzatma direncini duruş fazında 5'e, direnç yok durumuna ayarlayın. Direnci yalnızca kullanıcı duruş fleksiyonu ile yürüdüğünde ayarlayın. Direnci normal bir sıcaklıkta (+20°C/+68°F) ayarlamanız önerilir.



UYARI

- ALLUX™ düşük sıcaklıktaki bir ortamda (0°C/+32°F veya daha az) kullanıldığında, duruş uzatma sönümlemesi artabilir. Düşük sıcaklıktaki bir ortamda kullanıma başlamadan önce uzatma direncini kontrol edin. ALLUX™ kolayca uzatılmadığından, kullanıcı sallanma aşamasını başlatırken tökezleyebilir ve ardından düşebilir.



DİKKAT

- Bir yerde yürüme durumunu kontrol edin, örn. kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda.
- Kullanıcı, diz uzatıldıktan sonra sallanma fazına geçecek şekilde yürümelidir.
- ALLUX™ çift diz hareketi için esnemiş durumda sallanma aşamasına geçemediğinden, kullanıcı tökezleyebilir ve ardından düşebilir.

1. Duruş uzatma sönümlemesi için direnci ayarlayın.

*Direnç düşük ise ayar değerini yükseltiniz.

*Direnç yüksekse ayar değerini düşürün.



Ayar değeri (min: 0, max: 40):

Bir duruş uzantısı sönümleme ayar değeri görüntülenir ve rakamlarla girilir.

Ayar değeri kademesi:

Bu düğmeler, ayar değerini 1'lik artışlarla artırır veya azaltır.

Ayar değeri kaydırıcısı:

Bu kaydırıcı, bir ayar değeri ayarlamak için kullanılır.

- Geri düğmesi: "Duruş Esneme Eğilme" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Swing Flexion" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

14 Salınım Fleksiyon Direncinin Ayarlanması

Fabrika varsayılan ayarı = 20 (Standart değer: 15 ~ 35)

Salınım fazı sırasında fleksiyon direncini ayarlar. Direnç normal yürüyüşe göre ayarlandıktan sonra, diz eklemi fleksiyon direncini yürüme hızına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.




- Yürüme işlevini bir yerde değerlendirin, örn. kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda.
- ALLUX™ salınım aşamasına düzgün bir şekilde geçemezse, kullanıcı düşebilir.

*ALLUX™ salınım fazını tetiklemediği için ayak zemine sürtünürse, Parmak Serbest Bırakma Noktasını "Ayak Ucu Serbest Bırakma Noktasının Ayarlanması" (sayfa 16) bölümünde belirtildiği gibi yeniden ayarlayın.

1. Salıncak Esneme Direncini normal yürüme hızları için ayarlayın.

*Aşırı topuk yükselmesi varsa direnç düşüktür, ayar değerini yükseltiniz.

*Parmaklar yere sürtüyorsa direnç yüksektir, ayar değerini düşürünüz.

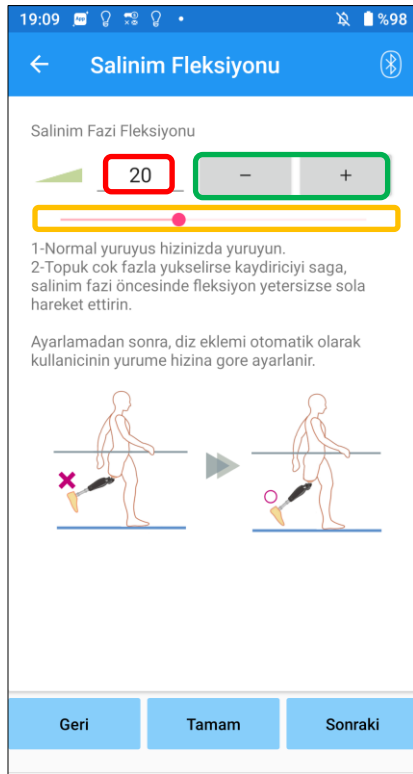

Ayar değeri (min: 1, max: 50):

Bir salınım fleksiyon direnci ayar değeri görüntülenir ve rakamlarla girilir.

Ayar değeri kademesi:

Bu düğmeler, ayar değerini 1'lik artışlarla artırır veya azaltır.

Ayar değeri kaydırıcısı:

Bu kaydırıcı, bir ayar değeri ayarlamak için kullanılır.

- Geri düğmesi: "Duruş Uzatma Sönümlleme" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Terminal Etkisi" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

15 Terminal Etkisini Ayarlama


Fabrika varsayılan ayarı = 5 (Standart değer: 0 ~ 25)

Salınım fazı sırasında uzatma direncini ayarlayın. Ölümcül etki meydana gelirse, kademeli olarak artırın. Direnç normal yürüyüşe göre ayarlandıktan sonra ALLUX™ uzatma direncini yürüme hızına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.



- Yürüme işlevini bir yerde değerlendirin, örn. kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda.
Direnç çok yüksek ayarlanırsa ALLUX™ tamamen uzayamaz ve kullanıcı düşebilir.

- Terminal darbe direncini normal yürüme hızı için ayarlayın.
*Terminal etkisi yüksekse ayar değerini yükseltin.
*ALLUX™ tamamen çıkmazsa, ayar değerini azaltın.

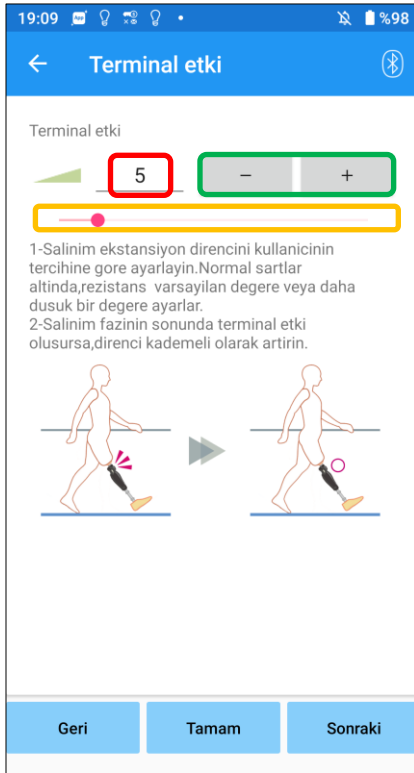

Ayar değeri (min: 0, max: 40):

Bir terminal darbe ayar değeri görüntülenir ve rakamlarla girilir.

Ayar değeri kademesi:

Bu düğmeler, ayar değerini 1'lik artışlarla artırır veya azaltır.

Ayar değeri kaydırıcısı:


Bu kaydırıcı, bir ayar değeri ayarlamak için kullanılır.

- Geri düğmesi: "Swing Flexion" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Güvenlik Kilidi" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

16 Güvenlik Kilidini Ayarlama

Fabrika varsayılan ayarı = Geçersiz

Güvenlik Kilidi, ALLUX™'i, kullanıcının belirli bir ağırlık seviyesi altında ALLUX™ esnemiş durumdayken belirli bir süre durduğu esnek bir açıda kilitlemek için tasarlanmıştır. Güvenlik Kilidini kullanmak için, etkinleştirme süresini ayarlamak üzere kaydırıcıyı ayarlayın.

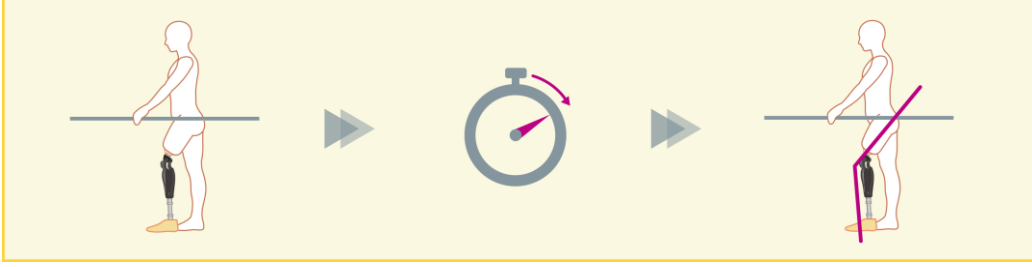


DİKKAT

- Fonksiyonu bir yerde kontrol edin, örn. kullanıcının güvenliğinin sağlanabileceği paralel çubuklarda.
Kullanıcı güvenlik kilidine aşına değilse, yanlışlıkla ALLUX™'nin kilidini açabilir ve ALLUX™ bükülebilir.

* Güvenlik kilidini ayarlamadan önce, kullanıcının işlevi anladığından ve yeterince eğitilmiş olduğundan emin olun.

1. Emniyet kilidinin hassasiyetini ayarlayın. Hızlı seçilirse diz, kısa süreli askıya almada bile kilitletir.

*Devre Dışı seçilirse, emniyet kilidi çalışmaz.

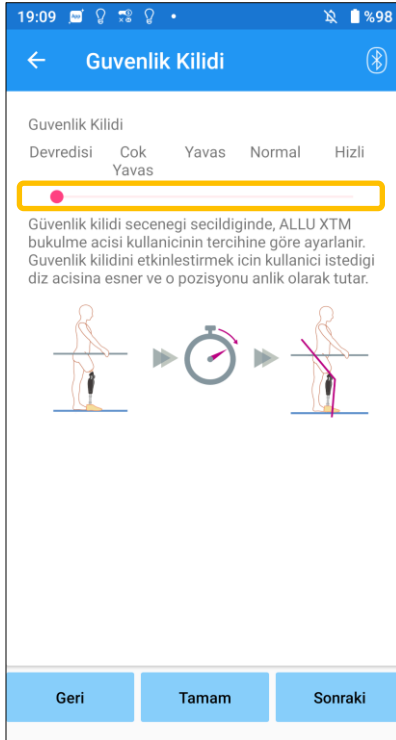

Ayar değeri kaydırıcısı:

Bu kaydırıcı, güvenlik kilidinin etkinleştirilmesi için yaklaşık bir süre (Aşağıya bakın.) ayarlamak için kullanılır.

- Çok Yavaş: Yaklaşık 3 saniye
- Yavaş: Yaklaşık 2 saniye
- Normal: Yaklaşık 1,5 saniye
- Hızlı: Yaklaşık 1 saniye
- Geri düğmesi: "Terminal Impact" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Düşük Pil" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

17 Düşük Pil ayarları

Fabrika varsayılan ayarı = Yüksek Direnç (esneme direnci 30'a eşdeğerdir)


Düşük pil durumları için ayarları yapın.



DİKKAT

- Serbest seçilirse, kullanıcının serbest salınım durumunda yürüyebildiğinden emin olun.
- Kullanıcı, Uzaktan Kumanda Ekranında serbest salınım modunu seçerek serbest salınım durumunu test edebilir.
- Kullanıcı, düşük pil nedeniyle güvenli bir yere gidemeyebilir.

1. Pil neredeyse boşaldığında fleksiyon direncini seçin.

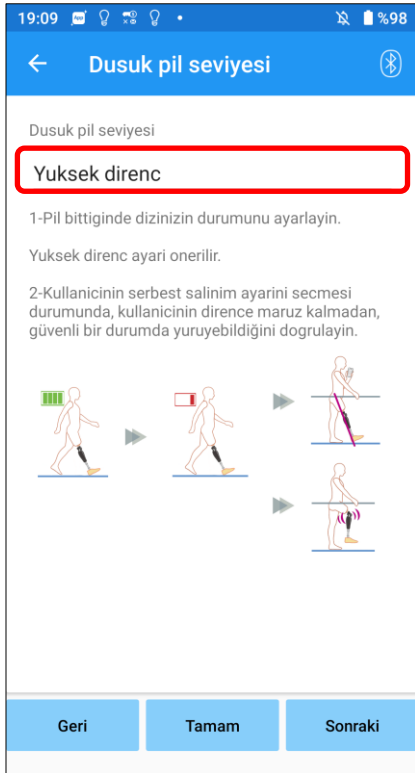

Düşük Pil ayarı seçici:

Aşağıdaki seçenekler arasından pil neredeyse boşaldığında bir direnç seçmek için bu seçiciye dokununuz.

- Yüksek Direnç (önerilen):
Fleksiyon direnci, 30 ayar değerini veren duruş fleksiyonsine eşdeğerdir.
- Serbest:
Fleksiyon direnci yoktur.

* Hangisini seçerseniz seçin, uzatma direnci serbest kalır.

- Geri düğmesi: "Güvenlik Kilidi" ayar ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Verileri kaydet" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

18 Ayar verilerinin kaydedilmesi


Ayar veya set verileri otomatik olarak ALLUX™ içinde saklanır.

Bu veriler akıllı telefondaki bir klasöre kaydedilebilir.

Kaydedilen veriler, veriler kopyalanarak kullanılabilir (sayfa 30).

Ayar verileri kaydedilmemiş olsa bile, son 5 güne ait ayar verileri otomatik olarak Ayar Geçmişine kaydedilir (Bkz. sayfa 34).

1. "Verileri kaydet" düğmesine dokununuz.
2. Kaydedilirken bekleme işareti görüntülenir ve herhangi bir işlem kabul edilmez.
3. Kaydetme tamamlandıktan sonra bir açılır pencere görüntülenir.
4. "Verileri kaydet" ekranına dönmek için "Tamam" düğmesine dokununuz.

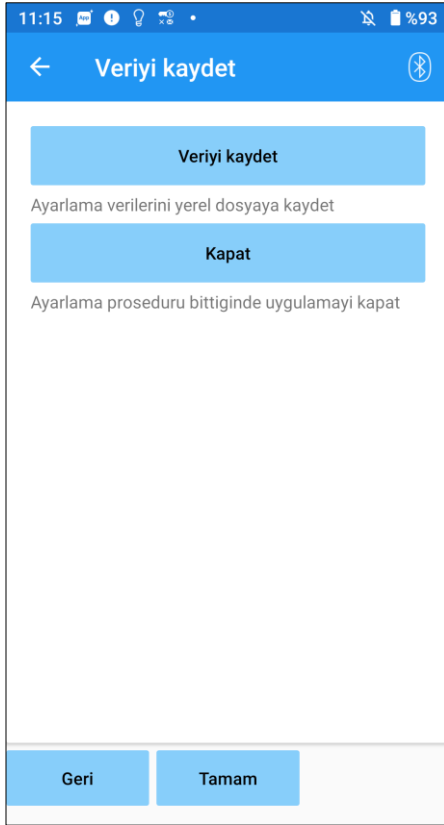

● Verileri kaydet düğmesi:

Verileri kaydetmek için bu düğmeye dokununuz.

Kaydedilen veriler "Veri Kopyalama" ekranından kullanılabilir (Bkz. sayfa 30).

*Cep telefonunda rapor klasörüne kaydedilecektir.

● Kapat düğmesi:

ALLUX™ ile bağlantıyı sonlandırmak ve bu

Uygulamadan çıkmak için bu düğmeye dokununuz.


● Geri düğmesi: Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye dokununuz.

● Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

*Android sürümüne bağlı olarak, akıllı telefonunuzdan depolanan verileri görüntüleyemeyebilirsiniz.

Bu durumda, bir PC'ye bağlanmak gerekir.

Veriler aşağıdaki konumda saklanır:

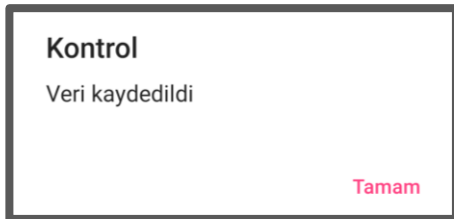

Ayarlama dosyası depolama hedefi

(PC ≠Her akıllı telefon) ≠Dahili paylaşılan depolama

≠Android≠data≠com.companyname.ALLUXAdjustment≠files≠data

19 Gelişmiş Ayarlama

Daha önce Bölüm 10 ila 17'de açıklanan ayarlar bu ekranda toplu olarak yapılabilir.

İlk ayarlamaları "Temel ayar" ekranından yapmanızı ve ikinci ayardan itibaren "Gelişmiş Ayarlar" ekranında yeniden ayarlamalar yapmanızı öneririz. Her bir öğenin açıklaması, uyarıları ve ikazları için Bölüm 10 ila 17'de açıklanan her bir ekrana bakın.

*Bu ekran görüntülediğinde, alt kısımdaki ayar öğeleri görüntülenmeyebilir. Bu ayar öğelerini görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.



- Kalibrasyon: (sayfa 15)
Kalibrasyon gerçekleştirir.
- Parmak Serbest Bırakma Noktası: (sayfa 16)
Toe serbest bırakma noktası ayar değerini değiştirir.
- Duruş Faz Ayarı (Verim): (sayfa 17)
Duruş fleksiyonunu ayar değerini vererek değiştirir.
- Duruş Uzatma Sönümleme: (sayfa 18)
Duruş uzantısı sönümleme ayar değerini değiştirir.
- Salıncak Esnemesi: (sayfa 19)
Salınım fleksiyon direnci ayar değerini değiştirir.
- Terminal Etkisi: (sayfa 20)
Terminal darbe ayar değerini değiştirir.
- Güvenlik Kilidi: (sayfa 21)
Güvenlik kilidinin hassasiyetini seçer.
- Düşük Pil: (sayfa 22)
Pil zayıf olduğunda fleksiyon direncini seçer.
- Geri düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Sonraki düğmesi: "Verileri kaydet" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

Remote Control Uygulamasının Ayarlanması

(Uzaktan Kontrol)

20.1 ALLUX™ çalışma modları


ALLUX™ aşağıdaki beş çalışma moduna sahiptir.

[Normal mod]

Normal mod, normal yürüyüş için ayarlanmıştır. Sensör ile çeşitli yürüme durumlarını ve normal hareketleri değerlendiren ALLUX™, esneme ve ekstansiyonu otomatik olarak ayarlar.


[Fleksiyon açısı limit modu]

Fleksiyon açısı limit modu, fleksiyon direnci belirlenmiş bir açıda kilitlenirken, ekstansiyon direnci serbest kalır.

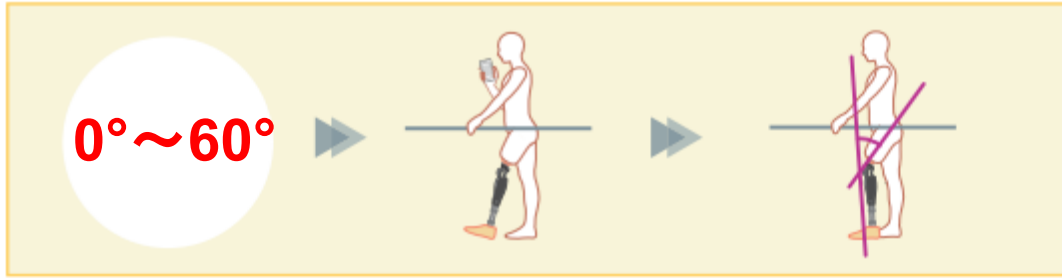

[Değişken seçeneği fleksiyon kilit modu]

ALLUX™, değişken seçici fleksiyon kilidi modunun açıldığı açığı hatırlar. Bu açıya ulaştığında fleksiyon direnci kilitlenirken ekstansiyon direnci serbest kalır.

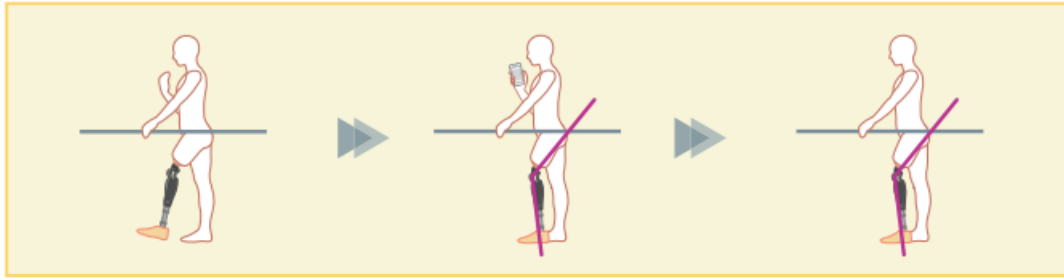


UYARI

- Flexiyon açısı limit modu veya Değişken seçeneği fleksiyon kilit modu kullanıldığında, ALLUX™ 'u kilitlerken aşırı kuvvet uygulamayın. ALLUX™ 'a aşırı darbe kuvveti uygulanırsa zarar görebilir.

20 Remote Control uygulamasının ayarlanması (Uzaktan Kontrol)


[Tam ekstansiyon kilit modu]

ALLUX™ tamamen genişletilmiş durumda kilitlidir. (Diz fleksiyonu ile etkinleştirildiğinde, ALLUX™ ekstansiyon durağına ulaşana kadar ekstansiyona izin verir). Bu, "Oturup Ayağa Kalkma" özelliği olarak kullanılabilir.

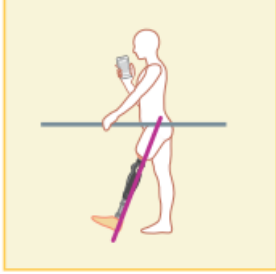

[Serbest salınım modu]

Serbest salınım modunda ALLUX™ serbest tutulur (dirençsiz durum).

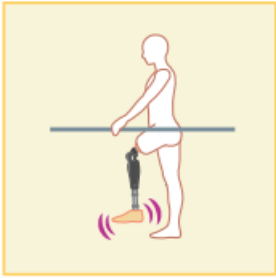

20.2 Remote Control Uygulamasındaki düğmelere çalışma modları atama

Yukarıdaki çalışma modları, Remote Control Uygulamasındaki düğmelere atanabilir.

Normal mod her zaman Uzaktan Kumanda Uygulamasındaki Düğme 1'e atanır ve bu modun ayarları "Temel ayar" ekranında veya "Gelişmiş Ayarlar" ekranında yapılanlardır.

Yukarıdaki beş çalışma modunu Remote Control Uygulamasındaki 2 ila 5 düğmelerine serbestçe atayabilirsiniz.


Varsayılan uzaktan kumanda yapılandırması:

- Düğme 2: Fleksiyon Açısı Sınırlı modu
- Düğme 3: Değişken Seçmeli Esnek Kilit modu
- Düğme 4: Tam Genişletme Kilidi modu
- Düğme 5: Serbest Salıncak modu

20 Remote Control uygulamasının ayarlanması (Uzaktan Kontrol)

20.3 Remote control ayarlama ekranı

*Bu ekran görüntülendiğinde, alt kısımdaki ayar öğeleri görüntülenmeyebilir. Bu ayar öğelerini görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

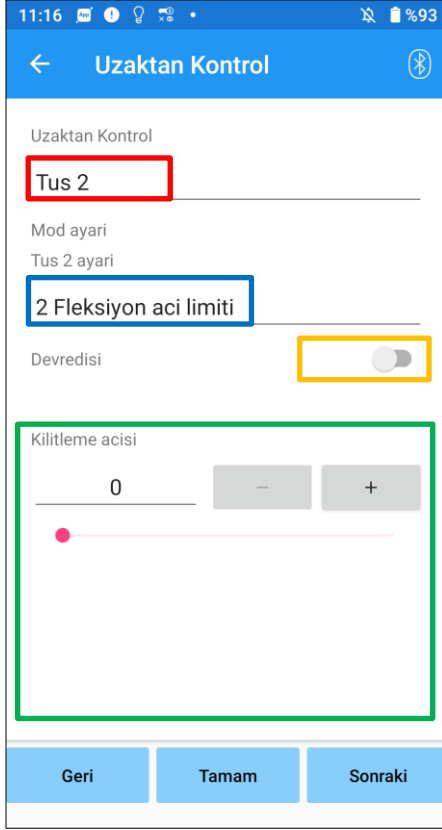

Uzaktan Kontrol ayarı seçici:

Ayarlanacak düğmeyi değiştirmek için bu seçiciye dokunun. Aşağıdaki listeden bir düğme seçin.

- Düğme 2
- Düğme 3
- Düğme 4
- Düğme 5

Mod ayar seçici:

Seçilen düğmeye atanacak modu seçebilirsiniz. Aşağıdaki listeden bir mod seçin.

- Normal mod
- Fleksiyon Açısı Sınırlı mod
- Değişken Seçmeli Fleksiyon Kilidi modu
- Tam Genişletme Kilidi modu
- Serbest Salıncak modu

Devre dışı bırakılan anahtar:

Bu anahtar AÇIK konuma getirildiğinde, seçilen düğme Uzaktan Kumanda Uygulamasında dokunulsa bile çalışmaz.

Ayrıca her mod için ayar alanı gizlidir.

Her mod için ayar alanı:


Normal modda ve Fleksiyon Açısı Sınırlı modunda, ayar alanı görüntülenir.

Değişken Seçmeli Esnek Kilit modu, Tam Uzatma Kilidi modu ve Serbest Salıncak modunda ayar alanı görüntülenmez.

- Geri düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.
- Sonraki düğmesi: "Verileri kaydet" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.

20 Remote Control uygulamasının ayarlanması (Uzaktan Kontrol)

[Normal mod için ayar alanı]

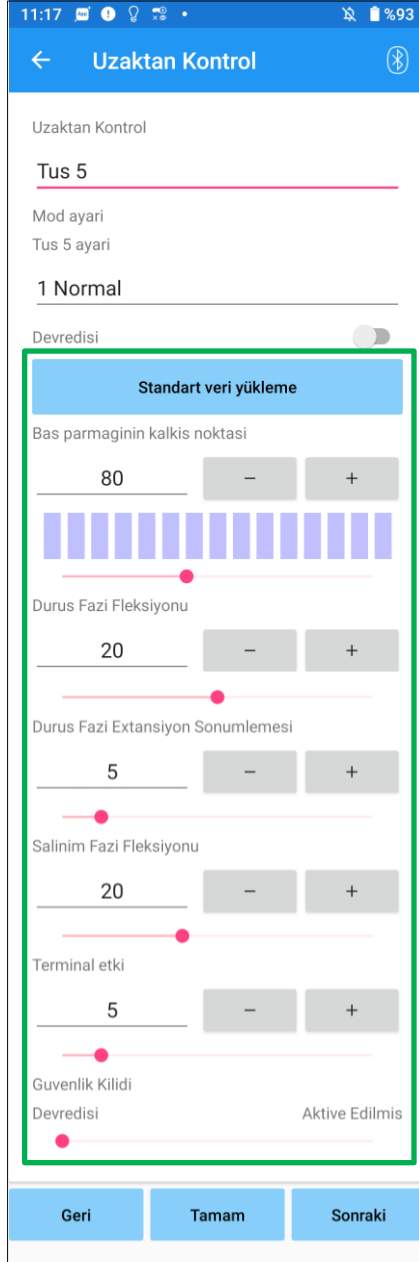


- Standart verileri yükleme düğmesi:
Düğme 1'de ayarlanan ayar değerleri ("Temel ayar" ekranında veya "Gelişmiş ayarlar" ekranında ayarlanan ayar değerleri) bu düğmeye dokunularak yüklenebilir.
- Toe Serbest Bırakma Noktası:
Toe serbest bırakma ayar değerini değiştirir.
- Duruş Esneme Verimi:
Duruş fleksiyonunu ayar değerini vererek değiştirir.
- Duruş Uzatma Sönümleme:
Duruş uzantısı sönümleme ayar değerini değiştirir.
- Salıncak Esnemesi:
Salınım fleksiyon direnci ayar değerini değiştirir.
- Terminal Etkisi:
Terminal darbe ayar değerini değiştirir.
- Güvenlik Kilidi:
Güvenlik kilidinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçer. Emniyet kilidinin hassasiyetine (emniyet kilidini etkinleştirme süresi), "Temel ayar" ekranında veya "Gelişmiş ayarlar" ekranında ayarlanan değer uygulanır.

* Her bir öğenin açıklaması, uyarıları ve ikazları için Bölüm 11 ila 16'da açıklanan her bir ekrana bakın.

20 Remote Control uygulamasının ayarlanması (Uzaktan Kontrol)

[Esneleme Açısı Sınırlı modu için ayar alanı]

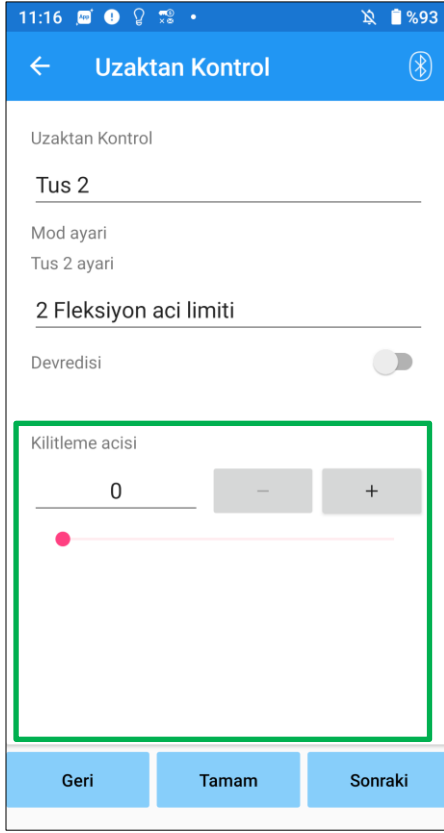


● Kilitleme açısı:

ALLUX™ ayarlanan açıda kilitlenir.

21 Veri Kopyalama

ALLUX™ ayarlarını yeniden yazmak için "Verileri kaydet" ekranında (sayfa 23) kaydedilen veriler yüklenebilir.

1. "Dosya Seçimi" ekranını görüntülemek için "Dosya Seçimi" düğmesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz verileri seçin.
3. "Veri Kopyalama" ekranına dönmek için "Tamam" düğmesine dokununuz.
O zaman, geçmiş veriler yüklenir ve görüntülenir.
4. Verileri onaylayın.
5. Ayar verilerini yazmak için "Üzerine Yaz" düğmesine dokununuz.

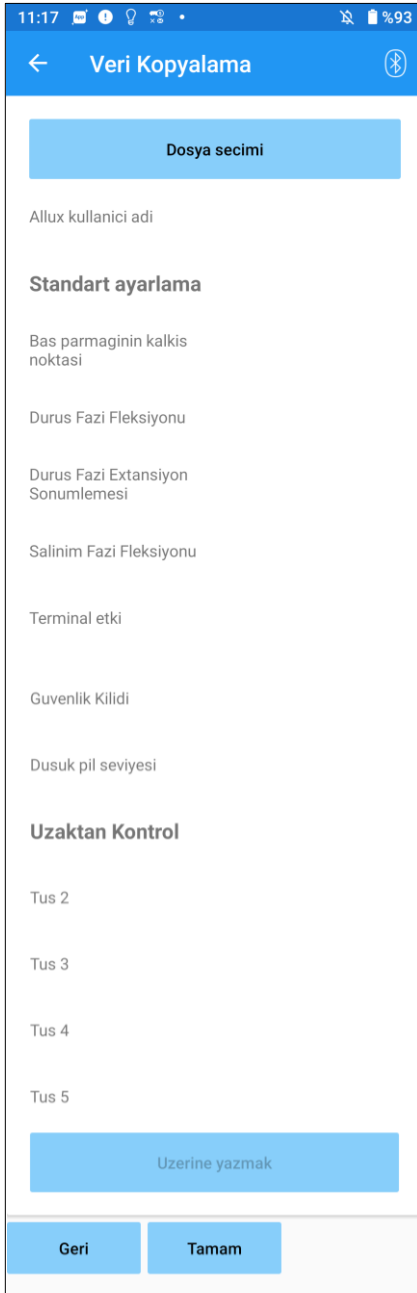

Kullanılacak veriler

Veri Kopyalama Ekranı

- Geri düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

*Önce "Üzerine Yaz" düğmesine dokunmadan yukarıdaki düğmelerden herhangi birine dokunulursa, veriler yeniden yazılmaz.

Dosya Seçimi Ekranı

- İptal düğmesi: Veri yüklemeyen "Veri Kopyalama" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Verileri yükledikten sonra "Veri Kopyalama" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

22 Yürüyüş Verisi

ALLUX™, iki yıllık bir süre boyunca yürüyüş geçmişini (kadans başına adım) kaydeder ve belirlenmiş bir dönemin geçmişini bir çubuk grafik veya histogram olarak görüntüler. Bu yürüyüş verileri yazdırılabilir.

22.1 Yürüyüş verisi ekranı

Kayıt seçici:

Verilerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

- Etkinleştir
- Devredışı bırak/Veri sil

* "Devre Dışı Bırak/Veri Sil" seçildiğinde, onay için bir açılır pencere görüntülenir. "Tamam" düğmesine dokunursanız, kaydedilen tüm veriler silinecektir.

Aralık seçici:

Grafikte görüntülenecek veriler için bir dönem seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

- Gün
- Ay
- Yarım yıl
- 2 yıl

*2 yıl seçilirse, süre mevcut tarihten önceki 2 yıl ile sınırlıdır.

*"Form" seçiciyle "Çubuk Grafik" seçildiğinde, "Dönem" seçiciyle "Gün"ü seçemezsiniz.

Form seçici:

"Çubuk Grafik" ve "Histogram" arasından bir grafik formu seçebilirsiniz.

Dönem seçimi seçici:

Seçici ile bir başlangıç tarihi ("Başlangıç") ve bir bitiş tarihi ("Bitiş") seçin. Birini seçtiğinizde, diğer tarih "Dönem" seçiciyle seçilen aralığa göre otomatik olarak değişir.

- Grafik Yap düğmesi: "Grafik Oluştur" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Rapor Yap düğmesi: "Rapor Yap" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Geri düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

22 Yürüyüş Verisi


22.2 Grafik oluştur ekranı

"Yürüyüş Verileri" ekranında ayarlanan ayarlara dayalı olarak bir grafik oluşturulur.


Çubuk grafik, kadansa göre renk kodludur.

Histogram, seçici ile seçilen "Dönem" sırasında toplanan verileri gösterir.

Grafik çubuğu

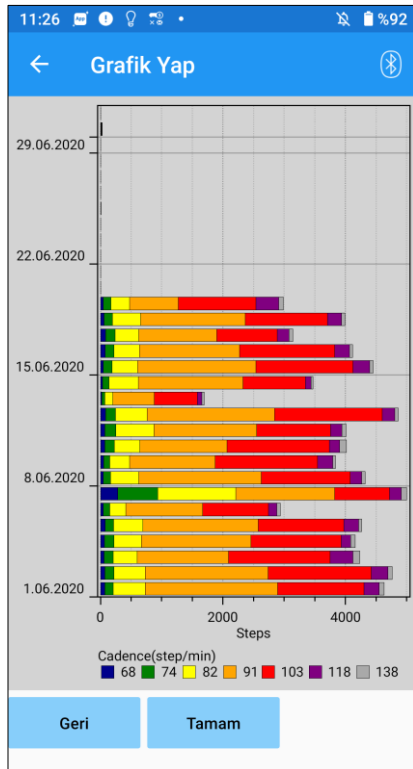

Histogram

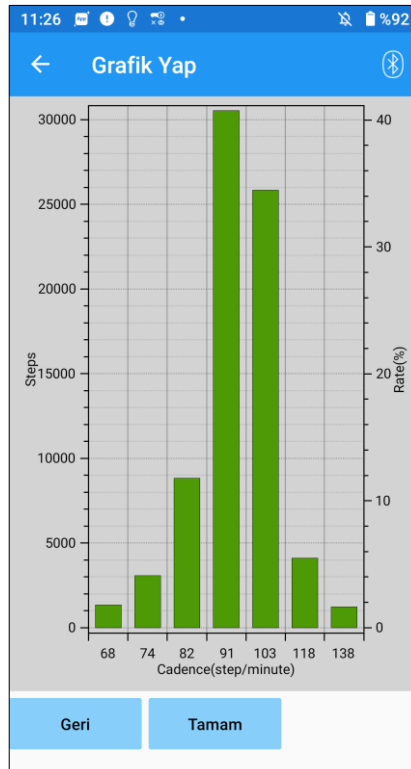

- Geri düğmesi: "Yürüyüş Verisi" ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.

22 Yürüyüş Verisi

22.3 Rapor oluşturma

“Yürüyüş Verisi” ekranında ayarlanan süre için bir rapor oluşturulur.

Rapora hem çubuk grafik hem de histogram eklenir.

Bu ekranda girilen kullanıcı bilgilerini ve yorumlarını rapora yansıtabilirsiniz.

Kullanıcı bilgileri sütunu:

Düzenleyici, solda gösterilenler gibi varsayılan ayarlara sahiptir, ancak bunları silebilir veya istediğiniz gibi yeni ayarlar ekleyebilirsiniz.

Sorumlu kişi sütunu:

Yazar (bu uygulamanın kullanıcısı) bilgilerini girin. Şirket adını birkaç satıra da girebilirsiniz..

ALLUX™ ayarları:



Yürüme parametreleri ALLUX™'den yüklenir ve otomatik olarak görüntülenir.

Yorumlar:

Gerektiğinde yorumları girin.

- Geri düğmesi: “Yürüyüş Verisi” ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokunun.
- Bir rapor oluştur düğmesi: Raporun bir PDF dosyasını oluşturmak için bu düğmeye dokunun. Cep telefonundaki rapor klasörüne kaydedilecektir.


Oluşturulan bir raporun görüntüsü

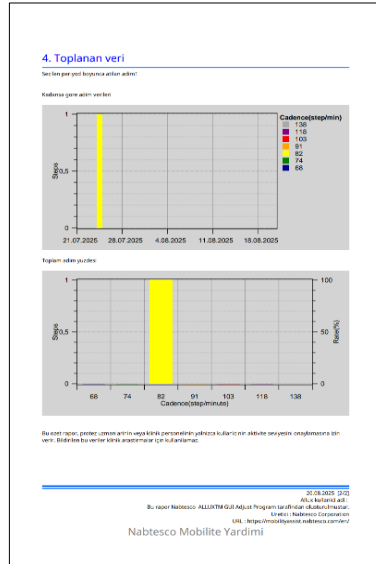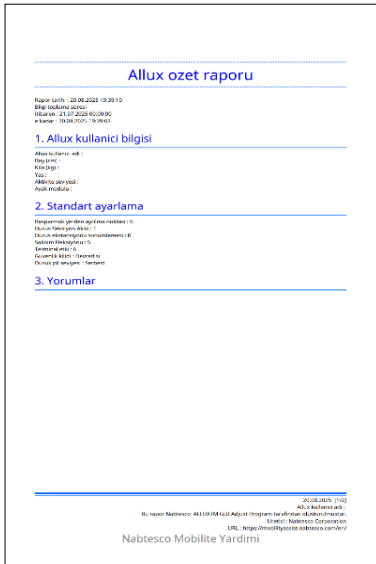

23 Ayarlama Geçmişi

Bu Uygulama, bu terminalde yapılan ayarlamaların geçmiş verilerini son 5 güne kadar saklar. "Verileri kaydet" ekranındaki ayarlama verilerinden ayrı olarak kaydedilirler (sayfa 23). Geçmişini görüntüleyebilir ve verileri ALLUX™'e uygulayabilirsiniz.

* Bu ekranda görüntüleme alanını yatay olarak kaydırarak önceki verileri görebilirsiniz. Önceki verilere, başka bir ALLUX™ ile yapılan ayarlamaların geçmişi dahil edilebilir. Lütfen kullanmadan önce verileri kontrol ediniz.

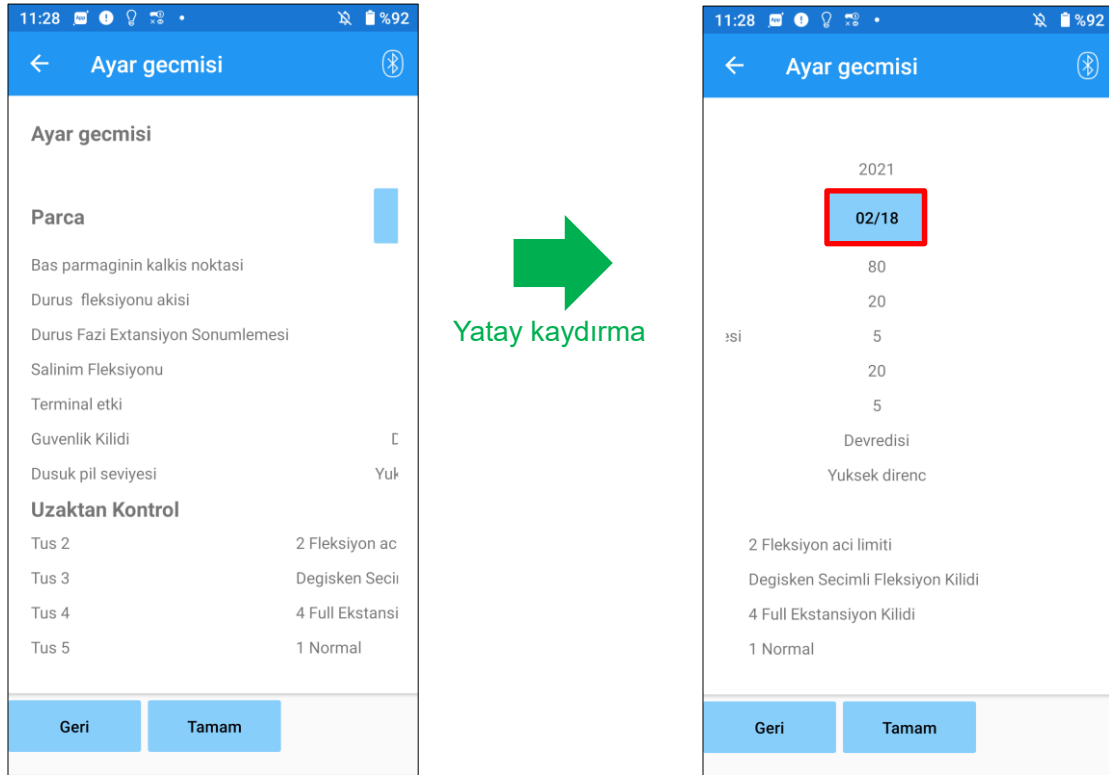

Tarih düğmesi:


Düğmeye dokunduğunuzda ekranda "Veri Kopyalama" ekranı (sayfa 30) görüntülenir ve bu sırada görüntülenen verileri ALLUX™'e gönderebilirsiniz.

- Geri düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.
- Tamam düğmesi: Başlangıç başlangıç ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

24 Genel


İlk başlatma ekranında (sayfa 11) Genel simgesine ⓘ dokunduğunuzda, ekran "Genel" ekranını görüntüler.

Yalnızca ilk çalıştırmada görüntülenen ekranı yeniden görüntüleyebilir ve ALLUX™ yazılım sürümünü onaylayabilirsiniz.

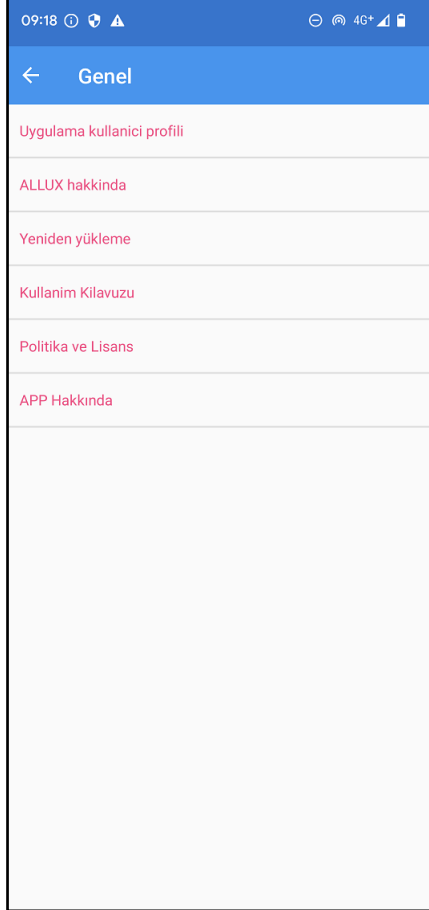

- Uygulama kullanıcı profili:
"Uygulama kullanıcı profili" ekranı (sayfa 7) görüntülenir.
- ALLUX™ Hakkında:
"ALLUX™ Hakkında" ekranı görüntülenir.
- Yeniden yükleme:
ALLUX™'u yeniden başlat.
Onay için bir açılır pencere görüntülenir. "Tamam" düğmesine dokununuz.
*İletişim kesildiği için bağlantıyı yeniden etkinleştirmeniz gerekir.
(Güç KAPALI başlığını çıkarıp takmakla aynı eylem.)
- Kullanım kılavuzu:
Bu düğmeye dokunmak, kullanım kılavuzunun indirme sayfasına bağlantı sağlar. Bir kullanıcı adı ve şifre gereklidir.
- Politika ve Lisans:
"Politika ve Lisans" iletişim kutusu (sayfa 7) görüntülenir.
- APP Hakkında:
Uygulama adını, kullanımını, UDI D'I'yi vb. görüntüler.

[ALLUX™ hakkında ekranı]

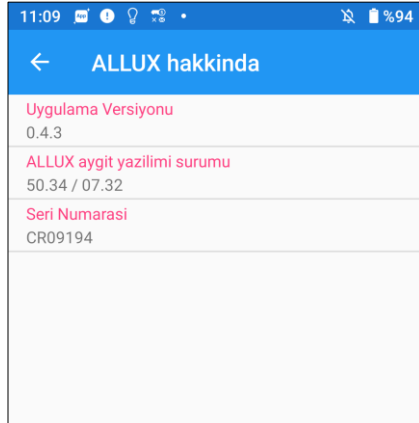


Bu ekran ALLUX™ sürümünü gösterir.

- Uygulama sürümü:
Bu Uygulamanın sürümü görüntülenir.
- ALLUX™ üretici yazılımı sürümü:
ALLUX™ ürün yazılımı sürümü görüntülenir.
- Seri Numarası:
ALLUX™'un seri numarası görüntülenir.

25 Hata mesajı açılır ekranı


Bir işlem sırasında bir hata oluşursa, bir açılır pencere görüntülenir. Lütfen açılır penceredeki talimatları izleyin.

25.1 Konum bilgisi hatası A

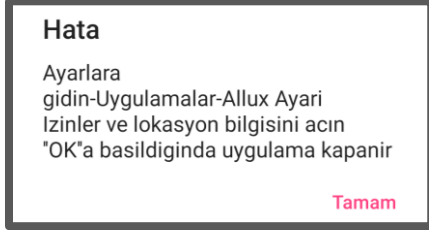


"ALLUX™ Ayarlama Uygulamasını" kullanmak için konum bilgisi gereklidir. Bu nedenle, sayfa 6'daki işlemde bu Uygulamanın akıllı telefonun konum bilgilerine erişmesine izin verecek şekilde ayarlamamız gerekir. Bu hata, o sırada izin vermediyseniz veya bundan sonra konum bilgilerinin kullanılmasını manuel olarak reddettiyseniz oluşur. Konum bilgilerinin kullanımına izin vermek için bu açılır penceredeki talimatları izleyin.

25.2 Konum bilgisi hatası B

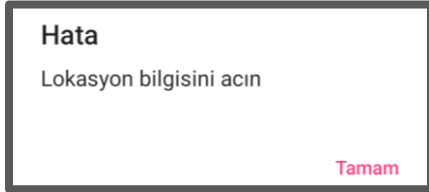


Bu hata, akıllı telefonun konum bilgisi işlevi etkinleştirilmediğinde ortaya çıkar. Akıllı telefonun konum bilgisi işlevini etkinleştirin.

25.3 Bluetooth hatası

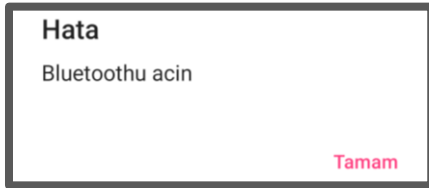

Bluetooth KAPALI ise, bu Uygulama ALLUX™ ile iletişim kuramaz. Akıllı telefonun işleviyle Bluetooth'u AÇIK konuma getirin.


25.4 Parola hatası ("Parolayı Girin" ekranı)

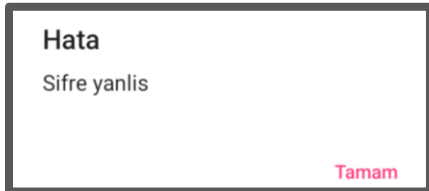

Bu hata "Parolayı Girin" ekranında yanlış parola girildiğinde oluşur. Kullanım kılavuzunda belirtilen şifreyi tekrar girmeyi deneyin. (sayfa 6)


25 Hata mesajları açılır ekranı

25.5 Parola hatası ("ALLUX™ Bağlantısı" ekranı)

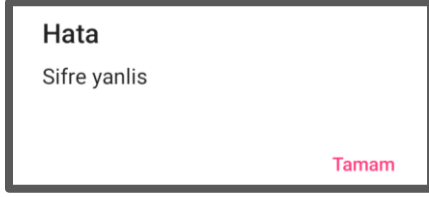


Bu hata, "ALLUX™ Bağlantısı" ekranında yanlış parola girildiğinde oluşur. Şarj bağlantı noktasında belirtilen şifreyi tekrar girmeyi deneyin. (sayfa 8)

25.6 Şifre hatası (3 kez)

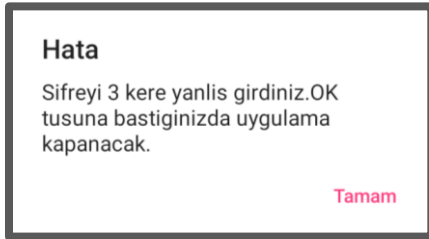


Bu hata, "Enter Password" ekranında veya "Connection to ALLUX™" ekranında parolayı 3 kez girmezseniz oluşur. Ve sonra bu Uygulama aynı anda kapanır. Bu Uygulamayı tekrar başlattığınızda, şifreyi tekrar girebilirsiniz.

25.7 Kablosuz bağlantı hatası

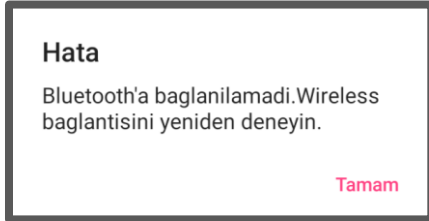

Bu hata, ALLUX™ ile akıllı telefondaki Bluetooth arasındaki kablosuz bağlantı başarısız olduğunda ortaya çıkar. Sayfa 10'a bakarak ALLUX™ kablosuz bağlantısını AÇIK konuma getirmeye çalışın.

25.8 Kablosuz iletişim hatası

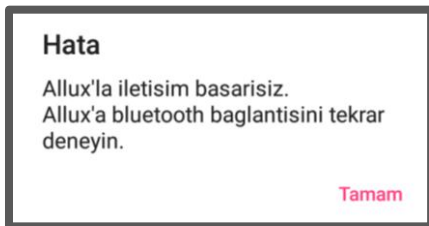

Bu hata, ALLUX™ ile akıllı telefondaki Uygulama arasındaki iletişim başarısız olduğunda ortaya çıkar. Sayfa 11'e bakarak kablosuz bağlantıyı yeniden etkinleştirin.

Ayarlama devam ediyorsa, yeniden bağlantıdan sonra ayar değerini tekrar kontrol edin.

25.9 Güvenli duruş hatası



Kullanıcı güvenli bir duruş almazsa ALLUX™ ayarları değiştiremez. Kullanıcının, sayfa 9'a bakarak güvenli bir duruş almasını sağlayın.

25 Hata mesajları açılır ekranı

25.10 Hidrolik control hatası

Hata
Uyari, ALLUX™'u kullanmaktan kacinmanizi ister.
Bakim ve onarim servisi icin distributorlerle iletisime geciniz.

Tamam

Hidrolik kontrol arızalı olabileceğinden, ALLUX™ kontrolü durdurulur.

Bakım hizmeti almak için distribütörle iletişime geçin.

25.11 Yakındaki cihaz bağlantı hatası

Hata
Ayarlara gidin-Uygulamalar-Allux Ayari
Izinler ve lokasyon bilgisini acin
"OK"a basildiginda uygulama kapanir

Tamam

Android 12 veya sonraki sürümler için,

"ALLUX™ Uzaktan Kumanda Uygulaması "nı kullanmak için "Yakındaki cihazlar" izni gereklidir. Bu nedenle, sayfa 6'daki işlemde "Yakındaki cihazlara" izin vermeyi ayarlamış olmanız gerekir. Bu hata, o sırada izin vermediyseniz veya daha sonra manuel olarak reddettiyseniz oluşur. "Yakındaki cihazlara" izin vermek için bu açılır penceredeki talimatları izleyin.

26 Sorun giderme

Problem	Kontrol et	Çözüm
Uzaktan Kontrol Uygulaması yüklenemez.	İşletim sistemi sürümünün uygun olup olmadığını kontrol edin.	İşletim sisteminizi uygulama mağazasında listelenen uyumlu bir sürüme güncelleyin.
	Akıllı telefonun vb. sabit diskinde gerekli boş alana sahip olup olmadığını kontrol edin.	Sabit diskteki boş alanı artırın.
ALLUX™ bağlanamaz.	“ALLUX™ Bağlantısı” ekranında (sayfa 8) ALLUX™'nin tanındığını kontrol edin.	“ALLUX™ Bağlantısı” ekranında ALLUX™'yi seçin.
	ALLUX™ iletişiminin birden fazla cihazla bağlantılı olmadığını kontrol edin.	ALLUX™ birden fazla cihaza bağlanamaz. Eylemleri aşağıdaki sırayla deneyin. 1. Uzaktan Kontrol Uygulaması ile bağlantıyı kesin. 2. Ayarlama Uygulamasını ve Uzaktan Kontrol Uygulamasını kapatın. 3. Kullanıcı Uzaktan Kontrol Uygulamasını kullanıyorsa kullanıcıdan uygulamanın bağlantısını kesmesini isteyin.
	Akıllı telefonda Bluetooth'un AÇIK mı kontrol edin.	Akıllı telefonda Bluetooth'u AÇIK konuma getirin.
	Yukarıdaki işlemlere rağmen bağlantı kurulamadı.	Yeniden bağlanmadan önce aşağıdaki üç adımı uygulayınız. (1) ALLUX™ güç kaynağını yeniden başlatınız. (Şarj cihazını veya güç KAPATMA başlığını bir kez takınız ve ardından çıkarınız). (2) Akıllı telefonun Bluetooth'unu bir kez KAPATINIZ ve ardından tekrar AÇINIZ. (3) Ayarlama Uygulamasını yeniden başlatınız.

26 Sorun giderme

Problem	Kontrol et	Çözüm
ALLUX™, "ALLUX™ Bağlantısı" ekranında gösterilmez.	ALLUX™ kablosuz bağlantısının AÇIK olduğundan emin olun.	Sayfa 10'ye bakarak kablosuz bağlantıyı AÇIN.
	ALLUX™ pilinin şarj ediliyor mu kontrol edin.	ALLUX™ için pili şarj edin.
	Birden fazla Uygulamanın aynı anda çalışmadığını kontrol edin.	Gereksiz Uygulamaları kapatın.
	Akıllı telefonda Bluetooth'un AÇIK mı kontrol edin.	Bluetooth işlevini AÇIK konuma getirin.
ALLUX™ ve Uygulama arasındaki iletişim kolayca kesilir.	ALLUX™ veya akıllı telefon için pil kapasitesinin düşük pil durumu olup olmadığını kontrol edin.	ALLUX™ veya akıllı telefon için pili şarj edin.
	ALLUX™, demiryolu, otoyol, TV kulesi, havaalanı, sergi ve hastane gibi belirli kablosuz koşullar altında mı kullanılıyor, kontrol edin.	Cihazı, trenlerin veya araçların sık sık gelip geçtiği ortamlarda veya birden çok kablosuz bağlantının olduğu ortamlarda kullanmaktan kaçının.
	ALLUX™ kullanıcısının çevresinde radyo dalgasına karşı büyük kalkanlar olup olmadığını kontrol edin.	Radyo dalgalarını engelleyen kalkanları kaldırın.



Nabtesco Corporation

Üretici

Nabtesco Corporation
Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department
35, Uozakihama-machi Higashinada-ku
Kobe, Japan 658-0024
TEL: +81-78-413-2724
FAX: +81-78-413-2725
<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

AB ülkeleri için yetkili temsilci



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

İletişim

Eksik veya düzensiz bir sayfa görürseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Nabtesco