

2020年9月吉日

お客様各位

ナブテスコ株式会社
福祉事業推進部

抑速ブレーキ付歩行車「コンパルシリーズ」仕様変更のお知らせ

拝啓 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在ご採用いただいております 抑速ブレーキ付歩行車「コンパルシリーズ」につきまして、より多様な使用を想定した堅牢性の向上を目的として、下記の通り一部仕様を変更させていただくことに致しました。

今後もお客様からのご要望にお応えし、商品の改良・改善を行ってまいりますので、引き続き「コンパルシリーズ」をご愛顧くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

- ・ 抑速ブレーキ付歩行車 コンパル
- ・ 抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車 コンパルリハモ
- ・ 上記商品のコンパルユニット補用品

2. 変更内容（詳細は別紙参照）

主な変更点は下記の通りですが、現行仕様品との互換性もございますので、既にお持ちの各歩行車フレームへの取り付けも可能です。また、TAIS コードの変更はございません。

- ・ 車軸径（Φ6mm → Φ8mm）
- ・ 車軸径変更に伴う構成部品および締付トルク（10N・m → 15N・m）
- ・ ユニット内部のシール表記（日本語のみ → 日本語／英語併記）
- ・ 補用品梱包箱の文字色（黒色 → 青色）

3. 変更時期


- ・ 2020年10月出荷分を目途に順次変更予定

4. 注意事項

- ・ 他社様の抑速ブレーキユニット搭載歩行車は在庫消化次第順次変更の予定ですが、詳しくは各メーカー様へお問合せください。
- ・ 抑速ブレーキユニットは、取り付ける歩行車に合わせて部品構成や寸法等を設定しております。そのため、弊社のコンパルやコンパルリハモ用ユニットを他社様製歩行車へ取付ける、または他社様歩行車用ユニットを弊社製品へ取付けることはできませんのでご注意ください。
また、現行仕様品との互換性の詳細に関しましては、各メーカー様へお問合せいただくとともに、ユニット取付の際は各メーカー様が指定する取付方法に従ってご対応くださいますようお願いいたします。

以上

(添付資料) 変更内容の詳細

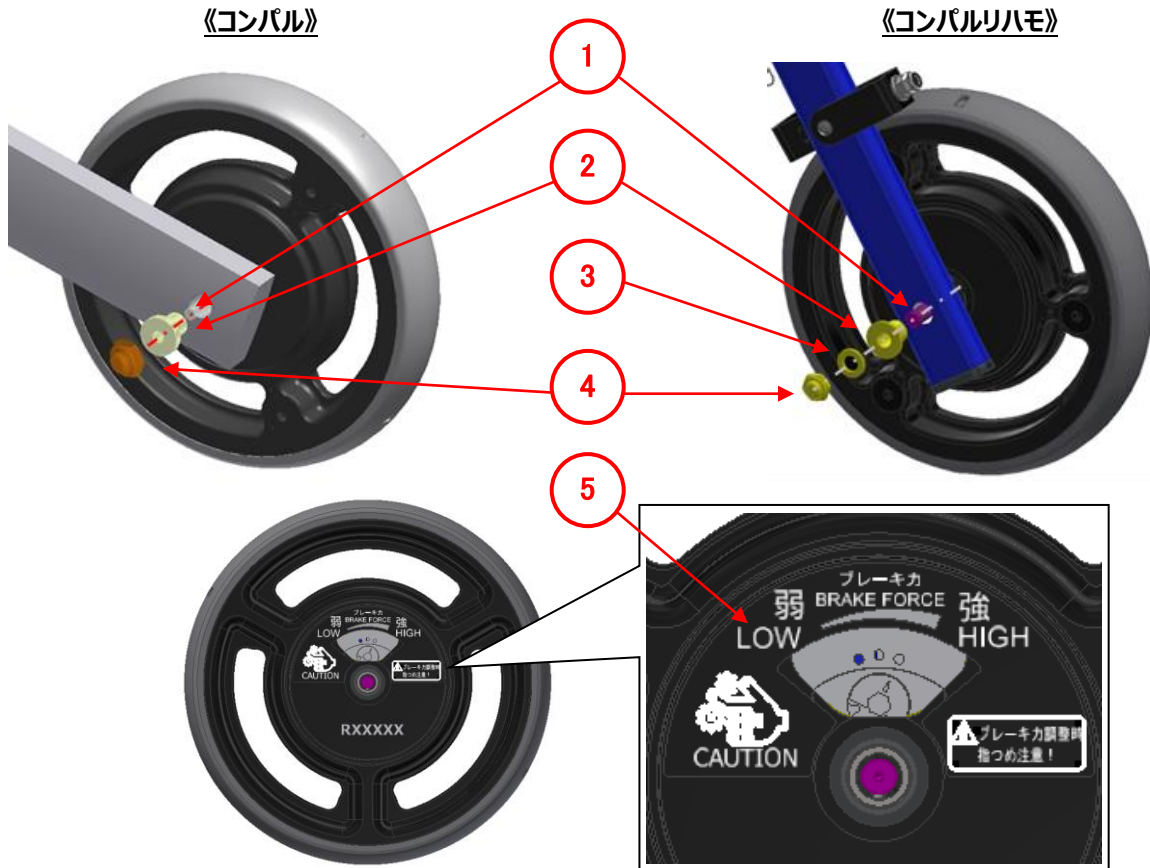

※ コンパルユニット補用品の梱包状態



No.	項目	変更点
1	車軸	車軸径をΦ6mm からΦ8mm へ変更 → 締付トルクを 10N・m から 15N・m へアップ
2	プッシュ	車軸径に合わせて穴径を変更
3	ワッシャ	コンパルリハモのみ新規追加 → コンパルユニット補用品にはワッシャを同梱していますが、コンパルリハモのみ使用 (※)
4	本体取付ナット	M8 袋 U ナット → 内側の飛出しを抑えるため、低頭かつピッチの狭い細目ねじタイプ使用
5	ユニット内部のシール	日本語のみの表記から、日本語／英語併記へ変更
6	梱包箱の文字色	外装文字色を黒色から青色へ変更 → 現行品と区別しやすくするため

《型式および品番対応表》

現行仕様品と新仕様品の型式および品番の対応表は以下の通りです。お手数ですが、貴社システム等の登録内容のご変更をお願い申し上げます。

品名	フレームカラー他	現行仕様品	
		型式	品番
コンパル	シャンパンゴールド	NCR-8A-MA-GD	8351-3100025-01
	ライトブルー	NCR-8A-MA-LB	8351-3100025-02
	ピンクゴールド	NCR-8A-MA-PK	8351-3100025-04
コンパルリハモ	リッチクリーム	NCR-8A-TA-RC	8351-3100100-01
	マットブラック	NCR-8A-TA-MB	8351-3100100-02
	ライトパープル	NCR-8A-TA-LP	8351-3100100-03
コンパルユニット	補用品	NCB-8A-S CONPAL RLセット	8351-4100018-01



新仕様品	
型式	品番
NCR-8C-MA-GD	8351-2100340-01
NCR-8C-MA-LB	8351-2100340-02
NCR-8C-MA-PK	8351-2100340-04
NCR-8C-TA-RC	8351-2100341-01
NCR-8C-TA-MB	8351-2100341-02
NCR-8C-TA-LP	8351-2100341-03
NCB-8C-S-STD	8351-4100303-01